


FOREO



ISSATM mikro

轻触米可 绽放每一次欢笑

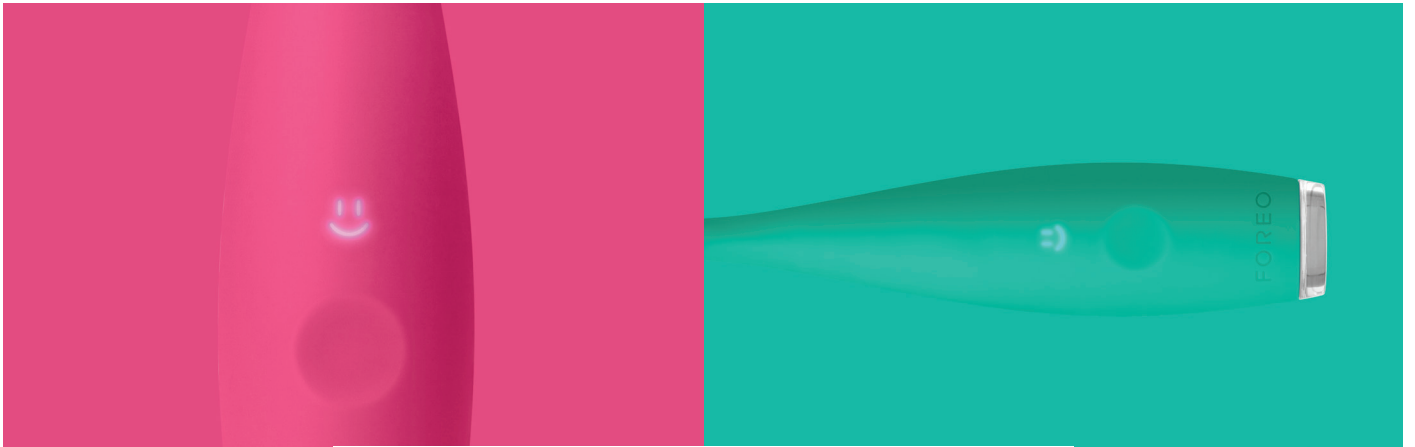



完整版使用说明书

开始使用

恭喜您购买到ISSA™ 米可婴幼儿训练式电动牙刷，成功迈出确保婴幼儿口腔健康的第一步。前沿科技为您和宝宝带来诸多好处，请您为婴幼儿开始使用之前，仔细阅读本说明书。

免责声明

长时间不正当使用剧烈咀嚼可对牙刷硅胶造成损伤。建议婴儿和幼儿在家长或成年人监督下使用。如果您发现该硅胶损坏，请立即停止使用并做丢弃处理。如果您怀疑您的孩子已经吞下了ISSA™ 米可的任何部位，请立即联系医务人员。

使用前请阅读所有指南并仅按照本说明书中的指定用途使用本产品。

⚠ **警告：**请勿对产品进行任何改装。

ISSA™ 米可简介

首个专为0-5岁婴幼儿打造的电动硅胶牙刷，ISSA™ 米可使用和ISSA™ 逸萨系列相同的创新技术。有效且温和，ISSA™ 米可不仅能减缓乳齿萌芽过程中产生的刺痒胀痛感。并温和瓦解牙菌斑，清洁口腔去除牙垢。

ISSA™ 米可使用方式和一般手动牙刷一样，为达到最佳效果建议每日使用两次，每次使用两分钟。

口腔护理效益：

长出第一颗牙之前

- 有效减少口腔内细菌数量，清除食物残留
- 减缓乳齿萌芽期的胀痛感
- 养成良好的口腔护理习惯，让幼儿在长出第一颗牙之前熟悉持续的刷牙过程

长出第一颗牙之后

- 排布科学的柔软刷毛包裹牙齿，有效清洁整个口腔。
- 温和按摩牙龈，舒缓恒牙替换时的牙龈不适感。

SONIC 声波脉动科技

每分钟高达6,000 次精细脉动：

- 针对婴幼儿的精细微波脉动温和瓦解牙菌斑，祛除牙垢。
- 温和按摩牙龈，令牙龈更强健
- 柔和按摩婴幼儿的牙齿与牙龈，减缓乳齿萌芽及恒牙替换时的牙龈刺痒感。

2种不一样的口腔护理模式:

- 刷牙模式 —— 温和清洁牙齿
- 舒缓模式 —— 按摩和舒缓牙龈

硅胶材质

- 级温和清洁婴幼儿敏感牙龈和乳牙
- 防止刷牙震动给乳牙和牙龈带来的压力以及对珐琅质的伤害
- 不具渗透性,可快速干燥,有效抑制细菌滋生
- 较传统尼龙刷毛卫生至少10000*倍
- 硅胶材质持久性及弹性高 – 因此无需更换刷头

* 临床检测报告存档

贴心设计

- 符合人体工学 - 防滑手柄,使用简单舒适,带有硅胶刷毛的圆形刷头可覆盖每颗牙齿
- 1小时USB充电可使用480次
- 安静震动模式可防止婴幼儿焦虑

安全性佳

- 不含双酚A和酞酸盐
- 牙刷一体成型,无替换零部件。
- 100%全身防水

使用ISSA™ 米可

可能性使用: 提倡注重婴幼儿牙齿和牙龈的口腔清洁护理

ISSA™ 米可特色

- 100%全身防水设计,让婴幼儿在泡澡中也可以安全使用
- 内置计时器: 每30秒停止震动提醒使用者清洁口腔的下一个四分之一区域,结束2分钟清洁后,ISSA™米可会连续震动3次,表示刷牙程序结束
- ISSA™米可在使用3分钟后会自动关闭,防止过度使用
- 笑容助手: 2分钟刷牙结束后“喜悦”(笑脸)将出现。如果孩子12小时内没有刷牙,“悲伤”(哭脸)就会亮起;如果2分钟刷牙过程未完成,则“喜悦”(笑脸)和“悲伤”(哭脸)都会亮起

刷牙过程

我们建议完整使用ISSA™ 米可2分钟已达到最佳效果:



1. 按一次中央键开启刷牙模式，再按一次开启按摩模式。



2. 教导婴幼儿采用与手动牙刷一样的刷牙方法，转大圈清洁牙齿并按摩牙龈，时间为2分钟。



3. 第三次按下中央键关闭产品。
4. 用温水冲洗牙刷，放置晾干即可。

*根据儿童年龄选择一款婴幼儿配方的舒缓啫喱或牙膏，使用量听取牙医建议。

注意：如婴幼儿同使用FOREO产品感到不适，请立即停止使用并请咨询医生。如发现刷头有血迹请用清水或FOREO硅胶清洁液清洗。

清洗ISSA™ 米可

每次使用完产品后，用温水清洗可用手指头清洁刷头。让产品自然风干即可。可将产品放置于紫外线消毒器里，但有可能影响产品硅胶退色。

可将ISSA™ 米可放置洗碗机里使用温度不得高于80℃，时间在1小时清洗和30分钟烘干，或者使用婴儿奶瓶消毒器最高温度设置在100℃不超过20分钟。

注意：切勿使用清洁含有酒精，汽油或丙酮的产品。避免在产品上使用含有漂白成分的牙膏。

充电

ISSA™ 米可婴幼儿训练式电动牙刷可以通过其内置USB插口充电。充电时间为1小时，充满一次电后，可以使用长达480次。

充电条件为5伏，400毫安时，1.55瓦额定输出功率时，充电时间为1小时。充电时，指示灯不断闪烁，电池充满后，指示灯发出稳定的光。电充满时可移除USB充电线。

电池电量低时，指示灯开始不断闪烁。电池没电时，产品马达会完全停止。在此可正常充电产品。

注意：ISSA™ 米可婴幼儿训练式电动牙刷电池寿命为5年。

警告：充电前，请确保充电插槽和充电器干燥无水并且无残留清洁剂。请勿在充电时使用FOREO，充电时间请勿超过24小时。请仅使用配套充电器。

重要信息

保证安全:

- 儿童使用、给儿童使用或距离儿童较近时请密切监督使用。儿童或者身体或智力残障的人士需要在监护人的监督和指导下使用。儿童请勿将产品作为玩具玩耍。
- 如果您有任何医学顾虑, 请在使用前咨询医师。
- 如果您的孩子正在接受任何口腔治疗, 请在使用前咨询您的牙科专业人士。
- 如果您的孩子在使用时有任何不适, 请立即停止使用并咨询医师。
- 请避免将本产品在阳光下直晒或暴露在高温或沸水环境中。
- 如果产品出现任何损坏(牙刷头, 手柄, 充电器) 请立即停止使用。
- 为了避免触电的危险, 本设备只能连接到带有保护接地的供电电源。
- 如产品或充电器损坏, 请勿使用。只限使用FOREO附带充电器。

故障排除

产品在无法正常使用的情况下可采取的应变措施。

按下中间键后ISSA™ 米可没有开启?

- 电池无电。请给ISSA™ 米可充电。

ISSA™ 米可无法关机或者界面按键没有反应?

- 微处理器出现短暂性功能故障。请连接充电线使功能恢复正常。

连接上充电器后ISSA™ 米可LED灯不闪烁?

- 电池已经充满, 可供使用至多达480次。
- 电池完全无电, 需要几分钟才可识别充电器。
- 充电器没有连接好。检查插座和充电插口。

常见问题解答

ISSA™ 米可掉入水里, 充电口进水了吗?

- 风干后可继续正常使用。ISSA™ 米可全身防水, 充电口是完全密封的。

SONIC声波脉动技术(震动) 对婴幼儿童是否安全?

- FOREO声波脉动技术对婴幼儿童是绝对安全且对牙齿和牙龈温和。

婴儿可以啃咬ISSA™ 米可吗?

- ISSA™米可是专为刷牙和按摩牙龈所设计, 并非用作为咀嚼玩具。ISSA™米可应该在家长或成年人监督下使用。剧烈咀嚼可能导致硅胶刷头和刷毛的损坏。

幼儿可以独自使用ISSA™ 米可吗?

- 婴幼儿建议在家长/成人陪同监督下使用。ISSA™米可符合人体工学设计, 安全轻便适合儿童独自使用。

ISSA™ 米可是如何运作？

- 透过声波脉动震动穿过柔软和弹性硅胶刷毛，ISSA™ 米可有效地清洁牙齿，同时提供舒适温和的牙龈按摩促使牙龈健康。

多久需要更换ISSA™ 米可？

- 产品破裂或破损时替换产品。

ISSA™ 米可的使用寿命是多久？

- ISSA™ 米可有两年质保期限，如产品在两年内损坏，FOREO会为您免费更换新的产品。剧烈使用本产品会产生明显使用痕迹。如婴幼儿在无监督使用情况下咀嚼产品硅胶，请立即停止使用并做废弃物处理。

使用期间如果牙刷硅胶损坏时该如何处理？

- ISSA™ 米可使用安全耐用的医疗级硅胶材质。并且经过检测认证误食此硅胶对身体不会造成伤害。假设您发现ISSA™ 米可损坏或怀疑婴幼儿吞食硅胶，请立即联系医务人员。

如果儿童患有口腔溃疡、蛀牙、牙龈疾病或其他口腔问题，是否可以使用逸萨产品？

- 我们建议患有严重口腔问题的客户在使用逸萨产品前咨询专业牙医。

如果您在本版块未找到合适的答案，或使用ISSA™ 时有任何问题，或对操作有任何疑问，请访问www.foreo.com客户服务部分并填写帮助表格。

质保条款和条件

注册质保

激活2年质保和10年品质保证，请首先登陆www.foreo.com网站，然后在客户服务下的保修和退换货部分注册FOREO真品保证卡上的质保号码。

两年质保

FOREO产品的质保时间为自购买之日起两（2）年，任何因产品制造或材料缺陷引起的质量问题均属于质保范围。质保范围包括影响产品功能的零部件质量问题，但不包括由于长期使用造成的外观磨损或由于错误操作、疏忽或意外造成的磨损或损坏。任何尝试打开或分解产品（或其附属配件）造成的损坏也不在质保范围。

如果您有任何此类质量问题并在质保期内通知FOREO，FOREO将免费为您更换产品。质保索赔需要提供产品尚在质保期内的合理凭证。为了让您的产品质保有效，请在质保期内妥善保存原始购买发票。

2年质保不包括任何其他口头或书面的明示或暗示担保。产品的制作、销售或使用不产生任何暗示的担保。

若需申请质保，请先登录www.foreo.com网站上的账户，然后选择质量索赔。随后您会收到一份退货授权码，请将其与FOREO产品一起寄送到距您最近的FOREO办公室。运费需要您自行支付。这样做是对消费者法律权利的补充，并不影响消费者任何权益。

十年品质保证

作为FOREO两年免费质保的延续，顾客在十（10）年品质保证期间发现产品生产缺陷后，可在www.foreo.com上以标价50%的价格购买一件新产品。

废弃处理方法

废旧电子设备的废弃处理方法（在欧盟或其他具有垃圾分类处理系统的欧洲国家适用）。垃圾桶上画叉的图案表示产品不能按照家庭垃圾处理，而应该送入合适的电气和电子设备回收收集站处理。




欧盟医疗指令93/42/EEC。符合ANSI/AAMI标准、ES60601-1和CAN/CSA标准、C22.2第60601-1标准。符合有害物质限制。震动保护类型BF。使用前查看使用说明。电器和电子设备不得与生活垃圾一起处理。IPX评级——防水，可完全浸入1米水深中。 经过ISO10993-和ISO7405-认证。

拆除电池

注意：该过程是不可逆的。打开设备将失去保修权。该动作只能在准备好丢弃产品时进行。

因为本产品包含一个锂离子电池，所以丢弃前必须拆除电池，且不能按照生活垃圾处理。拆除电池时，首先拉开刷头，剥离硅胶外壳，打开塑料壳并取出电池，按照当地的环保处置规定丢弃电池。在此过程中为保障您的安全，请佩戴手套。下面提供了详细的图片说明：

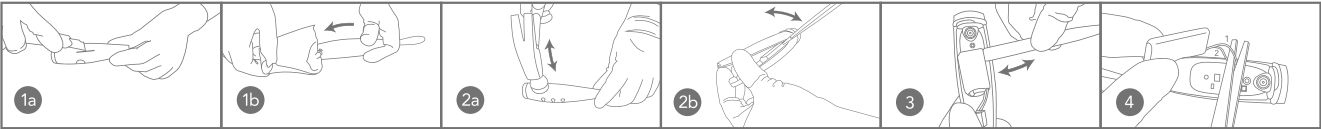

规格

材质：	硅胶+ABS塑料
尺寸：	148毫米x 32毫米 x 25毫米
重量：	53.4克
电池：	420毫安时
使用次数：	480次
待机时间：	180天
频率：	166赫兹
噪音水平：	最高50分贝
界面：	一键式

工作模式：持续操作
目标用户：0-5岁
建议使用地点：家用或酒店

使用环境条件：
温度：5°C-40°C
湿度：40%-80%
大气压：800-1060 hPa

存储和运输环境条件：
温度：-10°C-40°C
湿度：30%-80%
大气压：500-1060 hPa

免责声明：
产品使用者自担风险。FOREO和零售商对因使用产品直接或间接造成的任何身体或非身体的伤害或损害不承担任何责任和义务。此外，FOREO保留修改本说明并随时更改内容的权利，且没有义务将这些修改或改变通知任何个人。

产品模型可能会因改进而有变化，恕不另行通知。

©2016 FOREO AB 版权所有。
欧洲进口商和经销商：FOREO AB
地址：瑞典斯德哥尔摩Birger Jarlsgatan大街22号 邮编：11434
美国进口商和经销商：FOREO INC.
地址：美国内华达州拉斯维加斯，#159拉斯维加斯大道南3565号 邮编：89109
FOREO瑞典设计研发
www.foreo.com