

FOREO



ISSA™ mini

EEN LEUKE & EFFECTIEVE
MANIER OM JE GLIMLACH
STRALENDER TE MAKEN





VOLLEDIGE HANDLEIDING

AAN DE SLAG

Gefeliciteerd met het zetten van de eerste stap richting een wittere en stralendere glimlach door dit ISSA™ mini mondverzorgingsapparaat aan te schaffen. Voordat je van alle voordelen van onze geavanceerde tandheelkundige technologie gaat genieten, neem een paar minuten de tijd om deze handleiding door te lopen.

Gelieve ALLE INSTRUCTIES TE LEZEN VOOR GEBRUIK. Gebruik dit product alleen voor het beoogde gebruik zoals staat beschreven in deze handleiding.

 **WAARSCHUWING:** AANPASSING VAN DIT APPARAAT IS NIET TOEGESTAAN.

ISSA™ mini OVERZICHT

Volledig gemaakt van siliconen en met een levendig, oogstrelend ontwerp, is de ISSA™ mini perfect voor het zachte tandglazuur en gevoelige tandvlees van kinderen, evenals voor volwassenen die de voorkeur geven aan kleinere borstelkoppen. O ISSA™ mini deve ser usado da mesma forma que uma escova manual. Os melhores resultados surgem ao usar por pelo menos 2 minutos, duas vezes por dia. Door middel van innovatieve Sonic Pulse Technologie zendt de ISSA™ mini 9.000 zeer intensieve pulsaties per minuut, waardoor micro-vegen gecreëerd worden die plaque afbreken en verwijderen, op een unieke milde wijze die het tandglazuur of tandvlees niet beschadigt.

De ISSA™ mini is bedoeld om op dezelfde manier gebruikt te worden als een hand tandenborstel met de beste resultaten bij tweemaaldaags gebruik gedurende ten minste 2 minuten.

SILICONEN MATERIAAL

- Ultra-hygiënisch siliconen: niet-poreus en sneldrogend om opbouw van bacteriën tegen te gaan.
- Houd minder gist en schimmel vast en tot 10.000x* minder bacteriën dan tandenborstels met nylon borstels.
- De wrijving van de siliconen borstels op het oppervlak van de tanden veegt plaque weg.
- Extra zacht: perfect voor gevoelige tanden en tandvlees van kinderen - krast niet op tandglazuur en beschadigt tandvlees niet.
- Voorkomt de toepassing van teveel druk op tanden en tandvlees, evenals het krassen van tandglazuur.
- Siliconen materiaal is zeer duurzaam en veerkrachtig; opzetborstels gaan tot één jaar mee.

** Gebaseerd op klinisch onderzoek.*

NIEUWE VORM

- 3D flexibele borstelkop bereikt elke mondholte.
- De speciaal ontworpen bredere en langere borstelkop reinigt de tanden en masseert het tandvlees in één beweging, en borstelt direct de binnenkant van de wangen voor optimale resultaten.
- Ergonomische handgreep: gebogen handgreep en zacht, glad materiaal is comfortabel om vast te houden en bevordert de juiste grip die nodig is om effectief tanden te poetsen.
- Geen oplaadstation en ingebouwde batterij levert tot 200 toepassingen per volle lading van 1 uur.

BESCHIKBARE ACCESSOIRES VOOR ISSA™ mini



ISSA™ mini HYBRID OPZETBORSTEL TWEEVOLDIG MATERIAAL: SILICONEN + PBT POLYMEER

Voor kinderen en volwassenen die meer plaque opbouw hebben en die gaan voor een krachtigere reinigingservaring, en tegelijkertijd een zachte reiniging van het tandvlees verlangen.

- Binnenste PBT polymeerborstels zorgen voor krachtiger poetsen van de tanden, terwijl buitenste siliconen borstels het tandvlees zacht masseren en reinigen
- Siliconen en PBT polymeer zijn natuurlijke, duurzame materialen - opzetborstels gaan tot 6 maanden mee



ISSA™ TONGREINIGER

Ontwikkeld om een complete mondverzorgingsroutine te voltooien, verwijdert de ISSA™ Tong Reiniger comfortabel en effectief voedselresten en bacteriën van de tong, voor een frissere adem, terwijl de totale hygiëne van de mond ondersteund wordt.

- Gebogen, passend bij de vorm van de tong, om de opbouw in het diepe V-gat te verzamelen.
- Schuurt niet en is flexibel ter voorkoming van schade aan de tong.
- Dient slechts 1 keer per jaar te worden vervangen.

**Past op ISSA™ mini tandenborstel maar is niet aanbevolen voor gebruikers onder de 12 jaar.*

GEBRUIK VAN JOUW ISSA™ mini

BEOOGD GEBRUIK: Voor thuisgebruik en om gehele mondhygiëne na te streven door alleen je tanden en tandvlees te reinigen.

KENMERKEN VAN JOUW ISSA™ mini

- 100% waterproof met een gesealde oplaadpoort voor gebruik onder de douche.
- Geïntegreerde timer: pulsaties zullen elke 30 seconden pauzeren om aan te geven dat je de tandenborstel naar een ander gedeelte van de mond mag bewegen. De tandenborstel zal de pulsaties na 2 minuten 3 keer achter een laten pauzeren om het einde van de poetsroutine aan te geven.
- De ISSA™ mini zal zichzelf na 3 minuten uitschakelen om overmatig gebruik te voorkomen.


Smile Helpers-functie: "Glee" (blij gezichtje) verschijnt na 2 minuten poetsen, "Glum" (fronsend gezichtje) verschijnt als de gebruiker in de afgelopen 12 uur niet gepoetst heeft en zowel "Glee" als "Glum" verschijnen als er nog niet 2 minuten gepoetst is.

AANBEVOLEN POETSRoutine

Wij adviseren de volgende ISSA™ mini techniek te gebruiken gedurende 2 minuten voor de meest effectieve reinigingsresultaten:



1. Gebruik je gewone tandpasta en zet de ISSA™ mini aan door op de centrale knop te drukken. Door op de centrale knop te drukken zal de LED lampje knipperen.

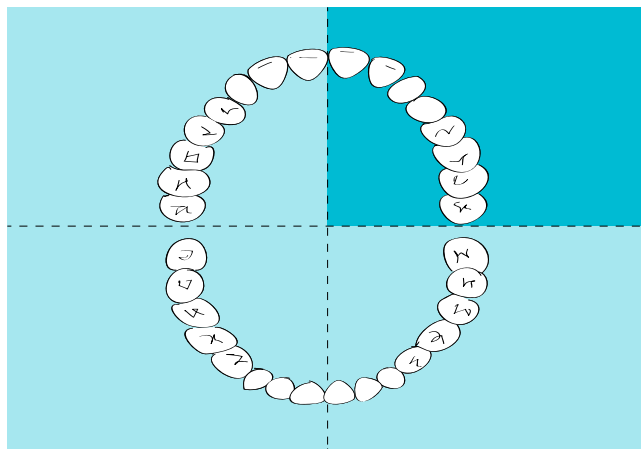

2. Elke 30 seconden zullen pulsaties pauzeren om aan te geven dat je de tandenborstel naar een ander gedeelte van de mond mag bewegen.



3. Maak ruime, ronde bewegingen over de buitenste en binnenste oppervlaktes van de tanden en het tandvlees. Poets horizontaal naar achter en voor op de bijt- en kauwoppervlaktes.



4. Na 2 minuten zullen de pulsaties 3 keer pauzeren en zal het LED lampje knipperen om het einde van de aanbevolen poetsroutine aan te geven (je mag uiteraard langer door poetsen indien gewenst).



5. Gebruik na het tandenpoetsen met de ISSA™ mini flosdraad, de ISSA™ Tongreiniger en mondwater voor een complete mondverzorgingsroutine.


(Niet aanbevolen voor gebruikers onder de 12 jaar)

WAARSCHUWING: Als je enig ongemak ondervindt bij het gebruik van jouw FOREO apparaat, stop onmiddellijk met gebruiken en raadpleeg een arts. Indien je bloed ontdekt op het borsteloppervlak, reinig de tandenborstel met water of FOREO's Silicone Cleaning Spray.

REINIGEN VAN JOUW ISSA™ mini

Maak de tandenborstel na elk gebruik schoon door de borstel met warm water af te spoelen en met je vingers door de borstel te gaan. Voor een optimaal resultaat adviseren wij het apparaat schoon te maken met FOREO's Silicone Cleaning Spray en nadien af te spoelen met warm water. Laat het apparaat in de open lucht drogen.

LET OP: Gebruik geen producten die alcohol, benzine of aceton bevatten. Vermijd het gebruik van tandpasta met bleek.

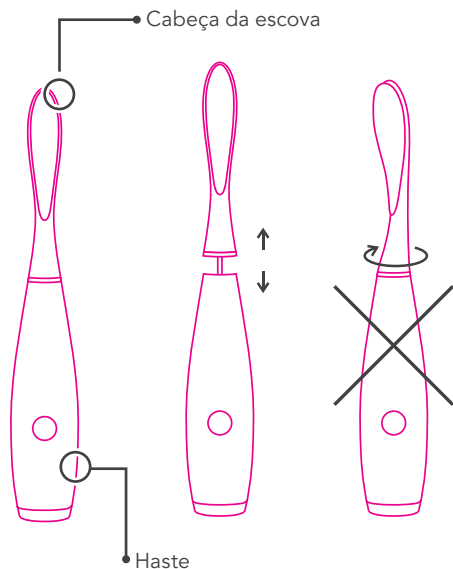

VERVANGEN VAN ISSA™ mini OPZETBORSTELS OF ANDERE ISSA™ mini ACCESSOIRES

Gebruik enkel FOREO's ISSA™ mini opzetborstels of andere ISSA™ accessoires op jouw apparaat.

BIJ HET VERWIJDEREN VAN DE OPZETBORSTEL, DRAAI NIET AAN DE OPZETBORSTEL EN HET HANDVAT.

Trek de gebruikte opzetborstel omhoog en plaats de vervangende opzetborstel tot er geen ruimte meer te zien is tussen opzetborstel en handvat.

OPLADEN

Jouw FOREO apparaat is oplaadbaar met de meegeleverde USB oplader. Een uur opladen levert een volledige lading, die tot 3 maanden meegaat.

Steek de oplader in de USB oplaadpoort. De oplaadtijd is 1 uur bij 5 V en 400 mAh met een nominaal vermogen van 1,55 W. De indicator zal tijdens het opladen herhaaldelijk knipperen. Indien volledig opgeladen, zal de indicator blijven branden. Verwijder de USB oplader als het apparaat volledig opgeladen is.

Wanneer de batterij bijna leeg is, zal de indicator herhaaldelijk beginnen te knipperen. Als de oplaadbare batterij leeg is, zal de motor stoppen. Laad dan je ISSA™ mini naar behoren op.

LET OP: De levensduur van de ISSA™ mini batterij is 5 jaar.

WAARSCHUWING: Alvorens het opladen, zorg ervoor dat de oplaadpoort en oplader vrij zijn van water en tandpasta resten. Gebruik jouw FOREO apparaat NIET tijdens het opladen, en laad het NIET langer dan 24 uur op. Gebruik alleen de door FOREO meegeleverde USB oplader.

BELANGRIJK

VOOR OPTIMALE VEILIGHEID:

- Dit apparaat is niet bedoeld voor kinderen onder de 5 jaar. Nauw toezicht is vereist wanneer het apparaat wordt gebruikt door, op of in de buurt van kinderen. Goed toezicht en instructies voor veiligheid zouden gegeven moeten worden aan kinderen, alsook aan personen met verminderde fysieke of mentale capaciteiten.
- Raadpleeg een arts voor het gebruik van de ISSA™ mini indien je medische klachten hebt.
- Als je onder behandeling bent voor mond- of gebitsklachten, raadpleeg dan eerst een tandheelkundige professional voor gebruik.
- Als je enig ongemak ondervindt bij het gebruik van jouw FOREO apparaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een arts.
- Voorkom het contact van jouw apparaat met direct zonlicht en vermijd blootstelling aan extreme hitte of kokend water.
- Kinderen mogen nooit met het apparaat spelen.
- Stop met het gebruik indien het product op enige wijze beschadigd blijkt te zijn (opzetborstel, handvat, oplader). Dit product bevat geen onderdelen.
- Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, mag het apparaat alleen worden aangesloten op een elektriciteitsnet met aarde.
- Gebruik het apparaat of oplader nooit als ze zijn beschadigd, en gebruik alleen de door FOREO meegeleverde oplader met het apparaat.
- Afneembare onderdelen (opzetborstels) zouden tot het volgende kunnen leiden: allergiesymptomen of schade aan bestaande verwondingen.
- Peças removíveis (cabeça da escova) podem levar a sintomas alérgicos ou danos a lesões existentes.

FOUTOPSPORING

Voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden in het geval van afwijkingen in de werking van de ISSA™ mini.
De ISSA™ mini wordt niet geactiveerd als de centrale knop is ingedrukt?

- Batterij is leeg. Laad je ISSA™ mini opnieuw op.

De ISSA™ mini kan niet uitgeschakeld worden en/of de interface knoppen reageren niet?

- Microprocessor heeft een tijdelijk storing. Sluit aan op de oplaadkabel om weer normaal te laten functioneren.

ISSA™ mini's lampje knippert niet als de oplader is aangesloten?

- Batterij is volledig opgeladen, klaar voor tot wel 200 volledige reinigingsroutines.
- Batterij is leeg en zal enkele minuten nodig hebben om de oplaadkabel te herkennen.
- Oplaadkabel is niet juist aangesloten. Controleer stopcontact en oplaadpoort.

De ISSA™ mini is in het water gevallen en de oplaadpoort is nat?

- Droog af en ga door met gebruiken. De ISSA™ mini is volledig waterproof en de oplaadpoort is volledig gesealed.

Als je het antwoord op jouw specifieke vraag niet kunt vinden in de sectie foutopsporing, of als je een andere vraag hebt over de werking van het apparaat, dan kun je terecht bij de Klantenservice van www.foreo.com en door het Help Desk formulier in te vullen.

GARANTIEVOORWAARDEN

GARANTIE REGISTRATIE

Om de beperkte garantie van 2 jaar en kwaliteitsgarantie van 10 jaar te activeren, registreer het nummer op de FOREO authenticiteitskaart op www.foreo.com Garantie en Retouren sectie op de Klantenservice pagina.

2 JAAR BEPERKTE GARANTIE

FOREO garandeert dat dit apparaat voor een periode van TWEE (2) JAAR na de oorspronkelijke datum van aan koop tegen defecten door fabricagefouten of materialen voortkomend uit Normaal Gebruik van het apparaat. De garantie geldt voor werkende delen die het functioneren van het apparaat beïnvloeden. Het dekt GEEN cosmetisch bederf door normale slijtage, of schade veroorzaakt door een ongeluk, misbruik of verwaarlozing. Elke poging om het apparaat (of de accessoires) te openen of uit elkaar te halen, zal de garantie doen vervallen.

Als je een defect ontdekt en dit aan FOREO meldt tijdens de garantieperiode, dan zal FOREO, naar eigen goeddunken, het apparaat kosteloos vervangen. Claims onder de garantie dienen ondersteund te worden door aantoonbaar bewijs dat de datum van de vordering binnen de garantieperiode valt. Om de garantie te valideren, houd dan de originele aankoopbon met deze garantievoorwaarden bij elkaar gedurende de garantieperiode.

Deze 2 jaar beperkte garantie is uitgezonderd alle andere garanties, mondeling of schriftelijk, uitdrukkelijk of impliciet. Er zijn geen impliciete garanties gemaakt door de vervaardiging, verkoop of gebruik van het product.

Om jouw garantie te vorderen, dien je met jouw account in te loggen op www.foreo.com en vervolgens de optie om een garantie te maken te selecteren. Je krijgt een Return Merchandise Authorization (RMA) nummer en volledige instructies van klantenservice over hoe je jouw FOREO product kunt retourneren naar het dichtstbijzijnde FOREO kantoor. Verzendkosten kunnen niet worden vergoed. Deze toezegging is een aanvulling op de wettelijke rechten als consument en heeft op geen enkele manier invloed op deze rechten.


10 JAAR KWALITEITSGARANTIE

Als een voortzetting van de voorwaarden van FOREO's TWEE (2) jaar beperkte garantie, brengt FOREO's TIEN (10) jaar kwaliteitsgarantie eigenaren in aanmerking voor de aanschaf van een nieuw apparaat op www.foreo.com voor 50% van de vermelde prijs, indien een fabricagefout wordt ontdekt in deze periode. Voor de volledige voorwaarden, kun je terecht op de klantenservice pagina op www.foreo.com

** 2 jaar beperkte garantie en 10 jaar kwaliteitsgarantie zijn niet van toepassing op vervangende opzetborstels of ISSA™ accessoires.*

VERWIJDER INFORMATIE


Verwijdering van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese landen met gescheiden inzameling van afval systemen). Het doorgestreepte vuilnisbak symbool geeft aan dat dit apparaat niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval, maar bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht.

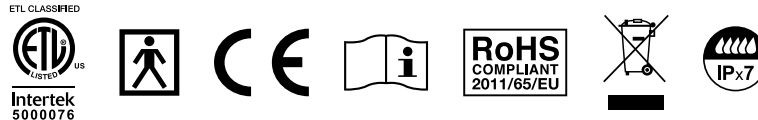

Europese Medische Richtlijn 93/42/EEC. Geconformeerd naar ANSI/AAMI Std. ES60601-1 en CAN/CSA Std. C22.2 No. 60601-1. Naleving van gevaarlijke stof beperkingen. Bescherming tegen schokken type BF. Raadpleeg instructies voor gebruik. Elektrische en elektronische apparaten mogen niet worden afgevoerd met huishoudelijk afval. IPX rated - Waterproof tot 1 meter diepte. ISO 10993- en ISO 7405 gecertificeerd.

BATTERIJ VERWIJDEREN

LET OP: Dit proces is niet terug te draaien. Het openen van het apparaat zal de garantie doen vervallen. Deze handeling mag alleen worden uitgevoerd als het apparaat klaar is om te worden weggegooid. Omdat dit apparaat een lithium-ion batterij bevat, dient de batterij eerst verwijderd te worden voordat het wordt weggegooid, daarbij dient het niet met huishoudelijk afval te worden weggegooid. De batterij dient als volgt te worden verwijderd; trek de opzetborstel eraf, haal de siliconen omslag eraf, open het plastic omhulsel en verwijder de batterij die afgevoerd dient te worden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften. Draag voor je eigen veiligheid handschoenen gedurende dit proces. Gedetailleerde visuele instructies worden hieronder weergegeven:

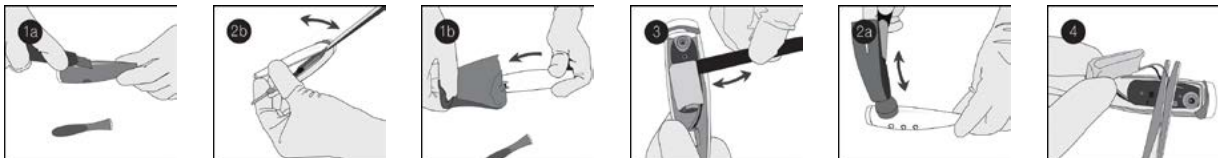

SPECIFICATIES

MATERIALEN: Siliconen

MAAT: 170 x 30,2 mm

GEWICHT: 55,8 gram

BATTERIJ: 420mAh

GEBRUIK: tot 200 x

STANDBY: 180 dagen

FREQUENTIE: 140 Hz

MAX GELUIDSNIVEAU: 50 dB

INTERFACE: 1-knop

DISCLAIMER: Gebruik van dit apparaat is op eigen risico. Noch FOREO noch haar retailers zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig letsel of schade, lichamelijk of anderszins, als direct of indirect gevolg van het gebruik van dit apparaat.

FOREO behoudt zich het recht voor deze publicatie te herzien en wijzigingen van tijd tot tijd op de inhoud ervan te maken zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisie of wijzigingen op de hoogte te brengen.

Model kan worden gewijzigd voor verbetering zonder voorafgaande kennisgeving.

Werkmodus: continue werking

Beoogde gebruikers: kinderen vanaf 5 jaar en volwassenen

Aanbevolen plaatsen van gebruik: huishouden en hotels

Milieuomstandigheden voor gebruik:

Temperatuur: 5° tot 40° Celsius

Luchtvochtigheid: 40% tot 80%

Luchtdruk: 800 tot 1.060 hPa

Umidade: 40% a 80%

Pressão atmosférica: 800 a 1.060 hPa

Milieuomstandigheden voor opslag en verschepping:

Temperatuur: -10° tot 50° Celsius

Luchtvochtigheid: 30% tot 80%

Luchtdruk: 500 tot 1.060 hPa

© 2015 FOREO AB. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

IMPORTEUR EN DISTRIBUTEUR IN EU: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22,

114 34 STOCKHOLM, ZWEDEN

IMPORTEUR EN DISTRIBUTEUR IN US: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159,

LAS VEGAS, NV 89109, USA

GEFABRICEEERD DOOR FOREO AB

ONTWORPEN EN ONTWIKKELD DOOR FOREO ZWEDEN.

www.foreo.com