

FOREO

ISSA™ play

¡DESCUBRE CÓMO DEBE SER UNA
RUTINA DE LIMPIEZA BUCAL!



MANUAL DE USUARIO



INICIO

Enhorabuena por dar el primer paso para tener unos dientes más blancos y una sonrisa más brillantes, gracias al dispositivo ISSA™ play. Antes de empezar a disfrutar de todos los beneficios de esta sofisticada tecnología de cuidado dental desde la comodidad de tu hogar, por favor tómate unos minutos para leer este manual.

No olvides LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR este producto y úsalo únicamente para su fin previsto y tal y como se explica en este manual.

⚠ ADVERTENCIA: NO SE PERMITEN MODIFICACIONES EN EL DISPOSITIVO.

PRESENTACIÓN DE ISSA™ play

Gracias a su diseño flexible y ergonómico, y a su sencillo sistema de pilas reemplazables AAA, ISSA™ play proporciona el cuidado bucal más completo. Su cabezal de larga duración combina la silicona ultra-higiénica con filamentos de polímero PBT, para un cepillado duro con la placa y suave con las encías. Descubre el poder de la Tecnología Sónica Pulsada con la misma sencillez de uso que un cepillo de dientes manual.



USO DEL DISPOSITIVO ISSA™ play

USO PREVISTO: Destinado para ser usado en casa y fomentar la higiene bucal con la limpieza de dientes y encías.

RECOMENDACIONES PARA LA RUTINA DEL CEPILLADO

Recomendamos la siguiente rutina de 2 minutos, dos veces al día, con tu ISSA™ play para un óptimo resultado:



APLICA EL DENTÍFRICO

Aplica tu dentífrico habitual y enciende tu ISSA™ play presionando el botón central.



CEPÍLLATE

Cepíllate los dientes durante 2 minutos realizando movimientos circulares; 30 segundos para cada cuadrante.



ACLARA

Apaga el dispositivo presionando una vez más el botón central. Aclara tu boca y tu ISSA™ play con agua. ¡Lávate los dientes 2 veces al día para una sonrisa fresca y brillante!

PRECAUCIÓN: Si experimentas molestias con el uso del dispositivo FOREO, deja de usar el dispositivo inmediatamente y consulta a un profesional. Si encuentras sangre en la superficie del cepillo, por favor, limpia el dispositivo con agua o con el Spray Limpiador de Silicona de FOREO.

LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO ISSA™ play

Limpia el dispositivo después de cada uso con agua templada pasando tus dedos sobre los filamentos. Recomendamos usar el Spray Limpiador de Silicona de FOREO para mantener condiciones de higiene óptimas. Deja que se seque al aire.

NOTA: No limpiar el dispositivo con ningún producto que contenga alcohol, petróleo o acetona. Evitar el uso de dentífricos con blanqueador.

CAMBIO DE PILA


Para eliminar la batería, presiona el botón de la base de silicona de ISSA™ play y extrae la base. Recambia 2 pilas AAA y vuelve a colocar la base en su lugar.



1. Presiona suavemente el botón de silicona de la base de ISSA™ play y extrae su base.



2. Retira las pilas usadas.

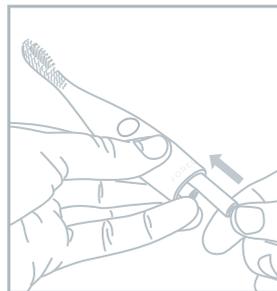

3. Reemplaza las 2 pilas AAA, colocándolas en su lugar.



4. Coloca la base de nuevo, comprobando que cierra correctamente.

IMPORTANTE PARA UN MÁXIMA SEGURIDAD

- Consulte a su médico antes de usar ISSA™ play si padece algún problema médico.
- Si estas bajo algún tratamiento oral, consulte con su dentista/médico antes de usar el dispositivo.
- Evita dejar el dispositivo expuesto directamente de sol, a temperaturas extremas o a agua hirviendo.
- Una buena supervisión y explicación de las instrucciones es necesaria para el uso de los niños, así como para personas con algún tipo de deficiencia.
- Deje de usar este producto si alguna parte se ha dado (cabezal, soporte o cargador). Este dispositivo no puede desmontarse en partes útiles.

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y DESECHO

Eliminación y desecho de equipos electrónicos viejos (de aplicación en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recolección de residuos específicos).



El símbolo del cubo de basura tachado indica que este dispositivo no debe considerarse como basura doméstica sino como equipos eléctricos y electrónicos. Al garantizar que este dispositivo se desecha de forma adecuada estás ayudando a evitar las consecuencias negativas potenciales para el medio ambiente y la salud humana que puede tener desechar este aparato de forma inadecuada. El reciclaje de los materiales contribuye además a conservar y proteger los recursos naturales.

Para más información sobre el reciclaje de tu dispositivo, ponte en contacto con el servicio de tratamiento de residuos domésticos de tu localidad o infórmate en el lugar de compra.

ESPECIFICACIONES

MATERIALES:	Silicona y Polímero PBT
COLORES:	Black / Cobalt Blue / Summer Sky / Wild Strawberry / Pink
TAMAÑO:	159mm x 30mm x 24mm
PESO:	61 g
BATERÍA:	2 pilas AAA
EN ESPERA:	180 días
FRECUENCIA:	216 Hz
NIVEL MÁXIMO DE RUIDO:	<50 dB
INTERFAZ:	1 botón

Exoneración de responsabilidad: Los usuarios de este dispositivo lo usan bajo su propio riesgo. Ni FOREO ni sus distribuidores asumen responsabilidad ninguna por lesiones o daños, ya fueran físicos o de otro tipo, que pudieran surgir directa o indirectamente por el uso de este dispositivo. FOREO se reserva además el derecho a revisar esta publicación y a hacer los cambios que considere ocasionalmente y sin obligación de notificar a nadie sobre esta revisión o modificación. FOREO se reserva además el derecho a revisar esta publicación y a hacer los cambios que considere ocasionalmente y sin obligación de notificar a nadie sobre esta revisión o modificación.

El modelo podrá ser modificado para su mejora sin comunicado previo.

©2017 FOREO AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR EN UE: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 ESTOCOLMO, SUECIA

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR EN ESTADOS UNIDOS: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD.

#159, LAS VEGAS, NV 89109, USA. DISEÑADO Y DESARROLLADO POR FOREO SUECIA.

FABRICADO POR FOREO AB

www.foreo.com