

FOREO

LUNA™ for MEN

GEBRAUCHSANWEISUNG

REINIGT GRÜNDLICH, BEKÄMPFT DIE HAUTALTERUNG UND BEREITET IHR GESICHT AUF EINE GENAUERE RASUR VOR


Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb dieses LUNA™ for MEN T-Sonic™, ein Rasur-optimierendes Reinigungs- und Anti-Aging-Gerät. Bevor Sie alle Vorzüge hochentwickelter Hautpflege komfortabel zuhause genießen können, nehmen Sie sich bitte kurz Zeit, um diese Gebrauchsanweisung durchzulesen.

LUNA™ for MEN ÜBERSICHT

Entdecken Sie alle Vorzüge fortschrittlicher Hautpflege in einem einzigen High-Tech-Gerät, speziell für die besonderen Bedürfnisse von Männerhaut entwickelt.

Im Anti-Aging-Modus leitet der LUNA™ for MEN T-Sonic™ Impulse direkt in die Haut, um sie von Schmutz und Toxinen zu reinigen und die Durchblutung anzuregen. Die abgerundeten Silikon-Noppen entfernen trockene Hautzellen und schützen die natürliche Feuchtigkeitsbarriere der Haut für eine genauere und angenehmere Rasur.

Im Anti-Aging Modus leitet der LUNA™ for MEN niedrigfrequenzimpulse durch die gewölbte Oberfläche und deren konzentrischen Linien, um die Gesichtsmuskulatur zu entspannen. Das glättet die Haut und beugt Linien und Mimik-Falten vor.

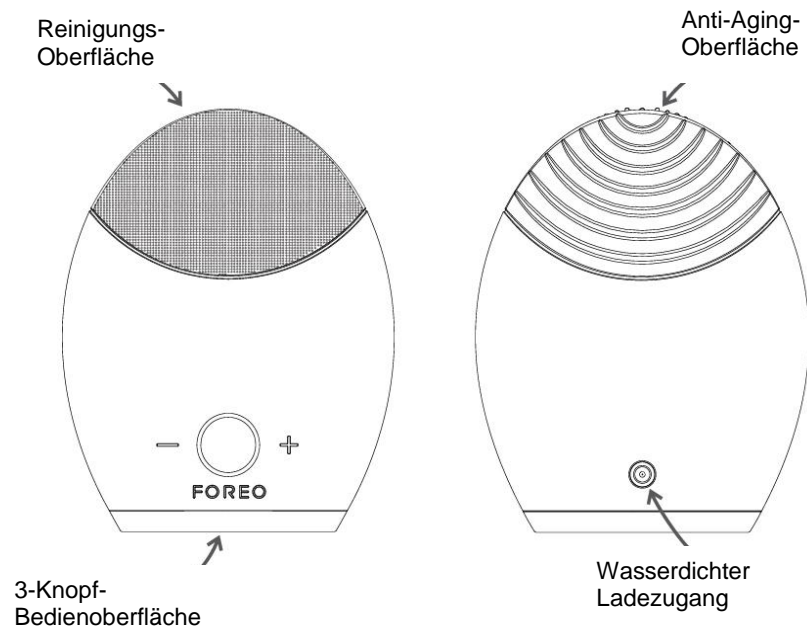

SO BENUTZEN SIE IHREN LUNA™ for MEN

Hunderte von breiten Silikon-Noppen des LUNA™ for MEN und die T-Sonic™ Impulse revitalisieren selbst die dickere Männerhaut und ermöglichen eine tiefe Reinigung der, bei Männern, aktiveren Talgdrüsen. Um die Gesichtspflege mit dem LUNA™ for MEN zu optimieren, empfehlen wir eine Gesamtanwendungszeit von 2 Minuten morgens und abends.

MODUS-AUSWAHL

1. Drücken Sie den zentralen Knopf einmal um Ihren LUNA™ for MEN zu aktivieren. Nach dem Einschalten ist Ihr Gerät im Reinigungsmodus.
2. Drücken Sie den Zentral-Knopf erneut um das Gerät in den Standby-Modus zu bringen (im Standby-Modus leuchtet die Anzeige dauerhaft und die Impulse stoppen, um Ihnen Gelegenheit zu geben Ihr Gesicht zu waschen).
3. Drücken Sie den zentralen Knopf ein drittes Mal, um den Anti-Aging Modus zu aktivieren.
4. Drücken Sie den zentralen Knopf ein viertes Mal, um Ihren LUNA™ for MEN zu deaktivieren.

Die Intensität des LUNA™ for MEN Reinigungs-und Anti-Aging-Modus wird über die +/- Knöpfe geregelt, ausgestattet mit einer Memory-Funktion, die Ihren bevorzugten Modus bis zum nächsten Gebrauch speichert.

Die einzelnen Schritte der FOREO Reinigung und Anti-Aging-Anwendung werden auf den kommenden Seiten beschrieben. Nach jeder dieser dermatologisch empfohlenen Anwendungen wird die Pulsation einen Moment pausieren und das Licht der Anzeige kurz aufleuchten. Das Signal für Sie, mit der nächsten Gesichtszone fortzufahren.

Hinweis: Falls vor dem ersten Gebrauch noch die Tastensperre aktiviert ist, entriegeln Sie das Gerät, indem Sie gleichzeitig + und – drücken. Als Zeichen für die Entsperrung wird kurz das Licht aufleuchten. Wenn Sie die Tastensperre, beispielsweise für eine Reise, aktivieren wollen gehen Sie genauso vor.

REINIGUNGS MODUS

Die T-Sonic™ Impulse befreien die Poren, entfernen Unreinheiten und Toxine und stimulieren die Durchblutung um die Haut mit Sauerstoff anzureichern.

Versuchen Sie jede Gesichtszone circa 15 Sekunden zu reinigen; nach diesem Zeitintervall werden die Impulse des LUNA™ for MEN kurz pausieren.



1. Befeuchten Sie Ihr Gesicht und tragen Sie Ihr bevorzugtes Reinigungsprodukt auf. Machen Sie auch die Reinigungsoberfläche Ihres LUNAs™ for MEN nass.
2. Durch Drücken des zentralen Knopfes aktivieren Sie den Reinigungs-Modus Ihres LUNAs™ for MEN. Mit sanften Aufwärts-Bewegungen reinigen Sie den gesamten Bartwuchs-Bereich unterhalb des Kiefers.
3. Beginnen Sie die Reinigung an Ihrem Kinn mit sanften Aufwärtsbewegungen entlang Ihrem Kiefer bis zum Ohr; bewegen Sie sich Schritt für Schritt höher, bis ihre gesamte Wange gereinigt ist. Anschließend wiederholen Sie diesen Ablauf auf der zweiten Gesichtshälfte.
4. Anschließend reinigen Sie die Stirn. Beginnen Sie von der Mitte aus mit sanften Auswärtsbewegungen auf beiden Seiten.
5. Jetzt reinigen Sie eine Seite der Nase mit sanften Auf-und Abwärtsbewegungen und wechseln dann auf die andere Seite der Nase. Wir empfehlen Ihnen die Intensität Ihres LUNAs™ for MEN zu reduzieren, bevor Sie mit Auswärtsbewegungen die Region unter Ihren Augen reinigen.


Nach 1 Minute fühlen Sie, dass die Impulse 3 Mal in kurzer Folge stoppen. Drücken Sie den Zentralknopf ein weiteres Mal, um den LUNA™ for MEN in den Standby-Modus zu bringen. Abschließend waschen Sie Ihr Gesicht, um Ihre 1-Minute-Reinigung zu vervollständigen. Bitte beachten Sie, dass sich der Reinigungsmodus des LUNA™ for MEN automatisch nach 3 Minuten abschaltet. Dies verhindert einen zu langen Gebrauch.

ANTI-AGING-MODUS

Der Anti-Aging-Modus des LUNA™ for MEN mindert das Erscheinen von feinen Linien und Falten. Die Gesichtsmuskulatur wird entspannt und die Blut-Mikrozirkulation wird angeregt. Dies erhöht die Produktion von Collagen und Elastin.

Um vom Standby-Modus in den Anti-Aging-Modus zu gelangen, drücken Sie erneut den Zentralknopf. Versuchen Sie jeden Schritt der Anwendung circa 12 Sekunden lang durchzuführen. Nach diesem Zeitintervall werden die T-Sonic™ Impulse des LUNA™ for MEN kurzzeitig pausieren. Halten Sie die Anti-Aging-Oberfläche des LUNA™ for MEN an folgende Falten anfällige Zonen wo Muskelverspannungen zu Sorgenfalten, Augenfältchen und Mimikfalten führen können.

1. Region zwischen den Augenbrauen
2. Rechte Schläfe
3. Rechte Nasolabialfalte
4. Linke Nasolabialfalte
5. Linke Schläfe

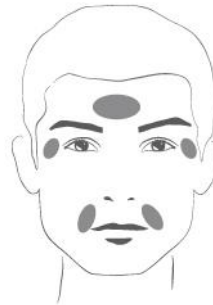


Nach 1 Minute fühlen Sie, dass die Impulse 3 Mal in kurzer Folge stoppen. Nun ist die Anti-Aging-Anwendung abgeschlossen und Ihre Haut ist bereit für eine genauere und sanftere Rasur. Bitte beachten Sie, dass sich der Anti-Aging-Modus des LUNA™ for MEN, automatisch nach 3 Minuten abschaltet. Dies verhindert einen zu langen Gebrauch.

LADEVORGANG

- Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Ladezugang des LUNA™ for MEN.
- Verbinden Sie den Hauptstecker mit einer Steckdose. Die LED-Anzeige des LUNA™ for MEN blinkt und zeigt so den Ladevorgang an. Wenn Ihr Gerät voll aufgeladen ist (nach circa 1 Stunde), leuchtet Die LED-Anzeige dauerhaft.
- Wenn der Akku schwach wird, blinkt die LED-Anzeige Ihres LUNA™ for MEN weiß.

Verwenden Sie für Ihren LUNA™ for MEN nur das von FOREO mitgelieferte Ladekabel. Laden sie den LUNA™ for MEN vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Benützen Sie das Gerät nicht während dem Ladevorgang und laden Sie es nicht länger als 24 Stunden.

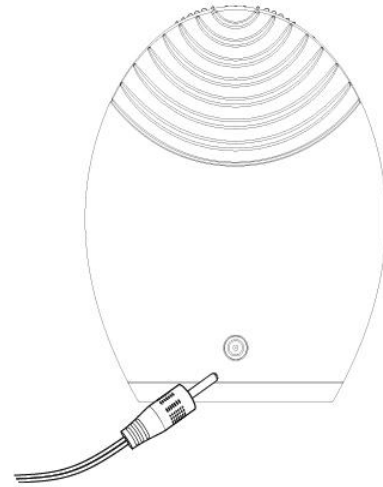

REINIGUNG, AUFBEWAHRUNG UND SICHERHEIT

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres LUNA™ for MEN durch korrekte Pflege und Sorgfalt.

Reinigen Sie den LUNA™ for MEN nach jedem Gebrauch sorgfältig. Waschen Sie die Oberfläche des LUNA™ for MEN mit Seife, spülen Sie ihn anschließend mit klarem Wasser ab und tupfen Sie das Gerät mit einem fusenfreien Tuch trocken. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten, dies kann zu Hautirritationen führen.

Verwenden Sie keine Pflegeprodukte die auf Tonerde oder Silikon basieren, keine körnigen Reinigungsmittel sowie Peelings aller Art. Sie könnten die Silikon-Oberfläche des LUNA™ for MEN beschädigen.

Setzen Sie das Gerät nicht längerer, direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze oder kochendem Wasser aus.

Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, dass das Gerät ausschliesslich von einer Person benutzt wird.

Die Reinigung mit dem LUNA™ for MEN sollte angenehm sein, sobald Sie Beschwerden verspüren, unterbrechen Sie sofort die Anwendung und konsultieren Sie einen Arzt. Falls Sie unter Hautproblemen leiden, befragen Sie vor dem Gebrauch einen Hautarzt. Die Region unter den Augen sollte mit großer Vorsicht gereinigt werden, vermeiden Sie Kontakt mit den Augenlidern und dem Auge.

Besondere Aufmerksamkeit ist nötig, wenn das Gerät von, oder in der Nähe von Kindern verwendet wird. Gebrauchen Sie Ihr Gerät oder das Ladekabel nicht, wenn es beschädigt sein sollte. Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass das Ladegerät trocken ist. Laden Sie den LUNA™ for MEN nur an Orten, wo er nicht versehentlich ins Wasser fallen kann. Dieses Gerät ist nur zur beschriebenen Verwendung geeignet.

Wir empfehlen die Hautreinigung und die Anti-Aging-Anwendung nicht länger als 3 Minuten durchzuführen.

FEHLERBEHEBUNG

Die LED-Anzeige blinkt nicht, während des Ladevorgangs?

- Der Akku ist voll aufgeladen; bereit für bis zu 450 Anwendungen.
- Der Akku ist vollkommen entleert und benötigt einige Minuten für die Kopplung mit dem Ladekabel.
- Das Ladekabel ist nicht korrekt verbunden, überprüfen Sie die Verbindung zwischen Steckdose und Ladezugang.

Der LUNA™ for MEN wird beim Drücken des Zentralknopfes nicht aktiviert?

- Der Akku ist leer. Laden Sie den LUNA™ for MEN neu auf.
- Die Tastensperre ist aktiviert. Entriegeln Sie den LUNA™ for MEN durch gleichzeitiges Drücken und Halten der + und – Knöpfe.

Der LUNA™ for MEN kann nicht ausgeschaltet werden und/oder die Knöpfe der Bedienoberfläche reagieren nicht?

- Der Mikroprozessor ist vorübergehend gestört. Verbinden Sie das Gerät mit dem Ladekabel, um die Funktion wieder herzustellen.

Die Silikon-Oberfläche des LUNA™ for MEN weist eine klebrige und blasenwerfende Struktur auf?

- Stellen Sie den Gebrauch ein. Silikon ist von hoher Haltbarkeit, kann aber unter bestimmten Umständen beschädigt werden – informieren Sie sich unter „Reinigung, Aufbewahrung und Sicherheit“ wie das vermieden werden kann.

Sollten Sie andere Probleme oder Fragen bezüglich Ihres LUNA™ for MEN oder seiner Funktion haben, besuchen Sie bitte www.foreo.com/customercare und füllen Sie das Kontaktformular aus.

FOREO BEFRISTETE 2-JAHRES-GARANTIE UND 10-JAHRES-QUALITÄTSGARANTIE

FOREO übernimmt auf dieses Gerät eine Gewährleistung von ZWEI (2) JAHREN ab dem Datum des Ersterwerbs für alle Mängel, die auf Fehler bei der Verarbeitung oder des Materials zurückzuführen sind. Wenn Sie einen Mangel feststellen und diesen FOREO innerhalb der Gewährleistungsfrist mitteilen, wird FOREO nach eigenem Ermessen das Gerät kostenlos ersetzen.

Die Herstellergarantie umfasst alle Bauteile, die die Funktion des Gerätes betreffen. NICHTabgedeckt ist die äußerliche Abnutzung durch normalen Verschleiß oder Beschädigung infolge von Versehen, unsachgemäßem Gebrauch oder Nachlässigkeit. Jeder Versuch, das Gerät (oder dessen Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen führt zum Erlöschen des Garantieanspruches. Zur Inanspruchnahme der Garantie muss glaubhaft belegt werden können, dass die Garantie zum Zeitpunkt des Antrages noch gültig ist. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkaufbeleg zusammen mit den Garantiebedingungen für den Zeitraum der Garantiedauer auf.

Bei Garantieansprüchen, geben Sie Ihre Daten auf der KUNDENSERVICE Seite auf www.FOREO.com ein. Sie erhalten daraufhin eine Warenrücksendenummer (Return Merchandise Authorizationnumber - RMA) mit der Sie das Produkt an FOREO zurücksenden können. Versandkosten werden nicht übernommen. Diese Vereinbarung gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Verbraucherrechten und beeinträchtigt diese Rechte in keiner Weise.

Als Verlängerung der Bedingungen der begrenzten zwei jährigen (2) Herstellergarantie von FOREO berechtigt die zehnjährige (10) Qualitätsgarantie von FOREO den Besitzer zum Kauf eines neuen Gerätes auf www.FOREO.com zu 50 % des Listenpreises. Die AGBs können Sie auf der Kunden-Service-Seite auf www.FOREO.com einsehen.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung von elektronischen Altgeräten (als Sondermüll entsprechend den in der EU und anderen europäischen Ländern gültigen Vorschriften)

Das durchgestrichene Müllcontainersymbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu der betreffenden Wertstoffsammelstelle zur Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte gebracht werden muss. Durch die fachgerechte Entsorgung dieses Gerätes, helfen Sie eventuelle negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Entsorgung des Produkts verursacht werden könnten. Das Recyclen der verwendeten Materialien hilft außerdem die natürlichen Rohstoffquellen zu erhalten.

Falls Sie weitere Informationen zur Abfallverwertung Ihres Gerätes wünschen, kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Entsorgungsunternehmen oder den Verkäufer dieses Gerätes.



PRODUKTBESCHREIBUNG

MATERIALIEN:	FDA-geprüftes, körperfreundliches Silikon/ABS
FARBE:	Black
GRÖßE:	100 x 80 x 32 mm
GEWICHT:	100 g
BATTERIE:	Li-ion 500 mAh 3.7 V
LADEZEIT:	60 Min.
BENUTZUNGSDAUER:	bis zu 450 Mal
STANDBY:	90 Tage
FREQUENZ:	125 Hz
MAX.SCHALLPEGEL:	50 dB
BEDIENOBERFLÄCHE:	3 Knöpfe

Haftungsausschluss: Die Verwendung dieses Produktes geschieht auf eigene Gefahr. Weder FOREO noch seine Einzelhändler übernehmen eine Haftung für jegliche Art von Verletzungen oder Schäden, körperlicher- oder anderer Art, die direkt oder indirekt mit der Benutzung dieses Gerätes zusammen hängen.

Verbesserungen des Produktes können ohne Vorankündigung erfolgen.

©2013 FOREO AB. Alle Rechte vorbehalten.

Importeur und Großhändler in der EU: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SWEDEN

Importeur und Großhändler in der USA: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA

Entworfen und entwickelt von FOREO SWEDEN
Hergestellt von FOREO China

www.foreo.com