


FOREO



UFO™ mini

الماسك الذكي المنشط
حرارياً بمصباح LED

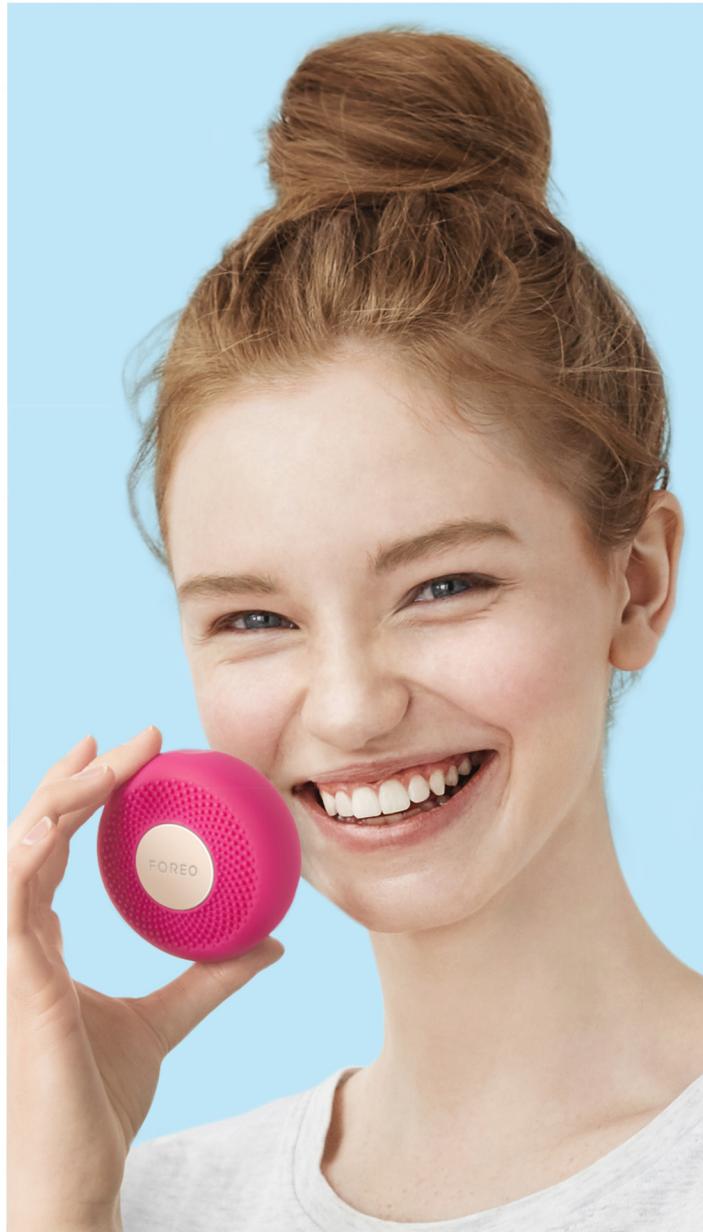



دليل المستخدم الكامل

البداية

تهانينا على اتخاذك الخطوة الأولى نحو عناية بالبشرة من خارج هذا العالم عن طريق الحصول على UFO mini. قبيل أن تبدأ بالإستمتاع بكل مزايا تكنولوجيا القناع المتطورة في راحة منزلك، يرجى قضاء بعض لحظات لقراءة التعليمات الواردة في هذا الدليل.

من فضلك أقرأ كل التعليمات قبل الإستخدام واستعملي هذا الجهاز فقط للإستخدام المعنى به

تحذير: ممنوع منعاً باتاً إدخال أي تعديلات على هذا الجهاز

عرض عام لجهاز UFO mini

يتميز جهاز UFO mini الذكي الذي يساعد على وضع الماسك بسهولة، بأنه رفيع، ويسهل، كما يتيح إجراء معالجة كاملة للوجه سواء في المنزل أو خارج المنزل. هذا الجهاز الرائع يحتوي على خاصية LED والعلاج الحراري كما يحتوي أيضاً على تكنولوجيا نبضات T-Sonic المعالجة التي تقوم بحقن الماسك في أعماق البشرة، استعمليه لمدة 90 ثانية للحصول على بشرة نضرة تناسب التقاط صور السيلفي.


تعرف على جهاز UFO mini



قناع UFO mini المفعول
مصنوع خصيصاً ليناسب
عمل UFO mini



تطبيق FOREO لتشغيل
جهاز FOREO mini مع
القناع الذكي تلقائياً

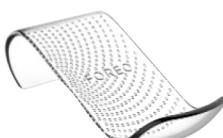

منصة لتشييت الجهاز
تحمي و تعرض الجهاز و
تساعد على تجفيفه بطريقة
أسرع



USB للشحن في أي وقت، وفي أي
مكان



اضيفي معالجات جديدة لـ UFO mini

1. قومي بتنزيل تطبيق FOREO

2. اضغط على الزر لتشغيل جهاز UFO mini

3. في التطبيق، قومي بعمل مسح للباركود واتبعي التعليمات



7



6



5



4

استمتعي بمعالجة الماسك الذكي.

قومي بتنبيت الماسك على الجهاز من خلال الضغط على حلقة التثبيت في مكانها، مع توجيه شعار FOREO للأعلى.

أزيلي ماسك أزيلاي المنشط من الكيس.

أزيلي حلقة التثبيت من جهاز UFO mini.

إضافة ماسك جديد في جهازك

يجب تنشيط برمجة التطبيق للمرة الأولى لكلا من Make My Day و Call It a Night بعد ذلك، يمكن الدخول إلى الإجراء من خلال التطبيق باستخدام الزر العام



جميع معالجات الماسك الإضافية



*جميع معالجات الماسك الإضافية

استخدام جهاز UFO mini بدون التطبيق

1. اضغط على الزر لتشغيل جهاز UFO mini.

2. اضغط مرة أخرى لتنبيت معالجة Make My Day treatment واطلب مرتين آخرتين لتنبيت معالجة Call It a Night وهكذا بنفس الطريقة مع كل ماسك. على سبيل المثال، إذا كان H2Overdose على الفتحة رقم ٣ في التطبيق، اضغط على الزر العام لتشغيل جهاز UFO mini ثم اضغط على ٣ مرات لتنبيت معالجة H2Overdose.

3. يبدأ إجراء المعالجة بعد ١٠ ثوانٍ من ومض المصباح الوردي

لا زلت تريدين معرفة المزيد؟

إذا كانت إحدى معالجات UFO mini غير كافية، اضغط على الزر العام مرة أخرى في غضون ٣٠ ثانية بعد انتهاء الإجراء لبدء نفس الإجراء مرة أخرى.



1 أبدأ ببشرة نظيفة و جافة. نحن ننصح بتنظيف بشرتك بـ LUNA أوًّا لافضل النتائج. حركي UFO mini برفق على بشرة الوجه لتوزيع التركيبة بتعادل.

2 حركي UFO mini لتسلكي تركيبة القناع داخل بشرة الوجه بحركة دائرة. حركي الجهاز بحركة عقارب الساعة على الوجه، بداية من الذقن لتحرك للأعلى على الخد الأيسر والرقبة. كرري هذه الحركة حتى تنتهي المعالجة.

3 عندما تنتهي المعالجة، اضغط على بقايا التركيبة الموجودة على وجهك لضخها داخل بشرتك أو إزالة الباقي بقطعة قطن.

4 ضعي مرطبك المفضل على وجهك.

*بالنسبة لمسك العينين، قومي بتدليك المنطقة المحيطة بالعينين بالكامل برفق، مع التبديل بين العينين اليسرى واليمنى حتى انتهاء المعالجة.

تنظيف UFO mini

أزيلي حلقة التثبيت من الجهاز وتخلصي من الماسك. ونظرًا لأن جهاز UFO mini محكم ضد تسرب الماء بشكل كامل، يمكن شطف جهاز UFO mini وحلقة التثبيت بماء الصنبور الدافئ. ثم يتم تجفيف الجهاز برفق باستخدام منشفة نظيفة، ويُعاد تركيب حلقة التثبيت، ثم يوضع الجهاز مرة أخرى على الحامل.

ملاحظة: ممنوع تماماً تنظيف الأجهزة باستخدام الكحول، بنزين أو أيّتون لأن هذه المواد قد تسبب تهيج البشرة أو تلف السيليكون.

هام جداً للسلامة القصوى

ينبغي استخدام UFO mini بالتزامن مع الأقنعة المرفقة بها فقط. لا يجب وضع الجهاز مباشرة على البشرة بدون استخدام القناع.

إذا كان لديك حالة جلدية أو أي مخاوف طبية ، يرجى استشارة طبيب الأمراض الجلدية قبل الاستخدام. إذا كان UFO mini يسبب أن يشعرك بالراحة، إذا ما كنت تعاني من الإزعاج فتوقف عن الإستخدام على الفور واستشيري الطبيب استخدام.

توكى الحذر عند استخدامك UFO mini حول العينين ولا تقربي الجهاز لحدقة العين أو أطراف العين لأسباب صحية نحن لا ننصحك بمشاركة جهازك مع آخرين .

تجنبى ترك UFO mini تحت أشعة الشمس المباشرة ولا تعرضيها لحرارة عالية أو ماء مغلبي .

يعد الإشراف القريب من الضروريات عند استخدام الجهاز بواسطة أو بالقرب من الأطفال وكذلك هؤلاء من أصحاب التحديات العقلية .

توقف عن استخدام المنتج إذا ما حدث له ضرر ما. لا يحتوي هذا الجهاز على أجزاء قابلة للإستبدال .

استكشاف الأخطاء و إصلاحها

الاحتياطيات الواجب إتخاذها في حالة حدوث تغيرات في أداء UFO mini إذا لم تعمل UFO mini عند الضغط على الزر العالمي:

البطارية فارغة. إشحنى UFO mini عن طريق وصلة USB حتى يومض الضوء الأبيض يوميض مستمر. شحن لمدة ساعتين ونصف يكفي حتى ٤٠ استخدام.

إذا تعذر تشغيل الجهاز أو توقفه أو لم تستجب أزرار الواجهة: المعالجات معطلة بشكل مؤقت. اضغط على جهاز التشغيل واستمر بالضغط حتى يتم إعادة الجهاز للضبط العادي إذا ما رفض الجهاز التزامن مع التطبيق.

إذا لم تجد الإجابة على السؤال الخاص بك في قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها ، أو إذا كان لديك أي أسئلة أخرى بخصوص تشغيل الجهاز ، يرجى زيارة www.foreo.com/support.

شروط ومتطلبات الضمان

تسجيل الضمان

قومي بالتسجيل من خلال تطبيق FOREO لتنشيط الضمان المحدود لمدة عامين وضمان الجودة لمدة 10 سنوات.

تضمن FOREO هذا الجهاز لمدة سنتين بعد تاريخ الشراء الأصلي ضد أي عيوب قد تنشأ بسبب عيوب التصنيع أو المواد الناتجة عن الاستخدام العادي للجهاز. الضمان يغطي كل الأجزاء العاملة والتي تؤثر على أداء الجهاز ولا يغطي الضمان الأضرار الناجمة عن مستحضرات التجميل والبلى العادى أو الضرر الناجم عن الحوادث أو سوء الاستخدام أو الإهمال. أي محاولة لفتح الجهاز أو ملحقاته تلغى الضمان المحدود.

إذا ما اكتشفي أي عطل من فضلك قومي بإبلاغ FOREO خلال فترة الضمان وستقوم FOREO، حسب تقديرها، بإستبدال الجهاز على للمطالبة بالضمان كل المطالبات ضمن فترة الضمان يجب أن تدعمها أدلة معقولة أن العيب حدث في خلال فترة الضمان. للحفاظ على الضمان يجب عليك الاحتفاظ بإصال الشراء الأصلي مع شروط الضمان حتى انتهاء فترة الضمان.

للمطالبة بضمانك يجب عليك الدخول إلى www.foreo.com وبعد ذلك حدد إختيار المطالبة بالضمان. سوف يتم إرسال إذن عودة بضائع على حسابك لأقرب مكاتبنا.

تكليف الشحن غير قابلة للإسترداد.

هذا البيان هو إضافة إلى حقوقك كمستهلك وحماية لها ولا يمس بهذه الحقوق شكلاً وموضوعاً.


ضمان جودة لعشر سنوات
كاستمرار لشروط ضمان FOREO المحدود لمدة سنتين، تعطى FOREO المالكين الحق في شراء جهاز جديد من www.foreo.com بخصم 50٪ من السعر الرسمي إذا ما تم اكتشاف عيب تصنيع في هذا الوقت.
زر قسم خدمة العملاء على www.foreo.com لكل التفاصيل والشروط.

معلومات التخلص من الأجهزة الإلكترونية

التخلص من الأجهزة الإلكترونية (كما هو معمول به في دول الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى) يتم في نظام نفايات مختلف. يشير رمز سلة النفايات المشطوب عليه إلى أن هذا الجهاز لا يجب معاملته كنفايات المنزل العادية ولكن يجب اخذه إلى نقطة التجمع.



التخلص من الأجهزة الإلكترونية (كما هو معمول به في دول الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى) يتم في نظام نفايات مختلف. يشير رمز سلة النفايات المشطوب عليه إلى أن هذا الجهاز لا يجب معاملته كنفايات المنزل العادية ولكن يجب اخذه إلى نقطة التجمع المناسبة لإعادة تدوير المنتجات الإلكترونية والكهربائية. بالتأكد من أن هذا الجهاز يتم التخلص منه بالطريقة الصحيحة ، فإنك تساعدين على منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان والتي يمكن أن تسببها طريقة التخلص الخاطئ لهذا الجهاز. إعادة تدوير المواد يساعد أيضًا على تحويلها إلى موارد طبيعية.

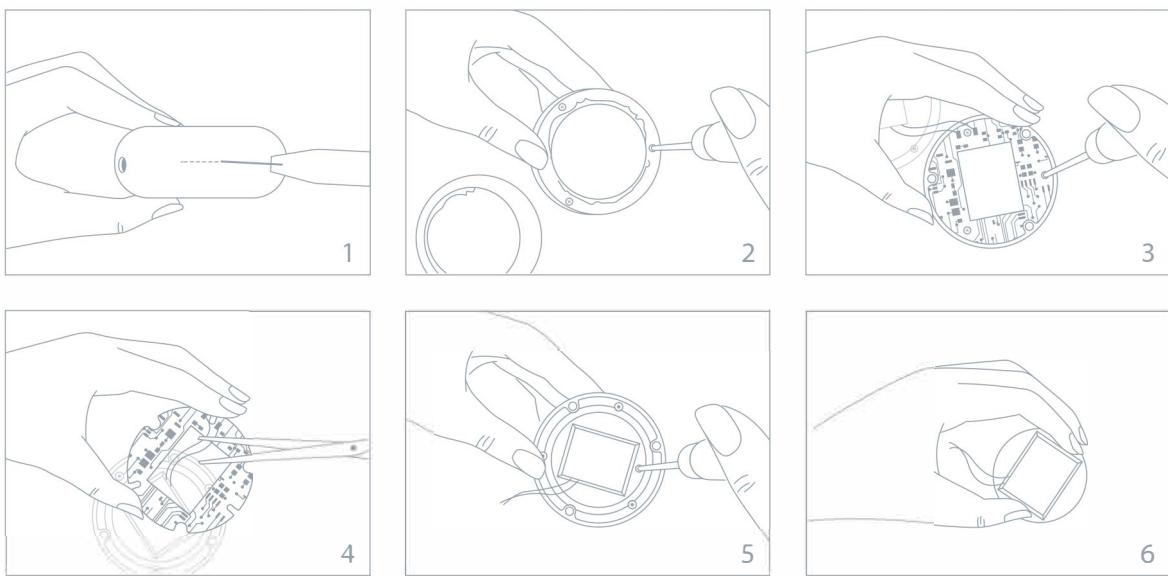

المواصفات

المواد : سيليكون آمن صحيًّا و مادة أب اس

اللون : الوردي / الأزرق / الفوشيا

الحجم : ٣١X ٧٢,٥ ملليمتر،

الوزن : ١٤٦,٢ جرام

٣ فولت ، البطارية : ليثيوم أيون ١٠٠ مللي أمبير / الساعة ٧

وقت الإستخدام : حتى ٤٠ إستخدام

الاستعداد : ١٨٠ يوم

التردد : ١٨٠ هرتز

أعلى مستوى للضوضاء : أقل من ٥٠ ديسibel

الواجهة : زر واحد

تنويه : يتم استخدام هذا الجهاز على مسؤولية المستخدم الخاصة. لا تتحمل FOREO أو أيها من موزعيها أي مسؤولية ناتجة عن أي إصابة أو ضرر جسدي أو غيره ، تنتج مباشرةً أو غير مباشرةً من استخدام هذا الجهاز ، وعلاوة على ذلك تحفظ FOREO بالحق في تعديل هذا المطبوع لصنع تعديلات من وقت لآخر في المنتجات بدون إعلام أحد بهذه التغييرات.

أي تعديلات لم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل الطرف المسؤول عن الإمتثال يمكن أن تبطل سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز. هذا الجهاز يتوافق مع 15 قاعدة من قواعد FCC. عمل الجهاز يخضع لشروط:

لا يسبب هذا الجهاز تداللاً ضاراً

يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله ، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب عملية غير مرغوبة

بيان التعرض RF : يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي تحددها لجنة الإتصالات الفيدرالية والمحددة لبيئة غير خاضعة للتغيرات الراديوية.

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية العامة. يمكن استخدام الجهاز في حالة التعرض المحمولة دون قيود.

الموديل قد يتغير للتحسينات دون إشعار

كل الحقوق محفوظة. المستورد والموزع في الاتحاد الأوروبي : © 2018 FOREO AB.

FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 STOCKHOLM, SWEDEN

المستورد والموزع في الولايات المتحدة : FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109,

الت تصنيع في الولايات المتحدة يتم عن طريق FOREO AB

التصميم والتوزيع يتم عن طريق FOREO السويد . www.foreo.com

التصنيع : بواسطة FOREO AB

www.foreo.com