

FOREO



UFO™

الماسك الذكي المنشط
حرارياً بمصباح LED



دليل المستخدم الكامل

البداية

تهانينا على إتخاذك الخطوة الأولى نحو عناية بالبشرة من خارج هذا العالم عن طريق الحصول على UFO. قبل أن تبدأ بالاستمتاع بكل مزايا تكنولوجيا القناع المتقدمة في راحة منزلك، يرجى قضاء بعض لحظات لقراءة التعليمات الواردة في هذا الدليل.

تحذير: ممنوع منعاً باتاً إدخال أي تعديلات على هذا الجهاز

نظرة عامة على UFO

تدمج UFO بين تقنيات العناية بالبشرة الفعالة مع مركبات قناع حصرية للحصول على مستوى احترافي للعناية بالبشرة في ثواني معدودة. بالإحتواء على تقنية Hyper-Infusion المعدلة، تقوم UFO بدمج العلاج الحراري والعلاج بالتبريد مع نبضات T-Sonic™ لتعزيز اقنعة UFO المفعولة للحصول على أفضل نتائج ممكنة، كما أنها تحتوي على معالجة RGB LED الضوئية مما يساعد الجهاز على تجديد البشرة بالكامل وإضفاء لون مشرق وصافي لها.

تعرف على جهاز UFO



قناع UFO المفعل
مصنوع خصيصاً ليناسب
عمل UFO



تطبيق FOREO لتشغيل
جهاز UFO مع
القناع الذكي تلقائياً



منصة لتنبيه الجهاز
تحمي و تعرض الجهاز و
تساعد على تجفيفه بطريقة
أسرع



USB كابل للشحن
في أي وقت، وفي أي
مكان



اضيفي معالجات جديدة لـ UFO



7 استمتعي بمعالجة الماسك الذكي.

6 قومي بتنشيط الماسك على الجهاز من خلال الضغط على حلقة التنشيط في مكانها، مع توجيهه شعار FOREO للأعلى.

5 أزيلي حلقة التنشيط من جهاز UFO. المننشط من الكيس.


4 أزيلي حلقة التنشيط من جهاز UFO.

إضافة ماسك جديد في جهازك

يجب تنشيط برمجة التطبيق للمرة الأولى لكلا من Make My Day و Call It a Night بعد ذلك، يمكن الدخول إلى الإجراء من خلال التطبيق باستخدام الزر العام



كل علاجات قناع إضافية

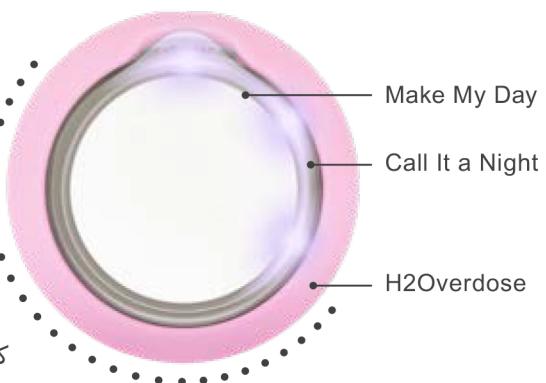

استخدام جهاز UFO بدون التطبيق

- اضغطي على الزر لتشغيل جهاز UFO.
- اضغطي مرة أخرى لتنشيط معالجة Make My Day treatment واضغطي مرتين آخريين لتنشيط معالجة Call It a Night وهكذا بنفس الطريقة مع كل ماسك. على سبيل المثال، إذا كان H2Overdose على الفتحة رقم ٣ في تطبيقك، اضغط على الزر العام لتشغيل جهاز UFO mini ثم اضغط على ٣ مرات لتنشيط معالجة H2Overdose.
- ببدأ إجراء المعالجة بعد ١٠ ثوانٍ من ومض المصابح الوردي

لا زلت تريدين معرفة المزيد؟

إذا كانت إحدى معالجات UFO غير كافية، اضغط على الزر العام مرة أخرى في غضون ٣٠ ثانية بعد انتهاء الإجراء لبدء نفس الإجراء مرة أخرى .



ابدأ ببشرة نظيفة و جافة. نحن ننصح بتنظيف بشرتك بـ LUNA أوّلاً لأفضل النتائج. حركي UFO برفق على بشرة الوجه لتوزيع التركيبة بتعادل.

حركي UFO لتدلكي تركيبة القناع داخل بشرة الوجه بحركة دائريّة. حركي الجهاز بحركة عقارب الساعة على الوجه، بداية من الذقن لتحرّك للأعلى على الخد الأيسر والرقبة. كرري هذه الحركة حتى تنتهي المعالجة.

عندما تنتهي المعالجة، إضغطي على بقايا التركيبة الموجودة على وجهك لضخها داخل بشرتك أو إزالة الباقي بقطعة قطن.

ضعبي مرطبك المفضل على وجهك.

* بالنسبة لماسك العينين، قومي بتدليك المنطقة المحيطة بالعينين بالكامل برفق، مع التبديل بين العينين اليسرى واليمني حتى انتهاء المعالجة.

تنظيف UFO

أزيلي حلقة التثبيت من الجهاز وتخلصي من الماسك. ونظراً لأن جهاز UFO محكم ضد تسرب الماء بشكل كامل، يمكن شطف جهاز UFO وحلقة التثبيت بماء الصنبور الدافئ. ثم يتم تجفيف الجهاز برفق باستخدام منشفة نظيفة، ويعاد تركيب حلقة التثبيت، ثم يوضع الجهاز مرة أخرى على الحامل.

ملاحظة: ممنوع تماماً تنظيف الأجهزة بإستخدام الكحول، بنزین او أسيتون لأن هذه المواد قد تسبب تهيج البشرة أو تلف السيليكون.

هام جداً للسلامة القصوى

ينبغي استخدام UFO بالتزامن مع الأقنعة المرفقة بها فقط. لا يجب وضع الجهاز مباشرة على البشرة بدون استخدام القناع.

إذا كان لديك حالة جلدية أو أي مخاوف طبية ، يرجى استشارة طبيب الأمراض الجلدية قبل الاستخدام. UFO يجب أن يشعرك بالراحة، إذا ما كنت تعانين من الإنزعاج فتوقف عن الإستخدام على الفور واستشيري الطبيب في استخدام.

توكى الحذر عند استخدامك UFO حول العينين و لا تقربي الجهاز لحدقة العين أو أطراف العين لأسباب صحية نحن لا ننصحك بمشاركة جهازك مع آخرين .

تجنبي ترك UFO تحت أشعة الشمس المباشرة و لا تعرضيها لحرارة عالية أو ماء مغلي. بعد الإشراف القريب من الضروريات عند استخدام الجهاز بواسطة أو بالقرب من الأطفال وكذلك هؤلاء من أصحاب التحديات العقلية .

توقف عن استخدام المنتج إذا ما حدث له ضرر ما. لا يحتوي هذا الجهاز على أجزاء قابلة للإستبدال .

استكشاف الأخطاء و إصلاحها

الاحتياطيات الواجب اتخاذها في حالة حدوث تغييرات في أداء UFO

إذا لم تعمل UFO عند الضغط على الزر العالمي:

البطارية فارغة. اشحنـي UFO عن طريق وصلة USB حتى يومض الضوء الأبيض بوميض مستمر. شحن لمدة ساعتين ونصف يكفي حتى 40% إستخدام.

إذا تعرّضـي تشغيل الجهاز أو توقيقـه أو لم تستجبـي أزرار الواجهة: المعالجات معطلة بشكل مؤقت. اضغط على جهاز التشغيل واستمرـي بالضغط حتى يتم إعادة الجهاز للضبط العادي إذا ما رفضـي الجهاز التزامـن مع التطبيق.

إذا لم تجد الإجابة على السؤال الخاص بك في قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها ، أو إذا كان لديك أي أسئلة أخرى بخصوص تشغيل الجهاز ، يرجى زيارة www.foreo.com/support.

شروط ومتطلبات الضمان

تسجيل الضمان

قومي بالتسجيل من خلال تطبيق FOREO لتنشيط الضمان المحدود لمدة عامين وضمان الجودة لمدة 10 سنوات.

تضمن FOREO هذا الجهاز لمدة سنتين بعد تاريخ الشراء الأصلي ضد أي عيوب قد تنشأ بسبب عيوب التصنيع أو المواد الناتجة عن الاستخدام العادي للجهاز. الضمان يغطي كل الأجزاء العاملة والتي تؤثر على أداء الجهاز ولا يغطي الضمان الأضرار الناجمة عن مستحضرات التجميل والبلى العادى أو الضرر الناجم عن الحوادث أو سوء الاستخدام أو الإهمال. أي محاولة لفتح الجهاز أو ملحقاته تلغى الضمان المحدود

إذا ما اكتشفت أي عطل من فضلك قومي بإبلاغ FOREO خلال فترة الضمان وستقوم FOREO، حسب تفضيرها، بإستبدال الجهاز على للمطالبة بالضمان كل المطالبات ضمن فترة الضمان يجب أن تدعمها أدلة معقولة أن العيب حدث في خلال فترة الضمان. للحفاظ على الضمان يجب عليك الإحتفاظ بايصال الشراء الأصلي مع شروط الضمان حتى إنتهاء فترة الضمان.

للمطالبة بضمانك يجب عليك الدخول إلى www.foreo.com وبعد ذلك حدد اختيار المطالبة بالضمان. سوف يتم إرسال إذن عودة بضائع على حسابك لأقرب مكاتبنا. تكاليف الشحن غير قابلة للإسترداد. هذا البيان هو إضافة إلى حقوقك كمستهلك وحماية لها ولا يمس بهذه الحقوق شكلاً وموضوعاً.


ضمان جودة لعشر سنوات كاستمرار لشروط ضمان FOREO المحدود لمدة سنتين، تعطى FOREO المالكين الحق في شراء جهاز جديد من www.foreo.com بخصم 50٪ من السعر الرسمي إذا ما تم إكتشاف عيب تصنيع في هذا الوقت. زر قسم خدمة العملاء على www.foreo.com لكل التفاصيل والشروط.

معلومات التخلص من الأجهزة الإلكترونية

التخلص من الأجهزة الإلكترونية (كما هو معمول به في دول الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبيّة الأخرى) يتم في نظام نفايات مختلف. يشير رمز سلسلة النفايات المشطوب عليه إلى أن هذا الجهاز لا يجب معاملته كنفايات المنزل العادي ولكن يجب اخذه إلى نقطة التجمع المناسبة لإعادة تدوير المنتجات الإلكترونية والكهربائية. بالتأكد من أن هذا الجهاز يتم التخلص منه بالطريقة الصحيحة ، فإنك تساعدين على منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان والتي يمكن أن تسببها طريقة التخلص الخاطئ لهذا الجهاز. إعادة تدوير المواد يساعد أيضًا على تحويلها إلى موارد طبيعية.



التخلص من الأجهزة الإلكترونية (كما هو معمول به في دول الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبيّة الأخرى) يتم في نظام نفايات مختلف. يشير رمز سلسلة النفايات المشطوب عليه إلى أن هذا الجهاز لا يجب معاملته كنفايات المنزل العادي ولكن يجب اخذه إلى نقطة التجمع المناسبة لإعادة تدوير المنتجات الإلكترونية والكهربائية. بالتأكد من أن هذا الجهاز يتم التخلص منه بالطريقة الصحيحة ، فإنك تساعدين على منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان والتي يمكن أن تسببها طريقة التخلص الخاطئ لهذا الجهاز. إعادة تدوير المواد يساعد أيضًا على تحويلها إلى موارد طبيعية.

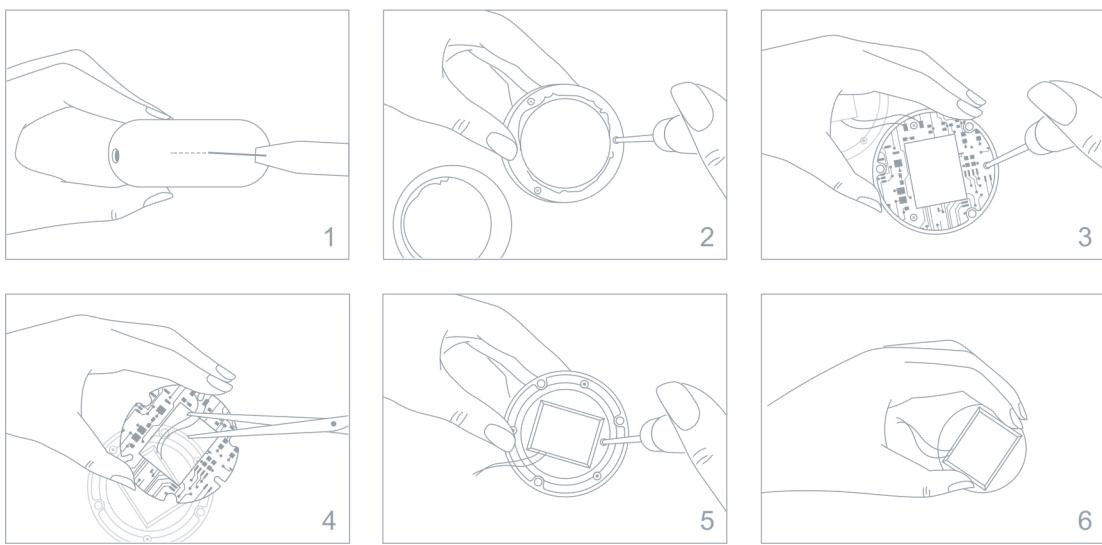

المواصفات

المواد : سيليكون آمن صحيًا و مادة أب اس اللون : الوردي / الأزرق / الفوشيا

الحجم : ٣١ ملليمتر × ٧٢,٥

الوزن : ١٤٦,٢ جرام

البطارية : ليثيوم أيون ١٠,٥٠ مللي أمبير / الساعة ٣,٧ فولت وقت الاستخدام : حتى ٤٠ استخدام

الاستعداد : ١٨٠ يوم

التردد : ١٨٠ هرتز

أعلى مستوى للضوضاء : أقل من ٥٠ ديسibel

الواجهة : زر واحد

تنبيه : يتم استخدام هذا الجهاز على مسؤولية المستخدم الخاصة. لا تتحمل FOREO أو أي من موزعيها أي مسؤولية ناتجة عن أي إصابة أو ضرر جسدي أو غيره ، تنتج مباشرة أو غير مباشرة من استخدام هذا الجهاز وعلاوة على ذلك تحتفظ FOREO بالحق في تعديل هذا المطبوع لصنع تعديلات من وقت لآخر في المحتويات بدون إعلام أحد بهذه التغييرات.

أي تعديلات لم يتم الموافقة عليها صراحة من قبل الطرف المسؤول عن الإمتثال يمكن أن تبطل سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز. هذا الجهاز يتواافق مع 15 قاعدة من قواعد FCC. عمل الجهاز يخضع لشروط:

لا يسبب هذا الجهاز تداللاً ضاراً

يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل ينتمي استقباله ، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب عملية غير مرغوبية

بيان التعرض RF : يتواافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي تحددها لجنة الإتصالات الفيدرالية والمحددة لبيئة غير خاضعة للتغيرات الراديوية.

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض للتغيرات اللاسلكية العامة. يمكن استخدام الجهاز في حالة التعرض المحمولة دون قيود.

الموديل قد يتغير للتحسينات دون إشعار.

© 2018 كل الحقوق محفوظة. المستورد والموزع في الاتحاد الأوروبي : FOREO AB.

FOREO AB, BIRGER JARLSGATA 22, 114 STOCKHOLM, SWEDEN

المستورد والموزع في الولايات المتحدة : FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109;

التصنيع في الولايات المتحدة يتم عن طريق FOREO AB.

التصميم والتوزيع يتم عن طريق FOREO www.foreo.com السويد .

التصنيع بواسطة FOREO AB

www.foreo.com