

# FOREO



## IRIS™

MASAŽER ZA BLISTAVO  
PODRUČJE OKO OČIJU

# KORISNIČKI PRIRUČNIK



## PRVI KORACI

Čestitamo Vam na prvom koraku prema mlađem i svježijem izgledu područja oko očiju koji ćete postići korištenjem ovog FOREO uređaja. Prije nego počnete uživati u prednostima sofisticirane tehnologije za njegu kože u udobnosti Vašeg doma, molimo Vas da odvojite nekoliko trenutaka kako biste pročitali ovaj priručnik.

**PAŽNJA:** Koristite ovaj uređaj samo za njegovu namijenjenu upotrebu opisanu u ovom priručniku.

## UPOTREBA VAŠEG IRIS™ UREĐAJA

Potpuna rutina njege traje 1 minutu (30 sekundi za svako oko) i optimalno ju je provoditi dva puta dnevno.

### ZNAČAJKE

- Izmjenična T-Sonic™ tehnologija: jedinstveni tapkajući pokreti nalik masaži očiju tapkanjem vrhovima prstiju. Dva načina rada prilagođena Vašim potrebama:
- Spa način rada: kombinira pokrete tapkanja s nježnim pulsacijama, čime se stvara doživljaj profesionalnog tretmana ljepote. Prikladan za kožu na kojoj su izrazito vidljivi znakovi starenja.
- Pure način rada: nadahnut ručnom masažom očiju, ovaj način rada sastoji se isključivo od pokreta tapkanja koji su jako nježni prema konturi oka. Savršen za kožu koja tek počinje pokazivati znakove starenja.
- 8 stupnjeva jačine za maksimalan osjećaj udobnosti: intenzitet svakoga načina rada može se pojačati ili smanjiti pritiskom na tipke + ili -. Uređaj će zapamtiti Vaše željene postavke do sljedećeg korištenja.
- Potpuno vodootporan: sa zatvorenim utorom za punjenje, jednostavan za čišćenje te se može upotrebljavati u kadi ili pod tušem, prema Vašim željama.
- Ugrađeni mjerač vremena: pulsacije će se nakratko prekinuti svakih 30 sekundi, kako bi naznačile da uređaj trebate premjestiti na drugo oko. Uređaj će nakon 1 minute prekinuti pulsacije tri puta zaredom, a svjetlosni indikator neprekidno će svijetliti, što ukazuje na kraj rutine njege očiju.
- Vaš FOREO uređaj automatski će se isključiti nakon 3 minute upotrebe u bilo kojem načinu rada kako bi se spriječilo nepotrebno trošenje baterije.

### ODABIR NAČINA RADA

1. Jednom pritisnite središnju tipku kako biste upalili IRIS™ uređaj. Kada se uključi, uređaj će biti u Spa načinu rada.
2. Ponovo pritisnite središnju tipku kako biste uključili Pure način rada.
3. Još jednom pritisnite središnju tipku kako biste isključili svoj IRIS™ uređaj.

Intenzitet rada uređaja možete prilagoditi pritiskom na tipke + ili -.

**PAŽNJA:** Kada se izvadi iz pakiranja, IRIS™ uređaj će možda biti zaključan. Možete ga otključati istovremenim pritiskom na tipke + i - u trajanju od 3 sekunde. Zabljesnut će svjetlo koje ukazuje na to da je Vaš uređaj otključan.

## UPOTREBA



Vrhovima prstiju nanosite kremu ili serum za oči koji inače upotrebljavate na područje oko oba oka. Prislonite uređaj na konturu oka, od središnjeg prema vanjskom dijelu, ispod i iznad oka kao i na područje između obrva. Mirno držite uređaj nekoliko trenutaka, a zatim ga pomaknite prema sljedećem području.

Uređaj upotrebljavajte 30 sekundi za jedno oko i zatim 30 sekundi za drugo. Nakon 1 minute postupak je završen.

**UPOZORENJE:** IRIS™ uređaj smije se koristiti samo na području ispod oka te uz čeonu kost uz obrve, a nikako na kopcima ili očnoj jabučici.

## PUNJENJE

- Umetnite punjač u USB utor. Tijekom punjenja LED lampica IRIS™ uređaja neprekidno će bljeskati. Kada se baterija u potpunosti napuni (nakon otprilike 1 sata), svjetlo će prestati bljeskati.
- Kada je baterija pri kraju, LED lampica Vašeg uređaja emitirat će bljeskajuće bijelo svjetlo.

**PAŽNJA:** Nikada nemojte koristiti uređaj ili punjač ako su oštećeni. Pazite da punjač prilikom punjenja bude suh i ne punite uređaj na mjestu gdje bi punjač ili uređaj mogli doći u doticaj s vodom. Koristite isključivo punjač koji ste dobili uz svoj IRIS™ uređaj. Napunite svoj IRIS™ uređaj prije prve upotrebe, ne upotrebljavajte uređaj tijekom punjenja i ne ostavljajte ga da se puni dulje od 24 sata.

## ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I SIGURNOST

Pravilnim održavanjem i čuvanjem možete uvelike produžiti rok trajanja IRIS™ uređaja.

Temeljito očistite IRIS™ uređaj nakon svakog korištenja. Očistite ga tako da njegovu površinu operete vodom i sapunom te zatim isperete toplom vodom. Za optimalne rezultate čišćenja preporučamo upotrebu FOREO silikonskog spreja za čišćenje i ispiranje toplom vodom. Obrišite uređaj ručnikom ili krpom. Nikada ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, benzin ili aceton jer bi mogli iritirati kožu.

Izbjegavajte upotrebu seruma i krema na bazi gline ili silikona pri korištenju FOREO uređaja.

Ne ostavljajte svoj IRIS™ uređaj na izravnom svjetlu i nikada ga ne izlažite ekstremnoj vrućini ili kipućoj vodi. Iz higijenskih razloga ne preporučamo da IRIS™ uređaj koristi više osoba.

Upotreba IRIS™ uređaja trebala bi biti ugodna. Ako osjetite bilo kakvu neugodu, odmah prekinite upotrebu i posavjetujte se s liječnikom. Preporučamo da ne koristite uređaj, bez obzira na način rada, dulje od tri minute. Ako imate problema s kožom, posavjetujte se s dermatologom prije početka korištenja uređaja. Budite posebno oprezni prilikom čišćenja područja oko očiju i ne dovodite uređaj u direktni kontakt s okom ili očnim kapkom.

**PAŽNJA:** Strogi nadzor je neophodan ako uređaj koriste djeca ili ako se koristi u njihovoj blizini.

## UKLANJANJE PROBLEMA

LED svjetlo ne bljeska kada je uređaj priključen na punjač?

- Baterija je u potpunosti napunjena i moguće je obaviti do 50 rutina njege.
- Baterija je u potpunosti prazna i potrebno je nekoliko minuta da LED indikator počne svijetliti.
- Punjač nije ispravno povezan s uređajem. Provjerite utičnicu i utor za punjenje.

IRIS™ ne počinje s radom nakon pritiska središnje tipke?

- Baterija je prazna. Napunite svoj IRIS™ uređaj.
- Sučelje je zaključano. Otključajte ga istodobnim pritiskom na + i - tipku.

IRIS™ uređaj se ne može isključiti i/ili tipke na uređaju ne reagiraju na pritisak?

- Mikroprocesor privremeno neispravno radi. Povežite uređaj s punjačem kako biste uklonili grešku u radu.

Silikonske površine uređaja su se oštetile i postale ljepljive i (ili) imaju mjehuriće?

- Prekinite upotrebu. Silikon je izuzetno izdržljiv i dugotrajan materijal, ali u nekim slučajevima može doći do oštećenja – pročitajte odlomak Čišćenje, održavanje i sigurnost u ovom priručniku kako biste spriječili oštećenje silikona.

Ako primijetite bilo kakve druge probleme s Vašim IRIS™ uređajem, ili ako imate dodatnih pitanja povezanih s radom uređaja, molimo posjetite odjeljak Briga za potrošače na [www.foreo.com](http://www.foreo.com) i ispunite ponuđeni formular.

## UVJETI JAMSTVA

### REGISTRACIJA JAMSTVA

Kako biste registrirali svoje 2-godišnje ograničeno jamstvo na uređaj i 10-godišnju garanciju na kvalitetu, registrirajte broj koji se nalazi na Vašoj Foreo autentifikacijskoj kartici putem web stranice [www.foreo.com](http://www.foreo.com), izbornik Jamstvo i povrati pod odjeljkom Briga za korisnike.

### 2-GODIŠNJE OGRANIČENO JAMSTVO

FOREO jamči za ovaj uređaj u razdoblju od DVIJE (2) GODINE od datuma kupnje, za sve nedostatke uzrokovane pogrešnom izradom ili materijalima, a koji se javljaju prilikom normalnog korištenja uređaja. Jamstvo obuhvaća sve dijelove uređaja koji utječu na funkciju njegovog ispravnog rada. Jamstvo NE POKRIVA estetske nedostatke uzrokovane trošenjem uređaja, kao ni štete nastale uslijed nezgode, pogrešnog rukovanja i nemara. Svaki pokušaj otvaranja ili rastavljanja uređaja (ili njegovih dodataka) poništiti će ovo jamstvo.

Ako otkrijete grešku ili kvar i o njemu obavijestite FOREO tijekom jamstvenog razdoblja, FOREO će Vam o svom trošku besplatno zamijeniti uređaj. Prigovori koji se odnose na jamstvo moraju biti potkrijepljeni utemeljenim dokazima da je datum prigovora u okviru jamstvenog razdoblja. Kako biste ostvarili jamstvo, molimo Vas da čuvate originalni račun zajedno s jamstvenim listom tijekom razdoblja jamstva.

Ovo 2-godišnje ograničeno jamstvo je isključivo svim drugim jamstvima, bilo usmenim ili pisanim, izravnim ili neizravnim. Ne postoje druga neizravna jamstva za proizvodnju prodaju ili upotrebu uređaja.

Da biste ostvarili svoje jamstvo, registrirajte se i prijavite na svoj račun na [www.foreo.com](http://www.foreo.com), a zatim odaberite opciju za ostvarivanje jamstvenog prava. Dobit ćete svoj broj za autorizaciju povrata robe (RMA - Return Merchandise Authorization), koji treba biti dostavljen zajedno s pokvarenim uređajem u najbliži FOREO ured. Troškovi dostave se ne refundiraju. Ova obveza je propisana zakonskim pravom potrošača i ne utječe na ta prava na bilo koji način.


### 10-GODIŠNJA GARANCIJA NA KVALITETU

Kao dodatak na 2-godišnje ograničeno jamstvo na proizvod, FOREO 10-godišnja garancija na kvalitetu daje vlasnicima uređaja priliku da kupe novi uređaj putem [www.foreo.com](http://www.foreo.com) po 50% nižoj cijeni.

Za detaljne uvjete, molimo Vas posjetite izbornik Briga za korisnike na web stanici [www.foreo.com](http://www.foreo.com)

### INFORMACIJE O ODLAGANJU

Zbrinjavanje stare elektroničke opreme (prema propisima Europske unije i ostalih europskih zemalja sa sustavima odvojenog prikupljanja otpada). Precrtani simbol kante za otpad ukazuje na to da se ovaj uređaj ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom, već da ga je potrebno odložiti na pripadajuće mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme.

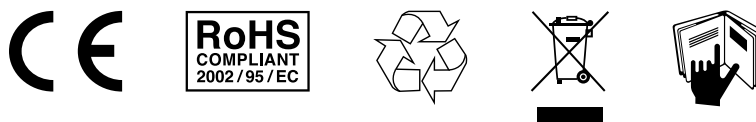

### SPECIFIKACIJE

MATERIJAL:	Silikon
BOJA:	Magenta, Petal Pink, Mint
DIMENZIJE:	39.3 x 31.7 x 120.4 mm
TEŽINA:	70 g
BATERIJA:	Li-Ion 200 mAh 3.7 V
KORIŠTENJE:	do 50 korištenja
STANJE MIROVANJA:	90 dana
FREKVENCIJA:	120 Hz
MAKS. RAZINA BUKE:	50 dB
SUČELJE:	3 tipke

Izjava o odricanju od odgovornosti: Uređaj koristite na vlastitu odgovornost. Niti FOREO, niti maloprodajni kanali ne preuzimaju nikakvu odgovornost i obavezu za bilo kakve ozljede ili štetu, tjelesne ili druge vrste, uzrokovane izravno ili neizravno korištenjem ovog uređaja.

Model se može mijenjati i unaprjeđivati bez prethodne najave.

©2016 FOREO AB. SVA PRAVA PRIDRŽANA

UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA EU: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, ŠVEDSKA

UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SAD: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, SAD

DIZAJNIRA I RAZVIJA FOREO ŠVEDSKA

[www.foreo.com](http://www.foreo.com)