


FOREO



ISSA™ 2

**IL 1° SPAZZOLINO
ELETTRICO IN SILICONE
DEL MONDO**

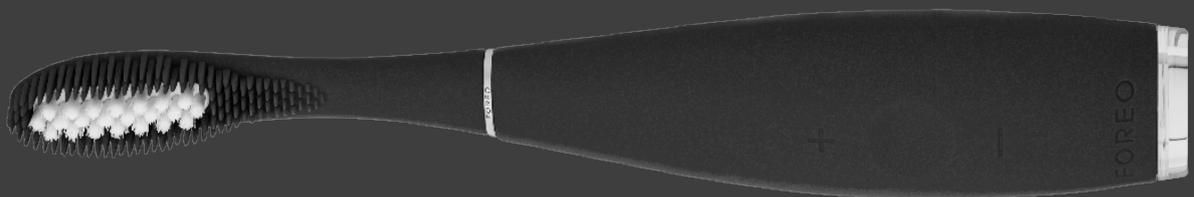

MANUALE COMPLETO



INTRODUZIONE

Congratulazioni! Acquistando il dispositivo ISSA 2, hai fatto il primo passo verso un sorriso più bianco e sano. Prima di iniziare a scoprire i benefici di una sofisticata tecnologia dentale nel comfort di casa tua, ti preghiamo di leggere questo manuale.

USO PREVISTO: per uso in casa, per promuovere l'igiene orale completa con la pulizia dei tuoi denti e gengive.

Ti preghiamo di **LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO** e di utilizzare questo prodotto solo per l'uso previsto e descritto in questo manuale.


⚠ **ATTENZIONE:** non è permessa alcuna modifica di questo dispositivo.

INTRODUZIONE AD ISSA 2

ISSA 2 combina la tecnologia rivoluzionaria e potenza duratura per offrirti una spazzolatura diversa da qualsiasi altra. Con un silicone medico ultra igienico e polimeri PBT, l'unica testina ibrida e le pulsazioni T-Sonic operano insieme a rimuovere la placca e massaggiare delicatamente le gengive con 16 velocità regolabili e con doppia potenza. Con la durata estesa della batteria, un'ora di USB carica per l'utilizzo fino a 365 giorni, offrendo una pulizia completa ogni giorno dell'anno.

CONOSCI IL TUO ISSA 2

NOTE: ISSA 2 potrebbe essere bloccato quando tolto dalla confezione; sbloccalo premendo contemporaneamente i tasti + e -. La luce si illuminerà ad indicare che il tuo ISSA 2 è stato sbloccato.

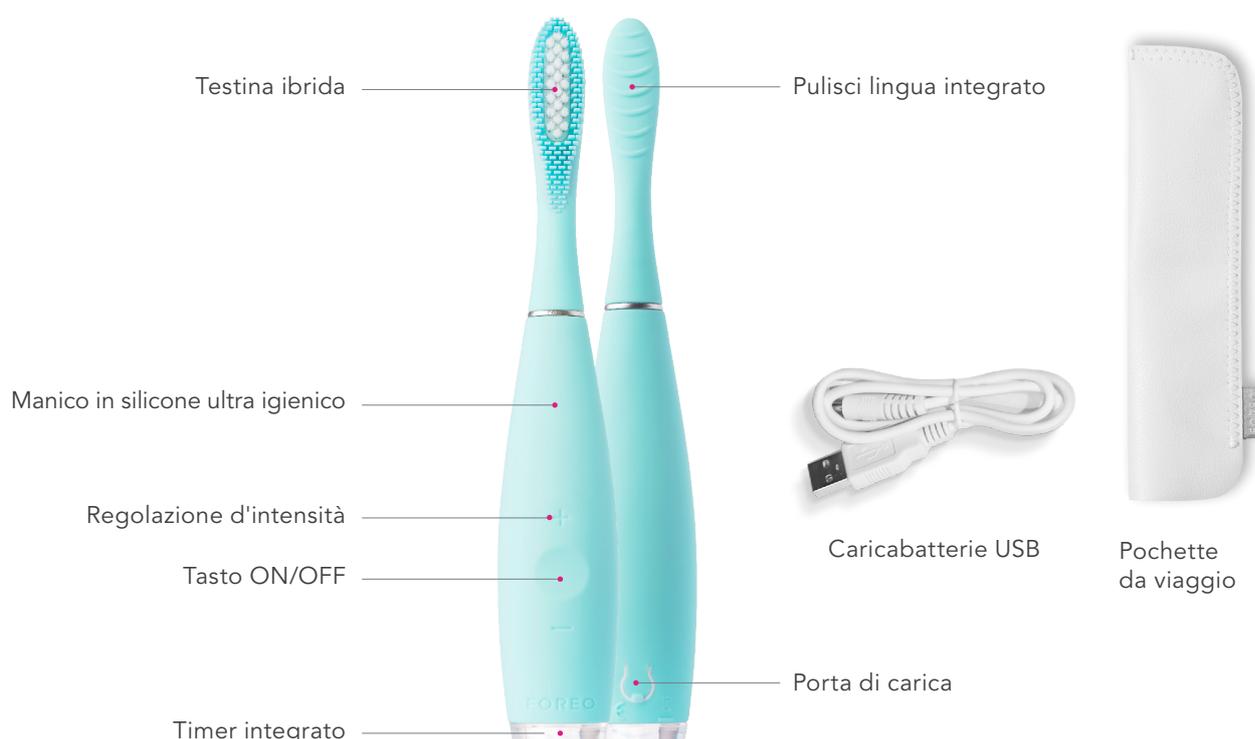

CARATTERISTICHE

TASTO ON/OFF:

- Premi una volta per attivazione, una volta per disattivazione
- ISSA 2 si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti per evitare un utilizzo eccessivo.

Regolazioni d' intensità:

- Puoi sbloccare o bloccare il dispositivo premendo simultaneamente i tasti + e - .
- 16 intensità per un maggiore comfort: puoi aumentare o diminuire l'intensità delle pulsazioni mediante i bottoni + e -
- Il dispositivo memorizzerà la velocità scelta

La testina ibrida - le setole in silicone e PBT in polimero offrono una pulizia vigorosa sulla placca, ma delicata sulle gengive

Manico in silicone ultra igienico - non poroso per prevenire la formazione batterica

Timer integrato - indica quando cambiare il quadrante della bocca e quando caricare il dispositivo

Connettore di ricarica - 100% impermeabile che ne permette l'utilizzo sotto la doccia

Caricabatterie USB - Carichi in qualsiasi momento e luogo con USB cavo

Pochette da viaggio - Guaina di protezione mantiene il tuo ISSA 2 pulito mentre viaggi

COME USARE IL TUO ISSA 2

Non cambiare la tua routine di spazzolatura, ma solo il tuo spazzolino!



1. Applica il dentifricio - Usa la quantità consigliata del tuo dentifricio preferito. Per i risultati migliori, consigliamo di usare il dentifricio naturale Smile-perfecting di FOREO.



2. Spazzola - Premi il tasto centrale per attivare il tuo ISSA 2 e utilizza i tasti + e - per regolare l'intensità di ISSA 2. Spazzola i tuoi denti con movimenti circolari e con pressione leggera per 2 minuti. ISSA 2 ti indicherà quando spazzolare un altro quadrante della bocca per 30 secondi.



3. Sciacqua - Spegni il tuo dispositivo premendo il tasto centrale. Sciacqua la tua bocca e pulisci il tuo ISSA 2 con acqua. Ripeti due volte al giorno per un sorriso fresco e luminoso!


4. Pulisci lingua (Accessorio facoltativo) - Per l'igiene orale completa sostituisci la tua testina con il pulisci lingua ed effettua movimenti verticali per strofinare delicatamente la lingua.

ATTENZIONE: Se dovessi sperimentare qualunque tipo di fastidio durante l'utilizzo del tuo dispositivo FOREO, smetti immediatamente e consulta il tuo medico. Se la testina dovesse presentare tracce di sangue, ti invitiamo a lavarla con acqua tiepida e sapone.

PULIRE IL TUO ISSA 2

Pulisci il tuo dispositivo dopo ogni utilizzo lavando la testina con acqua tiepida e passando le dita tra le setole. Raccomandiamo di utilizzare lo spray per la pulizia del silicone FOREO e risciacquare con acqua tiepida per l'igiene ottimale del dispositivo. Lascia che il tuo dispositivo si asciughi. Sconsigliamo di utilizzare custodie con igienizzatore UV con ISSA 2.

NOTE: Non usare mai prodotti detergenti contenenti alcool, benzina o acetone. Evita di utilizzare dentifrici contenenti candeggina con il tuo dispositivo.

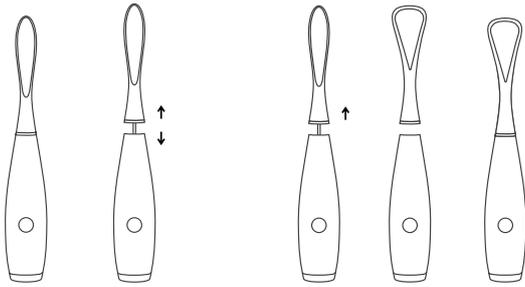

SOSTITUZIONE DELLA TUA TESTINA DI ISSA 2

Tutte le testine ISSA sono compatibili con la gamma ISSA 2.

Per cambiare la testina, assicurati che ISSA 2 è disattivato e solleva la testina verso l'alto per staccarla. Estrai la testina da sostituire con un movimento verso l'alto quindi inserisci la nuova testina ed assicurati che il divario tra la testina ed il manico sia nullo.

Per la maggior efficacia, consigliamo di cambiare la tua testina di ISSA 2 ogni 6 mesi. Ogni testina sensitive e pulisci lingua durano un anno intero.

Puoi acquistare la tua testina di ricambio su www.foreo.com o contattando il rivenditore autorizzato di FOREO più vicino.

CARICARE IL TUO ISSA 2

Quando la batteria starà per scaricarsi l'indicatore andrà ad intermittenza, devi ricaricare il tuo dispositivo. Collega il cavo su una porta USB per un'ora. Quando la batteria sarà carica, l'indicatore emetterà una luce costante.

ATTENZIONE: Prima della carica, assicurati che sulla presa non ci siano residui di acqua o sapone. **NON** usare il tuo dispositivo FOREO durante la carica e **NON** caricarlo per più di 24 ore. Utilizza sempre il cavo USB di FOREO.

IMPORTANTE

PER UNA MAGGIORE SICUREZZA:

- Se soffri di particolari patologie, consulta il tuo medico prima di utilizzare ISSA 2
- Se sei sottoposto a cure orali, consulta il tuo dentista prima di utilizzare ISSA 2
- Se dovessi notare qualunque tipo di fastidio durante l'utilizzo del tuo dispositivo FOREO, smetti immediatamente e consulta il tuo medico.
- Evita di esporre il tuo dispositivo alla luce diretta del sole, a temperature elevate o di immergerlo in acqua bollente.
- Questo dispositivo non è adatto a bambini sotto i 5 anni. Si raccomanda la supervisione di un adulto qualora il dispositivo sia utilizzato da o su dei bambini. Si raccomanda inoltre di fornire ai bambini le istruzioni per un corretto utilizzo e di monitorarli costantemente in caso di ridotte capacità fisiche o psichiche.
- Non fare giocare mai i bambini con il dispositivo.
- Smetti di utilizzare il dispositivo qualora dovesse presentare qualsiasi tipo di danno (testina, manico, caricabatterie).
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, questo apparecchio deve essere collegato con un conduttore di corrente isolato e protetto.
- Non usare mai il dispositivo o il caricabatterie qualora dovessero funzionare in modo anomalo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Precauzioni da prendere in caso di funzionamento anomalo di ISSA 2:

ISSA 2 non si accende dopo aver premuto il tasto centrale?

- La batteria è scarica. Ricarica il tuo ISSA 2.
- L'interfaccia è bloccata. Sblocca premendo contemporaneamente i tasti + e -.

ISSA 2 non si spegne e/o tasti non rispondono?

- Il microprocessore potrebbe essere momentaneamente bloccato. Collega il caricabatterie per resettare e ripristinare il funzionamento.

ISSA 2 non lampeggia quando il caricabatterie è connesso?

- La batteria è carica, pronta ad offrire fino a 365 routine di pulizia.
- La batteria è completamente scarica e necessita di alcuni minuti prima di riconoscere lo stato di ricarica.
- Il cavo di ricarica non è collegato correttamente. Controlla il collegamento e che la porta USB fornisca energia.

ISSA 2 è caduto in acqua e il connettore di carica si è bagnato?

- Asciuga e continua l'utilizzo. ISSA è completamente impermeabile e il connettore di carica è ben isolato.

Nel caso in cui non dovessi trovare la soluzione al tuo problema o avessi qualsiasi domanda riguardo il funzionamento del tuo dispositivo, ti preghiamo di visitare la sezione 'Assistenza Clienti' su www.foreo.com e compilare il modulo Help Desk..

TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA

REGISTRAZIONE GARANZIA

Per attivare la garanzia limitata di 2 anni, registra il numero presente sul tesserino di autenticità FOREO su www.foreo.com, nella sezione Garanzia e Resi presente sotto la voce Assistenza Clienti.

GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI

FOREO garantisce questo dispositivo per un periodo di DUE (2) ANNI dalla data d'acquisto contro difetti di manifattura o difetti nei materiali derivanti da un normale utilizzo. La garanzia copre i componenti da cui dipende il funzionamento del dispositivo, mentre non copre il deterioramento causato da usura, incidenti, abuso o trascuratezza. Ogni tentativo di disassemblare il dispositivo (o le sue parti), renderà la garanzia invalida.

Se il reclamo viene fatto entro il periodo di garanzia, FOREO, a propria discrezione, sostituirà il dispositivo gratuitamente. La richiesta di servizio di garanzia deve essere supportata da prove sufficienti a dimostrare che la richiesta avviene durante il periodo di garanzia. Per convalidare la garanzia si prega di conservare lo scontrino insieme a queste condizioni di garanzia per tutta la durata del periodo.

Per usufruire della garanzia, effettua l'accesso al tuo account su www.foreo.com e seleziona l'opzione per far valere la garanzia. La spesa di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno è in aggiunta ai diritti legali dei consumatori e non pregiudica tali diritti in alcun modo.

*La garanzia limitata di 2 anni non è applicabile alle testine di ricambio.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile in Unione Europea e in altri paesi Europei con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti).

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che questo apparecchio non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere depositato nell'apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento corretto di questo prodotto aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.


Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, si consiglia di contattare il locale servizio di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.



RIMOZIONE DELLA BATTERIA

NOTE: Questo processo è irreversibile. L'apertura del dispositivo invaliderà la garanzia. Questa azione deve essere effettuata solo quando il dispositivo dovrà essere smaltito.

Il dispositivo contiene una batteria al litio, essa deve essere rimossa prima dello smaltimento e non deve essere cestinata insieme ai rifiuti domestici. Per rimuovere la batteria: stacca la testina, elimina via la copertura in silicone dal manico, apri il guscio di plastica e rimuovi la batteria. Smaltisci la batteria in accordo alle normative ambientali locali. Per sicurezza, indossa dei guanti durante questo processo. Di seguito informazioni dettagliate sul processo di rimozione:

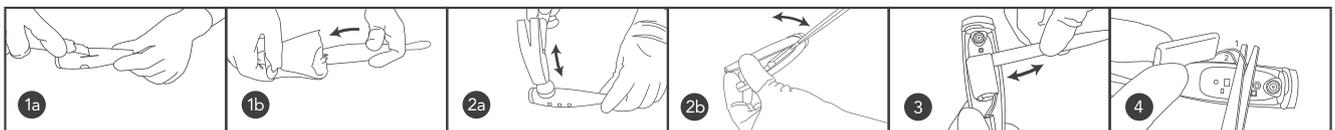

SPECIFICHE

MATERIALI:	Silicone medico + PBT in polimero
COLORI:	Pearl Pink/Mint/ Cobalt Blue/Cool Black
DIMENSIONI:	195 x 32.4 x 115 mm
PESO:	77g
BATTERIA:	Li-Ion 1000mA 3.7V
AUTONOMIA:	Fino a 365 giorni
STANDBY:	180 giorni
FREQUENZA:	166 Hz
INTERFACCIA:	3 tasti
PULSAZIONI/MIN:	Fino a 11,000

DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ:

Gli utenti utilizzano questo dispositivo a proprio rischio. Né FOREO né i suoi rivenditori si assumono alcun tipo di responsabilità riguardo problemi, ferite o danni fisici dovuti all'utilizzo diretto o indiretto del dispositivo. Inoltre, FOREO si riserva il diritto di rivedere la presente pubblicazione e di apportare cambiamenti e revisioni senza obbligo di notifica.

Il modello può subire cambiamenti o miglioramenti senza notifica.

CONDIZIONI AMBIENTALI PER L'USO:

Temperatura:	da 5° a 40° gradi di Celsius
Umidità:	da 40% a 80%
Pressione atmosferica:	da 800 a 1,060 hPa

CONDIZIONI AMBIENTALI PER STOCCAGGIO E SPEDIZIONI:

Temperatura:	da -10° a 50° gradi Celsius
Humidity:	Umidità: da 30% a 80%
Atmospheric Pressure:	Pressione atmosferica: da 500 a 1.060 hPa

©2017/2018 FOREO AB. TUTTI I DIRITTI RISERVATI
DISTRIBUITO IN EUROPA DA: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.
DISTRIBUITO NEGLI U.S.A. DA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
DISTRIBUITO NEGLI AUS DA: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.
PROGETTATO E SVILUPPATO DA FOREO SWEDEN.
FABBRICATO PER FOREO AB.

WWW.FOREO.COM