


FOREO



ISSA™ mikro

輕觸米可 綻放每一次歡笑

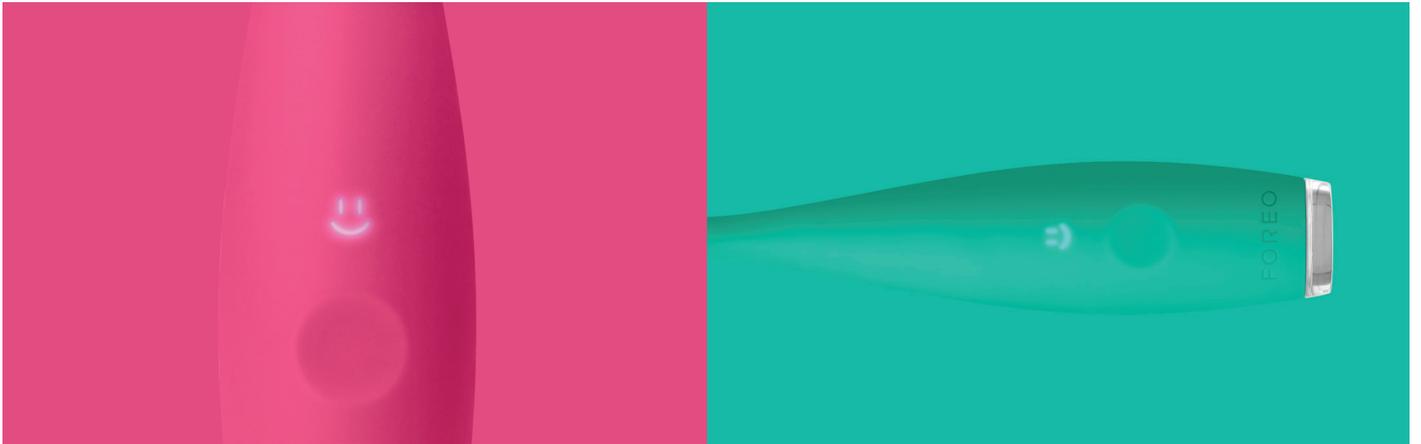



完整版使用說明書

開始使用

恭喜您購買到ISSA™米可嬰幼兒訓練式電動牙刷，成功邁出確保嬰幼兒口腔健康的第一步。前沿科技為您和寶寶帶來諸多好處，請您為嬰幼兒開始使用之前，仔細閱讀本說明書。

使用前請閱讀所有指南並僅按照本說明書中的指定用途使用本產品。

免責聲明

長時間不正當使用劇烈咀嚼可對牙刷矽膠造成損傷。建議嬰兒和幼兒在家長或成年人監督下使用。如果您發現該矽膠損壞，請立即停止使用並做丟棄處理。如果您懷疑您的孩子已經吞下了ISSA™米可的任何部位，請立即聯繫醫務人員。

⚠ 警告：請勿對產品進行任何改裝。

ISSA™米可簡介

首個專為0-5歲嬰幼兒打造的電動矽膠牙刷，ISSA™米可使用和ISSA™逸薩系列相同的創新技術。有效且溫和，ISSA™米可不僅能溫和按摩牙齦，減緩乳齒萌芽過程中產生的刺癢脹痛感。並溫和瓦解牙菌斑，清潔口腔祛除牙垢。

ISSA™米可使用方式和一般手動牙刷一樣，為達到最佳效果建議每日使用兩次，每次使用兩分鐘。

口腔護理效益：

長出第一顆牙之前

- 有效減少口腔內細菌數量，清除食物殘留
- 減緩乳齒萌芽期的脹痛感
- 養成良好的口腔護理習慣，讓幼兒在長出第一顆牙之前熟悉持續的刷牙過程

長出第一顆牙之後

- 排布科學的柔軟刷毛包裹牙齒，有效清潔整個口腔。
- 溫和按摩牙齦，舒緩恆牙替換時的牙齦不適感。

SONIC 聲波脈動科技

每分鐘高達6,000 次精細脈動：

- 針對嬰幼兒的精細微波脈動溫和瓦解牙菌斑，祛除牙垢。
- 溫和按摩牙齦，令牙齦更強健
- 柔和按摩嬰幼兒的牙齒與牙齦，減緩乳齒萌芽及恆牙替換時的牙齦刺癢感。

2種不一樣的口腔護理模式:

- 刷牙模式 —— 溫和清潔牙齒
- 舒緩模式 —— 按摩和舒緩牙齦

矽膠材質

- 柔軟、溫和，觸感細膩。
- 不對牙齦組織及牙釉質造成傷害。
- 不具滲透性，可快速乾燥，有效抑制細菌滋生
- 較傳統尼龍刷毛衛生至少10000*倍
- 使用週期長，無需替換刷頭。

* 臨床檢測報告存檔

貼心設計

- 符合人體工學 - 防滑手柄，嬰幼兒輕鬆抓握，圓潤刷頭可安心使用。矽膠細長刷毛輕鬆清潔牙齒。
- 1小時USB充電可使用480次
- 安靜震動模式可防止嬰幼兒焦慮

安全性佳

- 不含雙酚A和酞酸鹽
- 牙刷一體成型，無替換零部件。
- 100%全身防水

使用ISSA™米可

可能性使用：提倡注重嬰幼兒牙齒和牙齦的口腔清潔護理

ISSA™米可特色

- 100%全身防水設計，洗澡時也可放心使用。
- 內置計時器：每30秒停止震動提醒使用者清潔口腔的下一個四分之一區域，結束2分鐘清潔後，ISSA™米可會連續震動3次，表示刷牙程式結束
- ISSA™米可在使用3分鐘後會自動關閉，防止過度清潔。
- 笑容助手：2分鐘刷牙結束後“喜悅”（笑臉）將出現。如果孩子12小時內沒有刷牙，“悲傷”（哭臉）就會亮起；如果2分鐘刷牙過程未完成，則“喜悅”（笑臉）和“悲傷”（哭臉）都會亮起

刷牙過程

我們建議使用ISSA™米可刷牙2分鐘以達到最佳效果:



1. 按一次中央鍵開啟刷牙模式，再按一次開啟按摩模式。



2. 教導嬰幼兒採用與手動牙刷一樣的刷牙方法，轉大圈清潔牙齒並按摩牙齦，時間為2分鐘。



3. 第三次按下中央鍵關閉產品。
4. 用溫水沖洗牙刷，放置晾乾即可。

*根據兒童年齡選擇一款嬰幼兒配方的舒緩啫喱或牙膏，使用量聽取牙醫建議。

注意：如嬰幼同使用FOREO產品感到不適，請立即停止使用並請諮詢醫生。如發現刷頭有血跡請用清水或FOREO矽膠清潔液清洗。

清洗ISSA™米可

每次使用完產品後，用溫水清洗可用手指頭清潔刷頭。讓產品自然風乾即可。可將產品放置於紫外線消毒器裡，但有可能影響產品矽膠退色。

可將ISSA™米可放置洗碗機裡使用溫度不得高於80°C，時間在1小時清洗和30分鐘烘乾，或者使用嬰兒奶瓶消毒器最高溫度設置在100°C不超過20分鐘。

注意：切勿使用清潔含有酒精，汽油或丙酮的產品。避免在產品上使用含有漂白成分的牙膏。

充電

ISSA™米可嬰幼兒訓練式電動牙刷可以通過其內置USB插口充電。充電時間為1小時，充滿一次電後，至多可以使用達480次。

充電條件為5伏，400毫安培時，1.55瓦額定輸出功率時，充電時間為1小時。充電時，指示燈不斷閃爍，電池充滿後，指示燈發出穩定的光。電充滿時可移除USB充電線。

電池電量低時，指示燈開始不斷閃爍。電池沒電時，產品馬達會完全停止。在此可正常充電產品。

注意：ISSA™米可嬰幼兒訓練式電動牙刷電池壽命為5年。

警告：充電前，請確保充電插槽和充電器乾燥無水並且無殘留清潔劑。請勿在充電時使用本產品，充電時間請勿超過24小時。請僅使用配套充電器。

重要資訊

保證安全:

- 兒童使用、給兒童使用或距離兒童較近時請密切監督使用。兒童或者身體或智力殘障的人士需要在監護人的監督和指導下使用。請勿將產品給兒童作為玩具玩耍。
- 如果您有任何醫學顧慮，請在使用前諮詢醫師。
- 如果您的孩子正在接受任何口腔治療，請在使用前諮詢您的牙科專業人士。
- 如果您的孩子在使用時有任何不適，請立即停止使用並諮詢醫師。
- 請避免將本產品在陽光下直曬或暴露在高溫或沸水環境中。
- 如果產品出現任何損壞（牙刷頭，手柄，充電器），請立即停止使用。
- 為了避免觸電的危險，本設備只能連接到帶有保護接地的供電電源。
- 如產品或充電器損壞，請勿使用。只限使用FOREO附帶充電器。

故障排除

產品在無法正常使用的情況下可採取的應變措施。

按下中間鍵後ISSA™米可沒有開啟？

- 電池無電。請給ISSA™米可充電。

ISSA™米可無法關機或者介面按鍵沒有反應？

- 微處理器出現短暫性功能故障。請連接充電線使功能恢復正常。

連接上充電器後ISSA™米可LED燈不閃爍？

- 電池已經充滿，可供使用至多達480次。
- 電池完全無電，需要幾分鐘才可識別充電器。
- 充電器沒有連接好。檢查插座和充電插口。

常見問題解答

ISSA™米可掉入水裡，充電口進水了嗎？

- 風乾後可繼續正常使用。ISSA™米可全身防水，充電口是完全密封的。

SONIC聲波脈動技術（震動）對嬰幼童是否安全？

- FOREO聲波脈動技術對嬰幼童是絕對安全且對牙齒和牙齦溫和。

嬰兒可以啃咬ISSA™米可嗎？

- ISSA™米可是專為刷牙和按摩牙齦所設計，並非用作為咀嚼玩具。ISSA™米可應該在家长或成年人監督下使用。劇烈咀嚼可能導致硅膠刷頭和刷毛的損壞。

幼兒可以獨自使用ISSA™米可嗎？

- 嬰幼兒建議在家長/成人陪同監督下使用。ISSA™米可符合人體工學設計,安全輕便適合兒童獨自使用。

ISSA™米可是如何運作？

- 透過聲波脈動震動穿過柔軟和彈性矽膠刷毛，ISSA™米可有效地清潔牙齒，同時提供舒適溫和的牙齦按摩促使牙齦健康。

多久需要更換ISSA™米可？

- 產品破裂或破損時替換產品。

ISSA™米可的使用壽命是多久？

- ISSA™米可有兩年質保期限，如產品在兩年內損壞，FOREO會為您免費更換新的產品。劇烈使用本產品會產生明顯使用痕跡。如嬰幼童在無監督使用情況下咀嚼產品細膠，請立即停止使用並做廢棄物處理。

使用期間如果牙刷矽膠損壞時該如何處理？

- ISSA™米可使用安全耐用的醫療級矽膠材質。並且經過檢測認證誤食此矽膠對身體不會造成傷害。假設您發現ISSA™米可損壞或懷疑嬰幼童吞食矽膠，請立即聯繫醫務人員。

如果兒童患有口腔潰瘍、蛀牙、牙齦疾病或其他口腔問題，是否可以使用逸薩產品？

- 我們建議患有嚴重口腔問題的客戶在使用逸薩產品前諮詢專業牙醫。

如果您在本版塊未找到合適的答案，或使用ISSA™時有任何問題，或對操作有任何疑問，請訪問www.foreo.com客戶服務部分並填寫說明表格。

質保條款和條件

註冊質保

啟動2年質保和10年品質保證，請首先登陸www.foreo.com網站，然後在客戶服務下的保修和退換貨部分註冊FOREO真品保證卡上的質保號碼。

兩年質保

FOREO產品的質保時間為自購買之日起兩(2)年，任何因產品製造或材料缺陷引起的品質問題均屬於質保範圍。質保範圍包括影響產品功能的零部件品質問題，但不包括由於長期使用造成的外觀磨損或由於錯誤操作、疏忽或意外造成的磨損或損壞。任何嘗試打開或分解產品(或其附屬配件)造成的損壞也不在質保範圍。

如果您有任何此類品質問題並在質保期內通知FOREO，FOREO將免費為您更換產品。質保索賠需要提供產品尚在質保期內的合理憑證。為了讓您的產品質保有效，請在質保期內妥善保存原始購買發票。

2年質保不包括任何其他口頭或書面的明示或暗示擔保。產品的製作、銷售或使用不產生任何暗示的擔保。


若需申請質保，請先登錄www.foreo.com網站上的帳戶，然後選擇品質索賠。隨後您會收到一份退貨授權碼，請將之與FOREO產品一起寄送到距您最近的FOREO辦公室。運費需要您自行支付。這樣做是對消費者法律權利的補充，並不影響消費者任何權益。

十年品質保證

作為FOREO兩年免費質保的延續，顧客在十（10）年品質保證期間發現產品生產缺陷後，可在www.foreo.com上以標價50%的價格購買一件新產品。

廢棄處理方法

廢舊電子設備的廢棄處理方法（在歐盟或其他具有垃圾分類處理系統的歐洲國家適用）。垃圾桶上畫叉的圖案表示產品不能按照家庭垃圾處理，而應該送入合適的電氣和電子設備回收收集站處理。

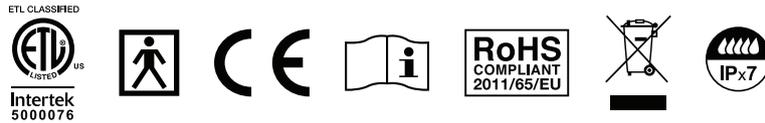


歐盟醫療指令93/42/EEC，符合ANSI/AAMI標準，ES60601-1和CAN/CSA標準，C22.2第60601-1標準。符合有害物質限制，震動保護類型BF。使用前☑看使用說明。電器和電子設備不得與生活垃圾一起處理。IPX評級——防水，可完全浸入1米水深中。經過ISO10993-和ISO7405-認證。

拆除電池

注意：該過程是不可逆的。打開設備將失去保修權。該動作只能在準備好丟棄產品時進行。

因為本產品包含一個鋰離子電池，所以丟棄前必須拆除電池，且不能按照生活垃圾處理。拆除電池時，首先拉開刷頭剝離☑膠外殼，打開塑膠殼並取出電池，按照當地的環保處置規定丟棄電池。在此過程中為保障您的安全，請配戴手套。下面提供了詳細的圖片說明：

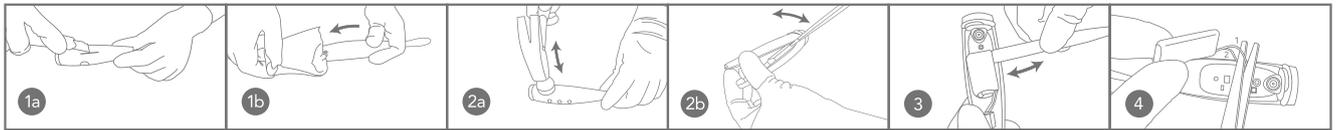

規格

材質：	☑膠+ABS塑膠
尺寸：	148毫米x 32毫米 x 25毫米
重量：	53.4克
電池：	420毫安培時
使用次數：	480次
待機時間：	180天
頻率：	166赫茲
噪音水準：	最高50分貝
介面：	一鍵式

工作模式：持續操作
目標使用者：0-5歲
建議使用地點：家用或酒店

使用環境條件：
溫度：5 -40
濕度：40%-80%
大氣壓：800-1060 hPa

存儲和運輸環境條件：
溫度：-10 -40
濕度：30%-80%
大氣壓：500-1060 hPa

免責聲明：
產品使用者自擔風險。FOREO和零售商對因使用產品直接或間接造成的任何身體或非身體的傷害或損害不承擔任何責任和義務。此外，FOREO保留修改本說明並隨時更改內容的權利，且沒有義務將這些修改或改變通知任何個人。

產品模型可能會因改進而有變化，恕不另行通知。

©2016 FOREO AB 版權所有。
歐洲進口商和經銷商：FOREO AB 地址：KARLÄVAGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN
美國進口商和經銷商：FOREO INC., 地址：1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA
澳洲進口商和經銷商：6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA
為FOREO AB生產，由FOREO 瑞典設計研發。

WWW.FOREO.COM