

# FOREO



UFO™ mini

LED-THERMOAKTIVIERENDE  
SMART-MASKE

# VOLLSTÄNDIGE BEDIENUNGSANLEITUNG



## ERSTE SCHRITTE

Herzlichen Glückwunsch zum ersten Schritt in Richtung makelloser Haut, durch den Erwerb dieses UFO mini Geräts. Bevor Sie beginnen, all die Vorteile unsere anspruchsvollen Hautpflege-Technologie zuhause zugeießen, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit für diese Anleitung.

Bitte LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH und verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

⚠️ WARNUNG: EINE VERÄNDERUNG DIESES GERÄTS IST NICHT ERLAUBT.


## UFO MINI IM ÜBERBLICK

Elegant, einfach und entwickelt für eine intelligentere Maskenbehandlung, bietet Ihnen UFO mini eine komplette Gesichtsbehandlung für zu Hause oder unterwegs. Dieses einzigartige Gerät beinhaltet LED Licht-Therapie und eine ergänzende Thermo-Therapie. Zusammen mit den T-Sonic Pulsationen transportiert sie so die Maskenessenz tief in die Haut - für ein strahlendes Hautbild in nur 90 Sekunden.


## LERNEN SIE IHRE UFO mini KENNEN




UFO-AKTIVIERENDE  
MASKE  
Exclusive für die UFO  
Technologie

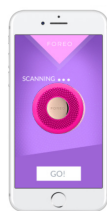

FOREO APP  
Sinkronisiert alle  
vorprogrammierten  
Maskenbehandlungen  
automatisch mit der UFO mini

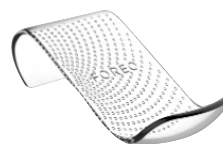

HALTERUNG  
Schützt und hält Ihre UFO  
mini an Ort und Platz,  
während sie schneller und  
einfacher trocknen kann

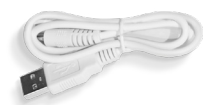

USB-KABEL  
Laden Sie jederzeit und  
überall

## VERWENDUNG DER UFO mini

- 1 Laden Sie die FOREO App herunter.
- 2 Drücken Sie auf den Knopf, um UFO mini einzuschalten.
- 3 Scannieren Sie den Strichcode in der App und befolgen Sie die Anweisungen.



FOREO APP hier herunterladen



Entfernen Sie den Befestigungsring von der UFO mini.



Nehmen Sie die UFO-aktivierende Maske aus der Verpackung.



Sichern Sie die Maske am Gerät, indem Sie sie mit dem Befestigungsring befestigen, mit dem FOREO-Logo nach oben.




Genießen Sie Ihre intelligente Maskenbehandlung.

## NEUE MASKE EINFÜGEN

Make My Day und Call It a Night sind vorprogrammiert in Ihrem Gerät. Andere Behandlungen sollen bei der ersten Verwendung in der App aktiviert werden. Danach ist sie in der App verfügbar bzw. kann auf sie durch die Betätigung des Universal-Knopfs zugegriffen werden.



Alle weiteren Maskenbehandlungen\*

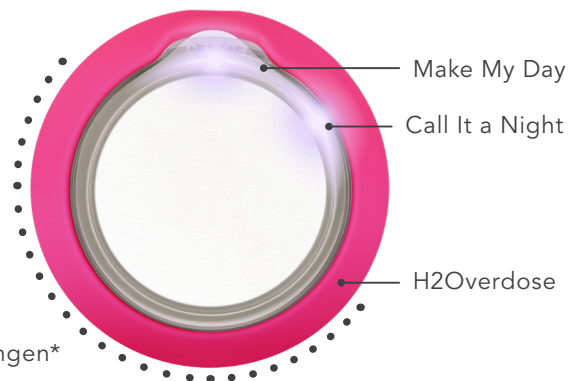

\*Nicht alle UFO-aktivierenden Masken sind mit der UFO mini kompatibel

## VERWENDUNG DER UFO mini OHNE APP

- 1 Drücken Sie auf den Knopf, um UFO mini einzuschalten.
- 2 Erneut drücken, um die Make My Day-Behandlung zu aktivieren, zweimal drücken, um die Call It a Night-Behandlung zu aktivieren usw. Wenn z.B. H2Overdose im Slot 3 in Ihrer App ist, drücken Sie den Universal-Knopf, um UFO mini einzuschalten und danach 3-mal auf den Knopf drücken, um die H2Overdose-Behandlung zu aktivieren.
- 3 Das Behandlungs-Routing beginnt, nachdem das rosa Licht 10 Sekunden blinkt.

## MEHR BEHANDLUNG?

Reicht eine UFO mini-Behandlung einfach nicht, drücken Sie den Universal-Knopf innerhalb von 30 Sekunden nach dem Ende der Routine noch einmal, um die gleiche Behandlung erneut zu wählen!

## ANWENDUNG

- 1 Starten Sie mit sauberer, trockener Haut. Wir empfehlen für bessere Ergebnisse, das Gesicht erst mit der LUNA Gesichtsbürste zu reinigen. Gleiten Sie dann mit der UFO mini über das Gesicht, um die Maskenessenz gleichmäßig zu verteilen.
- 2 Verwenden Sie den UFO mini um die Formel in Ihre Haut in kreisenden Bewegungen einzumassieren. Bewegen Sie das Gerät im Uhrzeigersinn um Ihr Gesicht, angefangen vom Kinn bis zur linken Wange zur Stirn. Fahren Sie fort zur rechten Wange zu Kinn und Hals. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis die Behandlung nicht zu Ende geht.
- 3 Nach Beendigung der Behandlung, massieren Sie sanft die Restessenz in Ihre Haut ein oder entfernen Sie den Überschuss mit einem Wattepad.
- 4 Schließen Sie die Behandlung mit Ihrer Feuchtigkeitscreme ab.



\*Für die Gesichtsmaske gleiten Sie sanft um die ganze Augenregion, abwechselnd zwischen dem linken und rechten Auge, bis zum Ende der Behandlung.

## REINIGUNG DER UFO mini

Entfernen Sie den Befestigungsring und entsorgen Sie die Maske. Da UFO mini 100% wasserfest ist, können Sie das Gerät und den Befestigungsring unter warmem Wasser abspülen. Trocknen Sie danach das Gerät einfach mit einem Tuch ab, setzen Sie den Befestigungsring wieder auf und stellen Sie das Gerät in die Halterung.

**ANMERKUNG:** Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten, da diese Ihre Haut irritieren oder das Silikon beschädigen könnten.

## WICHTIG FÜR OPTIMALE SICHERHEIT:

- UFO mini ist nur mit der dazugehörigen Maske zu verwenden. In keinem Fall sollte das Gerät direkt auf die Haut gehalten werden, während es eingeschaltet ist.
- Sollten Sie Hautprobleme oder andere medizinische Sorgen haben, sprechen Sie sich mit Ihrem Hautarzt ab.
- Die Anwendung mit dem UFO mini sollte angenehm sein - sollten Sie Beschwerden bemerken, beenden Sie die Anwendung sofort und konsultieren Sie sich mit Ihrem Arzt.
- Verwenden Sie den UFO mit Sorgfalt um Ihre Augenpartie und bringen Sie das Gerät nie direkt in Verbindung mit Ihrem Augenlid oder Augen.
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir nicht das Gerät mit anderen Personen zu teilen.
- Vermeiden Sie für den UFO mini direkte Sonneneinstrahlung und ebenso extremer Hitze oder kochendem Wasser.
- Eine Aufsicht ist erforderlich, wenn das Gerät vor oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, sowie bei Personen mit eingeschränkten physischen oder geistigen Fähigkeiten.
- Gebrauchen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt sein sollte. Dieses Gerät beinhaltet keine brauchbaren Ersatzteile.

## FEHLERBEHEBUNG

*Vorsichtsmaßnahmen im Falle von Änderungen in der Leistung von UFO mini.*

**Sollte sich UFO mini beim Drücken des Universal-Knopfes nicht anschalten:**

- Die Batterie ist leer. Laden Sie Ihre UFO mini per USB-Kabel auf bis das Licht permanent leuchtet. Eine Aufladung von 2,5 Stunden hält für bis zu 40 Anwendungen.

**Sollten Sie den UFO mini nicht an/aus schalten können oder die Bedienfläche reagiert nicht:**

- Der Mikroprozessor hat eine vorübergehende Fehlfunktion. Drücken und halten Sie den Knopf um das Gerät neu einzuschalten.

Der UFO mini synchronisiert sich nicht mit der FOREO App:

- Schalten Sie Ihr Bluetooth aus und wieder ein für eine neue Verbindung.
- Schließen und öffnen Sie die FOREO App erneut.

Falls Sie auf Ihre Frage hier keine Antwort erhalten haben oder Sie eine Frage zum Betrieb des Gerätes haben, besuchen Sie uns unter [www.foreo.com/support](http://www.foreo.com/support).

## GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

### GARANTIEREGISTRIERUNG

Um Ihre 2-Jahres-Gewährleistung zu aktivieren, registrieren Sie sich in der FOREO App.

### 2-JAHRES-GEWÄHRLEISTUNG

FOREO übernimmt auf dieses Gerät eine Gewährleistung von ZWEI (2) JAHREN ab dem Datum des Ersterwerbs – für alle Mängel, die auf Fehler bei der Verarbeitung oder des Materials zurückzuführen sind. Die Herstellergewährleistung umfasst alle Bauteile, die die Funktion des Gerätes betreffen. NICHT abgedeckt ist die äußerliche Abnutzung durch normalen Verschleiß oder Beschädigung infolge von Versehen, unsachgemäßem Gebrauch oder Nachlässigkeit. Jeder Versuch, das Gerät (oder dessen Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen führt zum Erlöschen des Garantieanspruches.

Wenn Sie einen Mangel feststellen und diesen FOREO innerhalb der Gewährleistungsfrist mitteilen, wird FOREO nach eigenem Ermessen das Gerät kostenlos ersetzen. Zur Inanspruchnahme der Garantie muss glaubhaft belegt werden können, dass die Garantie zum Zeitpunkt des Antrages noch gültig ist. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkaufbeleg zusammen mit den Garantiebedingungen für den Zeitraum der Garantiedauer auf.

Diese 2-Jahres-Gewährleistung ist exklusiv und hat Vorrang über alle anderen schriftlichen, mündlichen, ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien. Durch die Herstellung, Verkauf oder Benutzung des Produktes werden keine stillschweigenden Garantien vereinbart.

## HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung von elektronischen Altgeräten (als Sondermüll entsprechend den in der EU und anderen europäischen Ländern gültigen Vorschriften).




Das durchgestrichene Müllcontainersymbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu der betreffenden Sammelstelle gebracht werden muss. Das recyceln der Materiale hilft die natürlichen Ressourcen zu schützen.

Für mehr Informationen über das Entsorgen Ihres Geräts kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen Entsorgungsdienst.



## ENTFERNUNG DER AKKU-BATTERIE

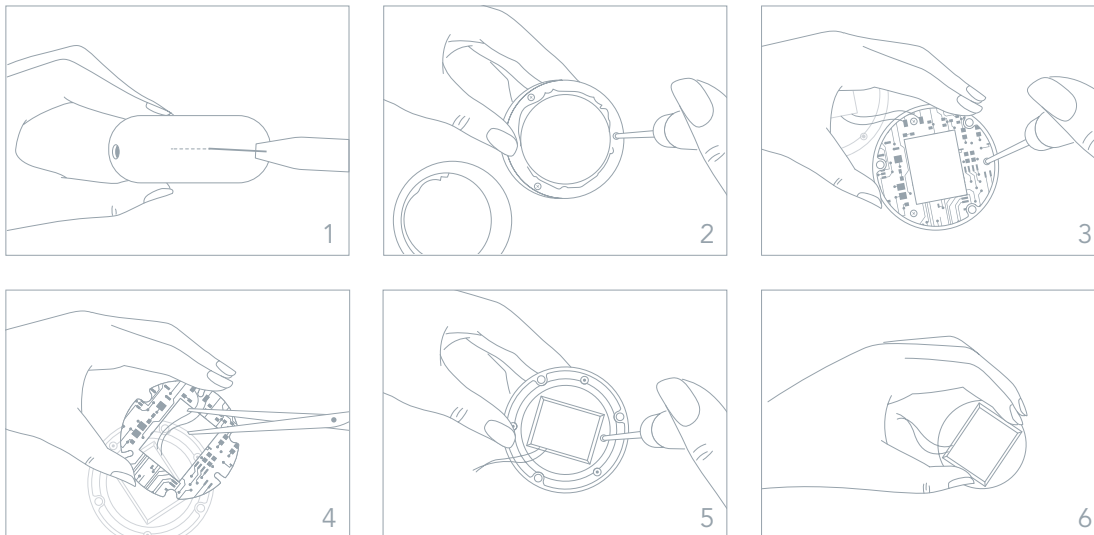

## EIGENSCHAFTEN

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| MATERIAL:         | körperfreundliches Silikon & PC + ABC |
| FARBEN:           | Pear Pink/Mint/Fuchsia                |
| GRÖÖE:            | 72.5 mm x 31.4 mm                     |
| GEWICHT:          | 100 g                                 |
| BATTERIE:         | Li-Ion 1050mAh 3.7V                   |
| BENUTZUNGSDAUER:  | bis zu 40 Anwendungen pro Vollladung  |
| STANDBY:          | 180 Tage                              |
| FREQUENZ:         | 180 Hz                                |
| MAX. SCHALLPEGEL: | <50 dB                                |
| BEDIENFLÄCHE:     | 1 Knopf                               |

**Hinweis:** Die Verwendung dieses Gerätes geschieht auf eigene Gefahr. Weder FOREO noch seine Einzelhändler übernehmen eine Haftung für jegliche Art von Verletzungen oder Schäden, körperlicher- oder anderer Art, die direkt oder indirekt mit der Benutzung dieses Gerätes zusammen hängen. FOREO behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten, ohne verpflichtet zu sein, irgendwelche Personen über eine solche Überarbeitung zu informieren.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können den Benutzer ungültig machen das Gerät zu betreiben. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Die Bedienung unterliegt dem folgende zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

**HF-Expositionserklärung:** Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Exposition gelten. Das Gerät wurde so evaluiert, dass es die allgemeine Anforderung an die HF-Belastung erfüllt. Das Gerät kann in tragbare Belichtungsbedingung ohne Einschränkung.

Verbesserungen des Produkts können ohne Vorankündigung erfolgen.

©2018 FOREO AB. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

GROSSHÄNDLER IN DER EU: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

GROSSHÄNDLER IN DEN USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

GROSSHÄNDLER IN AUS: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

ENTWORFEN UND ENTWICKELT VON FOREO SWEDEN.

HERGESTELLT FÜR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM