

FOREO

LUNA™

GEBRAUCHSANWEISUNG


DAS REVOLUTIONÄR NEUE ANTI-AGING UND GESICHTSREINIGUNGS-SYSTEM

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb dieses LUNA™ T-Sonic™, das Anti-Aging und Gesichtereinigungs-System. Sie haben damit den ersten Schritt in Richtung makellose Haut getan. Bevor Sie alle Vorzüge professioneller Hautreinigung komfortabel zuhause genießen können, nehmen Sie sich bitte kurz Zeit, um diese Gebrauchsanweisung durchzulesen.

LUNA™ ÜBERSICHT

Unser bahnbrechendes, neues Hautpflege-System für mehr Gesundheit und Vitalität Ihrer Haut.

Im Anti-Aging-Modus leitet der LUNA™ T-Sonic™ Impulse direkt sanft in die Haut, um die Zeichen der Zeit zu glätten. Der Reinigungsmodus des LUNA™ bietet eine deutlich bessere Reinigung als per Hand und erhöht die Wirkung Ihres bevorzugten Pflegeprodukts. Regelmäßig angewendet verspricht der LUNA™ von Beginn an eine frischere, strahlendere Haut. Legen Sie mit dem LUNA™ die Grundlage für eine jüngere, gesünder aussehende Haut – ein Leben lang.

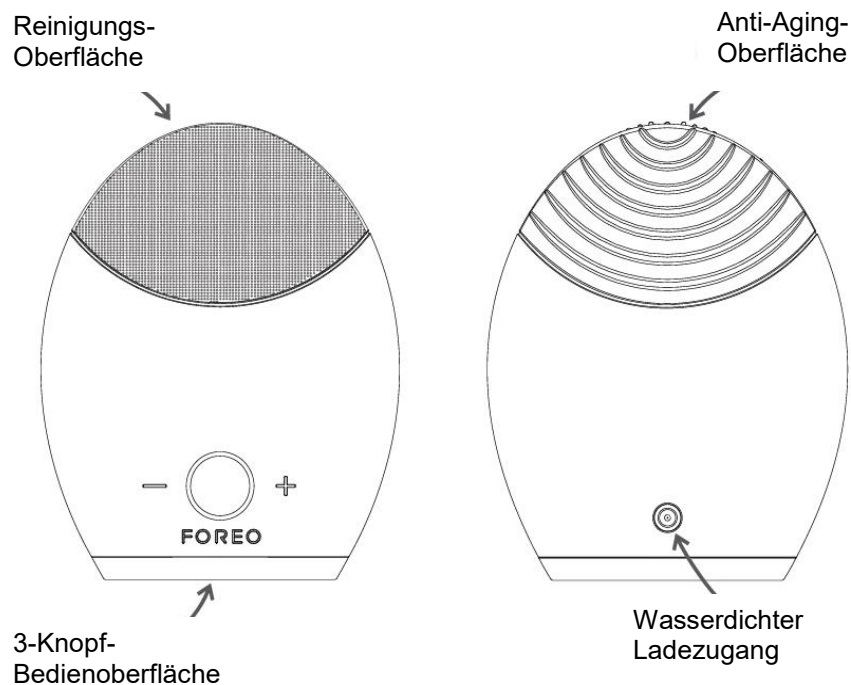

SO BENUTZEN SIE IHREN LUNA™

Der LUNA™ ist in 3 verschiedenen Modellen erhältlich, jeder mit einer Reinigungs-Oberfläche für sensible/normale, Mischhaut oder empfindliche Haut.

Um die Vorteile der Hautpflege mit dem LUNA™ zu optimieren, empfehlen wir eine tägliche Anwendungszeit von 2 Minuten morgens und abends.

MODUS-AUSWAHL

1. Drücken Sie den zentralen Knopf einmal um Ihren LUNA™ zu aktivieren. Nach dem Einschalten ist Ihr Gerät im Reinigungsmodus.
2. Drücken Sie den Zentral-Knopf erneut um das Gerät in den Standby-Modus zu bringen (im Standby-Modus leuchtet die Anzeige dauerhaft und die Impulse stoppen, um Ihnen Gelegenheit zu geben Ihr Gesicht zu waschen).
3. Drücken Sie den zentralen Knopf ein drittes Mal, um den Anti-Aging Modus zu aktivieren.
4. Drücken Sie den Zentral-Knopf erneut um Ihren LUNA™ zu deaktivieren.

Die Intensität des LUNA™ Reinigungs- und Anti-Aging-Modus wird über die +/- Knöpfe geregelt, ausgestattet mit einer Memory-Funktion, die Ihren bevorzugten Modus bis zum nächsten Gebrauch speichert.

Die einzelnen Schritte der FOREO Reinigung und Anti-Aging-Anwendung werden auf den kommenden Seiten beschrieben. Nach jeder dieser dermatologisch empfohlenen Anwendungen werden die T-Sonic™ Pulsationen einen Moment pausieren und das Licht der Anzeige kurz aufleuchten. Das Signal für Sie, mit der nächsten Gesichtszone fortzufahren.

Hinweis: Falls vor dem ersten Gebrauch noch die Tastensperre aktiviert ist, entriegeln Sie das Gerät, indem Sie gleichzeitig + und – drücken. Als Zeichen für die Entsperrung wird kurz das Licht aufleuchten. Wenn Sie die Tastensperre, beispielsweise für eine Reise, aktivieren wollen gehen Sie genauso vor.

REINIGUNGS MODUS

Die T-Sonic™ Impulse befreien die Poren, entfernen Unreinheiten und Toxine und stimulieren die Durchblutung, um die Haut mit Sauerstoff anzureichern.

Versuchen Sie jede Gesichtszone circa 15 Sekunden zu reinigen; nach diesem Zeitintervall werden die Pulsationen des LUNA™ kurz pausieren.



1. Entfernen Sie Ihr Make-up, befeuchten Sie Ihr Gesicht und tragen Sie ihr normales Reinigungsprodukt auf. Aktivieren Sie den Reinigungsmodus ihres LUNA™, indem Sie einmal den Zentralknopf drücken.



2. Beginnen Sie die Reinigung an Ihrem Kinn mit sanften Aufwärtsbewegungen entlang Ihrem Kiefer bis zum Ohr; bewegen Sie sich Schritt für Schritt höher, bis ihre gesamte Wange gereinigt ist.



3. Wechseln Sie zur anderen Gesichtshälfte und wiederholen Sie Schritt 2.

4. Anschließend reinigen Sie die Stirn. Beginnen Sie von der Mitte aus mit sanften Auswärtsbewegungen auf beiden Seiten.



5. Jetzt reinigen Sie eine Seite der Nase mit sanften Auf- und Abwärtsbewegungen und wechseln dann auf die andere Seite der Nase. Wir empfehlen Ihnen die Intensität Ihres LUNAs™ zu reduzieren, bevor Sie mit Auswärtsbewegungen die Region unter Ihren Augen reinigen.

Nach 1 Minute fühlen Sie, dass die Impulse 3 Mal in kurzer Folge stoppen. Drücken Sie den Zentralknopf ein weiteres Mal, um den LUNA™ in den Standby-Modus zu bringen. Anschließend waschen Sie Ihr Gesicht, um Ihre 1-Minute-Reinigung zu vervollständigen. Bitte beachten Sie, dass sich der Reinigungsmodus des LUNA™ automatisch nach 3 Minuten abschaltet. Dies verhindert einen zu langen Gebrauch.

ANTI-AGING-MODUS

Der Anti-Aging-Modus des LUNA™ mindert das Erscheinen von feinen Linien und Falten. Die Gesichtsmuskulatur wird entspannt und die Blut-Mikrozirkulation wird angeregt. Dies erhöht die Produktion von Collagen und Elastin.

Um vom Standby-Modus in den Anti-Aging-Modus zu gelangen, drücken Sie erneut den Zentralknopf. Versuchen Sie jeden Schritt der Anwendung circa 12 Sekunden lang durchzuführen. Nach diesem Zeitintervall werden die T-Sonic™ Impulse des LUNA™ kurzzeitig pausieren. Schließen Sie die Augen und halten Sie die Anti-Aging-Oberfläche des LUNA™ an folgende Falten-anfällige Zonen, wo Muskelverspannungen zu Sorgenfalten, Augenfältchen und Mimikfalten führen können.

1. Region zwischen den Augenbrauen
2. Rechte Schläfe
3. Rechte Nasolabialfalte
4. Linke Nasolabialfalte
5. Linke Schläfe




Nach 1 Minute fühlen Sie, dass die Impulse 3 Mal in kurzer Folge stoppen. Nun ist die Anti-Aging-Anwendung abgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass sich der Anti-Aging-Modus des LUNAs™ automatisch nach 3 Minuten abschaltet. Dies verhindert einen zu langen Gebrauch.

LADEVORGANG

- Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Ladezugang des LUNAs™.
- Verbinden Sie den Hauptstecker mit einer Steckdose. Die LED-Anzeige des LUNAs™ blinkt und zeigt so den Ladevorgang an. Wenn Ihr Gerät voll aufgeladen ist (nach circa 1 Stunde), leuchtet Die LED-Anzeige dauerhaft.
- Wenn der Akku schwach wird, blinkt die LED-Anzeige Ihres LUNAs™ weiß.

Verwenden Sie für Ihren LUNA™ nur das von FOREO mitgelieferte Ladekabel. Laden sie den LUNA™ vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Benützen Sie das Gerät nicht während dem Ladevorgang und laden Sie es nicht länger als 24 Stunden.

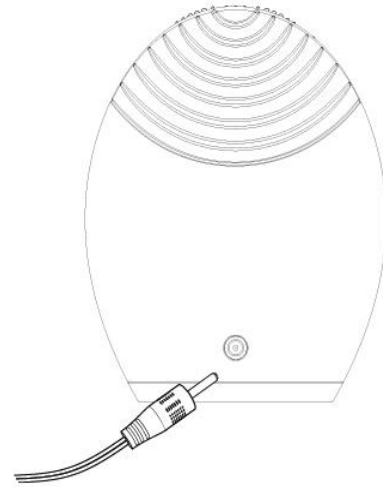

REINIGUNG, AUFBEWAHRUNG UND SICHERHEIT

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres LUNAs™ durch korrekte Pflege und Sorgfalt.

Reinigen Sie den LUNA™ nach jedem Gebrauch sorgfältig. Waschen Sie die Oberfläche des LUNAs™ mit Seife, spülen Sie ihn anschließend mit klarem Wasser ab und tupfen Sie das Gerät mit einem fusenfreien Tuch trocken. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten, dies kann zu Hautirritationen führen.

Verwenden Sie keine Pflegeprodukte die auf Tonerde oder Silikon basieren, keine körnigen Reinigungsmittel sowie Peelings aller Art. Sie könnten die Silikon-Oberfläche des LUNAs™ beschädigen.

Setzen Sie das Gerät nicht längerer, direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze oder kochendem Wasser aus.

Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, dass das Gerät ausschliesslich von einer Person benutzt wird.

Die Reinigung mit dem LUNA™ sollte angenehm sein, sobald Sie Beschwerden verspüren, unterbrechen Sie sofort die Anwendung und konsultieren Sie einen Arzt. Falls Sie unter Hautproblemen leiden, befragen Sie vor dem Gebrauch einen Hautarzt. Die Region unter den Augen sollte mit großer Vorsicht gereinigt werden, vermeiden Sie Kontakt mit den Augenlidern und dem Auge.

Besondere Aufmerksamkeit ist nötig, wenn das Gerät von, oder in der Nähe von Kindern verwendet wird. Gebrauchen Sie Ihr Gerät oder das Ladekabel nicht, wenn es beschädigt sein sollte. Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass das Ladegerät trocken ist. Laden Sie den LUNA™ nur an Orten, wo er nicht versehentlich ins Wasser fallen kann. Dieses Gerät ist nur zur beschriebenen Verwendung geeignet.

Wir empfehlen die Hautreinigung und die Anti-Aging-Anwendung nicht länger als 3 Minuten durchzuführen.

FEHLERBEHEBUNG

Die LED-Anzeige blinkt nicht, während des Ladevorgangs?

- Der Akku ist voll aufgeladen; bereit für bis zu 450 Anwendungen.
- Der Akku ist vollkommen entleert und benötigt einige Minuten für die Kopplung mit dem Ladekabel.
- Das Ladekabel ist nicht korrekt verbunden, überprüfen Sie die Verbindung zwischen Steckdose und Ladezugang.

Der LUNA™ wird beim Drücken des Zentralknopfes nicht aktiviert?

- Der Akku ist leer. Laden Sie den LUNA™ neu auf.
- Die Tastensperre ist aktiviert. Entriegeln Sie den LUNA™ durch gleichzeitiges Drücken und Halten der + und – Knöpfe.

Der LUNA™ kann nicht ausgeschaltet werden und/oder die Knöpfe der Bedienoberfläche reagieren nicht?

- Der Mikroprozessor ist vorübergehend gestört. Verbinden Sie das Gerät mit dem Ladekabel, um die Funktion wieder herzustellen.

Die Silikon-Oberfläche des LUNA™ weist eine klebrige und blasenwerfende Struktur auf?

- Stellen Sie den Gebrauch ein. Silikon ist von hoher Haltbarkeit, kann aber unter bestimmten Umständen beschädigt werden – informieren Sie sich unter „Reinigung, Aufbewahrung und Sicherheit“ wie das vermieden werden kann.

Sollten Sie andere Probleme oder Fragen bezüglich Ihres LUNA™ oder seiner Funktion haben, besuchen Sie bitte www.foreo.com/customercare und füllen Sie das Kontaktformular aus.

FOREO BEFRISTETE 2-JAHRES-GARANTIE

FOREO übernimmt auf dieses Gerät eine Gewährleistung von ZWEI (2) JAHREN ab dem Datum des Ersterwerbs für alle Mängel, die auf Fehler bei der Verarbeitung oder des Materials zurückzuführen sind. Wenn Sie einen Mangel feststellen und diesen FOREO innerhalb der Gewährleistungsfrist mitteilen, wird FOREO nach eigenem Ermessen das Gerät kostenlos ersetzen.

Die Herstellergarantie umfasst alle Bauteile, die die Funktion des Gerätes betreffen. NICHT abgedeckt ist die äußerliche Abnutzung durch normalen Verschleiß oder Beschädigung infolge von Versehen, unsachgemäßem Gebrauch oder Nachlässigkeit. Jeder Versuch, das Gerät (oder dessen Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen führt zum Erlöschen des Garantieanspruches.

Zur Inanspruchnahme der Garantie muss glaubhaft belegt werden können, dass die Garantie zum Zeitpunkt des Antrages noch gültig ist. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkaufbeleg zusammen mit den Garantiebedingungen für den Zeitraum der Garantiedauer auf.

Bei Garantieansprüchen, geben Sie Ihre Daten auf der KUNDENSERVICE Seite auf www.FOREO.com ein. Sie erhalten daraufhin eine Warenrücksendenummer (Return Merchandise Authorizationnummer - RMA) mit der Sie das Produkt an FOREO zurücksenden können. Versandkosten werden nicht übernommen. Diese Vereinbarung gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Verbraucherrechten und beeinträchtigt diese Rechte in keiner Weise.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung von elektronischen Altgeräten (als Sondermüll entsprechend den in der EU und anderen europäischen Ländern gültigen Vorschriften)

Das durchgestrichene Müllcontainersymbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu der betreffenden Wertstoffsammelstelle zur Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte gebracht werden muss. Durch die fachgerechte Entsorgung dieses Gerätes, helfen Sie eventuelle negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Entsorgung des Produkts verursacht werden könnten. Das Recyceln der verwendeten Materialien hilft außerdem die natürlichen Rohstoffquellen zu erhalten.

Falls Sie weitere Informationen zur Abfallverwertung Ihres Gerätes wünschen, kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Entsorgungsunternehmen oder den Verkäufer dieses Gerätes.



PRODUKTBESCHREIBUNG

MATERIALIEN:	FDA-geprüftes, körperfreundliches Silikon/ABS
FARBE:	White/ Light Blue/ Pink
GRÖßE:	100 x 80 x 32 mm
GEWICHT:	100 g
BATTERIE:	Li-ion 500 mAh 3.7 V
LADEZEIT:	60 Min.
BENUTZUNGSDAUER:	bis zu 450 Mal
STANDBY:	90 Tage
FREQUENZ:	125 Hz
MAX.SCHALLPEGEL:	50 dB
BEDIENBEREICH:	3 Knöpfe

Haftungsausschluss: Die Verwendung dieses Produktes geschieht auf eigene Gefahr. Weder FOREO noch seine Einzelhändler übernehmen eine Haftung für jegliche Art von Verletzungen oder Schäden, körperlicher- oder anderer Art, die direkt oder indirekt mit der Benutzung dieses Gerätes zusammen hängen.

Verbesserungen des Produktes können ohne Vorankündigung erfolgen.

©2013 FOREO AB. Alle Rechte vorbehalten.

GROSSHÄNDLER IN DER EU: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

GROSSHÄNDLER IN DEN USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

GROSSHÄNDLER IN AUS: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

ENTWORFEN UND ENTWICKELT VON FOREO SWEDEN.

HERGESTELLT FÜR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM