



FOREO

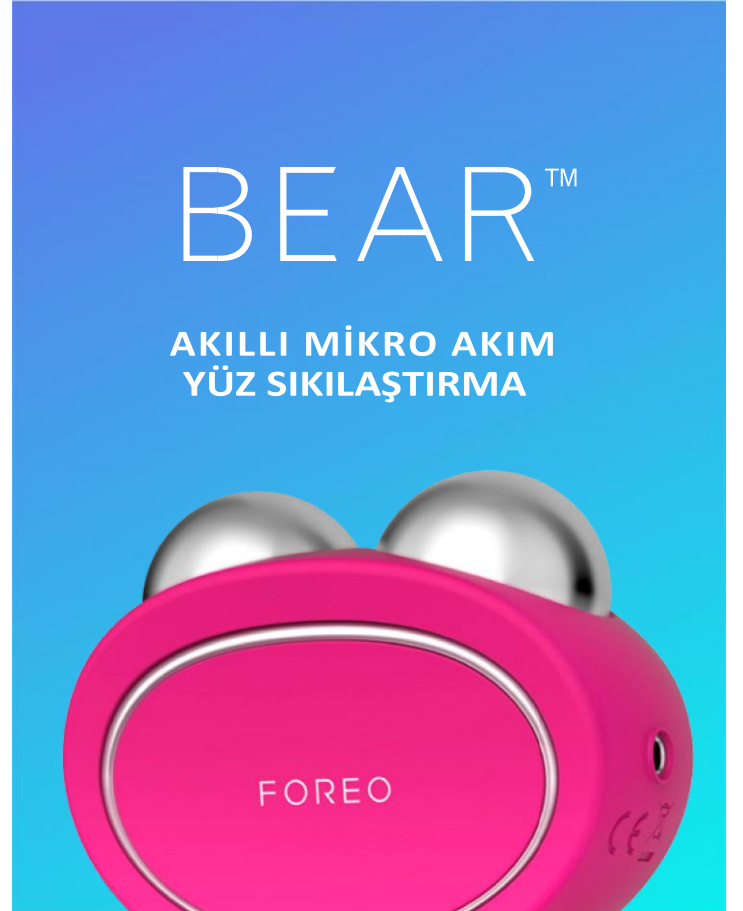

TAM KULLANIM KILAVUZU

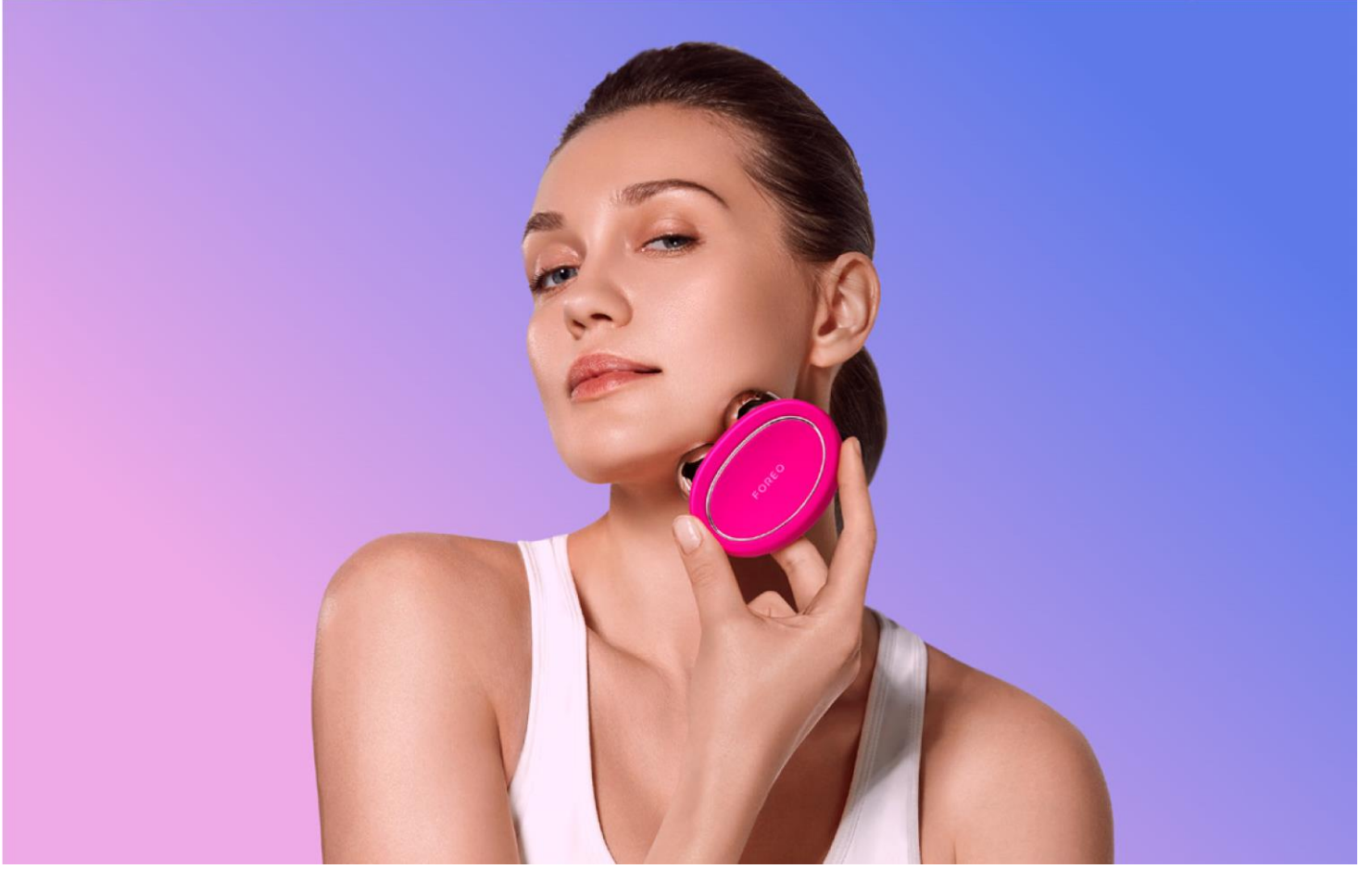

BAŞLANGIÇ

BEAR™ cihazını satın alarak daha akıllı bir cilt bakımı keşfetme yolunda ilk adımı attığınız için tebrikler. Sofistike bir cilt bakımı teknolojisinin tüm avantajlarından evinizin rahatlığında yararlanmaya başlamadan önce lütfen birkaç dakikanızı bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okumak için ayırın.

Lütfen KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN ve bu ürünü sadece bu kılavuzda tarif edildiği gibi amacına uygun şekilde kullanın.

KULLANIM AMACI: BEAR™ yüz ve boyun kullanımı için tasarlanmıştır ve kozmetik kullanım için üretilmiştir.

⚠ UYARI: Bu cihaz üzerinde herhangi bir değişikliğe izin verilmemektedir.

BEAR™ GENEL

BEAR™ ile tanışın- üstün mikro akım ve T-Sonic™ titreşimleri birleştirerek dakikalar içinde genç, hatları belirli bir cilt için hem sıkılaştıran hem de şekillendiren akıllı mikro akım yüz sıkılaştırıcı cihaz!

BEAR™ sabah ve akşam günlük bakım rutininizin bir parçası olarak kullanılabilir. Cildi yeniden canlandırmak ve gözle görülür yaşlanma belirtilerini azaltmak için uygulamada yer alan 5 farklı ayarlanabilir mikro akım yoğunluğu sunan yüz bakım egzersizlerinden birini seçin. Mikro akım bakımı sırasında T-Sonic™ titreşimler yüzünüze masaj yaparken cilde ısıtısını kazandırır, ayrıca bakım öncesi kullandığınız SERUM SERUM SERUM'un ve bakım sonrası uyguladığınız sevdiğiniz cilt bakım ürünlerinin emilimini artırır.

BEAR™'in cildinizin elektriğe karşı direncini saniyede 100x oranında ölçmek ve taramak için ultra akıllı sensörler kullanan benzersiz entegre sistemi Anti-Shock System™ ve mikro akım yoğunluğu, cildinize en iyi şekilde uyum sağlaması için sadece 0.002 saniyede (göz kırpmaktan bile hızlı) otomatik olarak ayarlanır. Anti-Shock System™ mikro akımın cildinizi şok etme olasılığını ortadan kaldırarak her kullanımda tereddütsüz bir bakım için maksimum güvenlik ve etkili sonuçlar sağlar.

BEAR™ İLE TANIŞIN

MİKRO AKIM KÜRELER

Daha sıkı ve eşit tonlu bir cilt elde etmek için cilde doğrudan mikro akım uygular.

T-SONIC™ TİTREŞİMLER

Ürünün emilimini ve cildin parlaklığını arttırmak için yüzünüze hafifçe masaj yapar.

AKILLI İSVEÇ TASARIMI

Yüz hatlarına uyacak şekilde kavisli bir yapıdadır ve cilt bakım rutininiz için seyahatte bile kolay taşınabilir.

ŞARJ NOKTASI

Şarj başına 90 kullanıma kadar*.

ANTI-SHOCK SYSTEM™

Cildin direncini analiz eder ve maksimum güvenlik ve rahatlık için mikro akım yoğunluğunu ayarlar.

EVRENSEL GÜÇ DÜĞMESİ


Cihazı açar ve kapatır, ayrıca cihazı Bluetooth eşleştirme moduna geçirir.

BLUETOOTH GÖSTERGE IŞIĞI

Cihazın Bluetooth eşleştirme modunda olduğunu belirtmek için yanıp söner.

5 YOĞUNLUK GÖSTERGE IŞIKLARI

Cihazın mikro akım yoğunluk seviyesini göstermek için yanar.

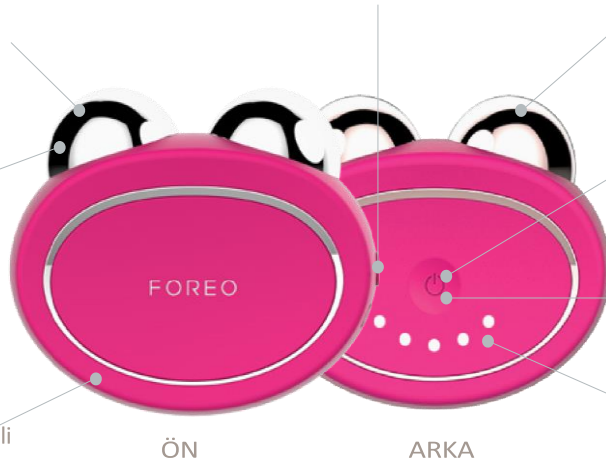

2ML ÖRNEK SERUM

Optimum iletkenlik ve etkili sonuçlar için kullanın.



USB ŞARJ KABLOSU

USB kablosuyla dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde şarj edin.



İNTERAKTİF UYGULAMA

Yüz egzersizlerine ve daha fazla yoğunluk seçeneklerine erişin.



STANT

BEAR™ cihazınızı korur ve sergiler.



SEYAHAT ÇANTASI

Seyahatte cilt bakımı için cihazınızı korur.

UYARILAR

EN ETKİN GÜVENLİK İÇİN

- BEAR™ ile sıkılaştırma rutininiz konforlu olmalıdır- herhangi bir rahatsızlık veya tahriş yaşıyorsanız, hemen kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.
- Göğüs / göğüs bölgesi, göz bölgesi (yörünge kenarı içindeki dairesel kas), boynun orta çizgisi (kemik) veya genital / kasık bölgesinde kullanmayın.
- Kızarıklık, kabarıklık, benler, ana arterler (örn. Karotis), genişlemiş kılcal damarlar, metal implantlar, enfekte veya hissiz bölgeler üzerinde kullanmayın.
- Cihazı gül hastalığı, ben, siğil, açık yara, kanserli lezyon veya herhangi bir cilt durumunu tedavi etmek için kullanmayın.
- Epilepsi, hemorajik bir hastalık, kanser, tümör veya algisal bir bozukluk gibi herhangi bir tıbbi durumunuz varsa kullanmayın.
- Lazer tedavisi ve kimyasal peeling yaptırdıysanız veya herhangi bir şekilde yaralanmış ve hasar görmüş bir cildiniz varsa cihazı kullanmayın.
- Yüz bölgenizde estetik ameliyat varsa kullanmayın.
- Vücudunuza implante edilmiş herhangi bir tıbbi cihaz, elektronik alet veya vücut yardımcınız varsa kullanmayın.
- EKG monitörleri ve EKG alarmları gibi elektronik izleme cihazları, cihaz kullanımdayken düzgün çalışmayabilir.
- BEAR™, çocuklar veya fiziksel ve zihinsel yetenekleri sınırlı kişiler tarafından veya yakınında kullanılmamalıdır. Bu cihaz, çocuklar veya fiziksel ve zihinsel yetenekleri sınırlı kişiler tarafından ya da yakınında kullanıldığında, temizlendiğinde veya saklandığında yakın gözetim gereklidir.
- Mikro akımın uzun vadeli etkileri bilinmemektedir.
- Cihazın güvenliği hamilelikte kullanım için henüz belirlenmemiştir. Hamileyseniz, bu cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın.
- Bir cilt rahatsızlığınız veya herhangi bir tıbbi endişeniz varsa lütfen kullanmadan önce doktora danışın.
- Teşhis konulmuş veya şüphelendiğiniz bir kalp rahatsızlığınız varsa doktorunuz tarafından önerilen önlemleri uygulayın.
- Göz altı bölgelerini sıkılaştırırken özellikle dikkat edin ve cihazı gözleriniz veya göz kapaklarınız ile temas ettirmeyin.
- Cihazınızın kullanımı esnasında göz sinirinin uyarılmasından kaynaklanan yanıp sönen ışıklar algısı olabilir. Bu durumu cihazınızı kullanmadan sürekli olarak fark ederseniz doktorunuza danışın.
- Cihazı kullanırken hafif bir karıncalanma hissi oluşabilir, bu normal bir durumdur ve herhangi bir endişeye gerek yoktur. Yoğunluk seviyesini düşürerek bu hissi azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilirsiniz.
- FOREO sıkılaştırma rutinlerinin verimliliği göz önüne alındığında, tek seferde 3 dakikadan fazla BEAR™ cihazını kullanmamanızı öneririz.
- Hijyen nedeniyle BEAR™ cihazınızı başkalarıyla paylaşmamanızı öneririz.
- Araba kullanırken veya ağır makine kullanırken kullanmayın.
- Cihazı prize takılıken kullanmayın.
- Cihazın girişlerine herhangi bir cisim sokmayın.
- Cihaz aşırı ısınmışsa veya arızalı olduğundan şüpheleniyorsanız kullanmayın.
- BEAR™ cihazınızı doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya veya aşırı sıcak suya maruz bırakmayın.
- Mikro akım fonksiyonunu etkinleştirmeden önce BEAR™ cihazı tamamen kuru olmalıdır. Cihazı kurulamadan ve ıslak ellerle kullanmayın.
- Bu cihaz sadece bir SELV güç adaptörüyle kullanılmalıdır.
- Cihazı şarj etmek için IEC60950 standart güç tedarikçilerinin kullanılması önerilir.
- Şarj etmeden önce, fiş ve prizin tamamen kuru olduğundan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmasına, kısa devreye veya yangına neden olabilir.
- Şarj sırasında cihazı kullanmayın. Bu cihaz ve şarj aleti düzgün çalışmıyorsa veya herhangi bir şekilde hasar görmüşse kullanmayı bırakın. Sadece cihazınızla birlikte verilen elektrik kablosunu kullanın.
- Cihaz atılmadan önce cihaz pili çıkarılmalıdır. Pil çıkarılırken cihazın bağlantısı kesilmeli ve pil güvenli bir şekilde imha edilmelidir.
- Bu üründe bakım yapılabilecek parça yoktur.
- Cihaz yüz ve boyun bölgesinde kozmetik kullanım için tasarlanmıştır. Yanlış kullanım, diğer vücut bölgelerine uygulama, uygun olmayan voltaj kaynaklarına bağlantı, kirli iletken solüsyon ve küreler veya diğer uygunsuz uygulamalardan kaynaklanan herhangi bir sonuç FOREO'nun sorumluluğunda değildir.
- Bu cihazı sadece bu kılavuzda açıklanan kullanım amacına uygun olarak kullanın. Sorunuza cevap bulamazsanız veya cihazın çalışmasıyla ilgili başka sorularınız varsa lütfen foreo.com/support adresini ziyaret edin.

BEAR™ NASIL KULLANILIR

DİKKAT: MİKRO AKIM BAKIMINA BAŞLAMADAN ÖNCE BEAR™ TAMAMEN KURU OLMALIDIR.

Cihaz kilidini açmak ve ilk kez kullanmak için FOREO For You uygulamasını indirin ve cihazınızı kaydedin. Akıllı telefonunuzdaki Bluetooth ile uygulamaya bağlanın ve cihazınızı uygulamaya senkronize ederek mikro akım tercihlerinizi ayarlamak için BEAR™ üzerindeki güç düğmesine basın.

- 1 Yüz ve boyun bölgenizi hiçbir kalıntı bırakmadan dikkatlice temizleyin ve kurulayın.
- 2 SERUM SERUM SERUM'u cildinize uygulayın ve bakım yapmak istediğiniz tüm bölgelere eşit şekilde dağıtın.
- 3 **Önceden Ayarlanmış Rutin İçin:**
FOREO For You uygulamasında tercih ettiğiniz mikro akım bakımını seçin. Uygulamadaki videoyu izleyin ve talimatları takip edin. *Rutin tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır. **

Manuel Mod İçin:

i) Mikro akımı etkinleştirmek için güç düğmesine basın. Evrensel güç düğmesinin altındaki ışıklar, mikro akım yoğunluğu ayarını gösterir. Mikro akım yoğunluğunu her seviye için evrensel güç düğmesine bir kez hızlıca basarak değiştirebilirsiniz. Güç düğmesine iki kez basarak T-Sonic™ titreşimleri kapatabilirsiniz. *Daha fazla mikro akım yoğunluk seçeneklerine erişmek için uygulamayı kullanın.*

ii) Her iki metal küreyi de hafifçe yüzünüze bastırın ve cihazı elmacık kemiklerinizde, alnınızda, dudaklarınızın çevresinde, çene çizginizde ve boynunuzda hafifçe gezdirin. *Her iki mikro akım küresinin de her zaman cildinize temas ettiğinden emin olun. Cihazı her zaman yavaşça yukarı doğru hareket ettirin ve daha etkili bir sonuç için hafif basınç uygulayın.*

iii) Bakımınızı tamamladığınızda cihazı kapatmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.

- 4 Dilerseniz sevdiğiniz cilt bakım ürünleri ile bakımınızı sonlandırın.



BEAR™ CİHAZININ TEMİZLİĞİ

Her kullanımdan sonra BEAR™ cihazınızı içice temizleyin. Metalik küreleri ve silikon yüzeyi, su ve sabun ile yıkayın ardından ılık su ile durulayın. Tüy bırakmayan, aşındırmayan bir bez ya da havlu ile kurulayın. Kullanımdan sonra en etkili sonuç için cihaza FOREO'nun Silikon Temizleme Spreyi'ni sıkmanızı ve ılık su ile durulamanızı öneririz.

NOT: Alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünlerini asla kullanmayın, bu ürünler cildi tahriş edebilir ve silikona zarar verebilir.

SORUN GİDERME

BEAR™ cihazının performansında değişiklik olması durumunda alınacak önlemler:

Güç düğmesine bastığınızda BEAR™ aktifleşmezse:

- Batarya boş olabilir. Tamamen şarj olması için USB şarj kablosunu kullanarak 1.5 saate kadar şarj edin ve güç düğmesine basılı tutarak cihazınızı yeniden başlatın.

BEAR™ kapatılamıyorsa ve / veya güç düğmesi cevap vermiyorsa:

- Mikroişlemci geçici olarak arıza yapmış olabilir. Cihazı yeniden başlatmak için güç düğmesine basılı tutun.

BEAR™, FOREO For You uygulaması ile senkronize olmuyorsa:

- Yeniden bağlanmayı denemek için Bluetooth'u kapatıp tekrar açın.
- FOREO For You uygulamasını kapatın ve işleme başlamak için yeniden açın.
- Mobil cihazınızda yer alan app store üzerinden uygulama için güncelleme gerekip gerekmediğini kontrol edin.

GARANTİ ŞARTLARI & KOŞULLARI

KAYIT GARANTİSİ

2 Yıl Sınırlı Garantinizi etkinleştirmek için, FOREO For You uygulamasına kaydolun veya daha fazla bilgi için foreo.com/product-registration adresini ziyaret edin.

2-YIL SINIRLI GARANTİ

FOREO, hatalı işçilik veya cihazın Normal Kullanımından kaynaklanan kusurlara karşı orijinal satın alma tarihinden sonra İKİ (2) YIL garanti hakkı sunar. Garanti, cihazın işlevini etkileyen çalışma parçalarını kapsar. Adil aşınma ve yıpranma nedeniyle meydana gelen kozmetik bozulmaları veya yanlış kullanım, kaza ya da ihmal kaynaklı hasarları KAPSAMAZ. Cihazı (veya aksesuarlarını) açma veya parçalara ayırma girişimleri garantiyi geçersiz kılar.

Garanti süresi içinde bir kusur tespit edip FOREO'ya bildirirseniz, FOREO incelemelere bağlı olarak cihazı ücretsiz değiştirir. Garanti kapsamındaki talepler, talep tarihinin garanti süresi içinde olduğuna dair kanıtlarla desteklenmelidir. Garantinizi doğrulamak için lütfen orijinal satın alma makbuzunuzu garanti süresi boyunca bu garanti koşullarıyla birlikte saklayın.

Garantinizi talep etmek için www.foreo.com adresinden hesabınıza giriş yapmalı ve ardından garanti talep seçeneğine tıklamalısınız. Kargo ücreti iade edilmez. Bu taahhüt, bir tüketici olarak yasal haklarınıza ilavedir ve bu hakları hiçbir şekilde etkilemez.

GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ

Eski elektronik aletlerin imhası (AB ve farklı atık toplama sistemi olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir).




Bu cihaz, evsel atık olarak değerlendirilmemelidir, bunun yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına götürülmelidir. Bu cihazın doğru şekilde imha edildiğinden emin olarak, ürünün uygun olmayan atık olarak işlenmesinden doğacak çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçlarının önlenmesine yardımcı olursunuz. Ayrıca malzemelerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına da yardımcı olur.

Cihazınızın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki evsel atık hizmetlerine veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

CİHAZ PİLİNİN ÇIKARILMASI

NOT: Bu işlem geri alınamaz. Cihazın açılması cihaz garantisini geçersiz kılar. Bu işlem yalnızca cihaz atılmaya hazır olduğunda yapılmalıdır.

Bu cihaz, atılmadan önce çıkarılması gereken ve evsel atıklarla birlikte atılmaması gereken bir lityum-iyon pil içerir. Pili çıkarmak için silikon dış düzeyi çıkarın daha sonra içindeki plastik kapağı açın ve pili çıkarın, pili bölgenizdeki çevre yönetmeliğine uygun olarak atın. Güvenliğiniz için bu işlem sırasında eldiven giyin. Ayrıntılı görsel talimatlar aşağıda verilmiştir:

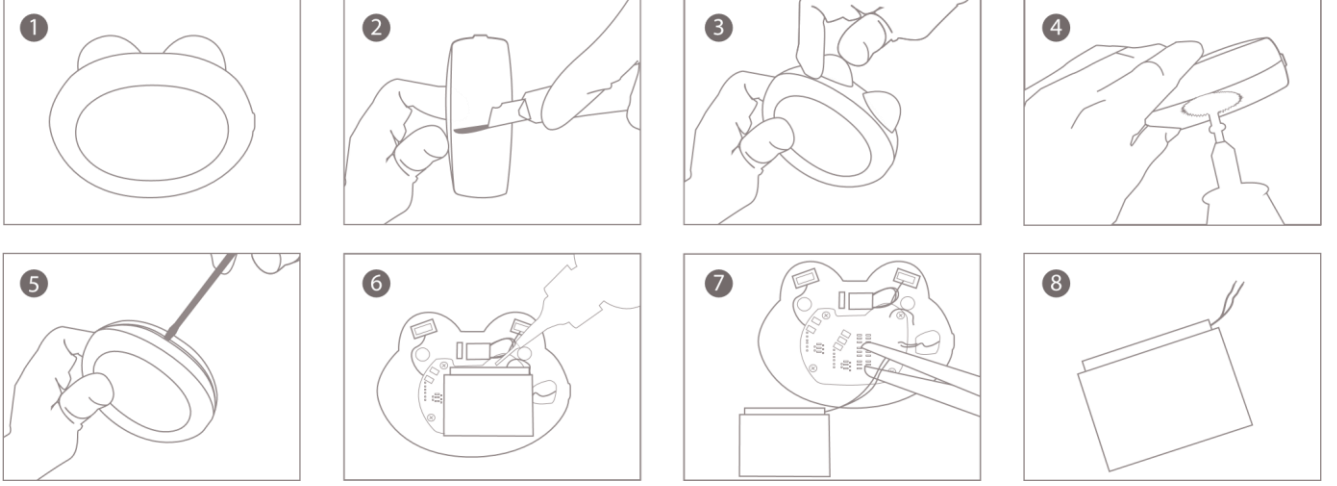

TEKNİK ÖZELLİKLER

MALZEMELER: Vücut için güvenli silikon, ABS, PC, Krom Kaplama Çinko Alaşımı

RENK: Fuchsia

BOYUT: 64x79x39mm

AĞIRLIK: 90g

PİL: Li-ion 520mAh 3.7V

KULLANIM: Şarj başına 90 kullanıma kadar*

BEKLEME MODU: 90 gün

FREKANS: 185 Hz

MAKS. SES SEVİYESİ: <50dB

ARAYÜZ: 1- düğme

*Kullanım başına 1 dakikalık bakım süresine göre.

Yasal Uyarı: Bu cihazın riskleri kullanıcının sorumluluğundadır. FOREO ya da perakendecileri doğrudan veya dolaylı olarak bu cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkan fiziksel veya diğer türlü yaralanma ve hasar için hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmez. Ayrıca FOREO, herhangi bir kişiyi değişikliklerden haberdar etme zorunluluğu olmaksızın bu yayını yenileme ve içeriğinde zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

DİKKAT: Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan bu bölümdeki değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

NOT:

1) Bu ekipman test edilmiştir ve FCC kurallarının 15. bölümüne uygun olarak B sınıfı dijital cihaz sınırlamalarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar bir konut alanında zararlı radyo parazitlerine karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, ayrıca talimatlara uygun kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı radyo parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağına dair bir garanti yoktur. Eğer bu ekipman, radyo ve televizyon ile alıcı iletişimde zararlı radyo parazite neden olursa, bu durum ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilir, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını alarak radyo parazitini gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Ekipmanı, alıcının takılı olduğundan farklı devredeki bir prize takın.
- Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

2) Bu cihaz CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) ile uyumludur. Bu cihaz, Industry Canada lisanstan muaf RSS standartlarıyla uyumludur. Çalışması aşağıdaki iki koşula tabidir:

- Bu cihaz radyo parazite neden olmaz.
- Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek radyo paraziti dahil her türlü radyo parazitini kabul eder.

Industry Canada yönetmeliğine göre, bu radyo vericisi yalnızca Industry Canada tarafından verici için onaylanmış bir anten türü ve maksimum (veya daha az) kazancı kullanarak çalışabilir. Diğer kullanıcılara yönelik potansiyel radyo parazitini azaltmak için anten tipi ve kazancı, eşdeğer izotropik yayılım gücü başarılı iletişim için gerekli olandan daha fazla olmayacak şekilde seçilmelidir.

Model, geliştirmeler için haber verilmeksizin değiştirilebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BEAR™ TEMEL

BEAR™ CİHAZIMI ALDIKTAN SONRA NE YAPMALIYIM?

Daha akıllı bir cilt bakımı keşfettiğiniz için tebrikler! İlk olarak, cihaz kilidini açmak ve cihazı kaydetmek için FOREO For You uygulamasını ücretsiz indirin. (Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki “UYGULAMA” başlıklı bölüme bakın).

İLK TERAPİME NASIL BAŞLARIM?

Öncelikle yüzünüzü ve boynunuzu dikkatlice temizleyin. Daha sonra FOREO SERUM SERUM SERUM ürününü cildinize uygulayın ve bakım yapmak istediğiniz bölgeye eşit olarak dağıtın. Son olarak uygulama üzerinden tercih ettiğiniz yüz egzersiz rutinini seçin veya yukarıda ya da BEAR™ cihazıyla gelen Kullanım Kılavuzunda bulunan adım adım Manuel Mod talimatlarını uygulayın.

BEAR™ CİHAZIMI NASIL BAŞLATIRIM?

BEAR™ cihazını başlatmak için evrensel güç düğmesine basın. Gösterge ışığı, cihazın Bluetooth eşleştirme modunda olduğunu göstermek için yanıp söner.

BEAR™ CİHAZIMI NASIL KAPATIRIM?

Cihazı kapatmak için evrensel güç düğmesine 3 saniye basılı tutun. Önceden ayarlanmış bir rutin tamamladıktan sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

BEAR™ CİHAZ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

1 adet BEAR™ Cihazı, 1 adet 2ml örnek SERUM, 1 adet USB Şarj Kablosu, 1 adet Kullanım Kılavuzu, 1 adet Hızı Başlangıç Kılavuzu, 1 adet Stant, 1 adet Seyahat Çantası.

BEAR™ CİHAZI

BEAR™ CİHAZIMI HANGİ SIKLIKLA KULLANABİLİRİM?

BEAR™ sabah veya akşam günlük kullanıma uygun ve güvenlidir. BEAR™ cihazını bakım başına 3 dakika olarak 24 saatte bir kullanmanızı öneririz.

MİKRO AKIM GÜVENLİ MİDİR?

BEAR™ mikro akım özelliği, yalnızca en etkin iletkenlik için gerekli koruyucu serumla birlikte kullanıldığında güvenli ve ağrısız bir sıkılaştırma teknolojisidir. BEAR™, su veya herhangi ıslak bir yüzeyin yakınında ASLA etkinleştirilmemelidir.

DAHA YÜKSEK MİKRO AKIM YOĞUNLUĞU DAHA ETKİLİ MİDİR?

Evet. Daha yüksek mikro akım yoğunluğu daha fazla güce eşittir, bu da cildinize daha derin nüfuz demektir, ayrıca daha fazla enerjinin iletilmesiyle bakımınız daha etkili olur. Fakat herkesin cildi farklıdır- bu nedenle, ilk önce cihazı (SERUM SERUM SERUM ile) en düşük mikro akım yoğunluğu olan seviye 1’den başlayarak hangi mikro akım yoğunluk seviyesinin sizin için en iyi olduğunu test etmenizi şiddetle öneririz.

MİKRO AKIM YOĞUNLUK SEVİYESİNİ AYARLAYABİLİR MİYİM?

Evet, mikro akım yoğunluğunu her seviye için evrensel güç düğmesine bir kez hızlıca basarak veya uygulama aracılığıyla tercih ettiğiniz yoğunluğu seçerek manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

T-SONIC™ TİTREŞİMLERİ AYARLAYABİLİR MİYİM?

Evet, T-Sonic™ titreşimleri açmak veya kapatmak için evrensel güç düğmesine iki kez basın ya da ayarları uygulama aracılığıyla değiştirin.

BEAR™ & BEAR™ mini ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Hem BEAR™ hem de BEAR™ mini, yüz ve boyun bölgesini uyarmak için mikro akım gönderir, daha iyi bir cilt görünümü için cildinizi sıkılaştırır. Ancak BEAR™ mini, daha bölgesel hedefli bir yüz egzersizi düşünülerek tasarlanmıştır, bu nedenle yüzünüzde yer alan küçük çatlakları hedef alan küçük kürelere ve daha düşük 3 mikro akım yoğunluğuna sahiptir. Öte yandan BEAR™, her bir çizgiyi özenle hedefleyen daha geniş bir yüzey alanını kaplayan orta boyutlu kürelere sahiptir. Ayrıca BEAR™ mini’den farklı olarak, BEAR™ daha güçlü 5 mikro akım yoğunluğundan oluşan daha geniş bir aralık sunar.

BEAR™ CİHAZLARI EVDE KULLANILAN DİĞER MİKRO AKIM CİHAZLARINDAN FARKLI MIDIR?

BEAR™ cihazlar diğer ev kullanımına uygun olan mikro akım cihazlarından iki önemli yönden farklıdır. İlk olarak, BEAR™ cihazları mikro akımın cildinizi şok etme olasılığını ortadan kaldıran ve onları dünyadaki en güvenli mikro akım cihazları yapan Anti-Shock System™ özelliğine sahip tek ev tipi cihazlardır. İkinci olarak, BEAR™, diğer ev tipi cihazlardan daha kişiselleştirilmiş ve etkili bir bakım deneyimlemenize olanak tanıyan daha geniş bir mikro akım yoğunluğu sunar.

ÖNCE DEN AYARLANMIŞ MİKRO AKIM TERAPİLERİ NE KADAR SÜRER?

Hedeflenen bölgeye bağlı olarak bakım süreleri 1-2 dakika arasında değişim gösterir.

UYGULAMA

BEAR™ CİHAZIMI KULLANMADAN ÖNCE FOREO UYGULAMASINI NEDEN İNDİRMEM GEREKİYOR?

Uygulamayla etkinleştirilen tüm FOREO ürünleri, ilk kullanımda FOREO For You uygulaması aracılığıyla etkinleştirilmeli ve kilidi açılmalıdır. Bu, sahte/ kopyalanmış FOREO ürünlerine karşı korunmaya yardımcı olur ve garanti kaydını ve cihaz korunmasını kolaylaştırır.

BEAR™ CİHAZIMI FOREO UYGULAMASI İLE NASIL EŞLEŞTİRİRİM?

FOREO For You uygulamasını akıllı telefonunuza veya tabletinize indirin ve Bluetooth'u açın. Başlatmak için cihazınızdaki evrensel güç düğmesine bir kez basın. Yanıp sönen beyaz ışık, cihazın eşleştirme modunda olduğunu gösterir. BEAR™ cihazınızı kaydetmek ve eşleştirmek için uygulamadaki talimatları izleyin.

BEAR™ CİHAZIM UYGULAMA OLMADAN ÇALIŞIR MI?

Evet, cihazı manuel olarak kullanabilirsiniz ve FOREO For You uygulamasının kullanılması gerekmez. Ancak ilk kullanımda cihaz kilidi açmak için FOREO For You uygulaması aracılığıyla cihazı kaydetmeli ve tercihlerinizi seçmelisiniz. Önceden ayarlanmış yüz egzersizini etkinleştirmek için doğrudan uygulama üzerinden ilerlemelisiniz. Seçiminiz daha sonra cihazınızla otomatik olarak senkronize olacaktır.

SORUN GİDERME & BAKIM

BEAR™ CİHAZIMI DOĞRU BİR ŞEKİLDE KULLANDIĞIMI NASIL ANLARIM?

BEAR™ cihazınızı kullanırken her iki mikro akım küresinin cildinize her zaman temas ettiğinden emin olun. Her iki küre de cildinize temas etmiyorsa evrensel güç düğmesi yanık kalacaktır. Bu ışığın sönmesi cihazı doğru kullandığınızı anlamına gelmektedir.

CİHAZIM SÜREKLİ YANIP SÖNÜYORSA NE ANLAMA GELİYOR?

Evrensel güç düğmesinin etrafında yanıp sönen ışık cihazınızın Bluetooth eşleştirme modunda olduğunu veya cihazın şarj edilmesi gerektiğini gösterir. Cihazınızı senkronize etmek için uygulamadaki talimatları izleyin.

BEAR™ CİHAZIMI NASIL ŞARJ EDERİM?

BEAR™, 90 kullanıma kadar (kullanım başına 1 dakikalık bakım süresine göre) 1.5 saatte USB şarj kablosu ile şarj edilir. Cihaz şarj olurken evrensel güç düğmesinin altında yer alan yoğunluk gösterge ışıkları cihazın ne kadar şarj olduğunu göstermek için yanıp söner. Tüm gösterge ışıklarının yanması cihazınızın tamamen şarj olduğu anlamına gelir.

BEAR™ CİHAZIMI NASIL TEMİZLERİM?

Cihazın kapalı olduğundan emin olun, ardından cihazı sabun ve su ile yıkayın, ılık su ile durulayın ve tüy bırakmayan, aşındırmayan bir bez veya havlu ile hafifçe kurulayın. Kullanımdan sonra en etkili sonuç için cihaza FOREO'nun Silikon Temizleme Spreyi'ni sıkmanızı ve ılık su ile durulamanızı öneririz.

SERUM SERUM SERUM

BEAR™ CİHAZIMLA FOREO'NUN SERUM SERUM SERUM ÜRÜNÜNÜ KULLANMAM GEREKİR Mİ?

Evet, serumun iletken bir bariyer oluşturması sayesinde mikro akımlar cihazdan cildinize etkili ve güvenli bir şekilde aktarılır, bu neden cihazla birlikte SERUM SERUM SERUM kullanılması önemlidir.

SERUM SERUM SERUM ÜRÜNÜNÜ MİKRO AKIM CİHAZLARINA UYUMLU YAPAN NEDİR?

SERUM SERUM SERUM, BEAR™ gibi bir mikro akım cihazının cilt üzerinde herhangi bir his olmadan sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan glicerini gibi iletken bileşenlerle özel olarak formüle edilmiştir.

SERUM SERUM SERUM ÜRÜNÜ HAYVANLAR ÜZERİNDE TEST EDİLMİŞ MİDİR?

Hayır, SERUM SERUM SERUM hayvanlar üzerinde test edilmemiştir, hayvan dostudur.

SERUM SERUM SERUM ÜRÜNÜ HORMONLARI ETKİLEYEN BİR İÇERİĞE SAHİP MİDİR?

Hayır, temiz formülümüz hormon bozukluğuna neden olacak içerikler olmadan geliştirilmiştir.

SERUM SERUM SERUM ŞİŞESİ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR Mİ?

Evet, şişe geri dönüştürülebilir.

©2018/19 FOREO AB. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

AB İTHALATÇI VE DAĞITICI: FOREO AB, KARLAVAGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, İSVEÇ ABD İTHALATÇI VE DAĞITICI: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, ABD. FOREO AB İÇİN ÜRETİLMİŞTİR. FOREO İSVEÇ TARAFINDAN TASARLANMIŞ VE GELİŞTİRİLMİŞTİR. AU İTHALATÇI VE DAĞITICI: SUITE 10, 1014 DONCASTER ROAD, DONCASTER EAST VICTORIA 3109, AVUSTRALYA. ÜRETİCİ: VIS (ŞANGAY) TEKNOLOJİ Ltd.Şti. NO.58 LINSHEG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, ŞANGAY, ÇİN

WWW.FOREO.COM