

FOREO



UFO™ mini 2

SCHWEDISCHE BEAUTY-TECH
POWER-MASKEN



ONLINE-BEDIENUNGSANLEITUNG

VOLLSTÄNDIGES BENUTZERHANDBUCH



ERSTE SCHRITTE

Herzlichen Glückwunsch! Mit dem Erwerb von UFO™ mini 2 haben Sie den ersten Schritt in Richtung einer herausragenden Hautpflege getan. Bevor Sie beginnen, die Vorzüge der hochentwickelten Power-Masken-Technologie bequem von zu Hause aus zu genießen, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um die Anweisungen in dieser Anleitung sorgfältig zu lesen.

Bitte **LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG** und verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszweck.

⚠️ WARNUNG: EINGRIFFE AN DIESEM GERÄT SIND NICHT ZULÄSSIG.

UFO™ mini 2 IM ÜBERBLICK

Neu entwickelt mit ultraschneller Erwärmung und einem noch breiteren Spektrum an LED-Licht ist UFO™ mini 2 ein revolutionäres Power-Masken-Gerät, das Ihnen in Sekundenschnelle eine schönere Haut verleiht. UFO™ mini 2 ist mit fortschrittlicher Hyper-Infusion Technologie ausgestattet und kombiniert Thermo-Therapie mit T-Sonic™ Pulsationen, um die Vorteile Ihrer Maske voll und ganz auszuschöpfen. Zusätzlich ist UFO™ mini 2 mit 8 verschiedenen LED-Leuchten ausgestattet, die Ihnen in nur 90 Sekunden zu einem verfeinerten, strahlenden Teint verhelfen!

LERNEN SIE IHREN UFO™ mini 2 KENNEN

UNIVERSAL-BETRIEBSTASTE

Schaltet das Gerät ein/aus, versetzt das Gerät in den Bluetooth-Kopplungsmodus & wählt die Behandlungsroutine aus.

ULTRA-HYGIENISCHES SILIKON

Antibakteriell und superweich.

T-SONIC™ PULSATIONEN

Führen eine beruhigende Gesichtsmassage aus, um die Ausstrahlung der Haut zu verbessern.

LADEANSCHLUSS

Bis zu 40 Anwendungen pro 2,5 Stunden Ladezeit.



VOLLSPEKTRUM-LED-LICHT

Hilft der Haut, sichtbar jünger auszusehen – für einen natürlich verfeinerten Teint.

THERMO-THERAPIE

Macht die Haut weicher, sodass die Inhaltsstoffe der Maske bis in die tiefsten Schichten eindringen können.

KONTROLLEUCHTEN

Leuchten auf, um anzuzeigen, auf welche Maskenbehandlung Ihr Gerät eingestellt ist.

VORSATZRING

Sichert die UFO™ Power Aktivierte Maske in ihrer Position.



UFO™ POWER AKTIVIERTE MASKE

Weiche Mikrofasermasken, die exklusiv für die Verwendung mit UFO™ entwickelt wurden.




USB-LADEKABEL

Jederzeit und überall mit dem USB-Ladekabel aufladen.



INTERAKTIVE APP

Synchronisiert vorprogrammierte Power-Masken-Routinen automatisch mit dem Gerät.

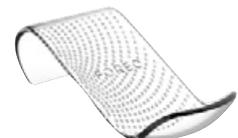


ELEGANTER & STILVOLLER STÄNDER

Schützt und hält Ihren UFO™ 2 an Ort und Stelle und hilft beim schnellen Trocknen.

DAS WICHTIGSTE ZUERST...

- 1 Um Ihr Gerät für die erstmalige Verwendung freizuschalten und zu registrieren, laden Sie die FOREO For You App herunter.
- 2 Stellen Sie über Bluetooth eine Verbindung zur App auf Ihrem Smartphone her und drücken Sie die Universal-Betriebstaste am UFO™ mini 2, um Ihr Gerät mit der App zu synchronisieren.
- 3 Scannen Sie in der App den Barcode der Maske und befolgen Sie die Anweisungen.

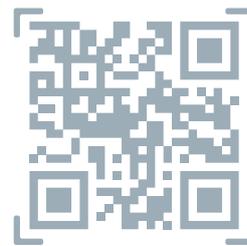

Die FOREO App hier herunterladen



Entfernen Sie den beigefügten Ring vom UFO™ mini 2.



Nehmen Sie die UFO™ Power Aktivierte Maske aus der Verpackung.



Sichern Sie die Maske am Gerät, indem Sie den Vorsatzring einrasten lassen – mit dem FOREO Logo nach oben.



Genießen Sie Ihre Power-Masken-Behandlung!

GEBRAUCHSANWEISUNG UFO™ POWER AKTIVIERTE MASKEN

Reinigen und trocknen Sie zunächst Ihre Haut. Wir empfehlen, das Gesicht zunächst mit LUNA™ zu reinigen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

- 1 Während die Maske am Gerät befestigt ist, mit dem UFO™ mini 2 sanft über die Haut gleiten und die Essenz gleichmäßig verteilen.
- 2 Unter Verwendung des Geräts UFO™ mini 2 die Formel mit Kreisbewegungen in die Haut einmassieren. Das Gerät im Uhrzeigersinn rund um das Gesicht bewegen, dabei am Kinn beginnen und anschließend nach oben zur rechten Wange und zur Stirn bewegen. Über die linke Wange wieder nach unten zum Kinn und zum Hals bewegen. Diese Bewegung so lange fortsetzen, bis die Behandlung endet.
- 3 Arbeiten Sie überschüssige Essenz mit zarten Klopfbewegungen in die Haut ein oder entfernen Sie sie mit einem Wattepad. Verwenden Sie anschließend gegebenenfalls eine Feuchtigkeitscreme Ihrer Wahl.



FOREO SHEET MASKEN

- 1 Entfalten Sie vorsichtig Ihre FOREO Sheet Maske, legen Sie sie auf Ihr Gesicht und passen Sie sie an Augen und Mund an.
- 2 Unter Verwendung des Geräts UFO™ mini 2 die Formel mit Kreisbewegungen in die Haut einmassieren. Das Gerät im Uhrzeigersinn rund um das Gesicht bewegen, dabei am Kinn beginnen und anschließend nach oben zur rechten Wange und zur Stirn bewegen. Über die linke Wange wieder nach unten zum Kinn bewegen. Diese Bewegung so lange fortsetzen, bis die Behandlung endet.
- 3 Lassen Sie die Sheet Maske noch 10 Minuten einwirken oder entsorgen Sie sie nach Belieben. Arbeiten Sie überschüssige Essenz mit zarten Klopfbewegungen in die Haut ein oder entfernen Sie sie mit einem Wattepad. Verwenden Sie anschließend gegebenenfalls eine Feuchtigkeitscreme Ihrer Wahl.

HINZUFÜGEN EINER NEUEN BEHANDLUNG

UFO™ mini 2 kann mit bis zu 8 Maskenbehandlungen programmiert werden! Make My Day und Call It a Night sind auf die ersten beiden Anzeigeleuchten vorprogrammiert, und die dritte Leuchte ist für Ihre individuelle Behandlung bestimmt.

Andere Maskenbehandlungen müssen bei der ersten Anwendung über die FOREO For You App aktiviert werden. Danach kann die Routine über die App oder die Universal-Betriebstaste gewählt werden.



VERWENDUNG VON UFO™ 2 OHNE APP

- 1 Drücken Sie die Universal-Betriebstaste, um die Behandlungsroutine Make My Day einzuschalten und zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie erneut, um die Behandlung Call It a Night zu aktivieren, usw. (Wenn z. B. H2Overdose in Ihrer App auf Platz 4 gespeichert ist, drücken Sie die Universal-Betriebstaste 4 Mal, um die H2Overdose-Behandlung zu aktivieren).
- 3 Ihre Behandlung mit der Power-Maske kann beginnen!

LUST AUF MEHR?

Wenn eine Behandlung mit UFO™ mini 2 nicht ausreichend war, drücken Sie die Universal-Betriebstaste innerhalb von 30 Sekunden nach Ende der Routine erneut, um dieselbe Behandlung erneut zu beginnen! Passen Sie Ihr Power-Masken-Erlebnis an, indem Sie in der App Ihre ganz persönliche Behandlungsroutine einrichten. Dort können Sie jede Technologie einzeln auswählen und einstellen, um Ihre Maske zu optimieren.

REINIGUNG VON UFO™ mini 2

Reinigen Sie den UFO™ mini 2 nach dem Gebrauch immer gründlich. Waschen Sie das Gerät und den Kunststoffring mit Seife und spülen Sie es anschließend mit warmem Wasser ab. Tupfen Sie es mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken. Nach dem Gebrauch empfehlen wir, das Gerät mit dem Silikon-Reinigungsspray von FOREO einzusprühen und mit warmem Wasser abzuspülen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Platzieren Sie das Gerät dann zum Trocknen auf dem Ständer.

HINWEIS: Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten, da diese die Haut reizen und das Silikon beschädigen können.

WICHTIG

FÜR OPTIMALE SICHERHEIT:

Ihr UFO™ mini 2 ist nur in Verbindung mit UFO™ Power Aktivierten Masken oder FOREO-Masken zu verwenden. Das Gerät darf niemals eingeschaltet direkt auf die Haut/das Gesicht aufgesetzt werden.

- Sollten Sie Hautprobleme oder sonstige medizinische Bedenken haben, konsultieren Sie vor der Verwendung bitte einen Hautarzt.
- Die Verwendung von UFO™ mini 2 sollte sich angenehm anfühlen – im Falle von Beschwerden setzen Sie die Verwendung unverzüglich aus und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Seien Sie bei der Verwendung von UFO™ mini 2 im Bereich unter den Augen besonders vorsichtig und vermeiden Sie jeden Kontakt des Geräts mit den Augenlidern oder den Augen.
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, Ihren UFO™ mini 2 nicht mit anderen Personen zu teilen.
- Setzen Sie Ihren UFO™ mini 2 nie direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze oder kochendem Wasser aus. • Die Oberfläche von UFO™ mini 2 erhitzt sich. Hitzeempfindliche Personen müssen bei der Verwendung dieses Geräts Vorsicht und Sorgfalt walten lassen.
- Bei Verwendung des Geräts durch, an oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten bedarf es besonderer Aufsicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt erscheint. Dieses Produkt enthält keine zu wartenden Teile.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszweck. Wenn Sie keine Antwort auf Ihre konkrete Frage finden oder weitere Fragen zur Bedienung des Geräts haben, besuchen Sie bitte www.foreo.com.

FEHLERBEHEBUNG

Vorsichtsmaßnahmen bei veränderter Leistung von UFO™ mini 2.

Wenn UFO™ mini 2 beim Drücken der Universal-Betriebstaste nicht aktiviert werden kann:

- Der Akku ist leer. Laden Sie Ihren UFO™ mini 2 mit dem USB-Ladekabel auf, bis die Anzeige durchgehend leuchtet. Eine Aufladung von 2,5 Stunden reicht für bis zu 40 Behandlungen.

Wenn UFO™ mini 2 nicht ausgeschaltet werden kann und/oder die Schnittstellentasten nicht reagieren:

- Der Mikroprozessor funktioniert vorübergehend nicht richtig. Halten Sie die Universal-Betriebstaste gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

Wenn UFO™ mini 2 nicht mit der FOREO For You App synchronisiert wird:

- Schalten Sie Ihr Bluetooth aus und wieder ein, um die Verbindung erneut herzustellen.
- Schließen Sie die FOREO For You App und öffnen Sie sie erneut, um den Vorgang zu starten.
- Prüfen Sie im App Store Ihres Mobilgerätes, ob die App aktualisiert werden muss.

GARANTIEBEDINGUNGEN

GARANTIE REGISTRIEREN

Um Ihre 2-jährige Garantie freizuschalten, registrieren Sie sich in der FOREO For You App und befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen.

2-JÄHRIGE GARANTIE

Für dieses Gerät bietet FOREO ZWEI (2) JAHRE Garantie ab dem Kauf des Geräts für Fehler bei der Ausführung oder Materialfehler, die bei normaler Verwendung des Geräts entstehen. Die Garantie deckt alle Teile ab, die sich auf die Funktion des Geräts auswirken. Sie deckt KEINE oberflächliche Schäden ab, die auf bloße Abnutzung oder ein Versehen, eine Zweckentfremdung oder Nachlässigkeit zurückzuführen sind. Jeder Versuch, das Gerät (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, hat ein Erlöschen der Garantie zur Folge.

Sollten Sie einen Mangel feststellen und sich diesbezüglich innerhalb des Garantiezeitraums an FOREO wenden, wird FOREO das Gerät nach eigenem Ermessen unentgeltlich ersetzen. Ansprüche auf die Garantie müssen durch angemessene Nachweise gestützt werden, die belegen, dass die Antragsstellung innerhalb des Garantiezeitraums erfolgt ist. Bitte bewahren Sie zur Bestätigung Ihrer Garantie für die Dauer des Garantiezeitraums den originalen Kaufbeleg gemeinsam mit diesen Garantiebedingungen auf.

Um Ihre Garantie geltend zu machen, melden Sie sich in Ihrem Konto auf www.foreo.com an und wählen Sie die entsprechende Option aus. Versandkosten werden nicht erstattet. Dieses Vorgehen erfolgt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten als Kunde und hat keine Auswirkungen auf diese Rechte.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG


Entsorgung alter Elektronikgeräte (gültig in der EU und anderen europäischen Ländern mit Systemen der Mülltrennung).



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll entsorgt, sondern zur entsprechenden Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden sollte. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät vorschriftsmäßig entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, die möglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung des Produkts entstehen könnten. Das Recycling von Materialien trägt zudem zur Erhaltung der natürlichen Rohstoffe bei.

Für weitere Informationen zum Recycling des Geräts wenden Sie sich bitte an Ihr Entsorgungsunternehmen vor Ort oder an Ihren Händler.

AKKU-ENTNAHME

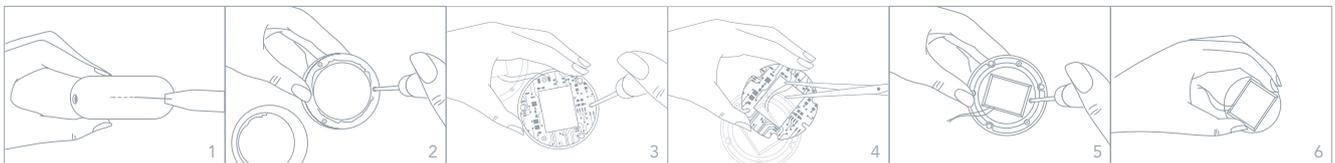

SPEZIFIKATIONEN

MATERIALIEN:	Körperfreundliches Silikon & PC + ABS, Aluminiumlegierung	TEMPERATUR:	45 Grad Celsius
FARBE:	Pearl Pink/Mint/Fuchsia	VERWENDUNG:	Bis zu 40 Anwendungen pro Aufladung
ABMESSUNGEN:	72,5 mm x 31,4 mm	STANDBY:	180 Tage
GEWICHT:	99 g	FREQUENZ:	180 Hz
AKKU:	Li-Ion 1050 mAh 3,7 V	MAX. SCHALLPEGEL:	<50 dB
		BEDIENOBERFLÄCHE:	1 Taste

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Benutzer dieses Geräts verwenden es auf eigene Gefahr. FOREO und seine Vertriebspartner übernehmen keinerlei Verantwortung bzw. Haftung für eventuelle Verletzungen bzw. körperliche oder sonstige Schäden, die direkt oder indirekt durch die Verwendung des Geräts entstehen. FOREO behält sich ferner das Recht vor, dieses Dokument zu überarbeiten und von Zeit zu Zeit Änderungen an dessen Inhalt vorzunehmen, wobei keinerlei Informationspflicht besteht.

WARNHINWEIS: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die seitens des Herstellers nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung verliert, dieses Gerät zu verwenden.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohnbereichen bieten. Von diesem Gerät wird Hochfrequenzenergie erzeugt, genutzt und eventuell ausgestrahlt. Wird das Gerät nicht ordnungsgemäß installiert und verwendet, kann dies zu Störungen des Funkverkehrs führen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn das Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie ihren Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis als denjenigen des Empfängers an.
- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.

Das Modell kann ohne Vorankündigung geändert werden, um Verbesserungen vorzunehmen.

FAQs

UFO™ mini 2 BASICS

1. WAS SIND DIE ERSTEN SCHRITTE NACH ERHALT MEINES UFO™ mini 2 GERÄTS?
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer intelligenteren Hautpflege! Das Wichtigste zuerst: Laden Sie die kostenlose FOREO For You App herunter, um Ihr Gerät freizuschalten und zu registrieren. (Weitere Informationen finden Sie im nachstehenden Abschnitt „DIE APP“).
2. WIE BEGINNE ICH MEINE ERSTE BEHANDLUNG?
Reinigen und trocknen Sie zunächst Gesicht und Hals gründlich. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir die Reinigung mit LUNA™. Setzen Sie dann die UFO™ Power Aktivierte Maske auf Ihr UFO™ mini 2 Gerät auf oder platzieren Sie die Sheet Maske auf Ihrem Gesicht. Aktivieren Sie schließlich Ihre UFO™ mini 2 Maskenroutine über die App und befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Weitere Informationen finden Sie in der obigen Anleitung zur Verwendung.
3. WIE SCHALTE ICH MEIN UFO™ mini 2 GERÄT EIN UND AUS?
Drücken Sie zum Einschalten die Universal-Betriebstaste an Ihrem UFO™ mini 2 Gerät. Um Ihr Gerät auszuschalten, halten Sie die Universal-Betriebstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Nach Abschluss einer vorprogrammierten Maskenroutine schaltet sich das Gerät automatisch aus.
4. WAS IST IM LIEFERUMFANG MEINES UFO™ mini 2 GERÄTS ENHALTEN?
1 UFO™ mini 2, 1 USB-Ladekabel, 1 Make My Day Maske, 1 Bedienungsanleitung, 1 Quick Start Guide & 1 Ständer.

DAS UFO™ mini 2 GERÄT

5. WIE OFT KANN ICH MEIN UFO™ mini 2 GERÄT VERWENDEN?
UFO™ mini 2 Power-Masken-Behandlungen sind für eine zweimalige tägliche Anwendung ausgelegt, morgens und abends. Je nach den Bedürfnissen Ihrer Haut und Ihren persönlichen Vorlieben können Sie das Gerät jedoch öfter oder weniger häufig verwenden.
6. WIE LANGE DAUERT EINE BEHANDLUNG?
Die Maskenbehandlungen Make My Day & Call It a Night dauern nur 90 Sekunden. Alle anderen Behandlungszeiten hängen von der wirksamsten Technologiekombination ab.
7. IST JEDE UFO™ mini 2 BEHANDLUNG GLEICH?
Nein. Jede FOREO Maske ist Teil einer einzigartigen Behandlungsroutine, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
8. KANN ICH MEIN UFO™ mini 2 GERÄT AUCH BEI SENSIBLER HAUT VERWENDEN?
UFO™ mini 2 Geräte sind für jeden Hauttyp sicher und geeignet. Außerdem können Sie je nach den spezifischen Bedürfnissen Ihrer Haut aus einer Reihe verschiedener FOREO Masken wählen, die verschiedene Hautpflegebedürfnisse erfüllen.
9. KANN ICH MEIN UFO™ mini 2 GERÄT AUCH IN DER AUGENPARTIE VERWENDEN?
Ja, UFO™ mini 2 Geräte können problemlos im Bereich unter den Augen verwendet werden. Wir empfehlen, das Gerät sanft über die Augenpartie gleiten zu lassen und hierbei nur sehr leichten Druck auszuüben.
10. KANN ICH MEIN UFO™ mini 2 GERÄT NACH EINER PLASTISCHEN OPERATION ODER NACH BEHANDLUNG MIT BOTOX ODER HAUTFÜLLERN VERWENDEN?
UFO™ mini 2 Geräte bieten eine sanfte Gesichtsbehandlung, die für jeden Hauttyp geeignet ist. Nach medizinischen Eingriffen sollten Sie jedoch den Rat Ihres Arztes einholen.
11. KANN ICH MEINE FOREO LUNA™ ZUSAMMEN MIT MEINEM UFO™ mini 2 VERWENDEN?
Ja! UFO™ mini 2 und LUNA™ wirken besser in Kombination miteinander – die LUNA™ Gesichtsreinigungsbürste entfernt abgestorbene Hautzellen sanft, befreit die Poren und entfernt Schmutz und Fett zu 99,5 %, wodurch die optimale Grundlage für eine UFO™ mini 2 Power-Masken-Behandlung geschaffen wird.
12. WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN UFO™ 2 UND UFO™ mini 2?
Sowohl UFO™ 2 als auch UFO™ mini 2 bieten eine hochentwickelte Power-Masken-Behandlung in nur 90 Sekunden. UFO™ 2 verfügt jedoch auch über eine Kryo-Therapie-Funktion, die durch sofortige Abkühlung die Poren verkleinert und den Teint straffer erscheinen lässt. Während UFO™ mini 2 nur mit ausgewählten FOREO Masken verwendet werden kann, kann UFO™ 2 mit allen FOREO Masken und den meisten Nicht-FOREO Sheet Masken verwendet werden.
13. WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN UFO™ mini UND UFO™ mini 2?
Im Vergleich zu UFO™ mini wurde UFO™ mini 2 mit ultraschneller Thermo-Therapie und Vollspektrum-LEDs (insgesamt 8) gestaltet, wodurch das Maskenerlebnis effizienter und effektiver ist als je zuvor!

DIE APP

14. WARUM MUSS ICH DIE FOREO APP HERUNTERLADEN, BEVOR ICH MEIN UFO™ mini 2 GERÄT VERWENDEN KANN?

Alle App-fähigen FOREO Produkte müssen beim ersten Einschalten über die FOREO For You App aktiviert und freigeschaltet werden. Dies trägt zum Schutz vor gefälschten/kopierten FOREO Produkten bei und erleichtert es, die Garantie zu registrieren und so Ihre Investition abzusichern.

15. WIE VERBINDE ICH MEIN UFO™ mini 2 GERÄT MIT DER FOREO APP?

Laden Sie die FOREO For You App auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter und schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein. Drücken Sie die Universalstaste einmal, um das Gerät einzuschalten. Ein blinkendes weißes Licht zeigt an, dass sich Ihr Gerät im Kopplungsmodus befindet. Befolgen Sie die Anweisungen in der App zur Registrierung und Kopplung Ihres UFO™ mini 2 Geräts.

16. FUNKTIONIERT MEIN UFO™ mini 2 GERÄT AUCH OHNE APP?

Ja, Sie können beide Geräte auch manuell verwenden; die FOREO For You App ist hierzu nicht erforderlich. Um Ihr Gerät für die erstmalige Verwendung freizuschalten, müssen Sie es jedoch über die FOREO For You App registrieren. Die Make My Day und Call It a Night Behandlungen sind in UFO™ mini 2 vorprogrammiert und benötigen keine FOREO App. Um jedoch die übrigen FOREO Masken freizuschalten, müssen Sie entweder die entsprechende Behandlung in der App auswählen oder den Barcode auf der Rückseite der Verpackung der entsprechenden FOREO Maske scannen, um die Behandlung zu aktivieren – die Maske synchronisiert sich daraufhin automatisch mit Ihrem Gerät und kann beim nächsten Mal manuell aufgerufen werden. Die individuelle Gestaltung Ihrer Power-Masken-Routine kann nur über die App erfolgen.

17. KANN ICH MEINE POWER-MASKEN-BEHANDLUNGSROUTINE INDIVIDUELL GESTALTEN?

Ja. Jede UFO™ Power Aktivierte Maske wird zwar mit einer empfohlenen, vorprogrammierten Behandlungsroutine geliefert, Sie können Ihr Maskenerlebnis aber auch über die FOREO For You App individuell gestalten, indem Sie Ihre eigene Behandlungsroutine einrichten. In der App können Sie die Stufe des LED-Lichts und der T-Sonic™ Pulsation einstellen und auswählen, ob Ihre individuelle Routine auch eine Thermo-Therapie beinhalten soll.

FEHLERBEHEBUNG & WARTUNG

18. WAS HAT ES ZU BEDEUTEN, WENN MEIN UFO™ mini 2 GERÄT DAUERHAFT BLINKT?

Ein blinkendes Licht um das Gerät herum bedeutet, dass sich Ihr UFO™ mini 2 Gerät im Bluetooth-Kopplungsmodus befindet oder aufgeladen werden muss. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um Ihr Gerät zu synchronisieren.

19. WIE LADE ICH MEIN UFO™ mini 2 GERÄT AUF?

UFO™ mini 2 Geräte sind über USB aufladbar, wobei eine zweieinhalbstündige Aufladung bis zu 40 Anwendungen ermöglicht.

20. WIE REINIGE ICH MEIN UFO™ mini 2 GERÄT?

Waschen Sie das Gerät und den Kunststoffring mit Seife und spülen Sie es anschließend mit warmem Wasser ab. Tupfen Sie es mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken. Nach dem Gebrauch empfehlen wir, das Gerät mit dem Silikon-Reinigungsspray von FOREO einzusprühen und mit warmem Wasser abzuspülen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Platzieren Sie das Gerät dann zum Trocknen auf dem Ständer. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten, da diese die Haut reizen und das Silikon beschädigen können.

FOREO MASKEN

21. KANN ICH DIE FOREO MASKEN WIEDERVERWENDEN?

Jede UFO™ Power Aktivierte Maske und die FOREO Sheet Maske ist nur für den Einmalgebrauch bestimmt. Wenn jedoch eine Behandlung mit UFO™ mini 2 nicht ausreichend war, drücken Sie die Universal-Betriebstaste innerhalb von 30 Sekunden nach Ende der Routine erneut, um dieselbe Behandlung erneut zu beginnen!

22. MUSS ICH DIE MASKENESSENZ NACH VERWENDUNG MEINES UFO™ mini 2 GERÄTS ABWASCHEN?

Nein, die Hyper-Infusion Technologie wurde speziell entwickelt, dazu beizutragen, dass die Maskenessenz tiefer und schneller in die Haut eindringt. Massieren Sie die Restessenz nach der Behandlung einfach in die Haut ein oder entfernen Sie eventuelle Rückstände mit einem Wattepad.

23. WOHER WEISS ICH, DASS MEINE FOREO MASKE ECHT IST?

Über die FOREO For You App können Sie den Barcode auf der Verpackung der Maske scannen, um ihre Echtheit zu überprüfen.

©2021 FOREO AB. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

EU-HÄNDLER: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SCHWEDEN.

US-HÄNDLER: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS-HÄNDLER: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIEN.

KONZIPIERT UND ENTWICKELT VON FOREO SWEDEN.

HERGESTELLT FÜR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM