

FOREO



UFO™ mini 2

İSVEÇ GÜZELLİK TEKNOLOJİSİ
POWER MASKE TERAPİ CİHAZI



ONLINE KILAVUZ

KULLANIM KILAVUZU



BAŞLANGIÇ

UFO™ mini 2'yi satın alarak olağanüstü bir cilt bakımı keşfetme yolunda ilk adımı attığınız için tebrikler. Evinizin rahatlığında geliştirilmiş power maske teknolojisinin tüm avantajlarından yararlanmaya başlamadan önce lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okumak için birkaç dakikanızı ayırın.

Lütfen KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN ve bu ürünü sadece bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın.

⚠ **UYARI:** BU CİHAZ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞE İZİN VERİLMEMEKTEDİR.

UFO™ mini 2 GENEL BAKIŞ

Ultra hızlı ısınma ve daha da geniş bir LED ışık spektrumu ile yeniden tasarlanan UFO™ mini 2, saniyeler içinde size harika bir cilt sunan devrim niteliğinde bir maske cihazıdır. Gelişmiş Hyper-Infusion Teknolojisine sahip UFO™ mini 2, maskenizin etkisini arttırmak için Termo-Terapi'yi T-Sonic™ titreşimlerle birleştirir. 8 farklı LED ışıkla daha da geliştirilmiş olan UFO™ mini 2, sadece 90 saniyede arınmış, ısıtılmış bir cildi ortaya çıkarır!

UFO™ mini 2 İLE TANIŞIN

EVRENSEL GÜÇ DÜĞMESİ

Cihazı açar, kapatır ve cihazı Bluetooth moduna geçirir ve bakım rutinini seçer.

ULTRA-HİJYENİK SİLİKON

Bakterilere dayanıklı ve süper yumuşak.

T-SONIC™ TİTREŞİMLER

Cildin parlaklığını arttırmak için yatıştırıcı bir yüz masajı sunar.

ŞARJ NOKTASI

2.5 saat şarj başına 40 kullanıma kadar.

FULL-SPECTRUM LED IŞIK

Arınmış bir cilt için gözle görülür şekilde cildinizin gençleşmesine yardımcı olur.

TERMO-TERAPİ

Maske bileşenlerinin emilimini arttırmak için cildin yumuşamasını sağlar.

GÖSTERGE IŞIKLARI

Cihazınızın hangi maske terapisine ayarlandığını belirtmek için ışıklar yanar.

ŞEFFAF HALKA

UFO™ Power Aktif Maske'yi sabitler.



UFO™ POWER AKTİF MASKE

UFO™ ile kullanılmak üzere özel formüle edilmiş yumuşak mikro fiber maskeler.




USB ŞARJ KABLOSU

USB kablo ile dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde şarj edin.



İNTERAKTİF UYGULAMA

Önceden programlanmış power maske rutinlerini cihazla senkronize eder.

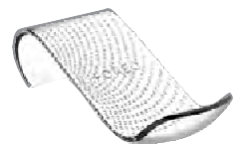

ŞIK TASARIMLI STAND

UFO™ mini 2'yi korur ve hızlı kurumasına yardımcı olur.

ÖNCELİKLE...

- 1 İlk kullanımdan önce cihazı kaydetmek ve kilidini açmak için FOREO For You uygulamasını indirin.
- 2 Bluetooth ile uygulamaya bağlanın ve UFO™ mini 2 cihazını senkronize etmek için evrensel güç düğmesine basın.
- 3 Uygulamayı kullanarak maske barkodunu taratın ve talimatları takip edin.



FOREO uygulamasını indirin.



Şeffaf halkayı UFO™ mini 2'den ayırın.



UFO™ Power Aktif Maske'yi paketinden çıkarın.



Şeffaf halka yardımıyla maskeyi FOREO logosu yukarı bakacak şekilde yerleştirin.




Power maske terapisinin tadını çıkarın!

NASIL KULLANILIR

UFO™ POWER AKTİF MASKELER

Temiz ve kuru bir cilt ile başlayın. En iyi sonuçlar için cildinizi önce LUNA™ ile temizlemenizi öneririz.

- 1 Cihaza sabitlenmiş maske yardımıyla maske özünü eşit bir şekilde dağıtarak UFO™ mini 2'yi cilt üzerinde nazikçe gezdirin.
- 2 UFO™ mini 2 cihazı ile maske formülünü cildinize masaj yaparak uygulayın. Cihazı çeneden başlayarak ve ardından sağ yanak yönünde ve daha sonra alın bölgesine doğru hareket ettirerek saat yönünde bir daire çizin. Sol yanak ardından çene ve boyun bölgesine doğru devam edin. Bu hareketi terapi bitine kadar tekrar edin.
- 3 Kalan maske özü ile cildinize masaj yapın veya fazla özü pamuk yardımı ile alın. Dilerseniz sevdiğiniz bir nemlendirici uygulayarak terapinizi tamamlayın.

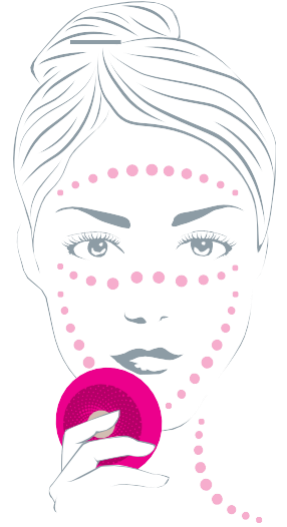

FOREO KAĞIT MASKELER

- 1 FOREO kağıt maskenizi nazikçe açın, göz ve ağız çevresini ayarlayarak yüzünüze yerleştirin.

UFO™ mini 2 cihazını kullanarak maske formülünü cildinize dairesel hareketlerle masaj yaparak dağıtın. Cihazı

- 2 çene bölgenizden başlayarak daha sonra sağ yanağa ve alına doğru hareket ettirerek yüz çevrenizde saat yönünde bir daire çizin. Sol yanaktan çeneye doğru devam edin. Terapi bitene kadar bu hareketi tekrarlayın.

Kağıt maskeyi dilerseniz 10 dakika cilt üzerinde bekletin veya atın. Kalan maske özünü nazikçe cildinize sürün ya

- 3 da fazla maske özünü bir pamuk yardımı ile alın. İsterseniz rutininizi sevdiğiniz bir nemlendirici ile tamamlayın.


YENİ BİR TERAPİ EKLEME

UFO™ mini 2, 8 farklı maske terapisi için programlanabilir! Make My Day ve Call It a Night maskeleri, ilk iki gösterge ışığına önceden programlanmıştır ve üçüncü ışık kişiselleştirilmiş terapiniz için ayrılmıştır.

Diğer tüm maske terapileri ilk kullanımdan önce uygulama aracılığıyla aktif edilmelidir. Daha sonra terapinize interaktif uygulama ile ya da evrensel güç düğmesine kullanarak devam edebilirsiniz.



Tüm Ek Maske Terapileri*

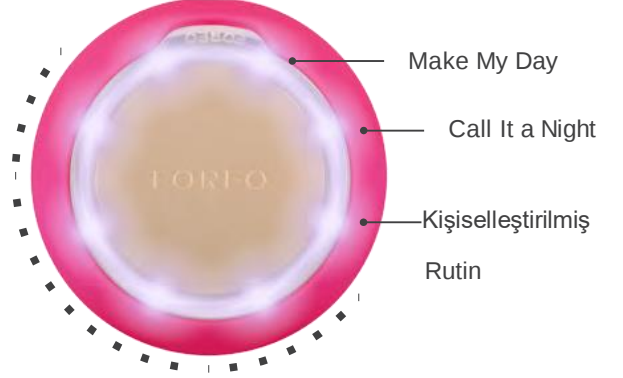

UYGULAMASIZ UFO™ mini 2 KULLANIMI

- 1 Make My Day terapi rutinini başlatmak ve etkinleştirmek için evrensel güç düğmesine basın.
- 2 Call It a Night terapisini etkinleştirmek için tekrar basın ve her bir maske için bu şekilde devam edin. (Örneğin; H2Overdose terapisi uygulamanızda 4. sıradaysa bu terapiyi etkinleştirmek için evrensel güç düğmesine 4 kez basın.)
- 3 Power Maske terapiniz başlamaya hazır!

DAHA FAZLASI?

Eğer bir UFO™ mini 2 terapisi sizin için yeterli olmadıysa aynı terapiyi yeniden başlatmak için terapi bittikten sonra 30 saniye içinde evrensel güç düğmesine tekrar basın! Ayrıca power maske deneyiminizi kişiselleştirmek için uygulamayı kullanarak maskenize eşlik edecek teknolojiyi seçerek ya da düzenleyerek kendi terapi rutininizi oluşturabilirsiniz.

UFO™ mini 2'yi TEMİZLEME

UFO™ mini 2'yi her kullanımdan sonra iyice temizleyin. Hem cihazı ve hem de şeffaf halkayı sabun ile yıkayın ve ardından su ile durulayın. Tüy bırakmayan bir bez ya da havlu ile kurulayın. En iyi sonuçlar için kullanımdan sonra cihazı FOREO Silikon Temizleme Spreyi ile temizlemenizi, ardından ılık su ile durulamanızı ve cihazı kuruması için standı yerleştirmenizi öneririz.

NOT: Cildi tahriş edebileceği ve silikona zarar verebileceği için asla alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünleri kullanmayın.

ÖNEMLİ İDEAL GÜVENLİK İÇİN:

UFO™ mini 2 cihazınız yalnızca UFO™ Power Aktif Maskelerle ya da FOREO maskelerle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz açık durumdayken doğrudan cilt / yüz üzerine asla yerleştirilmemelidir.

- Bir cilt rahatsızlığınız veya herhangi bir tıbbi endişeniz varsa kullanmadan önce lütfen bir cilt uzmanına danışın.
- UFO™ mini 2 ile bakımınız konforlu olmalıdır – herhangi bir rahatsızlık yaşarsanız derhal kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.
- Göz altı bölgesinde kullanırken özen gösterin ve göz ya da göz kapağınız ile temasından kaçının.
- Hijyen nedeniyle, UFO™ mini 2'nizi başka biriyle paylaşmamanızı öneririz.
- UFO™ mini 2 cihazını doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya veya aşırı sıcak suyu maruz bırakmayın.
- UFO™ mini 2 ısıtılmış bir yüzeye sahiptir. Isıya duyarlı kişiler bu cihazı kullanırken dikkatli ve özenli olmalıdır.
- Bu cihaz, çocuklar veya fiziksel ve zihinsel yetenekleri sınırlı kişiler tarafından ya da yakınında kullanıldığında yakın denetim gerektirir.
- Bu ürün herhangi bir şekilde hasar görmüş ise kullanmayı bırakın. Üründe servis bakımı gerektirecek bir parça yoktur.
- Bu cihazı sadece bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanım amacına uygun olarak kullanın. Sorunuza cevap bulamazsanız veya cihazın çalışmasıyla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen foreo.com/support adresini ziyaret edin.

SORUN GİDERME

UFO™ mini 2' nin performansındaki değişikliklerde alınabilecek önlemler.

Evrensel güç düğmesine basıldığında UFO™ mini 2 etkinleştirilmezse:

- Cihaz bataryası bitmiştir. Işık sabit olarak yanana kadar UFO™ mini 2'nizi USB şarj kablosuyla şarj edin. 2.5 saatlik şarj ile 40 terapiye kadar kullanım sağlar.

UFO™ mini 2'niz kapanmazsa ve / veya arayüz düğmeleri yanıt vermezse:

- Mikroişlemci geçici olarak arızalıdır. Cihazı yeniden başlatmak için güç düğmesine basılı tutun.

UFO™ mini 2'niz FOREO For You uygulaması ile senkronize olmazsa:

- Yeniden bağlanmayı denemek için Bluetooth'unuzu kapatıp tekrar açın.
- FOREO For You uygulamasını kapatın ve işlemi yeniden başlatmak için uygulamayı tekrar açın.
- Mobil cihazınızın uygulama mağazasından FOREO For You uygulamasının güncelleme gerektirip gerektirmediğini kontrol edin.

GARANTİ ŞARTLARI VE KOŞULLARI

KAYIT GARANTİSİ

2-Yıl Sınırlı Garantinizi etkinleştirmek için FOREO For You uygulamasını indirerek ve talimatları takip ederek kaydolun.

2-YIL SINIRLI GARANTİ

FOREO, hatalı işçilik veya cihazın Normal Kullanımından kaynaklanan kusurlara karşı orijinal satın alma tarihinden sonra İKİ (2) YIL garanti hakkı sunar. Garanti, cihazın işlevini etkileyen çalışma parçalarını kapsar. Adil aşınma ve yıpranma nedeniyle meydana gelen kozmetik bozulmaları veya yanlış kullanım, kaza ya da ihmal kaynaklı hasarları KAPSAMAZ. Cihazı (veya aksesuarlarını) açma veya parçalara ayırma girişimleri garantiyi geçersiz kılar.

Garanti süresi içinde bir kusur tespit edip FOREO'ya bildirirseniz, FOREO incelemelere bağlı olarak cihazı ücretsiz değiştirir. Garanti kapsamındaki talepler, talep tarihinin garanti süresi içinde olduğuna dair kanıtlarla desteklenmelidir. Garantinizi doğrulamak için lütfen orijinal satın alma makbuzunuzu garanti süresi boyunca bu garanti koşullarıyla birlikte saklayın.

Garantinizi talep etmek için www.foreo.com adresinden hesabınıza giriş yapmalı ve ardından garanti talebi sekmesinden talebinizi gerçekleştirmelisiniz. Teslimat masrafları iade edilmez. Bu taahhüt, tüketici olarak yasal haklarınıza ek olarak sunulur ve tüketici haklarınızı hiçbir şekilde etkilemez.

GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ


Eski elektronik aletlerin imhası (AB ve farklı atık toplama sistemi olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir).



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kovası sembolü, bu cihazın evsel atık olarak işlem görmemesi gerektiğini, bunun yerine elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına getirilmesi gerektiğini belirtir. Bu cihazın doğru şekilde imha edildiğinden emin olarak, ürünün uygun olmayan imhadan kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçlarının önlenmesine yardımcı olacaksınız. Materyallerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır.

Cihazınızın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki evsel atık imha hizmetlerine veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

CİHAZ PİLİNİN ÇIKARILMASI

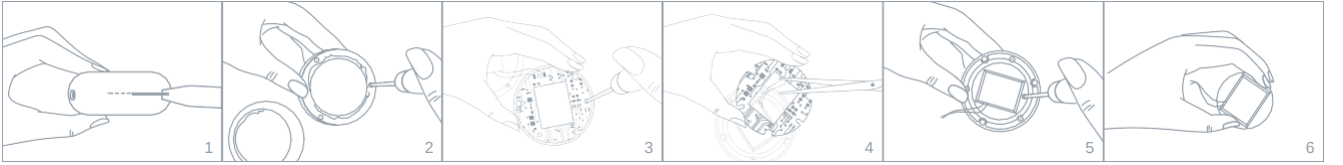

TEKNİK ÖZELLİKLER

MALZEMELER:	Vücut için güvenli silikon ve PC + ABS, Alüminyum Alaşım	SICAKLIK:	45 Derece Santigrat
RENK:	Pearl Pink/Mint/Fuchsia	KULLANIM:	Şarj başına 40 kullanıma kadar
BOYUT:	72.5 mm x 31.4 mm	BEKLEME:	180 gün
AĞIRLIK:	99g	FREKANS:	180 Hz
PİL:	Li-Ion 1050mAh 3.7V	MAKS. SES DÜZEYİ:	<50 dB
		ARAYÜZ:	1-düğme

Yasal Uyarı: Bu cihazın riskleri kullanıcının sorumluluğundadır. FOREO ya da perakendecileri doğrudan veya dolaylı olarak bu cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkan fiziksel veya diğer türlü yaralanma ve hasar için hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmez. Ayrıca FOREO, herhangi bir kişiyi değişikliklerden haberdar etme zorunluluğu olmaksızın bu yayını yenileme ve içeriğinde zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

DİKKAT: Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan bu bölümdeki değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

NOT: Bu ekipman test edilmiştir ve FCC kurallarının 15. bölümüne uygun olarak B sınıfı dijital cihaz sınırlamalarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar bir konut alanında zararlı radyo parazitlerine karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, ayrıca talimatlara uygun kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı radyo paraziti neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağına dair bir garanti yoktur. Eğer bu ekipman, radyo ve televizyon ile alıcı iletişimde zararlı radyo paraziti neden olursa, bu durum ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilir, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını alarak radyo parazitini gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının takılı olduğundan farklı devredeki bir prize takın.
- Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Model, geliştirmeler için haber verilmeksizin değiştirilebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

UFO™ mini 2 BAŞLANGIÇ

1. UFO™ mini 2 CİHAZIMI ALDIKTAN SONRA NE YAPMALIYIM?
Daha akıllı bir cilt bakımını keşfettiğiniz için tebrikler! İlk olarak, cihazınızın kilidini açmak ve kaydetmek için FOREO For You uygulamasını ücretsiz olarak indirin. (Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki 'UYGULAMA' bölümüne bakınız)
2. İLK TERAPİYE NASIL BAŞLARIM?
Öncelikle yüz ve boyun bölgenizi dikkatlice temizleyin ve kurulayın - en iyi sonuçlar için cildinizi önce LUNA™ ile temizlemenizi öneririz. Ardından UFO™ Power Aktif Maske'yi UFO™ mini 2 cihazınıza sabitleyin veya yüzünüze bir kağıt maske yerleştirin. Son olarak UFO™ mini 2 maske rutininizi uygulama aracılığıyla etkinleştirin ve talimatları adım adım takip edin. Daha fazla bilgi için yukarıda bulunan "Nasıl Kullanılır" başlığına bakınız.
3. UFO™ mini 2 CİHAZIMI NASIL AÇAR / KAPATIRIM?
Cihazı açmak için evrensel güç düğmesine basın, kapatmak içinse evrensel güç düğmesine 3 saniye basılı tutun. Önceden programlanmış bir maske rutini tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
4. UFO™ mini 2 CİHAZ İÇERİĞİNDE NELER VAR?
1 adet UFO™ mini 2 Cihazı, 1 adet USB Şarj Kablosu, 1 adet Make My Day Maske, 1 adet Kullanım Kılavuzu, 1 adet Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve 1 adet Stand.

UFO™ mini 2 CİHAZI

5. UFO™ mini 2 CİHAZIMI NE SIKLIKLA KULLANABİLİRİM?
UFO™ mini 2 power maske terapileri sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez kullanım için geliştirilmiştir. Bununla birlikte cildinizin ihtiyaçlarına ve kişisel tercihlerinize göre daha az ya da daha çok kullanabilirsiniz.
6. HER BİR TERAPİ NE KADAR SÜRER?
Make My Day ve Call It a Night maske terapileri sadece 90 saniye sürer. Diğer tüm terapi süreleri teknolojilerinin en etkili birleşimine bağlı olarak değişiklik gösterir.
7. HER UFO™ mini 2 TERAPİSİ AYNI MI?
Hayır, en etkili sonuçlar için her bir FOREO Maske benzersiz bir terapi rutini sunar.
8. UFO™ mini 2 CİHAZI HASSAS CİLTLER İÇİN GÜVENLİ Mİ?
UFO™ mini 2 cihazlarının kullanımı güvenlidir ve tüm cilt tipleri için uygundur. Ayrıca, cildinizin özel ihtiyaçlarına ve cilt tipinize göre farklı FOREO maskelerden birini seçebilirsiniz.
9. UFO™ mini 2 CİHAZI GÖZ BÖLGESİNDE KULLANILIR MI?
Evet, UFO™ mini 2 cihazının göz çevresinde kullanımı güvenlidir. Minimum basınç uygulayarak göz çevresinde nazikçe gezdirmenizi öneririz.
10. UFO™ mini 2 CİHAZI PLASTİK CERRAHİ, BOTOKS VEYA DERMAL DOLGULARDAN SONRA KULLANIR MI?
UFO™ mini 2 cihazları tüm cilt tiplerine uygun, nazik bir yüz bakımı sunar. Bununla birlikte, yakın zamanda herhangi bir tıbbi prosedür geçirdiyseniz kullanmadan önce doktorunuza danışın.
11. FOREO LUNA™ CİHAZIMI UFO™ mini 2 İLE KULLANABİLİR MİYİM?
Evet! UFO™ mini 2 cihazları ve LUNA™ birlikte daha etkilidir - LUNA™ yüz temizleme cihazı, ölü deriyi nazikçe temizler, gözenekleri açar, kir ve yağ %99.5 oranında temizleyerek UFO™ mini 2 maske terapisi için mükemmel bir cildi ortaya çıkarır.
12. UFO™ 2 VE UFO™ mini 2 ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Hem UFO™ 2 hem de UFO™ mini 2, 90 saniyede harika bir maske terapisi sunar. UFO™ 2, ayrıca gözeneklerin görünümünü küçültmek ve daha sıkı görünen bir cilt sağlamak için anında soğutan Kriyo-Terapi'ye sahiptir. Buna ek olarak, UFO™ mini 2 sadece seçili FOREO maskeleri ile kullanılabilirken UFO™ 2 tüm FOREO maskeleri ve FOREO'ya ait olmayan çoğu kağıt maske ile de kullanılabilir.
13. UFO™ mini CİHAZLARI VE UFO™ mini 2 CİHAZLARI ARASINDAKİ FARK NEDİR?
UFO™ mini cihazlarından farklı olarak, UFO™ mini 2 cihazları her zamankinden daha etkili bir maske deneyimi sunar

ultra hızlı Thermo-Therapy ve full spectrum LED ışıklarla (toplam 8 adet) yeniden tasarlandı.

UYGULAMA

14. UFO™ mini 2 CİHAZIMI KULLANMADAN ÖNCE NEDEN FOREO UYGULAMASINI İNDİRMEM GEREKİYOR?

Uygulama ile etkinleştirilen tüm FOREO ürünleri, ilk kullanımda FOREO For You uygulaması aracılığıyla etkinleştirilmeli ve kilidi açılmalıdır. Böylece sahte / kopyalanmış FOREO ürünlerine karşı koruma sağlanmaktadır. Ayrıca uygulama ile cihazların garanti kaydı ve korunması kolaylaşır.

15. UFO™ mini 2 CİHAZIMI FOREO UYGULAMASI İLE NASIL EŞLEŞTİRİRİM?

FOREO For You uygulamasını akıllı telefonunuza ya da tabletinize indirin ve Bluetooth'u açın. Cihazı açmak için evrensel güç düğmesine bir kez basın. Yanıp sönen beyaz ışık, cihazın eşleştirme modunda olduğunu gösterir. UFO™ mini 2 cihazınızı kaydetmek ve eşleştirmek için uygulama içeriğindeki talimatları takip edin.

16. UFO™ mini 2 CİHAZIM UYGULAMA OLMADAN ÇALIŞIR MI?

Evet, cihazınızı uygulama olmadan kullanabilirsiniz. Ancak, ilk kullanımdan önce cihazın kilidini açmak için cihazınızı FOREO For You uygulaması aracılığıyla kaydetmelisiniz. Make My Day ve Call It a Night terapileri UFO™ mini 2'ye önceden programlanmıştır ve FOREO uygulaması olmadan çalışır. Buna ek olarak, diğer tüm FOREO Maskeler için ya terapi seçmek ya da her bir FOREO Maske paketinin barkodunu taratarak aktif hale getirmek için uygulamayı kullanmanız gerekir – böylece maskeler cihazınızla otomatik olarak senkronize olur ve daha sonra manuel olarak erişilebilir.

17. POWER MASKE TERAPİMİ KİŞİSELLEŞTİREBİLİR MİYİM?

Evet. Her bir UFO™ Power Aktif Maske önceden programlanmış bir terapi rutini ile gelse de FOREO For You uygulamasını kullanarak kendi terapi rutininizi oluşturabilir ve Power Maske deneyiminizi kişiselleştirebilirsiniz. Uygulamayı kullanırken tercih ettiğiniz LED ışığı ve T-Sonic™ titreşim seviyesini seçebilir, kişiselleştirilmiş rutininizi Thermo-Terapi ile destekleyebilirsiniz.

SORUN GİDERME VE BAKIM

18. UFO™ mini 2 CİHAZIM SÜREKLİ YANIP SÖNÜYORSA NE ANLAMA GELİYOR?

Cihazın etrafında yanıp sönen ışık, UFO™ mini 2'nin Bluetooth eşleştirme modunda olduğunu veya cihazın şarj edilmesi gerektiğini gösterir. Cihazınızı senkronize etmek için uygulamadaki talimatları takip edin.

19. UFO™ mini 2 CİHAZIMI NASIL ŞARJ EDERİM?

UFO™ mini 2 cihazları USB ile şarj edilebilir ve iki buçuk saatlik şarj ile 40 kullanıma kadar terapi sunar.

20. UFO™ mini 2 CİHAZIMI NASIL TEMİZLERİM?

UFO™ mini 2'yi her kullanımdan sonra iyice temizleyin. Hem cihazı ve hem de şeffaf halkayı sabun ile yıkayın ve ardından su ile durulayın. Tüy bırakmayan bir bez ya da havlu ile kurulayın. En iyi sonuçlar için kullanımdan sonra cihazı FOREO Silikon Temizleme Spreyi ile temizlemenizi, ardından ılık su ile durulamanızı ve cihazı kuruması için standı yerleştirmenizi öneririz. Cildi tahriş edebileceği ve silikona zarar verebileceği için asla alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünleri kullanmayın.

FOREO MASKELER

21. FOREO MASKELER YENİDEN KULLANILIR MI?

Her bir UFO™ Power Aktif Maske ve FOREO Kağıt Maskeler yalnızca tek kullanımlıktır. Bununla birlikte, bir UFO™ mini 2 terapisi yeterli gelmezse aynı terapiyi yeniden başlatmak için rutin bittikten sonra 30 saniye içinde evrensel güç düğmesine tekrar basın!

22. UFO™ mini 2 CİHAZIMI KULLANDIKTAN SONRA MASKE ÖZÜNÜ YIKAMAM GEREKİR Mİ?

Hayır, Hyper-Infusion Teknolojisi maske özünün cilde daha fazla ve daha hızlı emilmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Terapiden sonra kalan maske özü ile cildinize masaj yapın veya fazla kalan özü pamuk yardımıyla alın.

23. FOREO MASKEMİN GERÇEK OLDUĞUNU NASIL ANLARIM?

Maskenizin orijinalliğini doğrulamak için FOREO For You uygulamasını kullanarak maske barkodunu taratabilirsiniz.

©2021 FOREO AB. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

AB DAĞITICI: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, İSVEÇ

ABD DAĞITICI: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, ABD

AU DAĞITICI: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AVUSTRALYA

FOREO İSVEÇ TARAFINDAN TASARLANMIŞ VE GELİŞTİRİLMİŞTİR.

FOREO LTD. ŞTİ. İÇİN ÜRETİLMİŞTİR.

WWW.FOREO.COM