

FAQTM



SWISS
DEVELOPED

FAQTM 101

PROFESJONALNE
ODMŁADZANIE TWARZY

INSTRUKCJA ONLINE

PIERWSZE KROKI

Gratulujemy pierwszego kroku w nową erę pielęgnacji anti-aging i zakupu FAQ™ 101. Zanim zaczniesz cieszyć się wszystkimi zaletami zaawansowanej technologii pielęgnacji skóry w zaciszu swojego domu, poświęć kilka chwil, aby uważnie przeczytać informacje zawarte w niniejszej instrukcji.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI i używać tego produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

PRZEZNACZENIE: FAQ™ 101 jest dostępnym bez recepty urządzeniem do użytku domowego, przeznaczonym do nieinwazyjnego, kosmetycznego odmładzania twarzy.

OSTRZEŻENIE: MODYFIKACJA TEGO URZĄDZENIA JEST ZABRONIONA.

INFORMACJE OGÓLNE O FAQ™ 101

Poddawaj się zabiegowi na twarz Swiss Power-RF i LED-Pulse w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki szerokiej gamie innowacyjnych technologii odmładzania twarzy, w tym silnym rozgrzewającym falom o częstotliwości radiowej (które przyspieszają produkcję kolagenu w celu zmniejszenia widoczności drobnych zmarszczek), pulsującym wąskim wiązkiem czerwonego, zielonego i niebieskiego światła LED (które wnika głęboko w skórę, aby stymulować jej naturalne zdolności regeneracyjne) oraz relaksującym impulsom T-Sonic™ (które delikatnie masują twarz, aby pozbyć się stresu i zwiększyć blask skóry), FAQ™ 101 zapewnia bardziej napiętą i rozświetloną skórę oraz udoskonalony owal twarzy.

OGÓLNE INFORMACJE O FAQ™ 101

PULSUJĄCE ŚWIATŁO LED

Wąskie wiązki pulsującego czerwonego, zielonego i niebieskiego światła LED rewitalizują i odmładzają skórę.

STEROWANIE +/-

Zwiększenie / zmniejszenie intensywności Power-RF.

POWER-RF

Wydajnie rozgrzewające fale o określonych długościach przyspieszają produkcję kolagenu i wygładzają drobne zmarszczki.

PRZYCIŚK UNIWERSALNY

3-sekundowe wciśnięcie powoduje włączenie / wyłączenie urządzenia.

KONTROLKI WSKAŹNIKA

Pokazują ustawienie intensywności Power-RF, Tryb parowania Bluetooth i gdy urządzenie wymaga ładowania



WYJĄTKOWO HIGIENICZNY SILIKON

Nie zawiera BPA ani ftalanów, bez porów, aby zapobiec gromadzeniu się bakterii.

PULSACJE T-SONIC™

Masuj delikatnie, aby zwiększyć blask skóry i poprawić wchłanianie produktu.



PRÓBKA 2ml FAQ-P1

Używaj z urządzeniami FAQ-100, aby uzyskać bezpieczne i skuteczne rezultaty.



PRZEWÓD USB

Ładuj w dowolnym czasie i dowolnym miejscu.



PODSTAWKA

Zabezpiecza i podtrzymuje urządzenie FAQ-101.



ETUI PODRÓŻNE

Wygodny sposób przechowywania urządzenia umożliwiający pielęgnację skóry w podróży.



ŚCIERECZKA CZYSZCZĄCA

Pozwala utrzymywać urządzenie FAQ-101 w stanie czystym i suchym.



INTERAKTYWNA APLIKACJA

Kontroluje ustawienia urządzenia i synchronizuje preferencje użytkownika.

OSTRZEŻENIA DLA OPTIMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:

- Zabiegi odmładzające z FAQ™ 101 powinny być komfortowe – w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek dyskomfortu lub podrażnienia należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować na klatkę piersiową / okolice piersi, okolice oczu (mięsień okrężny w obrębie oczodołu), linię środkową (kość) szyi lub genitalia / okolice pachwin.
- Nie stosować na zaczerwienioną skórę, wypukłe znamiona, duże tętnice (np. szyjne), rozszerzone naczynia włosowate, metalowe implanty, miejsca, w których występuje infekcja lub miejsca, w których nie ma czucia.
- Nie należy używać urządzenia do leczenia trądziku różowatego, pieprzyków, brodawek, otwartych ran, zmian nowotworowych lub innych chorób skóry.
- Nie stosować w przypadku występowania jakichkolwiek schorzeń, takich jak padaczka, choroba krwotoczna, nowotwory, guzy, zaburzenia percepcji.
- Nie stosować, jeśli wykonane zostały zabiegi laserowe, peelingi chemiczne lub w jakikolwiek inny sposób została uszkodzona lub zniszczona skóra.
- Nie stosować, jeśli wykonywane były operacje kosmetyczne na twarzy.
- Nie stosować w przypadku posiadania wszczepionych urządzeń medycznych lub inne instrumentów elektronicznych lub wspomagających ciało.
- Nie należy stosować FAQ™ 101 na, w pobliżu lub przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych. Niezbędny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane, czyszczone lub przechowywane w pobliżu dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych.
- W przypadku chorób skóry lub pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości natury medycznej, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby serca należy przestrzegać środków ostrożności zaleconych przez lekarza.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania wokół okolic oczu i nie dotykać urządzeniem powiek lub oczu.
- Podczas używania urządzenia może wystąpić postrzeganie migających świateł, wynikające ze stymulacji nerwu wzrokowego. Jeśli ten symptom stale się utrzymuje bez użycia urządzenia, należy skonsultować się z lekarzem.
- Zważywszy na skuteczność technologii FAQ™ 101 zalecamy, aby nie używać FAQ™ 101 dłużej niż przez 10 minut podczas jednego seansu.
- Ze względów higienicznych nie zalecamy udostępniania swojego urządzenia FAQ™ 101 innym osobom.
- Nie stosować podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi ciężkich maszyn.
- Nie należy używać urządzenia, gdy jest ono podłączone do prądu.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów w urządzeniu.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli się przegrzewa lub zachodzi podejrzenie, że nie działa prawidłowo.
- Należy unikać pozostawiania FAQ™ 101 w bezpośrednim świetle słonecznym i nigdy nie wystawiać go na wysoką temperaturę lub wrzącą wodę.
- Przed użyciem urządzenie FAQ™ 101 powinno być całkowicie suche. Nie należy używać urządzenia, jeśli było zanurzone w wodzie i nie należy używać go mokrymi rękami.
- To urządzenie należy używać wyłącznie z zasilaczem SELV 5V.
- Do ładowania urządzenia zaleca się stosowanie zasilaczy zgodnych ze standardem IEC60335-2-29 lub IEC61558-2-16.
- Przed ładowaniem należy upewnić się, że wtyczka i gniazdo są całkowicie suche. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem, zwarcie lub pożar.
- Nie należy używać urządzenia podczas ładowania. Należy przerwać użytkowanie, jeśli urządzenie lub ładowarka nie działa lub wydają się w jakikolwiek sposób uszkodzone. Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dołączonego do urządzenia.
- To urządzenie zawiera baterie, które nie są wymienne.
- Należy wyjąć baterię z urządzenia przed jego utylizacją. Podczas wyjmowania baterii należy odłączyć urządzenie od sieci zasilającej, a bateria powinna zostać bezpiecznie zutylizowana.
- Ten produkt nie zawiera części nadających się do naprawy.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku kosmetycznego na twarz i szyję. FAQ™ 101 nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkodliwy skutek wynikający z niewłaściwego użycia, zastosowania na innych obszarach ciała, podłączenia do niewłaściwych źródeł napięcia, zanieczyszczonego roztworu przewodzącego lub soczewek, lub jakichkolwiek innych niewłaściwych zastosowań.
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na konkretne pytanie lub masz jakiegokolwiek inne pytania dotyczące działania urządzenia, odwiedź stronę **faqswiss.com/support**

SPOSÓB UŻYCIA FAQ™ 101

OSTROŻNIE: URZĄDZENIA GAMY FAQ™ 100 MUSZĄ BYĆ CAŁKOWICIE SUCHE PRZED ROZPOCZĘCIEM ZABIEGU. NIE WOLNO STOSOWAĆ TYCH URZĄDZEŃ W OBSZARZE TARCZYCY, GAŁKI OCZNEJ ANI W MIEJSCACH BEZPOŚREDNIO NAD LUB POD OKIEM W OBRĘBIE KOŚCI OCZODOŁU. PODCZAS KORZYSTANIA Z POWER-RF NALEŻY CAŁY CZAS PRZESUWAĆ URZĄDZENIE PO SKÓRZE.

Aby odblokować i zarejestrować urządzenie po raz pierwszy, należy pobrać aplikację FAQ™. Połącz się z aplikacją za pośrednictwem Bluetooth na smartfonie i naciśnij uniwersalny przycisk zasilania w urządzeniu FAQ™, aby zsynchronizować urządzenie z aplikacją i ustawić swoje preferencje.

1. Starannie oczyść i osusz twarz i szyję, tak aby nie było na nich żadnych pozostałości. Następnie nałóż podkład FAQ™ P1 na skórę, rozprowadzając go równomiernie na wszystkich obszarach, które chcesz poddać zabiegowi. Pamiętaj, aby pozostawić cienką warstwę FAQ P1 na powierzchni skóry, aby ułatwić gładkie przesuwanie się urządzenia.
 - a) Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk uniwersalny przez 3 sekundy.
 - b) Lampki kontrolne wskaźnika znajdujące się pod przyciskiem uniwersalnym wskazują ustawienie intensywności Power-RF urządzenia. Intensywność Power-RF można dostosować do własnych potrzeb za pomocą przycisków + i - . *(Informujemy, że po otrzymaniu urządzenia będzie ono ustawione w trybie 'Basic' - co oznacza, że dostęp będzie możliwy tylko do 5 najniższych poziomów intensywności Power-RF. W celu odblokowania trybu 'Pro' i uzyskania dostępu do wyższych intensywności klinicznych urządzenia, należy wcześniej przejść profesjonalne szkolenie za pośrednictwem aplikacji).*
 - c) Po każdym naciśnięciu przycisku LED, światło pulsacyjne LED zmieni się na inny kolor. Ponowne naciśnięcie przycisku LED spowoduje wyłączenie światła LED. *(Można dostosować swoje urządzenie, odznaczając kolory światła LED w Ustawieniach urządzenia w aplikacji, tak aby urządzenie emitowało tylko te kolory światła LED, które będziesz używać).*
2. Lekko dociśnij obudowę urządzenia do twarzy, tak aby wszystkie pięć złotych płytek przez cały czas stykały się ze skórą. Powoli przesuwaj urządzenie ciasnymi okrężnymi ruchami i/lub prostymi liniami po każdym obszarze twarzy, jak pokazano w szczegółowym filmiku 'Sposób użycia' zamieszczonym w aplikacji.
3. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk uniwersalny przez 3 sekundy. Następnie delikatnie wmasuj resztki podkładu w skórę lub spłucz, jak wolisz.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA FAQ™

Zawsze należy dokładnie oczyścić urządzenie FAQ™ po użyciu. Należy umyć całe urządzenie ciepłą wodą z mydłem, a następnie spłukać ciepłą wodą. Wytrzeć do sucha niestrzępiącą się, gładką ściereczką lub ręcznikiem. Następnie, w celu uzyskania optymalnego rezultatu zalecamy spryskanie urządzenia FAQ™ sprayem do czyszczenia silikonu oraz przepłukanie go ciepłą wodą.

UWAGA: Nigdy nie należy używać środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Środki ostrożności, które należy podjąć w przypadku zmiany działania urządzenia FAQ™ 101:

Jeśli FAQ™ 101 nie uruchamia się po naciśnięciu uniwersalnego przycisku zasilania:

- Bateria jest rozładowana. Naładuj baterię za pomocą przewodu ładującego USB maksymalnie przez 2 godziny do całkowitego naładowania, a następnie włącz urządzenie ponownie, przytrzymując uniwersalny przycisk zasilania.

Jeśli nie można wyłączyć urządzenia FAQ™ 101 i/lub przycisk uniwersalny nie odpowiada:

- Mikroprocesor chwilowo nie działa. Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Jeśli FAQ™ 101 nie chce się zsynchronizować z aplikacją FAQ™ :

- Wyłącz, a następnie włącz ponownie funkcję Bluetooth, aby spróbować odzyskać połączenie.
- Zamknij aplikację FAQ™, a następnie ją otwórz, aby ponownie uruchomić jej działanie.
- Sprawdź w sklepie z aplikacjami na Twoim urządzeniu przenośnym, czy aplikacja nie wymaga aktualizacji.

WARUNKI GWARANCJI

ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ

Aby aktywować swoją 2-letnią ograniczoną gwarancję, zarejestruj się przez aplikację FAQ™ lub wejdź na stronę faqswiss.com/product-registration, gdzie znajdziesz więcej informacji.

2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

FAQ™ udziela rękojmi na urządzenie na okres DWÓCH (2) LAT od oryginalnej daty zakupu na wypadek wad wynikających z wadliwego wykonania i uszkodzeń materiału powstałych przy właściwym użytkowaniu urządzenia. Gwarancja obejmuje części robocze, które mają wpływ na działanie urządzenia. NIE obejmuje ona uszkodzeń kosmetycznych spowodowanych normalnym zużyciem lub uszkodzenia spowodowane wypadkiem, niewłaściwym użyciem lub zaniedbaniem. Każda próba otwarcia lub rozebrania urządzenia (lub jego akcesoriów) spowoduje utratę gwarancji.

W przypadku wykrycia wady i powiadomienia FAQ™ w okresie gwarancyjnym, FAQ™, według własnego uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte odpowiednimi dowodami na to, że data zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić ważność gwarancji, należy zachować oryginalny paragon zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres gwarancji.

Aby skorzystać z gwarancji, musisz zalogować się na swoje konto na stronie www.faqswiss.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki nie są zwracane. Niniejsze zobowiązanie stanowi uzupełnienie ustawowych praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE O UTYLIZACJI URZĄDZENIA

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (ma zastosowanie w UE i w innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów).



OPAKOWANIE
ZOSTAŁO WYKONANE
Z MATERIAŁU
NADAJĄCEGO SIĘ DO
RECYKLINGU



DYREKTYWA W SPRAWIE
ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I
ELEKTRONICZNEGO



ZGODNOŚĆ EUROPEJSKA



ZGODNE Z OGRANICZENIAM
STOSOWANIA SUBSTANCJI
NIEBEZPIECZNYCH


Nie należy traktować tego urządzenia jako odpady domowe, lecz należy je oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego urządzenia, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami produktu. Recykling materiałów pomaga również zachować zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalną firmą utylizującą odpady domowe lub z miejscem zakupu.

WYJMOWANIE BATERII

UWAGA: Ten proces jest nieodwracalny. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. Tę czynność wolno wykonać wyłącznie, gdy urządzenie ma zostać zutylistowane.

Urządzenie posiada baterię litowo-jonową, którą należy wyjąć przed utylizacją urządzenia i której nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby wyjąć baterię, należy przeciąć i usunąć silikonową warstwę zewnętrzną, a następnie przeciąć plastikową powłokę wzdłuż pęknięcia. Następnie należy podważyć obudowę i oddzielić baterię za pomocą rozwieracza. Następnie należy przeciąć kabel baterii, wyjąć baterię i zutylistować ją zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska. Dla własnego bezpieczeństwa w trakcie tego procesu należy nosić rękawiczki. Szczegółowe instrukcje graficzne zostały przedstawione poniżej:

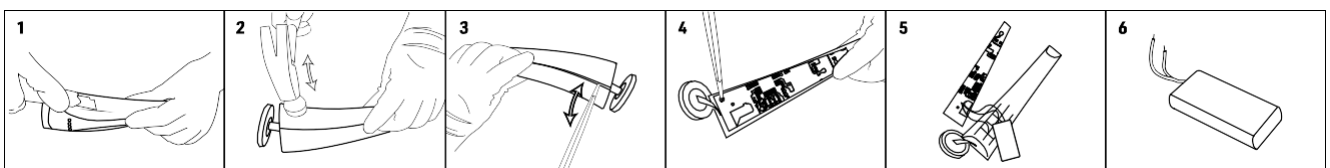

SPECYFIKACJE

MATERIAŁY:	Bezpieczny dla ciała silikon, tworzywa ABS, PC, stop cynku
KOLOR:	ametyst
WYMIARY:	157 x 41 x 55 mm
WAGA:	130g
BATERIA:	Li-ion 1000 mAh 3,7 V
TRYB OBSŁUGI:	Do 30 zastosowań na jednym ładowaniu
TRYB CZUWANIA:	90 dni
MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU:	<50 dB
INTERFEJSY:	przycisk LED, przycisk Plus, przycisk Minus oraz przycisk uniwersalny.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownicy tego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani FAQ™, ani jego sprzedawcy detaliczni, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody, fizyczne lub inne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia. Ponadto, FAQ™ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji i dokonywania okresowych zmian jej treści bez obowiązku powiadamiania kogokolwiek o takiej zmianie lub zmianach.

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 Zasad FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie to musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTROŻNIE: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

UWAGA: Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie zasadnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji w obiektach mieszkalnych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że takie zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, które można określić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

- Zmiana kierunku lub miejsca anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż to, do którego podłączony jest odbiornik.
- Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Możliwe jest dokonywanie zmian w modelu w celu jego ulepszenia bez uprzedzenia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA PODSTAWY

1. CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE Z URZĄDZENIEM FAQ™?

1x urządzenie FAQ™ 101, 1x 2ml próbka podkładu FAQ™ P1, 1x kabel USB do ładowania, 1x podstawka, 1x etui podróżne, 1x ściereczka do czyszczenia, 1x instrukcja szybkiego uruchomienia i 1x podstawowa instrukcja.

2. CO NALEŻY ZROBIĆ PO OTRZYMANIU URZĄDZENIA FAQ™?

Gratulacje z okazji odkrycia nowej ery pielęgnacji anti-aging. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy pobrać aplikację FAQ™ do odblokowania i zarejestrowania urządzenia w celu pierwszego użycia. (Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją 'APLIKACJA' poniżej).

3. JAK WŁĄCZYĆ MOJE URZĄDZENIE FAQ™?

Aby włączyć urządzenie FAQ™, naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania przez 3 sekundy. Lampki kontrolne pod przyciskiem uniwersalnym będą migać, informując, że urządzenie jest w trybie parowania Bluetooth.

4. JAK WYŁĄCZYĆ MOJE URZĄDZENIE FAQ™?

Aby wyłączyć urządzenie FAQ™, naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania przez 3 sekundy. Należy pamiętać, że po 10 minutach od włączenia urządzenie wyłączy się automatycznie, aby oszczędzać baterię.

5. JAK ROZPOCZĄĆ MÓJ PIERWSZY ZABIEG?

Najpierw starannie oczyść i osusz twarz i szyję, tak aby nie było na nich żadnych pozostałości. Następnie nałóż na skórę ciekłą warstwę podkładu FAQ™ P1 Manuka Honey Primer, rozprowadzając go równomiernie na wszystkich obszarach, które chcesz poddać zabiegowi. Następnie włącz urządzenie przytrzymując wciśnięty przycisk uniwersalny przez 3 sekundy, i lekko dociśnij obudowę urządzenia do twarzy, tak aby wszystkie pięć złotych płytek przez cały czas stykało się ze skórą. Powoli przesuwaj urządzenie ciasnymi okrężnymi ruchami i/lub prostymi liniami po każdym obszarze twarzy, jak pokazano w szczegółowym filmiku 'Sposób użycia' zamieszczonym w aplikacji.

URZĄDZENIE FAQ™

6. JAK CZĘSTO MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA FAQ™?

Przy stałym nastawieniu urządzenia gamy FAQ™ 100 na tryb 'Basic', zalecamy używanie urządzenia 2-3 razy w tygodniu przez pierwsze 8 tygodni, a następnie 2-4 razy w miesiącu w zależności od potrzeb, aby utrzymać rezultaty odmłodzenia twarzy. Jeśli jednak urządzenie jest ustawione na tryb 'Pro', nie zalecamy używania go częściej niż raz w tygodniu przez pierwsze 8 tygodni. Aby utrzymać rezultaty klinicznego odmładzania, należy stosować 1-2 razy w miesiącu w zależności od potrzeb. (Więcej informacji na temat trybu 'Basic' i 'Pro' znajduje się w sekcji 'APLIKACJA' poniżej).

7. JAK DŁUGO POWINIEN TRWAĆ KAŻDY ZABIEG?

Ostatecznie zależy to od tego, jakie obszary / jak wiele obszarów poddawanych jest zabiegowi. Nie zalecamy poddawania zabiegowi poszczególnych obszarów twarzy / szyi przez dłużej niż 1 minutę. Zabieg na całą twarz i szyję nie powinien trwać dłużej niż 10 minut.

8. CZYM JEST POWER-RF I CZY JEST BEZPIECZNY?

Tak, Power-RF (silna częstotliwość radiowa) firmy FAQ™ jest bezbolesną, nieinwazyjną technologią napinającą, która ogrzewa skórę, aby przyspieszyć produkcję kolagenu i elastyny, i jest bezpieczna wyłącznie wtedy, gdy jest stosowana z niezbędnym podkładem (FAQ™ P1) dla optymalnej ochrony. NIGDY nie wolno uruchamiać urządzeń gamy FAQ™ 100 w pobliżu wody lub jakichkolwiek mokrych powierzchni, i muszą być one całkowicie suche przed rozpoczęciem zabiegu. Nie wolno stosować tych urządzeń na obszarze tarczycy, gałki ocznej ani w miejscach bezpośrednio nad lub pod okiem w obrębie kości oczodołu. Podczas korzystania z POWER-RF w urządzeniu FAQ™ należy cały czas przesuwać urządzenie po skórze.

9. CZY STOSOWANIE WIĘKSZEJ INTENSYWNOŚCI POWER RF JEST BARDZIEJ SKUTECZNE?

Tak, wyższy poziom intensywności Power-RF równa się większej mocy, co skutkuje większą ilością energii docierającej do skóry i głębszą jej penetrację, dzięki czemu zabieg jest bardziej skuteczny. Jednak skóra każdego człowieka jest inna - dlatego też zdecydowanie zalecamy wypróbowanie go najpierw na poziomie 1 trybu 'Basic' (zawsze z FAQ™ P1), a następnie przejście na wyższy poziom, aby sprawdzić, który poziom intensywności jest dla Ciebie najlepszy.

10. CZY MOŻNA REGULOWAĆ POZIOM INTENSYWNOŚCI POWER-RF?

Tak, można ręcznie dostosować poziom intensywności Power-RF na swoim urządzeniu, naciskając przyciski plus / minus zgodnie z własnymi preferencjami. Należy pamiętać, że po otrzymaniu urządzenia będzie ono ustawione w trybie 'Basic' - co oznacza, że dostęp będzie możliwy tylko do 5 najniższych poziomów intensywności Power-RF. W celu odblokowania trybu 'Pro' i uzyskania dostępu do wyższych intensywności klinicznych urządzenia, należy wcześniej przejść profesjonalne szkolenie za pośrednictwem aplikacji.

11. CZY MOŻNA REGULOWAĆ FUNKCJĘ PULSACJI T-SONIC™?

Tak, swoje preferencje dla impulsów T-Sonic™ można ustawić poprzez aplikację, w 'Ustawieniach urządzenia'.

12. DLACZEGO URZĄDZENIA FAQ™ SĄ DROGIE?

Urządzenia FAQ™ to jednorazowa inwestycja w piękno na całe życie. Może wydasz nieco więcej na nasze urządzenia, ale w zamian otrzymasz znacznie wyższą jakość. Nasze produkty zostały tak zaprojektowane, by budować podstawę zdrowia Twojej skóry - co pozwoli Ci zachować młody wygląd i pewność siebie. Części zamienne nie będą nam nigdy potrzebne. Inwestujesz raz we wszystkie te profesjonalne zabiegi, na które w innym przypadku należałoby wydać dużo pieniędzy w spa / klinice. A co najważniejsze, urządzenia FAQ™ są wykonane tak, aby służyły przez całe życie.

13. JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY TRZEMA URZĄDZENIAMI W GAMIE FAQ™ 100?

Wszystkie urządzenia gamy FAQ™ 100 posiadają Power-RF, światło pulsacyjne LED i impulsy T-Sonic™. Natomiast FAQ™ 102 i FAQ™ 103 Diamond posiadają również EMS-Pro i Anti-Shock System™. Dodatkowo, podczas gdy FAQ™ 101 posiada tylko czerwone, zielone i niebieskie światło LED, zarówno FAQ™ 102 jak i FAQ™ 103 Diamond posiadają pełne spektrum światła LED (8 kolorów). Wreszcie, FAQ™ 103 Diamond jest zdobiony 0,25 karatowymi diamentami i występuje w zestawie z podkładem FAQ™ P1 Manuka Honey Primer i sprayem do czyszczenia silikonu FAQ™.

APLIKACJA

14. DLACZEGO MUSZĘ POBRAĆ APLIKACJĘ FAQ™ SWISS PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA?

Wszystkie urządzenia FAQ™ 100 muszą być aktywowane i odblokowane za pośrednictwem aplikacji FAQ™ Swiss przy pierwszym włączeniu. Pomaga to chronić przed fałszywymi/skopiowanymi produktami FAQ™ i ułatwia rejestrację gwarancji i ochronę Twojej inwestycji.

15. JAK MOGĘ SPAROWAĆ MOJE URZĄDZENIE FAQ™ Z APLIKACJĄ FAQ™ SWISS?

Pobierz aplikację FAQ™ Swiss na smartfona lub tablet i włącz Bluetooth. Aby włączyć urządzenie, naciskaj przycisk uniwersalny przez 3 sekundy. Migająca kontrolka pod uniwersalnym przyciskiem wskazuje, że urządzenie jest w trybie parowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zarejestrować się i sparować swoje urządzenie FAQ™.

16. CZY URZĄDZENIE FAQ™ MOŻE DZIAŁAĆ BEZ APLIKACJI?

Tak, można ręcznie używać wszystkich urządzeń z gamy FAQ™ 100 i nie wymagają one korzystania z aplikacji FAQ™ Swiss. Jednak, aby odblokować swoje urządzenie przed pierwszym użyciem, konieczne jest zarejestrowanie swojego urządzenia w aplikacji FAQ™ Swiss. Należy pamiętać, że dopóki nie przejdzie się profesjonalnego szkolenia za pośrednictwem aplikacji, możliwe będzie używanie tylko 5 najniższych poziomów intensywności Power-RF w trybie 'Basic'. Po zakończeniu profesjonalnego przeszkolenia, tryb 'Pro' zostanie odblokowany i na Twoim urządzeniu dostępne będą wyższe intensywności kliniczne urządzenia.

17. JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY TRYBEM 'BASIC' A 'PRO'?

Tryb 'Basic' ustawia urządzenie na 5 najniższych poziomach intensywności Power-RF. Ten tryb może być bardziej odpowiedni dla użytkowników, którzy mają wrażliwą skórę lub nie mają doświadczenia w stosowaniu technologii RF. Urządzenie dostarczane jest z ustawieniem w trybie 'Basic'. Ponieważ urządzenia FAQ™ wykorzystują tak silne technologie kliniczne, zalecamy, aby wszyscy użytkownicy zaczęli od poziomu 1 trybu 'Basic' i przechodzili w górę, aż do osiągnięcia swojego poziomu komfortu. Tryb 'Pro' umożliwia ustawienie urządzenia na wyższy poziom intensywności klinicznej Power-RF. Każdy tryb posiada 5 poziomów - wskazywane przez 5 kontrolki wskaźnika na urządzeniu. Należy pamiętać, że tryb 'Pro' pozostanie zablokowany do czasu ukończenia profesjonalnego szkolenia za pośrednictwem aplikacji.

18. JAK MOGĘ ZMIENIĆ USTAWIENIE URZĄDZENIA NA TRYB 'BASIC' / 'PRO'?

Wystarczy przejść do 'Ustawień urządzenia' w aplikacji i wybrać preferowany tryb. Po jego wybraniu należy kliknąć 'Zapisz', a preferowane ustawienia zostaną zsynchronizowane z urządzeniem dla wszystkich przyszłych zastosowań. Jeśli zmienisz zdanie, zawsze można wrócić do 'Ustawień urządzenia' w aplikacji i zaktualizować swoje preferencje.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONSERWACJA

19. CO TO ZNACZY, GDY MOJE URZĄDZENIE CIĄGLE MIGA?

Jeśli kontrolka na urządzeniu stale miga, może to oznaczać, że urządzenie FAQ™ jest w trybie parowania Bluetooth, lub że należy naładować urządzenie. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zsynchronizować urządzenie.

20. JAK MAM NAŁADOWAĆ MOJE URZĄDZENIE FAQ™?

Urządzenia FAQ™ nadają się do wielokrotnego ładowania przez USB, z dwugodzinnym ładowaniem zapewniającym do 30 zastosowań. Migające kontrolki wskaźnika pod uniwersalnym przyciskiem zasilania wskazują, że urządzenie jest w trybie ładowania, pokazując stan naładowania baterii. Gdy świecą wszystkie kontrolki wskaźnika, oznacza to, że urządzenie jest w pełni naładowane.

21. JAK MAM CZYŚCIĆ MOJE URZĄDZENIE FAQ™?

Upewnij się, że urządzenie zostało odłączone od prądu, a następnie umyj urządzenie wodą i mydłem, opłucz ciepłą wodą i wysusz niestrzępiącą się szmatką lub ręcznikiem. Zalecamy spryskanie urządzenia płynem do czyszczenia silikonu FAQ™ a następnie spłukanie urządzenia ciepłą wodą w celu uzyskania optymalnych rezultatów. Nigdy nie należy używać środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

22. CZY MUSZĘ UŻYWAĆ FAQ™ P1 Z MOIM URZĄDZENIEM FAQ™?

Tak, bardzo ważne jest, aby stosować podkład FAQ™ P1 z urządzeniem z gamy FAQ™ 100, ponieważ podkład tworzy barierę przewodzącą, która bezpiecznie i skutecznie przenosi EMS-Pro i Power-RF z urządzenia na skórę - pozwalając urządzeniu płynnie działać, a jednocześnie z łatwością przesuwając się po skórze. FAQ™ P1 został zaprojektowany specjalnie do użycia z urządzeniami z gamy FAQ™ 100 i nie zalecamy używania z urządzeniami z gamy FAQ™ 100 jakichkolwiek kosmetyków innych niż FAQ™ P1.

23. CZY FAQ™ P1 JEST PRZYJAZNE DLA ZWIERZĄT?

Tak, FAQ™ P1 jest przyjazne dla zwierząt, co oznacza, że nie było testowane na zwierzętach.

24. JAK CZĘSTO MOGĘ UŻYWAĆ FAQ™ P1?

Zalecamy stosowanie FAQ™ P1 przed każdym zabiegiem odmładzającym na twarz urządzeniem FAQ™ 100 lub za każdym razem, gdy Twoja skóra potrzebuje dodatkowego zastrzyku blasku.

25. CZY FAQ™ P1 ZAWIERA SUBSTANCJE ZABURZAJĄCE UKŁAD HORMONALNY?

Nie, nasza formuła została opracowana bez udziału takich substancji.

26. CZY BUTELKA PO FAQ™ P1 MOŻE BYĆ PODDANA RECYKLINGOWI PO UŻYCIU?

Tak, butelka FAQ™ P1 może być poddana recyklingowi.

©2021 FAQ GmbH. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

WYPRODUKOWANO DLA FAQ GmbH.

DYSTRYBUCJA W UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 SZTOKHOLM, SZWECJA. DYSTRYBUCJA W USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DYSTRYBUCJA W AUSTRALII: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA. WYPRODUKOWANO PRZEZ: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINY. PRODUKT ZAPROJEKTOWANY I OPRACOWANY PRZEZ FAQ GmbH.

WWW.FAQSWISS.COM