



# FOREO

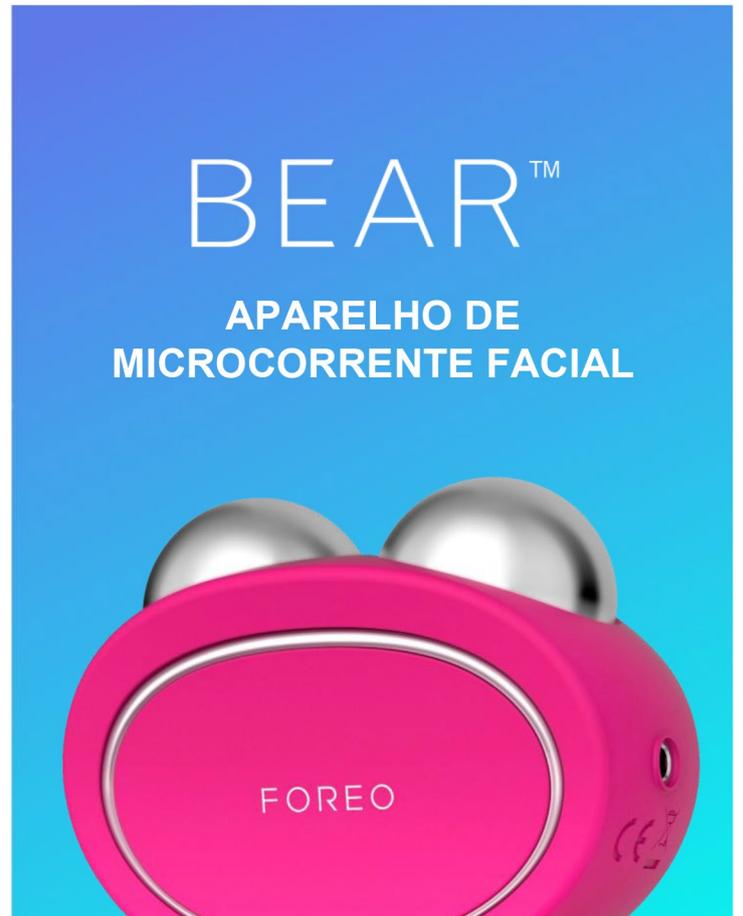

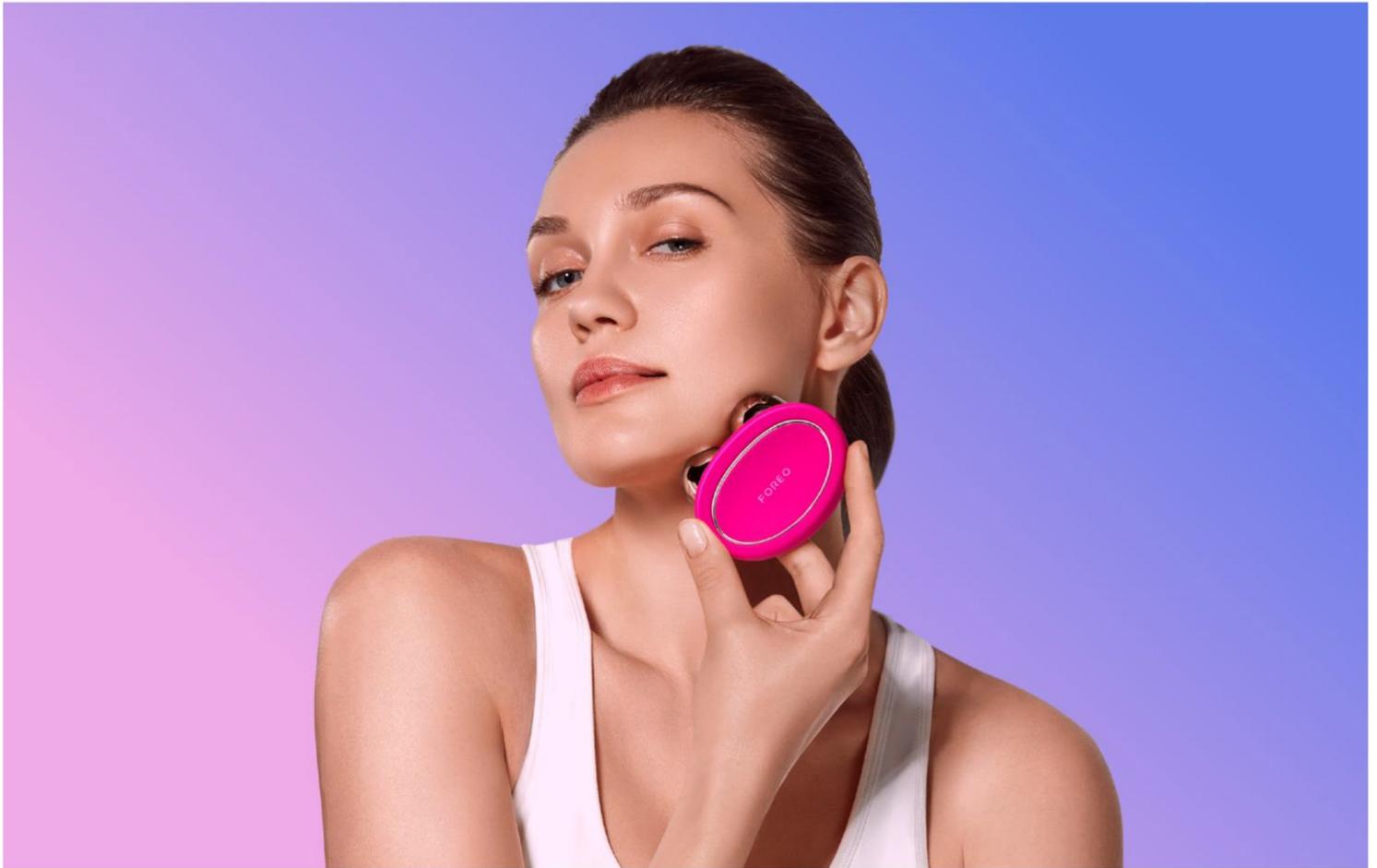

## INTRODUÇÃO

Parabéns por ter tomado esse primeiro passo na descoberta de um cuidado da pele mais inteligente ao adquirir o BEAR™. Antes de começar a aproveitar todos os benefícios dessa tecnologia sofisticada de cuidado da pele no conforto do seu lar, leia atentamente as instruções contidas neste manual.

Por favor, **LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR** e utilize o produto somente conforme previsto e descrito neste manual.

**USO PREVISTO:** o BEAR™ foi concebido para estimular o rosto e o pescoço e é indicado para uso cosmético, sem prescrição.

**⚠️ ADVERTÊNCIA:** NÃO É PERMITIDA NENHUMA MODIFICAÇÃO NESTE EQUIPAMENTO.

## INTRODUÇÃO AO BEAR™

Conheça o BEAR™ - o aparelho inteligente com microcorrentes faciais tonificantes que combina microcorrentes superiores e pulsações T-Sonic™ para firmar a pele, deixando o contorno do rosto mais definido e jovem em minutos!

O BEAR™ pode ser usado como parte da sua rotina de cuidado da pele, de manhã ou de noite. Escolha uma das várias sessões de treinos faciais conduzidas pelo aplicativo, com 5 intensidades ajustáveis de microcorrentes para recarregar a pele e ajudar a diminuir os sinais da idade. Durante as sessões com microcorrentes, suaves pulsações T-Sonic™ massageiam o rosto, deixando a pele mais radiante e melhorando a absorção do SERUM SERUM SERUM antes do tratamento e dos seus produtos de pele favoritos logo após.

Graças ao Anti-Shock System™ do BEAR™, um sistema integrado que usa sensores ultrainteligentes para medir 100 vezes por segundo a resistência da sua pele à eletricidade, a intensidade das microcorrentes é ajustada automaticamente em apenas 0,002 segundos (mais rápido que um piscar de olhos!) para melhor se adaptar à pele. O Anti-Shock System™ elimina qualquer possibilidade de choque elétrico, para maior segurança e eficácia e um tratamento que entrega sempre a mesma qualidade a cada uso.

## CONHECENDO O BEAR™

### ESFERAS DE MICROCORRENTES

Emitem microcorrentes superiores diretamente na pele, melhorando seu tônus.

### PULSAÇÕES T-SONIC™

Melhoram a absorção dos produtos e massageiam suavemente o rosto para deixar a pele mais radiante.

### DESIGN SUECO INTELIGENTE

Levemente curvado para se encaixar no contorno do rosto e leve para uso em qualquer lugar.

### PORTA DE CARREGAMENTO

Até 90 usos por carga\*.

### ANTI-SHOCK SYSTEM™

Mede resistência da pele e ajusta a intensidade das microcorrentes, para maior segurança e conforto.

### BOTÃO UNIVERSAL

Liga e desliga o aparelho e ativa o Bluetooth no modo de pareamento.

### INDICADOR LUMINOSO DE BLUETOOTH

Pisca para indicar quando o aparelho está em modo de pareamento por Bluetooth.

### 5 INDICADORES DE INTENSIDADE

Acendem para indicar a intensidade de microcorrentes configurada no aparelho.



**AMOSTRA SÉRUM 2ML**  
Melhora a condutividade e os resultados.



**CARREGADOR USB**  
Recarregue onde quiser, quando quiser, com o cabo USB.



**APLICATIVO INTERATIVO**  
Acesse os treinos faciais e mais opções de intensidade.



**SUPORTE**  
Protege e exhibe o seu BEAR™.



**BOLSA DE TRANSPORTE**  
Prático para guardar o aparelho ao transportá-lo.

\*Based on a 1-minute treatment time per use.

## ADVERTÊNCIAS PARA MAIOR SEGURANÇA

- Tonificar a pele usando o BEAR™ é um processo confortável – se sentir qualquer desconforto ou irritação, interrompa imediatamente o uso e consulte um médico.
- Não use na região do peito, nos olhos (músculo circular da cavidade orbital), parte óssea do pescoço ou genitais/virilha.
- Não use em peles vermelhas, sinais com relevo, artérias principais (por ex, carótida), capilares dilatados, implantes metálicos, áreas infectadas ou áreas em que não há sensação.
- Não use o aparelho para tratar rosácea, sinais, verrugas, feridas abertas, lesões cancerosas ou qualquer outro problema de pele.
- Não use se sofrer de uma doença preexistente como epilepsia, doenças hemorrágicas, câncer, tumores ou transtornos de percepção.
- Não use caso tenha passado por um tratamento a laser, peeling químico ou qualquer outra forma de lesão ou dano à pele.
- Não use caso tenha realizado uma cirurgia plástica no rosto.
- Não use caso possua um dispositivo médico implantado ou qualquer outro instrumento eletrônico ou aparelho auxiliar.
- Equipamentos de monitoramento eletrônico, como um monitor de ECG ou alarme de ECG, podem não operar corretamente quando o aparelho estiver em uso.
- O BEAR™ não deve ser usado em, perto de ou por crianças ou pessoas com capacidades físicas e mentais reduzidas. É necessário supervisão cuidadosa sempre que esse aparelho for usado, limpo ou guardado perto de crianças ou pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas.
- Os efeitos de longo prazo das microcorrentes são desconhecidos.
- Ainda não se sabe se é seguro usar o aparelho durante a gravidez. Se estiver grávida, consulte o seu médico antes de usar o aparelho.
- Se você possui um problema de pele ou qualquer preocupação médica, consulte um médico antes de usar.
- Se você possui uma doença cardíaca diagnosticada ou suspeita, siga as recomendações do seu médico.
- Tenha muito cuidado ao tonificar as regiões sob os olhos e não aplique o aparelho nas pálpebras ou nos próprios olhos.
- Você talvez perceba luzes piscando ao usar o aparelho - isso é resultado de um estímulo ao nervo óptico. Se essa condição ocorrer constantemente sem usar o aparelho, consulte um médico.
- Uma leve sensação de formigamento pode ocorrer ao usar o aparelho, o que é normal e nenhum motivo de preocupação. Reduzir a intensidade pode amenizar ou eliminar essa sensação.
- Devido à eficiência das rotinas tonificantes FOREO, recomendamos não usar o aparelho BEAR™ por mais de 3 minutos de cada vez.
- Por questões de higiene, não recomendamos dividir seu aparelho BEAR™ com outra pessoa.
- Não use enquanto estiver dirigindo ou operando maquinário pesado.
- Não use o aparelho enquanto ele estiver ligado na tomada.
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
- Não use o aparelho se estiver superaquecido ou se suspeitar que não está funcionando corretamente.
- Evite deixar o BEAR™ diretamente sob a luz do sol e nunca o exponha a calor extremo ou água fervente.
- O BEAR™ deve estar totalmente seco antes de ativar a função de microcorrente. Não use o aparelho se ele esteve submerso em água ou se suas mãos estiverem molhadas.
- Esse aparelho só deve ser usado com um adaptador de tomada SELV (segurança extra para baixas voltagens).
- Recomendamos usar uma fonte de energia conforme com a norma IEC60950 para recarregar o aparelho.
- Antes de recarregar o aparelho, certifique-se que o plugue e a tomada estão totalmente secos. Caso não estejam, pode haver um choque elétrico, curto-circuito ou incêndio.
- Não use o aparelho enquanto estiver recarregando. Interrompa o uso se o aparelho ou carregador não estiver funcionando corretamente ou se parecerem danificados de alguma forma. Use unicamente o cabo de força fornecido com o aparelho.
- A bateria precisa ser removida do aparelho antes do descarte. O aparelho deve ser desconectado da tomada ao remover a bateria e a bateria deve ser descartada de forma segura.
- Este produto não possui peças reparáveis.
- Este aparelho foi concebido para uso cosmético no rosto e no pescoço. Qualquer consequência negativa que resulte do uso incorreto, aplicação em outras áreas do corpo, conexão a uma fonte de energia de voltagem inadequada, uso com uma solução ou esferas sujas, ou qualquer outra aplicação inadequada não são de responsabilidade da FOREO.
- Use este aparelho unicamente para o uso previsto conforme descrito neste manual. Se não encontrar a resposta à sua pergunta, ou se tiver qualquer outra dúvida sobre o funcionamento do aparelho, acesse [foreo.com](http://foreo.com).

## COMO USAR O BEAR™

**ATENÇÃO:** O BEAR™ PRECISA ESTAR TOTALMENTE SECO ANTES DE INICIAR SEU TRATAMENTO COM MICROCORRENTE.

Para desbloquear e registrar seu aparelho antes do primeiro uso, baixe o aplicativo FOREO For You. Conecte-o ao aplicativo através do Bluetooth no seu smartphone e pressione o botão universal do BEAR™ para sincronizar o aparelho ao aplicativo e ajustar as microcorrentes desejadas.

**1** Limpe e seque bem seu rosto e pescoço de modo a não deixar nenhum tipo de resíduo.

**2** Aplique o SERUM SERUM SERUM na pele e espalhe de maneira uniforme por todas as áreas que deseja tratar. Massageie até ter sido totalmente absorvido.

**3 Para Rotinas pré-selecionadas:**  
Selecione o tratamento de microcorrentes desejado no aplicativo FOREO For You. Acompanhe as instruções no aplicativo e continue o tratamento. *O aparelho desligará automaticamente quando a rotina for concluída.*

**Para o Modo manual:**

i) Pressione o botão universal para ativar as microcorrentes. As luzes abaixo do botão universal indicam a intensidade de microcorrente selecionada. Você pode alterar a intensidade pressionando rapidamente o botão universal uma vez para cada nível. Para desligar as pulsações T-Sonic™, pressione o botão universal duas vezes. *Use o aplicativo para ter acesso a mais opções de intensidade.*

ii) Pressione levemente as duas esferas metálicas contra o rosto e deslize suavemente o aparelho pelas maçãs do rosto e testa, em volta dos lábios, e no maxilar e pescoço, conforme desejado. *Verifique que as duas esferas de microcorrentes estão em contato com a pele a todo momento. Para melhores resultados, sempre deslize o aparelho devagar, com movimentos para cima e usando uma leve pressão.*

iii) Ao concluir o tratamento, pressione o botão universal e mantenha por 3 segundos para desligar o aparelho.

**4** Aplique outro produto de cuidado da pele, se desejar.



## COMO LIMPAR O BEAR™

Sempre limpe bem o BEAR™ após o uso. Lave as esferas metálicas e a superfície em silicone com água e sabão, e enxágue com água morna. Seque com um pano ou toalha não abrasivos e que não soltem fiapos. Recomendamos usar o Spray de Limpeza de Silicone da FOREO e enxaguar com água morna após cada uso para melhores resultados.

**OBSERVAÇÃO:** Nunca limpe com produtos que contenham álcool, gasolina ou acetona, pois podem irritar a pele e danificar o silicone.

# SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Precauções a serem tomadas no caso de mudanças no desempenho do BEAR™:

Se o BEAR™ não liga ao pressionar o botão universal:

- A bateria está vazia. Recarregue com o carregador USB por até 1,5 hora até estar totalmente recarregado e em seguida mantenha o botão universal pressionado para reiniciar o aparelho.

Se o BEAR™ não desliga e/ou o botão universal não responde:

- O microprocessador está temporariamente com defeito. Mantenha o botão universal pressionado para reiniciar o aparelho.

Se o BEAR™ não sincroniza com o aplicativo FOREO For You:

- Desligue e ligue o Bluetooth para tentar reconectar.
- Feche o aplicativo FOREO For You e abra-o novamente.
- Verifique se o aplicativo precisa ser atualizado na app store do seu celular.

## TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

### REGISTRO DE GARANTIA

Para ativar a Garantia Limitada de 2 anos, registre seu produto através do aplicativo FOREO For You ou acesse [foreo.com/productregistration](http://foreo.com/productregistration) para mais informações.

### GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS

A FOREO garante esse aparelho por um período de DOIS (2) ANOS a partir da data original de compra, contra defeitos causados pela mão de obra ou materiais, decorrentes do uso normal deste produto. A garantia cobre as peças que afetam o funcionamento do aparelho. Ela NÃO cobre a deterioração cosmética causada pelo desgaste natural, ou danos causados por acidentes, uso incorreto e negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar esse aparelho (ou seus acessórios) anulará a garantia.

Se encontrar algum defeito e notificar a FOREO durante o período de garantia, a FOREO irá, a seu critério, substituir o aparelho gratuitamente. É necessário fornecer provas razoáveis de que a garantia ainda está em vigor ao reivindicá-la. Por esse motivo, por favor guarde o recibo original de compra junto com essas condições de garantia durante o período de garantia.

Para reivindicar sua garantia, é necessário fazer o login na sua conta em [www.foreo.com](http://www.foreo.com) e selecionar em seguida a opção de reivindicação de garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. Essa ação é uma adição aos seus direitos legais como consumidor e não afeta esses direitos de forma alguma.

## INFORMAÇÃO DE DESCARTE

Para mais informações sobre como reciclar seu aparelho, entre em contato com serviços de coleta de resíduos na sua vizinhança ou no local de compra.

## ESPECIFICAÇÕES

**MATERIAIS:** Silicone biocompatível, ABS, PC, liga de zinco cromado

**CORES:** Fuchsia / Mint

**DIMENSÕES:** 64x79x39mm

**PESO:** 90g

**BATERIA:** Li-ion 520mAh 3.7V

**ALIMENTAÇÃO:** Cabo de recarga USB de 5V.

**ADAPTADOR DE TOMADA USB:** use somente dispositivos aprovados pela IEC-60950 ou IEC-62368 (NÃO fornecido pela FOREO).

**USO:** Até 90 usos por carga\*

**BATERIA NO MODO DE ESPERA:** 90 dias

**FREQUÊNCIA:** 185 Hz

**NÍVEL MAX. DE RUÍDO:** <50dB

**INTERFACE:** 1 botão

\* Baseado num tratamento de 1 minuto por uso.

**Renúncia:** Os usuários desse aparelho o fazem por seus próprios riscos. Nem a FOREO, nem os seus varejistas assumem responsabilidade ou sujeição por quaisquer danos, físicos ou não, que resultem, direta ou indiretamente, do uso desse aparelho. A FOREO reserva-se o direito de revisar essa publicação e fazer alterações periódicas no seu conteúdo, sem obrigação de notificar qualquer pessoa dessas revisões ou mudanças.

# INFORMACOES QUANTO A COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA (EMC)

BEAR & BEAR mini atendem aos padrões de compatibilidade eletromagnética conforme Norma NBR IEC60601-1-2:2014. Entretanto, precauções especiais tem que ser observadas:

## ATENCAO:

- Uso deste equipamento adjacente ou empilhado a outro equipamento deve ser evitado porque pode resultar em operação tal uso seja necessário inapropriada. Se tal uso seja necessário, deve-se verificar se os dois equipamentos estão operando normalmente.
- Aparelhos portátil de comunicação por RF (Rádio Frequência) incluindo periféricos tais como cabos-antena e antenas externas devem estar distância de no mínimo 30 cm de qualquer parte do aparelho, incluindo cabos especificados pela FOREO, Caso contrário, pode ocorrer a degradação da performance do monitor.
- O uso de cabos ou acessórios não fornecidos ou especificados pela FOREO podem resultar no aumento de emissões eletromagnéticas ou redução da imunidade eletromagnética do aparelho e resultar em um desempenho inapropriado.
- Consulte mais orientações abaixo sobre as condições de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) nas quais o aparelho deve ser usado:

Tabela 1: Limites de EMISSAO e conformidades:

Fenomeno	Limites de Emissao	Conformidade
Emissões de Radio Frequência (RF) conduzida e irradiada	CISPR 11	Grupo 1, Classe B

NOTA: Testes de emissão de distorção harmônica, flutuações de voltagem e “Flicker” não são aplicáveis.

Tabela 2: Níveis de Teste de Imunidade:

Fenomeno	Padrao Basico de EMC	Níveis de Teste de Imunidade
Descarga Eletrostatica	IEC 61000-4-2	±8 kV contato ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ar
Campos electromagneticos irradiados por RF	IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz a 2,7 GHz 80% AM a 1 kHz
Campos de proximidade de equipamentos de comunicação de RF sem fio	IEC 61000-4-3	Ver Tabela 3
Campos magneticos de frequencia de alimentação de rede	IEC 61000-4-8	30 A/m 50Hz

NOTA: Testes de imunidade para rajadas elétricas rápidas ou temporárias, sobretensão Fase-Fase ou Fase-Terra, perturbações causadas por campos de RF, quedas ou interrupções de tensão não são aplicáveis.

Tabela 3: Especificações dos testes para proximidade de campos gerados por equipamentos de comunicação por wireless por Radio Frequência, RF.

Frequencia de Testes (MHz)	Modulação de Pulso	Nivel de Imunidade aplicado (V/m )
385	18 Hz	27
450	18 Hz	28
710 715 870	217 Hz	9
810 870 930	18 Hz	28
1720 1845 1970	217 Hz	28
28	217 Hz	28
5240 5500 5785	217 Hz	9

**ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:** Os utilizadores deste dispositivo fazem-no por sua conta e risco. Nem a FOREO nem os seus revendedores assumem qualquer responsabilidade por quaisquer ferimentos ou danos, físicos ou não, resultantes, direta ou indiretamente, da utilização deste dispositivo. Para além disso, a FOREO reserva-se ao direito de rever este documento e de realizar alterações periodicamente aos seus conteúdos sem obrigação de notificar qualquer pessoa em relação a estas revisões ou alterações.

**CUIDADO:** As alterações ou modificações a esta unidade não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador de usar o equipamento

ANATEL Seal:



**NOTA:** Este equipamento não tem direito a proteção contra interferencia prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados

# PERGUNTAS FREQUENTES

## INFORMAÇÃO BÁSICA SOBRE O BEAR™

### O QUE DEVO FAZER APÓS RECEBER O MEU APARELHO BEAR™?

Parabéns! Você está prestes a descobrir um cuidado da pele inteligente. Antes de mais nada, baixe o aplicativo FOREO For You gratuitamente para desbloquear e registrar o seu aparelho. (Para mais informações acesse a seção abaixo intitulada 'O APLICATIVO').

### COMO FAÇO PARA COMEÇAR MEU PRIMEIRO TRATAMENTO?

Primeiro, limpe e seque bem seu rosto e pescoço. Em seguida, aplique o SERUM SERUM SERUM da FOREO e espalhe de maneira uniforme por todas as áreas que deseja tratar. Por último, selecione a rotina de tratamento facial que deseja dentro do aplicativo ou siga o passo a passo do modo manual, que pode ser encontrado mais acima ou no Manual do Usuário que acompanha o seu aparelho BEAR™.

### COMO FAÇO PARA LIGAR MEU APARELHO BEAR™?

Pressione o botão universal do BEAR™ para ligá-lo. O indicador luminoso pisca para avisar que o aparelho está no modo de pareamento por Bluetooth.

### COMO FAÇO PARA DESLIGAR MEU APARELHO BEAR™?

Pressione o botão universal e mantenha por 3 segundos para desligar o aparelho. Ao completar uma rotina pré-configurada, o aparelho desliga automaticamente.

### O QUE ESTÁ INCLUSO COM MEU APARELHO BEAR™?

1 aparelho BEAR™, 1 amostra de 2ml do SERUM, 1 carregador USB, 1 Manual do Usuário, 1 Guia de Iniciação Rápida, 1 Suporte & 1 Bolsa de viagem.

## O APARELHO BEAR™

### COM QUE FREQUÊNCIA POSSO USAR MEU APARELHO BEAR™?

O BEAR™ é seguro e delicado o suficiente para ser usado todos os dias, de manhã ou de noite. Recomendamos usar o BEAR™ uma vez por período de 24 horas, para um tratamento de 3 minutos.

### AS MICROCORRENTES SÃO SEGURAS?

As microcorrentes do BEAR™ são uma tecnologia tonificante segura e indolor unicamente quando usadas com o sérum protetor, necessário para uma melhor condutividade. O BEAR™ NUNCA deve ser ativado perto da água ou em qualquer superfície molhada.

### É MAIS EFICAZ USAR UMA INTENSIDADE DE MICROCORRENTES MAIS ALTA?

Sim. Uma intensidade de microcorrentes mais alta significa uma potência maior, o que resulta em mais energia penetrando mais profundamente na pele, e portanto um tratamento mais eficaz. No entanto, cada pele é diferente - é por isso que recomendamos fortemente que o aparelho seja testado primeiro (com o SERUM SERUM SERUM) começando pelo nível 1, a intensidade mais baixa de microcorrentes, e aumentando gradualmente para ver qual intensidade de microcorrentes é melhor para você.

### POSSO AJUSTAR A INTENSIDADE DAS MICROCORRENTES?

Sim, você pode ajustar a intensidade de microcorrentes manualmente pressionando rapidamente o botão universal uma vez para cada nível, ou selecionando a intensidade desejada através do aplicativo.

### POSSO AJUSTAR AS PULSAÇÕES T-SONIC™?

Sim, para ligar e desligar as pulsações T-Sonic™, basta pressionar duas vezes seguidas o botão universal do aparelho ou alterar a configuração através do aplicativo.

### QUAL É A DIFERENÇA ENTRE O BEAR™ & O BEAR™ mini?

Tanto o BEAR™ quanto o BEAR™ mini usam microcorrentes para estimular o rosto e o pescoço, firmando e tonificando a pele para melhorar sua aparência. No entanto, o BEAR™ mini foi desenvolvido para um treino facial mais específico e possui para isso esferas menores que se encaixam facilmente nos diferentes pontos do rosto, além de uma faixa menor de 3 intensidades de microcorrentes. Já o BEAR™ possui esferas médias que cobrem uma superfície maior do rosto, mas também oferecem um tratamento preciso em cada linha do rosto. O BEAR™ também possui uma faixa maior com 5 intensidades de microcorrentes, que são mais fortes que as do BEAR™ mini.

### NO QUE OS APARELHOS BEAR™ SÃO DIFERENTES DE OUTROS APARELHOS COM MICROCORRENTES PARA USO CASEIRO?

Os aparelhos BEAR™ são diferentes dos outros aparelhos de microcorrente para uso caseiro por dois motivos bem importantes. Primeiro, os aparelhos BEAR™ são o único aparelho para uso em casa que possuem o Anti-Shock System™ para eliminar qualquer possibilidade de choque elétrico à sua pele, sendo consequentemente os aparelhos de microcorrente mais seguros do mundo. Em segundo lugar, o BEAR™ oferece mais intensidades de microcorrentes que qualquer outro aparelho para uso caseiro, permitindo que você tenha um tratamento mais personalizado e eficaz.

### QUAL A DURAÇÃO DE CADA TRATAMENTO PRÉ-CONFIGURADO DE MICROCORRENTES?

A duração das rotinas varia de 1 a 2 minutos, dependendo da zona a ser tratada.

## O APLICATIVO

### **POR QUE EU PRECISO BAIXAR O APLICATIVO FOREO ANTES DE USAR MEU APARELHO BEAR™?**

Todos os produtos FOREO ativados pelo aplicativo precisam ser desbloqueados através do aplicativo FOREO For You antes do primeiro uso. Isso ajuda a protegê-lo de produtos FOREO falsificados ou copiados e torna o processo de registro de garantia mais fácil, protegendo assim o seu investimento.

### **COMO FAÇO PARA PAREAR MEU APARELHO BEAR™ AO APLICATIVO FOREO?**

Baixe o aplicativo FOREO For You no seu smartphone ou tablet e ligue o Bluetooth. Pressione o botão universal do aparelho uma vez para ligá-lo. Uma luz branca pisca para avisar que o aparelho está em modo de pareamento. Siga as instruções do aplicativo para registrá-lo e parear o seu aparelho BEAR™.

### **MEU APARELHO BEAR™ FUNCIONA SEM O APLICATIVO?**

Sim, você pode usar o aparelho manualmente sem necessidade de conectá-lo ao aplicativo FOREO For You. No entanto, para desbloquear o aparelho antes do primeiro uso, você deve registrá-lo através do aplicativo FOREO For You e configurar suas preferências. Para ativar uma rotina facial pré-configurada, é necessário passar diretamente pelo aplicativo. A partir daí, sua rotina ficará automaticamente sincronizada no aparelho.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS & MANUTENÇÃO

### **COMO SABER SE ESTOU USANDO MEU APARELHO BEAR™ CORRETAMENTE?**

Ao usar seu aparelho BEAR™, verifique que as duas esferas de microcorrentes estão em contato com a pele a todo momento. Se as duas esferas não estiverem tocando a pele, o botão universal ficará ligado. Quando esta luz desliga significa que você está usando o aparelho corretamente.

### **O MEU APARELHO ESTÁ PISCANDO CONSTANTEMENTE. O QUE ISSO QUER DIZER?**

Uma luz piscando em volta do botão universal significa que o aparelho está em modo de pareamento por Bluetooth ou que o aparelho precisa ser recarregado. Siga as instruções no aplicativo para conectar seu aparelho.

### **COMO FAÇO PARA RECARREGAR MEU APARELHO BEAR™?**

O BEAR™ pode ser recarregado via USB, sendo que 1,5 hora de recarga entrega até 90 usos (com base em um tratamento de 1 minuto por uso). Os indicadores luminosos de intensidade abaixo do botão universal piscam enquanto o aparelho está carregando para indicar quanta bateria ele possui. Quando todos os indicadores estiverem acesos, quer dizer que seu aparelho já está totalmente carregado.

### **COMO FAÇO PARA LIMPAR MEU APARELHO BEAR™?**

Certifique-se que o aparelho está desligado e lave-o com água e sabão, enxágue com água morna e seque com um pano ou uma toalha não abrasivos e que não soltem fiapos. Recomendamos usar o Spray de Limpeza de Silicone da FOREO e enxaguar com água morna após cada uso para melhores resultados.

## SERUM SERUM SERUM

### **PRECISO USAR O SERUM SERUM SERUM DA FOREO COM MEU APARELHO BEAR™?**

Sim, é essencial usar nosso SERUM SERUM SERUM com o aparelho pois o sérum cria uma barreira condutora que permite transmitir as microcorrentes de maneira segura e eficaz para sua pele.

### **POR QUE O SERUM SERUM SERUM É COMPATÍVEL COM APARELHOS DE MICROCORRENTES?**

Nosso SERUM SERUM SERUM foi especialmente formulado com ingredientes condutores como a glicerina, que permite que as microcorrentes de aparelhos como o BEAR™ atuem perfeitamente na pele sem causar dor.

### **O SERUM SERUM SERUM É UM PRODUTO CRUELTY FREE?**

Sim, SERUM SERUM SERUM é cruelty free, o que significa que ele não foi testado em animais.

### **O SERUM SERUM SERUM CONTÉM ALGUM DESREGULADOR HORMONAL?**

Não, nossa fórmula limpa foi desenvolvida sem nenhum desregulador hormonal.

### **POSSO RECICLAR O FRASCO DO SERUM SERUM SERUM APÓS O USO?**

Sim, o frasco é reciclável.

©2018/19 FOREO AB. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA NA UE: FOREO AB, KARLÄVAGEN 41, 114 31 ESTOCOLMO, SUÉCIA  
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA NOS EUA: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119,  
EUA. FABRICADO PARA: FOREO AB. PROJETADO E DESENVOLVIDO POR: FOREO SUÉCIA. IMPORTADORA  
E DISTRIBUIDORA NA AUSTRÁLIA: SUITE 10, 1014 DONCASTER ROAD, DONCASTER EAST VICTORIA 3109,  
AUSTRÁLIA. FABRICADO POR: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN  
TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

[WWW.FOREO.COM](http://WWW.FOREO.COM)