

FOREO  
SWEDEN



FOREO  
issA™ 3

BROSSE À DENTS SONIQUE ULTRA HYGIÉNIQUE

Manuel en ligne



# MANUEL D'UTILISATION COMPLET

## AVANT DE COMMENCER

Nous vous félicitons d'avoir fait le premier pas vers un sourire plus blanc et plus éclatant en vous procurant cette issa™ 3. Avant de commencer à profiter de tous les bienfaits de soins dentaires sophistiqués et chics dans le confort de votre demeure, veuillez prendre quelques instants pour consulter ce guide.

**USAGE PRÉVU :** Pour un usage domestique, pour favoriser une hygiène buccodentaire globale en vous lavant les dents et les gencives.

Veuillez **LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION** et utiliser ce produit uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans ce manuel.

**⚠ AVERTISSEMENT :** AUCUNE MODIFICATION DE CET APPAREIL N'EST AUTORISÉE.



## PRÉSENTATION DE L'issa™ 3

Dotée d'une technologie brevetée révolutionnaire qui permet à votre brosse à dents de durer jusqu'à une année entière sur une seule charge USB, issa™ 3 associe une puissance de pulsations soniques à une tête de brosse hybride innovante en silicone résistante aux bactéries, pour que vous puissiez utiliser un geste manuel naturel tout en bénéficiant des résultats de la brosse à dents électrique. Le brossage n'a jamais été aussi facile...

## FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE issa™ 3


**REMARQUE :** L'issa™ 3 peut être verrouillée lors du déballage. Déverrouillez-la en maintenant les boutons + et - enfoncés en même temps. Le voyant clignotera alors pour indiquer que votre appareil est déverrouillé.



**EXTRÊMEMENT VERSATILE**  
Peut être utilisée avec n'importe quelle tête de brosse ou accessoire issa™.



**MÉMOIRE INTELLIGENTE**  
Elle se souviendra de vos préférences lors de la prochaine utilisation.

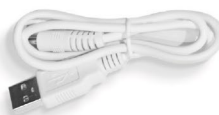

**CHARGEUR USB**  
Rechargez n'importe quand et n'importe où avec le câble de chargement USB.



**POCHETTE DE VOYAGE**  
Housse protectrice qui garde votre issa™ 3 propre lors des voyages.




# COMMENT UTILISER VOTRE issa™ 3

Ne changez pas vos habitudes de brossage, juste votre brosse à dents !



## APPLIQUEZ LE DENTIFRICE

Utilisez votre dentifrice habituel et allumez l'issa™ 3.

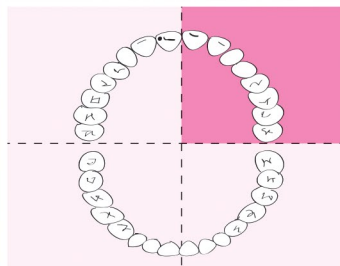

## BROSSEZ

Brossez-vous les dents de la même manière que vous le feriez avec une brosse à dents manuelle. issa™ 3 vous invitera à brosser un nouveau quadrant de la bouche toutes les 30 secondes.



## RINCER

Rincez votre bouche et nettoyez votre issa™ 3 sous le robinet.



## BROSSE-LANGUE ET JOUES (en option)

Pour un nettoyage bucco-dentaire complet, retournez la brosse et utilisez le dos de la tête de brosse pour brosser votre langue et vos joues en douceur.

**Répétez deux fois par jour pour un sourire plus frais et plus éclatant !**

**PRUDENCE :** Si vous ressentez un quelconque inconfort en utilisant votre appareil brosse à dents issa™ 3, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un dentiste. Si vous découvrez du sang sur la brosse, veuillez nettoyer l'appareil avec du savon et de l'eau.

## NETTOYAGE DE VOTRE issa™ 3

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation en lavant la brosse à l'eau chaude et en frottant vos doigts contre les poils. Nous recommandons d'utiliser le Spray Nettoyant Silicone FOREO sur le manche de votre issa™ 3 avant de le rincer à l'eau chaude pour un résultat optimal. Laissez votre brosse à dents sécher à l'air libre. Nous vous déconseillons de placer votre issa™ 3 dans un stérilisateur à UV.

**REMARQUE :** N'utilisez jamais de produits nettoyants contenant de l'alcool, des solvants ou de l'acétone. Évitez d'utiliser des dentifrices contenant des agents blanchissants avec votre appareil.

## REMPACEMENT DE LA TÊTE DE BROSSSE DE VOTRE issa™ 3

### TIREZ, ENFONCEZ

Toutes les têtes de brosse issa™ sont compatibles avec la gamme issa™ 3.

Pour remplacer une tête de brosse, assurez-vous que l'issa™ 3 est éteinte, puis soulevez la tête de brosse vers le haut pour la détacher. Avec les poils de la tête de remplacement tournés vers l'avant, alignez l'orifice central avec la tige en métal et enfoncez pour fixer fermement.

Pour une efficacité maximale, nous recommandons de changer votre tête de brosse issa™ 3 tous 6 les mois. Chaque tête de brosse Sensitive et le Brosse-langue durent jusqu'à 1 an.



Vous pouvez commander vos têtes de brosse de rechange sur [www.foreo.com](http://www.foreo.com) ou en contactant le revendeur FOREO autorisé le plus proche.



## CHARGEMENT DE VOTRE issa™ 3

Si la puissance des pulsations semble diminuer ou si le voyant lumineux devient rouge, il est temps de recharger votre appareil. Branchez le câble de chargement USB sur n'importe quelle prise pendant deux heures au plus. Lorsque le voyant lumineux cesse de clignoter, votre issa™ 3 est complètement chargée.

**PRUDENCE :** Avant de charger, assurez-vous que le port de chargement et le chargeur sont exempts d'eau et de résidu de dentifrice. N'utilisez PAS votre appareil FOREO pendant le chargement, et ne rechargez PAS pendant plus de 24 heures. Utilisez uniquement le câble de chargement USB fourni par FOREO.

## IMPORTANT

### POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE :

- Consultez votre médecin avant d'utiliser l'issa™ 3 si vous avez le moindre problème médical.
- Si vous suivez un traitement pour des troubles buccodentaires quelconques, consultez votre dentiste avant utilisation.
- Si vous ressentez un quelconque inconfort en utilisant votre brosse à dents issa™, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un dentiste.
- Évitez de laisser votre issa™ en plein soleil et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême ou à l'eau bouillante.
- Cette brosse à dents n'est pas destinée aux enfants de moins de 5 ans. Une surveillance étroite est nécessaire quand cet appareil est utilisé par, sur, ou près des enfants. Une surveillance adéquate et des instructions pour une utilisation sûre doivent être prodiguées aux enfants, ainsi qu'aux personnes aux capacités physiques et mentales réduites.
- On ne doit pas laisser les enfants jouer avec cette brosse à dents.
- Cessez l'utilisation si ce produit paraît endommagé d'une façon quelconque (tête de brosse, manche, chargeur).
- Ce produit ne contient pas de pièces réparables.
- Pour éviter le risque de décharge électrique, cet appareil doit être branché uniquement sur une alimentation secteur avec mise à la terre.

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Des précautions doivent être prises en cas de changement dans la performance de l'issa™ 3.

L'issa™ 3 ne se met pas en route quand on appuie sur le bouton universel :

- La batterie est déchargée. Rechargez avec le câble de chargement USB pendant 2 heures jusqu'au chargement complet, puis redémarrez votre issa™ 3 en maintenant le bouton de mise en marche enfoncé.
- L'interface est verrouillée. Déverrouillez-le en maintenant les boutons + et – enfoncés en même temps.

L'issa™ 3 ne peut pas être éteinte et/ou les boutons de l'interface ne répondent pas :

- Le microprocesseur est temporairement défaillant. Branchez le câble de chargement USB et/ou maintenez enfoncé le bouton universel pour redémarrer l'appareil.

Le voyant de l'issa™ 3 ne clignote pas quand le câble de chargement USB est connecté :

- La batterie est complètement chargée, prête pour jusqu'à 365 jours de brosse.
- La batterie est à plat et a besoin de plusieurs minutes pour confirmer le câble de chargement USB.
- Le câble de chargement USB n'est pas correctement branché. Vérifiez la prise électrique/la prise USB et le port de chargement.

L'issa™ 3 est tombée dans l'eau et le port de chargement est mouillé :

- Séchez et poursuivez l'utilisation. L'issa™ 3 est complètement étanche et le port de chargement est totalement hermétique.

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question spécifique dans la section Résolution de problèmes, ou si vous avez toute autre question concernant le fonctionnement de cette brosse à dents, veuillez visiter la section Service Clientèle de [www.foreo.com](http://www.foreo.com).

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

### ENREGISTRER LA GARANTIE

Pour activer votre Garantie limitée de 2 ans, visitez [foreo.com/product-registration](http://foreo.com/product-registration) pour plus d'informations.



## GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

FOREO garantit cet appareil pour une période de DEUX (2) ANS à partir de la date originelle d'achat contre les défaillances dues à une fabrication ou des matériaux défectueux pour une Utilisation Normale de l'appareil. La garantie couvre les pièces actives qui affectent le fonctionnement de l'appareil. Elle ne couvre PAS les dégradations esthétiques causées par une usure normale, ou les dommages causés par les accidents, mauvais usages ou négligences. Toute tentative d'ouvrir ou de démonter l'appareil (ou ses accessoires) annulera la garantie.

Si vous découvrez une malfaçon et notifiez FOREO pendant la période de garantie, FOREO, à sa discrétion, remplacera l'appareil gratuitement. Les réclamations au titre de la garantie doivent être appuyées par des preuves raisonnables que la réclamation est faite pendant la période de garantie. Pour valider votre garantie, veuillez conserver votre reçu d'achat original ainsi que ces conditions de garantie pendant la durée de la période de garantie.

Pour faire une réclamation sous garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur [www.foreo.com](http://www.foreo.com) puis sélectionner l'option de réclamation sous garantie. Les frais d'envoi ne sont pas remboursables. Cet engagement est en supplément de vos droits légaux en tant que consommateur et n'affecte ces droits d'aucune façon.

*\*Cette garantie limitée de 2 ans ne s'applique pas aux têtes de brosse remplaçables.*

## INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT

La mise au rebut des équipements électroniques usagés (applicable dans l'UE et autres pays européens avec systèmes de collecte des déchets distincts).

Le symbole de benne à ordure barrée indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être apporté au centre de collecte approprié pour le recyclage des composants électriques et électroniques. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine qui pourraient être causées par un traitement inapproprié du produit usagé. Le recyclage des matériaux contribuera également à préserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre service local de traitement des déchets ménagers ou le lieu de votre achat.



## RETRAIT DE LA BATTERIE

**REMARQUE :** Ce processus n'est pas réversible. L'ouverture de l'appareil annulera la garantie. Cette action ne doit être entreprise que lorsqu'on s'apprête à se débarrasser de l'appareil.

Étant donné que cet appareil contient une batterie lithium-ion, celle-ci doit être retirée avant la mise au rebut et ne doit pas être jetée avec les déchets domestiques. Pour retirer la batterie, retirez la tête de brosse, décollez la protection en silicone, ouvrez la coque en plastique et retirez la batterie pour vous en débarrasser conformément à votre réglementation environnementale locale. Portez des gants pendant ce processus pour votre sécurité. Des instructions visuelles détaillées sont fournies ci-dessous :



## CARACTÉRISTIQUES

<b>MATÉRIAUX :</b>	Silicone de qualité médicale, PBT Polymer, PC + ABS	<b>DURÉE D'UTILISATION :</b>	Jusqu'à 365 jours
<b>COULEURS :</b>	Fuchsia/Pearl Pink/Mint / Black	<b>VEILLE :</b>	180 jours
<b>TAILLE :</b>	195 x 28 x 32,4 mm	<b>FRÉQUENCE :</b>	166 Hz
<b>POIDS :</b>	72 g	<b>INTERFACE :</b>	3 boutons
<b>BATTERIE :</b>	Li-Ion 1000 mA 3,7 V	<b>PULSATIONS/MIN :</b>	Jusqu'à 11 000
<b>PUISSANCE NOMINALE :</b>	5 V CC, 0,6 W		



## CONDITIONS CLIMATIQUES D'UTILISATION

TEMPÉRATURE :	5° à 40° Celsius
HUMIDITÉ :	40 % à 80 %
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE :	800 à 1 060 hPa

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES DE STOCKAGE ET D'EXPÉDITION :

TEMPÉRATURE :	-10° à 50° Celsius
HUMIDITÉ :	30 % à 80 %
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE :	500 à 1 060 hPa

## AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Les utilisateurs de cet appareil l'utilisent à leurs risques et périls. Ni FOREO ni ses revendeurs n'assument la moindre responsabilité pour toute blessure ou tout dommage, physique ou autre, découlant, directement ou indirectement, de l'utilisation de cet appareil. De plus, FOREO se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter de temps à autre des modifications à son contenu sans obligation de notifier quiconque de tels changements ou révisions.

Le modèle est susceptible d'être modifié pour être amélioré sans avertissement.

## QUESTIONS-RÉPONSES

### LES BASES

#### 1. QU'EST-CE QUI EST FOURNI AVEC MON issa™ 3 ?

1x brosse à dents issa™ 3, 1x câble de chargement USB, 1x pochette de voyage et 1x manuel issa™.

#### 2. QUE DOIS-JE FAIRE APRÈS AVOIR REÇU MON issa™ 3 ?

Nous vous félicitons d'avoir fait le premier pas vers un sourire plus blanc et plus éclatant en vous procurant cette issa™ 3 ! Commencez votre expérience de brossage sans effort en déverrouillant votre brosse à dents pour profiter de tous les bienfaits de soins dentaires sophistiqués et chics dans le confort de votre demeure, en maintenant les boutons + et - enfoncés en même temps. Le voyant clignotera alors pour indiquer que votre appareil est déverrouillé.

#### 3. COMMENT ALLUMER MON issa™ 3 ?

Après avoir déverrouillé votre brosse à dents pour la première utilisation, allumez votre issa™ 3 en appuyant sur le bouton universel d'alimentation une fois.

#### 4. COMMENT ÉTEINDRE MON issa™ 3 ?

Pour éteindre votre issa™ 3, appuyez sur le bouton universel et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

#### 5. PUIS-JE AJUSTER LA VITESSE/L'INTENSITÉ ?

Oui, vous pouvez choisir parmi 16 vitesses / intensités différentes et les régler selon vos préférences en utilisant les boutons + et - de votre brosse à dents. L'issa™ 3 se souviendra ensuite de vos réglages la prochaine fois que vous vous brosserez les dents.

### BROSSE À DENTS issa™ 3

#### 6. COMMENT DOIS-JE ME BROSSE LES DENTS AVEC MON issa™ 3 ?

Utilisez la quantité suggérée de votre dentifrice favori. Appuyez sur le bouton universel pour allumer votre issa™ 3 (vous pouvez utiliser les boutons +/- pour ajuster l'intensité à votre niveau préféré). Brossez-vous les dents de la même manière que vous le feriez avec une brosse à dents manuelle. L'issa™ 3 vous invitera à brosser un nouveau quadrant de la bouche toutes les 30 secondes. Pour un nettoyage bucco-dentaire complet, retournez la brosse et utilisez le dos de la tête de brosse pour brosser votre langue et vos joues en douceur. Éteignez votre brosse à dents en appuyant à nouveau sur le bouton universel, (votre brosse à dents s'éteint automatiquement après 3 minutes). Rincez ensuite votre bouche et nettoyez votre issa™ 3 sous le robinet.

#### 7. À QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE ME BROSSE LES DENTS AVEC MON issa™ 3 ?

Nous vous recommandons d'utiliser votre issa™ 3 deux fois par jour (matin et soir) pour un sourire plus frais et plus éclatant !

## **8. À QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE REMPLACER LA TÊTE DE MA BROSSE issa™ 3 ?**

Les têtes de brosse issa™ sont faites pour durer jusqu'à 6 mois, elles sont donc plus respectueuses de l'environnement que les autres têtes de brosse à dents électriques qui ne durent que jusqu'à 3 mois avant de devoir être remplacées.

## **9. COMMENT REMPLACER LA TÊTE DE MA BROSSE issa™ ?**

Les têtes de brosse issa™ 3 peuvent être remplacées par un simple mouvement de traction et de poussée. Pour remplacer la tête de brosse, assurez-vous que l'issa™ 3 est éteinte, puis soulevez la tête de brosse vers le haut pour la détacher. Avec les poils de la tête de remplacement tournés vers l'avant, alignez l'orifice central avec la tige en métal et enfoncez pour fixer fermement.

## **10. QU'EST-CE QUI REND MON issa™ 3 PLUS FACILE À UTILISER QUE LES AUTRES BROSSES À DENTS SONIQUES ?**

Contrairement aux autres brosses à dents électriques existantes sur le marché, l'issa™ 3 dure jusqu'à 365 jours sur une seule charge, avec une tête de brosse qui dure jusqu'à 6 mois avant de devoir être remplacée. Elle intègre également une conception unique et innovante de brosse hybride flexible, avec un polymère PBT et des poils de qualité médicale qui sont résistants à la plaque tout en étant extrêmement doux pour les gencives, de sorte que vous n'avez pas à craindre un brossage trop dur. Dotée en outre de 16 vitesses / intensités, et d'une brosse-langue et joues intégrée, l'issa™ 3 offre un soin bucco-dentaire personnalisable 4 en 1, pour l'expérience de brossage la plus rapide et sans effort qui soit.

## **RÉSOLUTION DES PROBLÈMES ET ENTRETIEN**

### **11. QUE DOIS-JE FAIRE SI MON issa™ 3 NE S'ACTIVE PAS QUAND J'APPUIE SUR LE BOUTON UNIVERSEL ?**

La batterie est peut-être déchargée. Rechargez avec le câble de chargement USB pendant 2 heures jusqu'au chargement complet, puis redémarrez votre issa™ 3 en maintenant le bouton universel d'alimentation enfoncé. Il se peut aussi que votre interface soit verrouillée et que vous deviez la déverrouiller en maintenant enfoncés simultanément les boutons + et -, après quoi le voyant lumineux clignotera pour indiquer que votre appareil est déverrouillé.

### **12. QUE DOIS-JE FAIRE SI MON issa™ 3 NE PEUT PAS ÊTRE ÉTEINTE ET/OU SI LES BOUTONS DE L'INTERFACE NE RÉPONDENT PAS ?**

Cela peut signifier que le microprocesseur est temporairement défaillant. Branchez le câble de chargement USB et/ou maintenez enfoncé le bouton universel pour redémarrer l'appareil.

### **13. QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE SI LE VOYANT DE L'issa™ 3 S'ARRÊTE DE CLIGNOTER LORSQUE LE CÂBLE DE CHARGE USB EST CONNECTÉ ?**

Cela peut signifier plusieurs choses. Soit la batterie est complètement rechargée et prête pour 365 jours de brossage ou bien la batterie est à plat et a besoin de plusieurs minutes pour confirmer le câble de chargement USB. Il se peut également que le câble de chargement USB ne soit pas correctement branché - vérifiez la prise électrique / la prise USB et le port de chargement.

### **14. QUE FAIRE SI MON issa™ 3 EST TOMBÉE DANS L'EAU ET QUE LE PORT DE CHARGEMENT EST HUMIDE ?**

L'issa™ 3 est complètement étanche et le port de chargement est totalement hermétique. Séchez-la simplement et continuez l'utilisation.

### **15. COMMENT SAVOIR QUAND CHARGER MON issa™ 3 ?**

Lorsque le voyant lumineux à la base de votre issa™ 3 devient rouge, il est temps de charger votre brosse à dents. Branchez le câble de chargement USB sur n'importe quelle prise pendant deux heures. Lorsque le voyant lumineux cesse de clignoter, votre issa™ 3 est complètement chargée.

### **16. COMMENT NETTOYER MON issa™ 3 ?**

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation en lavant la brosse à l'eau chaude et en frottant vos doigts contre les poils. Nous recommandons d'utiliser le Spray Nettoyant Silicone FOREO sur le manche de votre issa™ 3 avant de le rincer à l'eau chaude pour un résultat optimal. Laissez votre brosse à dents sécher à l'air libre. Nous vous déconseillons de placer votre issa™ 3 dans un stérilisateur à UV.

**REMARQUE :** N'utilisez jamais de produits nettoyants contenant de l'alcool, des solvants ou de l'acétone. Évitez d'utiliser des dentifrices contenant des agents blanchissants avec votre appareil.



©2021 FOREO AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

DISTR. UE : FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SUÈDE.

DISTR. USA : FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, États-Unis.

DISTR. AUS : 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIE.

FABRIQUÉ PAR : VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. N° 58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINE

CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR FOREO SUÈDE.

FABRIQUÉ POUR FOREO AB.

**WWW.FOREO.COM**