



FOREO
SWEDEN

issaTM mini 3

더 밝은 미소를 위한
부드러운 전동칫솔!



전체 사용 설명서

시작하기

이사™ 미니 3와 함께 더 나은 양치질과 더 밝고 환한 미소를 만날 첫 걸음을 내딛은 것을 축하합니다. 집에서 편안하게 세련되고 정교한 구강 케어를 즐기기에, 본 설명서를 주의 깊게 살펴보시기 바랍니다.

사용 목적: 치아와 잇몸을 닦아 전반적인 구강 위생을 개선하는 가정용 칫솔입니다.

사용 전에 모든 지침을 숙지하고, 본 사용 설명서 내에서 안내하는 용도로만 제품을 사용하세요.

⚠ **주의:** 디바이스의 어떠한 개조도 허용되지 않습니다.



이사™ 미니 3 소개

더 밝은 미소를 위해 새롭게 업그레이드된 아름다운 칫솔이 혁신적인 실리콘-PBT 하이브리드 브러시와 음파 진동을 결합해 24시간 내내 더 밝은 미소, 건강한 치아, 상쾌한 입 안을 선사합니다!

이사™ 미니 3 살펴보기

유연한 하이브리드 브러시 헤드
실리콘 + PBT 폴리머 칫솔모가 플러그에는 강력하고, 잇몸에는 부드럽게.

의료용 실리콘
초위생적, 항균, BPA & 프탈레이트 무첨가, 최상의 부드러움.

음파 진동 테크놀로지
부드러운 칫솔질과 잇몸 마사지를 위한 분당 9,000번의 진동.

스마일 타이머
2분간의 양치질 시간을 알려주고, 12시간 이상 사용하지 않았을 때를 알려줍니다.

인디케이터 라이트
흰색 라이트가 입 안의 새로운 부위로 이동해야 할 때를 알려주고, 레드 라이트는 배터리 부족을 나타냅니다.

혀 & 볼 클리너
토털 구강 케어를 위해 물을 흡수하지 않아 박테리아 증식을 방지하는 클리너.

교체 가능한 브러시 헤드
교체가 간편합니다. 기존 헤드를 빼고 새로운 헤드를 끼우기만 하면 됩니다.

미끄럼 방지 그립
더 부드러운 양치질을 위한 편안한 그립감.

유니버설 파워 버튼
한 번 눌러 칫솔을 켜고 끌 수 있습니다.

충전 포트
100% 방수로 샤워 중에도 사용할 수 있으며, 한 번 충전으로 최대 265일 사용할 수 있습니다.



다용도 칫솔



모든 이사™ 브러시 헤드



또는 악세서리와 호환이 가능합니다.

USB 충전기

USB 충전 케이블로 언제 어디서든 충전할 수 있습니다.

휴대용 파워치

이동 중에도 이사™ 미니 3를 청결하게 관리 및 보호할 수 있습니다.


이사™ 미니 3 사용 방법

양치질 습관 전체를 바꾸려 하지 말고, 칫솔만 바꾸세요!



치약 바르기

평소 사용하는 치약을 바르고 이사™ 미니 3를 켜세요.

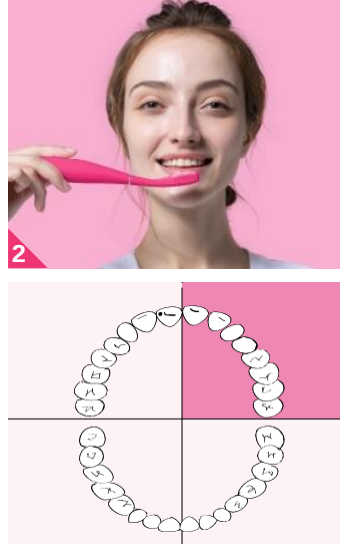


칫솔질 하기

일반 칫솔과 같은 방법으로 양치질하세요. 이사™ 미니 3가 30초마다 입 안의 다른 부위로 움직일 때를 알려줍니다.



헹구기

입 안을 물로 헹구고, 이사™ 미니 3는 흐르는 물로 닦아주세요.

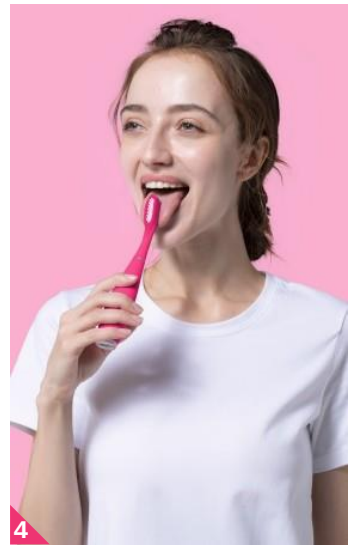

혀 & 볼 클리너

(선택사항)

입 안 전체를 깨끗하게 관리하기 위해 칫솔모 뒷면을 사용해 혀와 볼 안쪽을 부드럽게 문지릅니다.

하루에 최소 두 번 반복해 더 밝고 환한 미소를 완성하세요!

주의: 이사™ 미니 3를 사용할 때 불편함을 느낄 경우, 즉시 사용을 중단하고 전문의와 상담하세요. 칫솔모 표면에 피가 묻은 경우 비누와 물로 디바이스를 세척하세요.

이사™ 미니 3 세척하기

사용 후에는 칫솔모 사이를 손가락으로 문지르면서 미온수로 세척하세요. 최적의 결과를 위해 이사™ 미니 3 바디에 포레오 실리콘 클렌징 스프레이를 뿌리고 미온수로 헹구는 것을 권장합니다. 칫솔은 자연 건조시키세요. 이사™ 미니 3를 UV 살균 케이스에 넣는 것은 권장하지 않습니다.

주의: 알코올, 휘발유, 아세톤 성분을 함유한 세척용 제품을 절대 사용하지 마세요. 표백 성분이 포함된 치약을 사용하지 마세요.

이사™ 미니 3 브러시 헤드 교체하기

당겨서 분리하고, 밀어서 교체하세요!

모든 이사™ 라인 브러시 헤드는 이사™ 미니 3와 호환됩니다.

브러시 헤드를 교체하려면 이사™ 미니 3가 꺼져 있는지 먼저 확인하고, 브러시 헤드를 위로 당겨 분리하세요. 교체용 브러시 헤드의 칫솔모가 앞을 향하도록 하여 중앙 구멍에 금속 막대를 정렬한 상태에서 아래로 눌러 고정합니다.

최대의 효과를 위해 이사™ 미니 3 브러시 헤드를 6개월마다 교체할 것을 권장합니다. 센서티브 브러시 헤드 및 혀 클리너는 최대 1년까지 사용할 수 있습니다.

교체용 브러시 헤드는 www.foreo.com 또는 가까운 포레오 공식 판매처에서 구입할 수 있습니다.



이사™ 미니 3 충전하기

진동 세기가 약해지거나 인디케이터 라이트가 레드로 바뀌면, 디바이스를 충전할 때입니다. USB 충전 케이블로 2시간 동안 충전하세요. 이사™ 미니 3가 완전히 충전되면 인디케이터 라이트가 깜빡임을 멈춥니다.

주의: 충전하기 전에, 충전 포트와 충전기에 물과 치약 잔여물이 없는지 확인하세요. 충전하는 동안 포레오 디바이스를 사용하지 말고, 24시간 이상 충전하지 마세요. 포레오에서 제공하는 전용 USB 충전 케이블만 사용하세요.

최상의 안전을 위한

주의사항:

- 평소 의학적인 문제가 있는 경우, 이사™ 미니 3 사용 전에 전문의와 상담하세요.
- 구강 질환으로 치료를 받고 있는 경우, 사용 전에 치과 전문의와 상담하세요.
- 이사™ 미니 3를 사용할 때 불편함을 느낄 경우, 즉시 사용을 중단하고 전문의와 상담하세요. 칫솔모 표면에 피가 묻은 경우 비누와 물로 디바이스를 세척하세요.
- 이사™ 미니 3는 직사광선을 피해 보관하고, 절대 강한 열이나 끓는 물에 노출하지 마세요.
- 이 칫솔은 5세 미만의 어린이에게는 적합하지 않습니다. 어린이가 해당 디바이스를 사용하거나 근처에 있는 경우 주의 깊은 감독이 필요합니다. 어린이나 신체적 및 정신적 능력이 저조한 사람이 사용할 때는 적절한 주의 및 관리가 필요합니다.
- 아이들이 칫솔을 가지고 놀지 못하게 하세요.
- 제품(브러시 헤드, 손잡이, 충전기)에 손상된 흔적이 보이면 사용을 중단하세요.
- 이 제품에는 수리할 수 있는 부품이 포함되어 있지 않습니다.
- 감전을 방지하기 위해 이 제품은 보호 접지가 있는 전원 공급 장치에만 연결해야 합니다.

문제 해결

이사™ 미니 3 성능에 변화가 생겼을 경우 해결 방법.

유니버설 버튼을 눌러도 이사™ 미니 3가 작동하지 않는 경우:

- 배터리가 방전되었습니다. USB 충전 케이블로 2시간 동안 완전히 충전하고, 유니버설 파워 버튼을 길게 눌러서 이사™ 미니 3를 다시 시작하세요.

이사™ 미니 3를 끌 수 없거나 인터페이스 버튼이 반응하지 않는 경우:

- 마이크로프로세서에 일시적인 오작동이 있습니다. USB 충전 케이블에 연결하거나 유니버설 버튼을 길게 눌러 디바이스를 다시 시작하세요.

USB 충전 케이블에 연결되어 있을 때 이사™ 미니 3의 인디케이터 라이트가 깜박이지 않는 경우:

- 배터리가 완전히 충전되었습니다. 이제 265일 동안 양치질을 즐겨보세요!
- 배터리가 방전되어 USB 충전 케이블을 인식하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다.
- USB 충전 케이블이 제대로 연결되어 있지 않습니다. 콘센트/USB 소켓 및 충전 포트를 확인하세요.

이사™ 미니 3가 물에 빠져 충전 포트가 젖은 경우:

- 건조한 후에 사용하세요. 이사™ 미니 3는 방수이며 충전 포트는 완전히 밀폐되어 있습니다.

원하는 해결 방법을 찾지 못하거나 칫솔의 작동과 관련해 기타 문의 사항이 있는 경우 www.foreo.com의 고객센터로 방문하세요.

보증 약관

품질 보증 등록하기

foreo.com/product-registration을 통해 자세한 내용을 확인하고, 2년 한정 품질 보증을 활성화하세요.

2년 한정 품질 보증

포레오는 생산과정의 결함 및 정상적인 사용 중에 발생하는 자재의 결함에 한하여 구입일로부터 2년 동안 제품의 품질을 보증합니다. 품질 보증은 디바이스 작동에 영향을 미치는 부품에만 해당합니다. 정상 마모에 의한 품질 저하 혹은 사고, 오용, 방치 등에 의한 손상은 해당되지 않습니다. 디바이스 또는 액세서리를 열거나 분해하려 시도하면 보증이 무효화됩니다.

보증 기간 동안 제품의 결함을 발견하고 포레오에 알려주시면, 포레오가 재량에 따라 무료로 제품을 교환해드립니다. 보증 신청은 반드시 보증 신청일이 품질 보증 기간 내라는 것을 증명할 합당한 증거가 필요합니다. 그러므로 보증 기간 동안은 구입 당시 영수증 원본을 보증 약관과 함께 보관해 주십시오.

보증을 신청하기 위해서는 www.foreo.com 사이트의 계정에 로그인하고 보증 신청 옵션을 선택해야 합니다. 배송비는 환불이 불가능합니다. 이는 소비자 법적 권리의 추가 정책이며, 그 권리에 어떠한 영향도 미치지 않습니다.

*2년 한정 품질 보증은 교체용 브러시 헤드에는 적용되지 않습니다.

폐기 관련 정보

사용한 전자기기의 폐기 (별도의 폐기물 수거 정책을 시행하는 EU 및 기타 유럽 국가들에 해당.)

엑스자로 줄이 그어진 휴지통 표시는 이 디바이스가 생활폐기물로 취급되어서는 안되며, 전기 및 전자 기기를 위한 적절한 재활용 수거 장소에서 폐기되어야 함을 의미합니다. 이 디바이스를 올바르게 폐기함으로써, 제품의 부적절한 폐기물 취급이 초래하는 환경과 인체 건강에 미칠 악영향을 예방할 수 있습니다. 재료의 재활용은 또한 천연 자원 보존에 도움이 됩니다.


디바이스의 재활용에 관한 자세한 정보는 해당 지역의 가정용 폐기물 처리 서비스 또는 제품 구입처로 문의하세요.



배터리 제거하기

주의: 해당 프로세스는 되돌릴 수 없습니다. 디바이스를 열면 보증이 무효화됩니다. 디바이스를 폐기할 때만 수행하세요.

이 디바이스는 리튬-이온 배터리를 포함하고 있어, 폐기하기 전에 배터리를 제거해야 하며 가정용 폐기물과 함께 버릴 수 없습니다. 배터리를 제거하려면 브러시 헤드를 잡아당겨 분리하고 실리콘 겔면을 벗겨낸 후, 플라스틱 덮개를 열고 지역 환경 규제에 따라 폐기할 배터리를 제거합니다. 배터리를 제거하는 동안 안전을 위해 장갑을 착용하세요. 자세한 지침은 아래 이미지를 참고하세요:

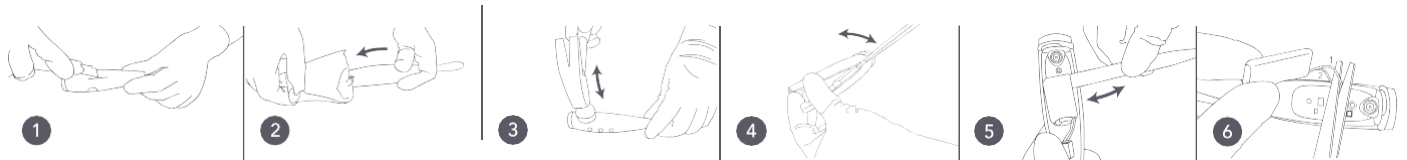

제품 사양

소재:	의료용 실리콘, PBT 폴리머, PC+ABS
색상:	써머 스카이 / 망고 탕고 / 와일드 스트로베리
사이즈:	170 x 31 x 25.4 mm
무게:	56g
배터리:	Li-Ion 420mA 3.7V
전력:	3.7V DC, 0.5W

사용량:	최대 265일
대기시간:	180일
주파수:	166 Hz
인터페이스:	버튼 1개
진동:	분당 9,000번

사용 환경 조건

온도:	섭씨 5° to 40°
습도:	40%~80%
기압:	800~1,060 hPa

보관 및 배송 환경 조건

온도:	섭씨 -10°~50°
습도:	30%~80%
기압:	500~1,060 hPa

면책 조항

모든 책임은 디바이스 사용자 본인에게 있습니다. 장치 사용으로 초래된 직접 또는 간접적인 부상, 손상, 신체적 혹은 그 외 피해에 대한 책임도 포레오와 대리판매자 모두에게 없음을 명시합니다. 아울러 포레오는 발행물에 대한 수정의 권리가 있으며 누구에게도 별도 공지의 의무없이 어느 때에나 수정 및 개정할 수 있는 권리가 있습니다.

제품은 품질 향상을 위해 별도 공지없이 변경될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

기본적인 질문

- 1. 이사™ 미니 3 구성품은 무엇인가요?
이사™ 미니 3 칫솔 1개, USB 충전 케이블 1개, 휴대용 파우치 1개, 이사™ 설명서 1개.
- 2. 이사™ 미니 3를 어떻게 시작/종료하나요?
최초 사용 시에 디바이스를 잠금 해제한 후, 유니버설 파워 버튼을 한 번 눌러 이사™ 미니 3를 켤 수 있습니다.

디바이스

- 3. 이사™ 미니 3로 어떻게 양치질 하나요?
평소 사용하는 치약을 바르고 이사™ 미니 3를 켜세요. 일반 칫솔을 사용할 때와 같은 방법으로 양치질하세요. 이사™ 미니 3가 30초마다 입 안의 다른 부위로 움직일 때를 알려줍니다. 입 안 전체를 깨끗하게 관리하기 위해 칫솔모 뒷면을 사용하여 혀와 볼 안쪽을 부드럽게 문지릅니다. 유니버설 버튼을 다시 눌러 칫솔을 종료하세요. (3분 뒤에 칫솔은 자동으로 종료됩니다.) 입 안을 물로 헹구고, 이사™ 미니 3는 흐르는 물로 닦아주세요.
- 4. 이사™ 미니 3를 얼마나 자주 사용하나요?
더 밝고 환한 미소를 위해, 하루에 최소 두 번 (매일 아침, 저녁) 사용할 것을 권장합니다. 12시간 이상 칫솔을 사용하지 않으면 슬픈 얼굴에 불빛이 들어옵니다.
- 5. 이사™ 미니 3 브러시 헤드를 얼마나 자주 교체해야 하나요?
이사™ 하이브리드 브러시 헤드는 최대 6개월, 이사™ 센서티브 브러시 헤드는 1년까지 사용할 수 있도록 제작되어, 3개월 마다 교체해야 하는 다른 칫솔보다 더 환경 친화적입니다.
- 6. 이사™ 미니 3 브러시 헤드를 어떻게 교체하나요?
이사™ 브러시 헤드는 간편하게 당겨서 분리하고, 밀어서 교체할 수 있습니다. 교체하기 전에 이사™ 미니 3가 꺼져 있는지 먼저 확인하고, 브러시 헤드를 위로 당겨 분리하세요. 교체용 브러시 헤드의 칫솔모가 앞을 향하도록 하여 중앙 구멍에 금속 막대를 정렬한 상태에서 아래로 눌러 고정합니다.

10. 이사™ 미니 3가 다른 전동 칫솔보다 사용하기 쉬운 이유는 무엇인가요?

다른 전동 칫솔과 달리 이사™ 미니 3는 한 번 충전으로 무려 265일 동안 지속되며, 칫솔모는 최대 6개월까지 사용할 수 있습니다. 또한, PBT 폴리머와 의료용으로 만들어진 혁신적이고 유연한 하이브리드 브러시가 플라그에 강하고 잇몸에는 매우 부드러워 양치로 인한 자극에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 혀 및 볼 클리너가 내장되어 있는 이사™ 미니 3는 빠르고 쉽게 양치질할 수 있도록 완벽한 토탈 구강 케어를 제공합니다.

문제 해결 & 유지 관리

11. 이사™ 미니 3의 유니버설 버튼을 눌러도 작동하지 않으면 어떻게 해야 하나요?

배터리가 방전된 경우일 수 있습니다. USB 충전 케이블로 2시간 동안 완전히 충전하고, 유니버설 파워 버튼을 길게 눌러서 이사™ 미니 3를 다시 시작하세요.

12. 이사™ 미니 3를 끌 수 없거나 인터페이스 버튼이 반응하지 않으면 어떻게 해야 하나요?

마이크로프로세서에 일시적인 오작동이 있습니다. USB 충전 케이블에 연결하거나 유니버설 버튼을 길게 눌러 디바이스를 다시 시작하세요.

13. USB 충전 케이블에 연결되어 있을 때 이사™ 미니 3의 인디케이터 라이트가 깜박이지 않는 이유는 무엇인가요?

다음의 이유 중 하나일 수 있습니다. 배터리가 완전히 충전되어 265일 동안 양치질을 즐길 수 있습니다. 또는, 배터리가 방전되어 USB 충전 케이블을 인식하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다. 그 외 경우는 USB 충전 케이블이 제대로 연결되어 있지 않을 수 있습니다. 콘센트/USB 소켓 및 충전 포트를 확인하세요.

14. 이사™ 미니 3가 물에 빠져 충전 포트가 젖은 경우 어떻게 하나요?

이사™ 미니 3는 방수이며 충전 포트는 완전히 밀폐되어 있습니다. 건조한 후에 계속 사용하세요.

15. 이사™ 미니 3를 언제 충전해야 하나요?

인디케이터 라이트가 레드로 바뀌면 칫솔을 충전할 때입니다. USB 충전 케이블로 2시간 동안 충전하세요. 이사™ 미니 3가 완전히 충전되면 인디케이터 라이트가 깜빡임을 멈춥니다.

16. 이사™ 미니 3를 어떻게 세척하나요?

사용 후에는 칫솔모 사이를 손가락으로 문지르면서 미온수로 세척하세요. 최적의 결과를 위해 이사™ 미니 3 바디에 포레오 실리콘 클렌징 스프레이를 뿌리고 미온수로 행구는 것을 권장합니다. 칫솔은 자연 건조시키세요. 이사™ 미니 3를 UV 살균 케이스에 넣는 것은 권장하지 않습니다. 주의: 알코올, 휘발유, 아세톤 성분을 함유한 세척용 제품을 절대 사용하지 마세요. 표백 성분이 포함된 치약을 사용하지 마세요.

©2021 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.

EUDISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 11431 STOCKHOLM, SWEDEN.

USDISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUSDISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA. MANUFACTURED BY: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD.

NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

DESIGNED AND DEVELOPED BY FOREO SWEDEN.

MANUFACTURED FOR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM