

FOREO
SWEDEN

issa™
baby



0-4 lat
ans



**DELIKATNA SONICZNA
SZCZOTECZKA DO
ZĘBÓW**

DLA NIEMOWLĄT I DZIECI



INSTRUKCJA ONLINE

PEŁNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PIERWSZE KROKI

Gratulujemy podjęcia pierwszych kroków w kierunku wytworzenia i doskonalenia nawyku dbania o higienę jamy ustnej u Twojego dziecka dzięki szczoteczce ISSA™ baby! Zanim zaczniesz cieszyć się wszystkimi zaletami tej stylowej szczoteczki sonicznej w zaciszu swojego domu, poświęć kilka chwil, aby uważnie przeczytać informacje zawarte w niniejszej instrukcji.

PRZEZNACZENIE: Do użytku domowego i wspierania ogólnej higieny jamy ustnej poprzez czyszczenie zębów i dziąseł.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI i używać tego produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIE: Intensywne przygryzanie może z czasem spowodować uszkodzenia silikonowej powłoki szczoteczki. Stosowanie szczoteczki u niemowląt i małych dzieci powinno zawsze odbywać się pod nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej. W razie pojawienia się jakichkolwiek uszkodzeń bądź ubytków w silikonie należy przerwać stosowanie i w sposób odpowiedzialny poddać szczoteczkę utylizacji. W przypadku podejrzenia, że dziecko połknęło jakąkolwiek część szczoteczki ISSA™ baby należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.


⚠ Jakiegokolwiek modyfikacje sprzętu są zabronione.

ISSA™ baby – WPROWADZENIE

ISSA™ baby, pierwsza soniczna szczoteczka do zębów wykonana w całości z medycznego silikonu i dostosowana do potrzeb higieny jamy ustnej najmłodszych adeptów szczotkowania, jest niezwykle skuteczna, a jednocześnie delikatna. Idealnie nadaje się do masowania dziąseł i łagodzenia podrażnień, a także delikatnego mycia pierwszych ząbków z najwyższą skutecznością już od momentu ich pojawienia się.

Wykorzystująca tę samą innowacyjną technologię co pozostałe produkty z rodziny ISSA™ szczoteczka ISSA™ baby przeznaczona jest do używania w taki sam sposób jak szczoteczka manualna. Dzięki wyjątkowo długiej żywotności baterii zaledwie godzinne ładowanie przez port USB zapewnia jej moc do działania nawet na 480 zastosowań, a zabawne buźki ułatwiają wyrobienie nawyku 2-minutowego szczotkowania zębów rano i wieczorem – mycie zębów wcale nie musi być nudne!

POZNAJ SWOJĄ SZCZOTECZKĘ ISSA™ baby

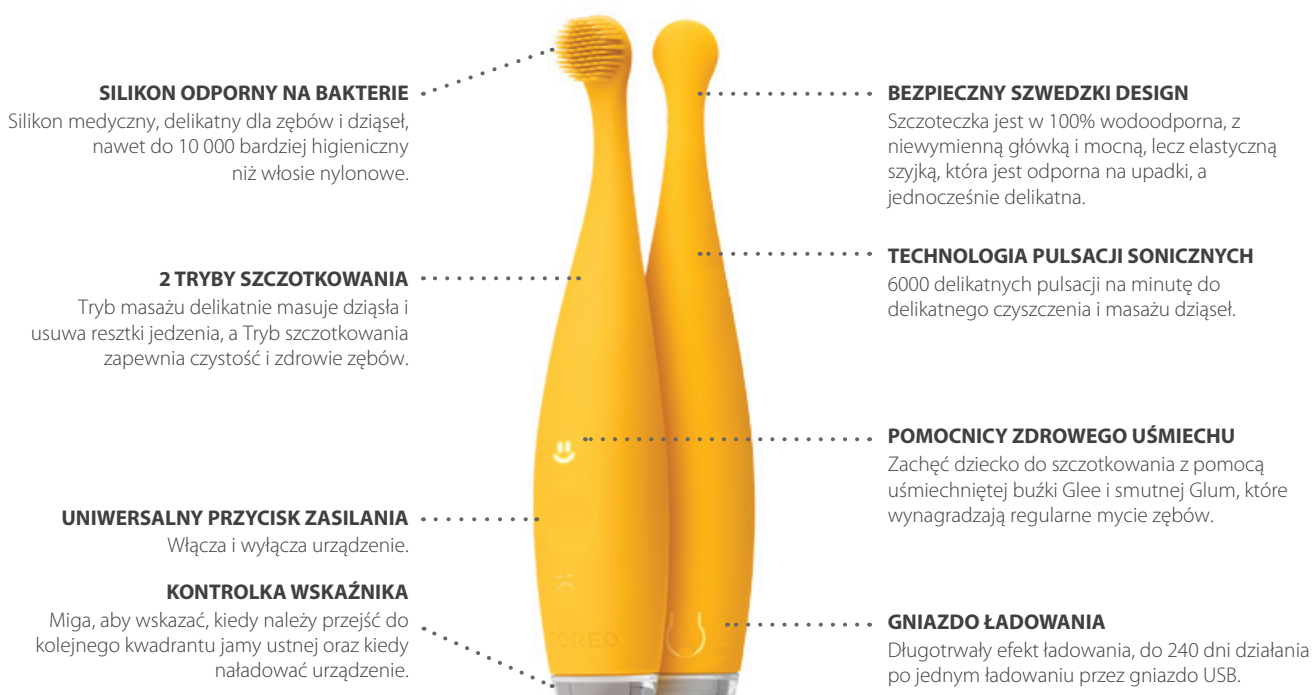

HIGIENA JAMY USTNEJ ZE SZCZOTECZKĄ ISSA™ baby – KORZYŚCI


PRZED POJAWIENIEM SIĘ PIERWSZEGO ZĄBKA

- Delikatne pulsacje soniczne masują dziąsła bez zbytniego nacisku.
- Redukcja ilości bakterii w jamie ustnej dzięki usuwaniu resztek jedzenia i osadów.
- Łagodzenie podrażnień dziąseł przynoszące ulgę w trakcie ząbkowania.

PO POJAWIENIU SIĘ PIERWSZEGO ZĄBKA

- Precyzyjne czyszczenie obejmuje każdy ząb z osobna pod każdym kątem.
- Ultradelikatny silikon jest łagodny dla dziąseł i szkliva dziecięcych zębów.
- Ułatwia budowanie nawyku dbania o higienę jamy ustnej i pozwala dziecku zapoznać się z procesem szczotkowania zębów.

SPOSÓB UŻYCIA SZCZOTECZKI ISSA™ baby

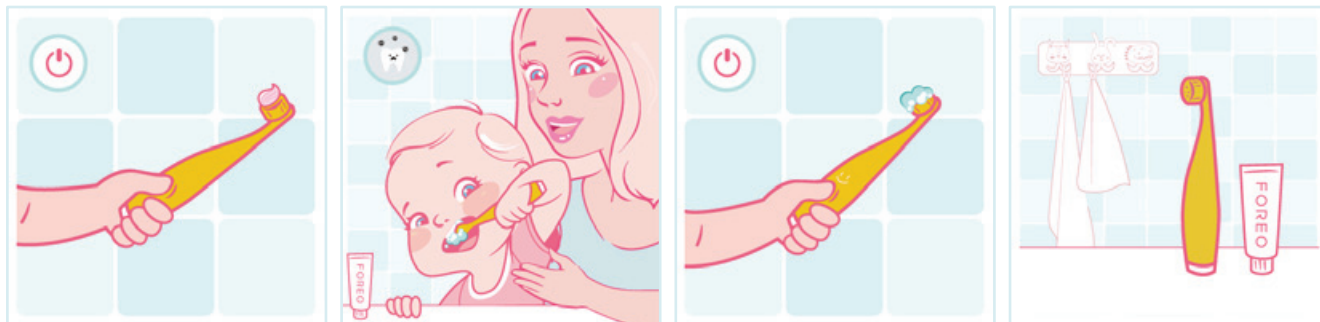

1. Wciśnij uniwersalny przycisk zasilania jednokrotnie, aby uruchomić Tryb szczotkowania, lub dwukrotnie, żeby wyłączyć Tryb masażu. W zależności od wieku dziecka stosuj z zalecaną przez dentystę ilością żelu łagodzącego dla niemowląt lub pasty do zębów.
2. Zachęć dziecko do stosowania szczoteczki ISSA™ baby w taki sam sposób, jak w przypadku szczoteczki manualnej, szczotkując zęby i masując dziąsła okrężnymi ruchami przez 2 minuty. Kiedy upłyną 2 minuty, uśmiechnięta buźka Glee podświetli się, aby pochwalić dziecko za świetnie wykonaną robotę!
3. Naciśnij uniwersalny przycisk ponownie, aby wyłączyć szczoteczkę ISSA™ baby.
4. Przepłucz szczoteczkę ISSA™ baby w ciepłej wodzie i pozostaw do wyschnięcia.

OSTROŻNIE: Jeśli dziecko doświadczy jakiegokolwiek dyskomfortu podczas używania szczoteczki ISSA™ baby, należy natychmiast przerwać jej stosowanie i skonsultować się z lekarzem. Jeśli na powierzchni szczoteczki znajdzie się krew, należy wyczyścić urządzenie wodą z mydłem.

CZYSZCZENIE SZCZOTECZKI ISSA™ baby

Po każdym użyciu należy wyczyścić szczoteczkę ISSA™ baby, myjąc ją ciepłą wodą i jednocześnie przesuwając palcami po włosiu. Następnie należy pozostawić szczoteczkę do wyschnięcia.

Szczoteczkę ISSA™ baby można umieścić w urządzeniu do dezynfekcji światłem UV, lecz może to wpłynąć na kolor silikonu. Można także myć szczoteczkę ISSA™ baby w zmywarce do naczyń, ustawiając maksymalną temperaturę 80°C i 1-godzinny cykl mycia/płukania oraz 30-minutowy cykl suszenia bądź wyczyścić ją w sterylizatorze do butelek w maksymalnej temperaturze 100°C nie dłużej niż przez 20 minut.

UWAGA: Nigdy nie należy używać środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton. Należy unikać stosowania z urządzeniem past do zębów zawierających substancje wybielające.

ŁADOWANIE SZCZOTECZKI ISSA™ baby

Jeśli natężenie pulsacji sonicznych wydaje się słabnąć lub kontrolka zaczyna migać, należy naładować szczoteczkę ISSA™ baby. Podłącz przewód ładowania USB do dowolnego gniazdka na 1 godzinę. Kiedy tylko kontrolka przestanie migać, oznacza to, że szczoteczka ISSA™ baby jest całkowicie naładowana.

OSTROŻNIE: Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że ani w gnieździe ładowania, ani na przewodzie USB nie ma wody ani resztek pasty do zębów. NIE należy używać szczoteczki ISSA™ baby podczas ładowania i NIE należy ładować jej dłużej niż 24 godziny. Należy używać wyłącznie przewodu ładowania USB dostarczonego przez FOREO.

WAŻNE

DLA OPTIMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:

- Gdy urządzenie jest używane przez dzieci, u dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór. Należy zastosować odpowiedni nadzór i udzielić instrukcji bezpiecznego użytkowania urządzenia dzieciom, a także osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych.
- Szczoteczka ISSA™ baby została zaprojektowana do mycia zębów i masowania dziąseł. NIE jest przeznaczona do stosowania jako gryzak. Jeśli dziecko przegryzie silikonową powłokę, należy przerwać stosowanie i poddać produkt utylizacji w odpowiedzialny sposób, zgodnie ze wskazówkami w niniejszej instrukcji obsługi.
- W przypadku jakichkolwiek obaw natury medycznej przed użyciem szczoteczki ISSA™ baby należy skonsultować się z lekarzem.
- Jeśli dziecko jest w trakcie leczenia z powodu chorób jamy ustnej, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem stomatologiem.
- Jeśli dziecko doświadczy jakiegokolwiek dyskomfortu podczas używania szczoteczki ISSA™ baby, należy natychmiast przerwać jej stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Należy unikać wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego i nigdy nie należy wystawiać go na działanie ekstremalnie wysokich temperatur ani dopuszczać do kontaktu z wrzącą wodą.
- Należy przerwać użytkowanie, jeśli produkt wydaje się w jakikolwiek sposób uszkodzony (główna szczoteczka, uchwyt, ładowarka). Ten produkt nie zawiera części nadających się do naprawy.
- W celu uniknięcia porażenia prądem urządzenie może być podłączone wyłącznie do sieci zasilającej z uziemieniem.
- Nigdy nie należy używać szczoteczki ISSA™ baby ani ładowarki, jeśli są uszkodzone i należy używać wyłącznie ładowarki dostarczonej przez FOREO w zestawie ze szczoteczką ISSA™ baby.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Środki ostrożności, które należy podjąć w przypadku zmiany działania szczoteczki ISSA™ baby.

Jeśli szczoteczka ISSA™ baby nie aktywuje się po naciśnięciu uniwersalnego przycisku zasilania:

- Bateria jest rozładowana. Należy naładować baterię za pomocą przewodu ładującego USB, ładując maksymalnie przez 1,5 godziny aż do całkowitego naładowania, a następnie ponownie włączyć szczoteczkę ISSA™ baby, przytrzymując uniwersalny przycisk zasilania.

Jeśli nie można wyłączyć urządzenia ISSA™ baby i/lub przycisk uniwersalny nie odpowiada:

- Mikroprocesor chwilowo nie działa prawidłowo. Należy podłączyć przewód ładowania i/lub nacisnąć i przytrzymać uniwersalny przycisk, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Jeśli kontrolka szczoteczki ISSA™ baby nie miga, kiedy podłączony jest przewód ładowania USB:

- Bateria jest w pełni naładowana, gotowa do maksymalnie 480 zastosowań.
- Bateria jest całkowicie rozładowana i rozpoznanie podłączenia przewodu ładowania może potrwać kilka minut.
- Przewód ładowania nie jest prawidłowo podłączony. Należy sprawdzić gniazdko elektryczne/wtyczkę USB i gniazdo ładowania.

WARUNKI GWARANCJI

ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ

Aby aktywować swoją 2-letnią ograniczoną gwarancję, wejdź na stronę foreo.com/product-registration, gdzie znajdziesz więcej informacji.

2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

FOREO udziela gwarancji na urządzenie na okres DWÓCH (2) LAT od pierwotnej daty zakupu na wypadek wad wynikających z wadliwego wykonania i wad materiału przy normalnym użytkowaniu urządzenia. Gwarancja obejmuje części robocze, które mają wpływ na działanie urządzenia. NIE obejmuje ona uszkodzeń kosmetycznych spowodowanych normalnym zużyciem ani uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem. Każda próba otwarcia lub rozebrania urządzenia (bądź jego akcesoriów) spowoduje utratę gwarancji.

W przypadku wykrycia wady i powiadomienia o niej FOREO w okresie gwarancyjnym, FOREO bezpłatnie wymieni urządzenie według własnego uznania. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte odpowiednimi dowodami na to, że data zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić ważność gwarancji, należy zachować oryginalny paragon zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres gwarancji.

Aby skorzystać z gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki nie są zwracane. Niniejsze zobowiązanie stanowi uzupełnienie ustawowych praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE O UTYLIZACJI

Utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego (obowiązuje w UE i w innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów).




Przekreślony symbol kosza na śmieci oznacza, że urządzenie to nie powinno być traktowane jako odpad z gospodarstwa domowego, lecz powinno zostać oddane do odpowiedniego punktu zbiórki do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego urządzenia, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami w postaci zużytego produktu. Recykling materiałów pomaga również chronić zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalną firmą utylizującą odpady domowe lub z miejscem zakupu.

WYJMOWANIE BATERII

UWAGA: Ten proces jest nieodwracalny. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. Tę czynność wolno wykonać wyłącznie, gdy urządzenie ma zostać zutylizowane.

Urządzenie posiada baterię litowo-jonową, którą należy wyjąć przed utylizacją urządzenia i której nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. W celu wyjęcia baterii należy zdjąć osłonę silikonową, otworzyć plastikową pokrywę i wyjąć baterię, która ma zostać zutylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska. Dla własnego bezpieczeństwa w trakcie tego procesu należy mieć założone rękawiczki. Szczegółowe instrukcje graficzne przedstawiono poniżej:

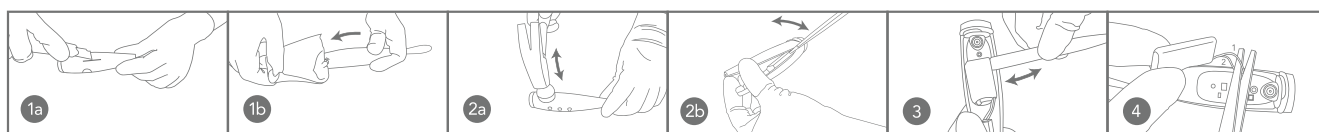

SPECYFIKACJA

MATERIAŁY:	silikon medyczny, PC + ABS
KOLOR:	Strawberry Rose Lion (fukcja), Pearl Pink Bunny (różowy), Sunflower Yellow Squirrel (żółty), Kiwi Green Panda (zielony), Bubble Blue Dino (niebieski)
WYMIARY:	148 × 31 × 25 mm
WAGA:	54 g
BATERIA:	litowo-jonowa 420 mAh 3,7 V
UŻYTKOWANIE:	do 480 zastosowań
STAN GOTOWOŚCI:	180 dni
CZĘSTOTLIWOŚĆ:	166 Hz
INTERFEJS:	1 przycisk
PULSACJE/MIN:	do 6000

WARUNKI ŚRODOWISKOWE UŻYTKOWANIA:	
TEMPERATURA:	5° do 40° Celsjusza
WILGOTNOŚĆ:	40% do 80%
CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE:	800 do 1060 hPa

WARUNKI ŚRODOWISKOWE PRZECHOWYWANIA I WYSYŁKI:	
TEMPERATURA:	-10° do 50° Celsjusza
WILGOTNOŚĆ:	30% do 80%
CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE:	500 do 1060 hPa

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownicy tego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani spółka FOREO, ani jej sprzedawcy detaliczni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody, fizyczne lub inne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia. Ponadto FOREO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji i dokonywania okresowych modyfikacji jej treści bez obowiązku powiadamiania jakiejkolwiek osoby o takiej zmianie lub modyfikacjach.

W modelu mogą być dokonywane zmiany w celu jego udoskonalenia, bez uprzedniego powiadomienia.

Najczęściej zadawane pytania

PODSTAWY

- 1. JAK WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ SZCZOTECZKĘ ISSA™ baby?**
Naciśnij uniwersalny przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć szczoteczkę ISSA™ baby.
- 2. CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE ZE SZCZOTECZKĄ ISSA™ baby?**
1 szczoteczka do zębów ISSA™ baby, 1 przewód ładowania USB, 1 instrukcja obsługi rodziny produktów ISSA™.
- 3. OD JAKIEGO WIEKU MOŻNA ZACZĄĆ UŻYWAĆ SZCZOTECZKI ISSA™ baby?**
Szczoteczka ISSA™ baby jest odpowiednia dla niemowląt i dzieci w wieku od 0 do 4 lat. U dzieci w wieku od 5 lat wzwyż polecamy stosowanie szczoteczki ISSA™ kids.

URZĄDZENIE

- 4. JAK CZĘSTO MOŻNA UŻYWAĆ SZCZOTECZKI ISSA™ baby?**
Zalecamy używanie szczoteczki ISSA™ baby dwa razy dziennie, rano i wieczorem, każdorazowo przez 2 minuty. Zabawne buźki na szczoteczce pomogą o tym pamiętać. Uśmiechnięta Glee podświetli się, jeśli zęby były szczotkowane przez 2 minuty, a smutna Glum, kiedy szczoteczka nie była używana od ponad 12 godzin.
- 5. CZY SZCZOTECZKA ISSA™ baby JEST BEZPIECZNA DLA MAŁYCH DZIECI?**
Tak, szczoteczka ISSA™ baby została specjalnie zaprojektowana tak, aby była bezpieczna dla dzieci już od urodzenia. Wykonana z medycznego silikonu i PBT, materiałów wolnych od BPA i ftalanów, szczoteczka ISSA™ baby działa na zasadzie delikatnych sonicznych pulsacji, zapewniających przyjemne, kojące uczucie podczas stosowania na zębach i dziąsłach. Dzięki temu zapobiega uszkodzeniom szklivi i podrażnieniom dziąseł, jednocześnie gwarantując czystość całej jamy ustnej.
- 6. CZY DZIECI MOGĄ UŻYWAĆ SZCZOTECZKI ISSA™ baby SAMODZIELNIE?**
Szczoteczka ISSA™ baby została zaprojektowana tak, aby dzieci z łatwością mogły ją trzymać samodzielnie. Rodzic lub dorosły opiekun musi jednak zawsze być obecny i nadzorować dziecko podczas używania szczoteczki oraz pomóc mu w nauce prawidłowego szczotkowania w celu uzyskania optymalnych rezultatów.
- 7. CZY MOJE ZĄBKUJĄCE DZIECKO MOŻE GRYŻĆ SZCZOTECZKĘ ISSA™ baby, ABY ULŻYĆ PODRAŻNIONYM DZIĄŚŁOM?**
Szczoteczka ISSA™ baby została zaprojektowana do mycia zębów i masowania dziąseł. NIE jest przeznaczona do stosowania jako gryzak. Intensywne prz gryzanie urządzenia może spowodować uszkodzenia silikonowej główki i włosa szczoteczki.

8. CZY SZCZOTECZKA ISSA™ baby MOŻE BYĆ UŻYWANA PRZEZ DZIECI CIERPIĄCE NA SCHORZENIA JAMY USTNEJ?

Szczoteczka ISSA™ baby została opracowana pod kątem delikatnego, a jednocześnie skutecznego czyszczenia dziecięcych zębów i dziąseł, dzięki czemu idealnie nadaje się dla najmłodszych adeptów szczotkowania, którzy mają wrażliwe zęby i dziąsła. Jednakże w przypadku jakichkolwiek obaw natury medycznej przed użyciem szczoteczki ISSA™ baby zalecamy konsultację z lekarzem stomatologiem.

9. JAKĄ PASTĘ DO ZĘBÓW MOŻNA STOSOWAĆ ZE SZCZOTECZKĄ ISSA™ baby?

Szczoteczki ISSA™ baby można stosować z każdym żelem łagodzącym dla niemowląt, pastą do zębów, proszkiem do czyszczenia zębów i innymi produktami do mycia zębów zalecanymi w wieku dziecka. Z urządzeniem nie należy stosować past do zębów zawierających substancje wybielające.

10. CZY MOŻNA DOSTOSOWAĆ INTENSYWNOŚĆ PULSACJI SONICZNYCH?

Szczoteczka ISSA™ baby ma 2 optymalne tryby pracy dostosowane do potrzeb higieny jamy ustnej u niemowląt i małych dzieci: Tryb masażu i Tryb szczotkowania. Intensywność pulsacji sonicznych została fabrycznie ustawiona dla obydwu tych trybów pod kątem zapewnienia optymalnego komfortu i najlepszych rezultatów, w związku z czym nie można jej dostosować.

11. JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY SZCZOTECZKĄ ISSA™ kids A ISSA™ baby?

Główna różnica pomiędzy szczoteczką ISSA™ kids a ISSA™ baby polega na tym, że ISSA™ baby została zaprojektowana specjalnie dla niemowląt i młodszych dzieci w wieku od 0 do 4 lat, w związku z czym nie ma odłączanych części i wykonana jest w całości z silikonu medycznego, aby zapewnić najwyższą delikatność dla dziąseł i wrażliwego szkliwa dziecięcych zębów. Natomiast ISSA™ kids została opracowana z myślą o dzieciach w wieku od 5 do 12 lat i wyposażona jest w hybrydową, wymienną główkę wykonaną z połączenia medycznego silikonu i włosia z polimeru PBT, dzięki czemu silnie działa na kamień nazębny, jednocześnie zachowując delikatność dla dziąseł.

12. CZYM SZCZOTECZKA ISSA™ baby RÓŻNI SIĘ OD INNYCH SZCZOTECZEK ELEKTRYCZNYCH DLA DZIECI?

Szczoteczka ISSA™ baby różni się od innych szczoteczek elektrycznych dla dzieci pod trzema bardzo istotnymi względami. Po pierwsze wykonana jest w całości z medycznego silikonu, dzięki czemu nie musisz się martwić, że dziecko zarysuje delikatne szkliwo swoich zębów czy uszkodzi dziąsła. Po drugie, w przeciwieństwie do szczoteczek z wymiennymi główkami, główki szczoteczki ISSA™ nigdy nie trzeba wymieniać, a zatem nie ma ona absolutnie żadnych odłączanych części, dzięki czemu jest ultrabezpieczna. Po trzecie jedno ładowanie sprawia, że szczoteczkę ISSA™ baby można użyć nawet 480 razy – to znacznie więcej niż w przypadku jakiegokolwiek innej szczoteczki dla dzieci dostępnej na rynku!

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONSERWACJA

13. CO TO ZNACZY, GDY KONTROLKA SZCZOTECZKI ISSA™ baby CIĄGLE MIGA?

Jeśli kontrolka na szczoteczce ISSA™ baby stale miga, oznacza to, że należy naładować urządzenie.

14. JAK MOGĘ NAŁADOWAĆ SZCZOTECZKĘ ISSA™ baby?

Szczoteczkę ISSA™ baby należy ładować za pomocą przewodu USB, a godzinne ładowanie umożliwia użycie jej nawet do 480 razy. Migające kontrolki wskaźnika u dołu urządzenia wskazują, że szczoteczka jest w trybie ładowania, pokazując stan naładowania baterii. Kiedy tylko kontrolka przestanie migać, oznacza to, że Twoja szczoteczka ISSA™ baby jest całkowicie naładowana.

15. JAK NALEŻY CZYŚCIĆ SZCZOTECZKĘ ISSA™ baby?

Upewnij się, że szczoteczka ISSA™ baby jest wyłączona. Następnie wyczyść urządzenie, myjąc szczoteczkę ciepłą wodą i jednocześnie przesuwając palcami po włosiu. Zalecamy mycie szczoteczki w ten sposób po każdym użyciu. Po umyciu należy pozostawić szczoteczkę do wyschnięcia. Szczoteczkę ISSA™ baby można umieścić w urządzeniu do dezynfekcji światłem UV, lecz może to wpłynąć na kolor silikonu. Można także myć szczoteczkę ISSA™ baby w zmywarce do naczyń, ustawiając maksymalną temperaturę 80°C i 1-godzinny cykl mycia/płukania oraz 30-minutowy cykl suszenia bądź wyczyścić ją w sterylizatorze do butelek w maksymalnej temperaturze 100°C nie dłużej niż przez 20 minut.

©2020 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

DYSTRYBUCJA W UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 SZTOKHOLM, SZWECJA.

DYSTRYBUCJA W USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DYSTRYBUCJA W AUSTRALII: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

WYPRODUKOWANO PRZEZ: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. NO.58 LINSHENG ROAD,

TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SZANGHAI, CHINY

PRODUKT ZAPROJEKTOWANY I OPRACOWANY PRZEZ FOREO SZWECJA.

WYPRODUKOWANO DLA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM