

FOREO
SWEDEN

issa™
baby



CEPILLO DE
DIENTES SUAVE
PARA BEBÉS



MANUAL ONLINE

MANUAL DE USUARIO

PRESENTACIÓN

Te felicitamos por dar el primer paso para mejorar los hábitos de cepillado de tu hijo con ISSA™ baby. Antes de disfrutar de todos los beneficios de este bonito cepillo de dientes sónico desde la comodidad del hogar, tómate unos minutos para leer atentamente las instrucciones de este manual.

USOPREVISTO: Un cepillo de dientes para el hogar que mejora la higiene bucal limpiando los dientes y las encías.

No olvide **LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR** este producto y úsalo únicamente para el fin descrito en este manual.

PRECAUCIÓN Un fuerte masticado puede dañar la cobertura de silicona del cepillo de dientes. Los bebés y niños siempre deberían ser supervisados por un adulto durante su uso. Si observas que la silicona está dañada o perforada, detén su uso y desecha el producto de forma responsable. Si sospechas que tu hijo ha tragado cualquier parte de ISSA™ baby, contacta inmediatamente con tu centro de atención médica.


⚠ **No se permiten modificaciones en este equipo.**

PRESENTACIÓN DE ISSA™ baby

ISSA™ baby es el primer cepillo de dientes sónico fabricado íntegramente con silicona de grado médico y diseñado específicamente para las necesidades de los más pequeños. Este dispositivo es un suave y eficaz masajeador de encías que calma la irritación y cepilla suavemente los dientes de leche desde el primer momento que aparecen.

ISSA™ baby usa la misma tecnología innovadora que el resto de la familia ISSA™ y ha sido diseñado para ser usado como si fuera un cepillo de dientes manual. Su batería tiene una duración extrema y 1 hora de carga USB alcanza para 480 usos. Además, unas caritas ayudantes fomentan la rutina de cepillado de 2 minutos por la mañana y por la noche. ¡El cepillado no tiene por qué ser aburrido!

FAMILIARÍZATE CON TU ISSA™ baby

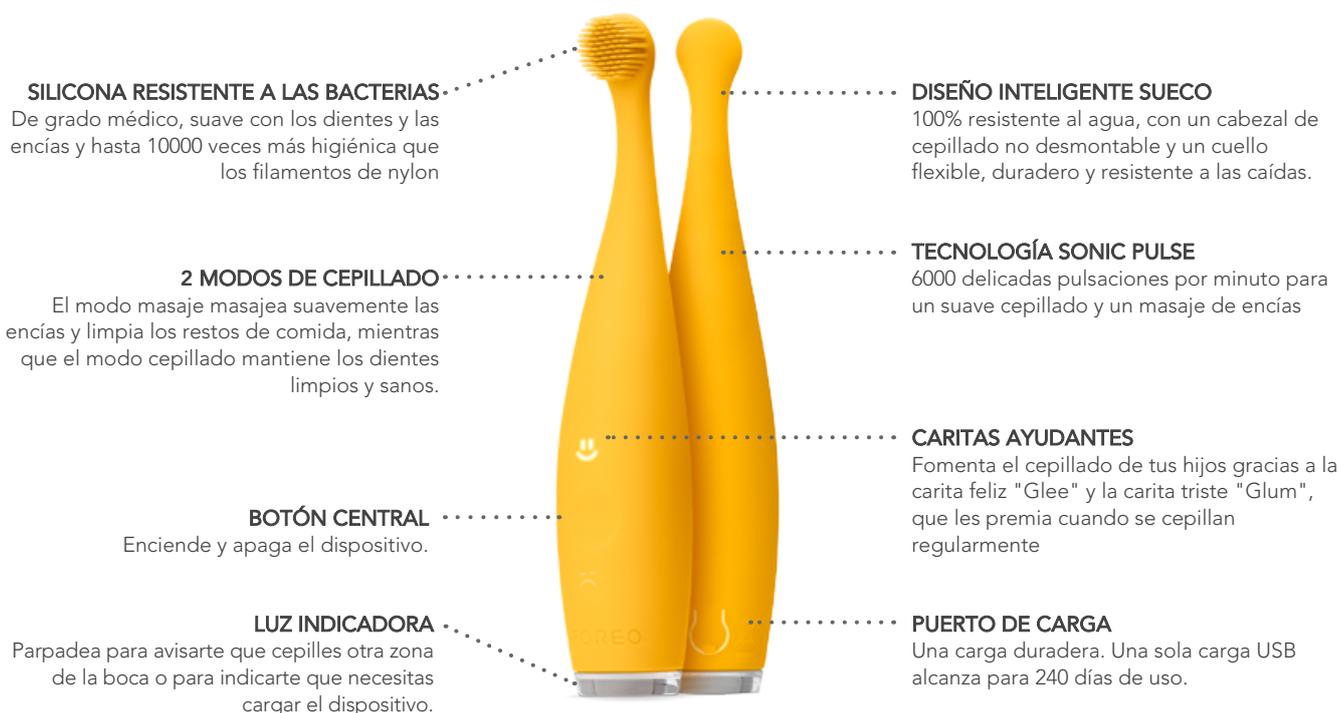

BENEFICIOS DEL CUIDADO BUCAL DE ISSA™ baby


ANTES DEL PRIMER DIENTE DE LECHE

- Las suaves pulsaciones sónicas masajean las encías sin aplicar demasiada presión.
- Reduce las bacterias de la boca al limpiar los restos de comida.
- Calma la irritación de las encías para reducir la sensibilidad que aparece durante la dentición.

DESPUÉS DEL PRIMER DIENTE DE LECHE

- Una limpieza precisa que cubre cada diente de forma separada y en todos los ángulos para limpiar de verdad los dientes.
- Su agradable silicona es suave con las encías y con los dientes de leche.
- Fomenta buenos hábitos de cuidado bucal y familiariza a tu bebé con el cepillado.

MODO DE USO DE ISSA™ baby

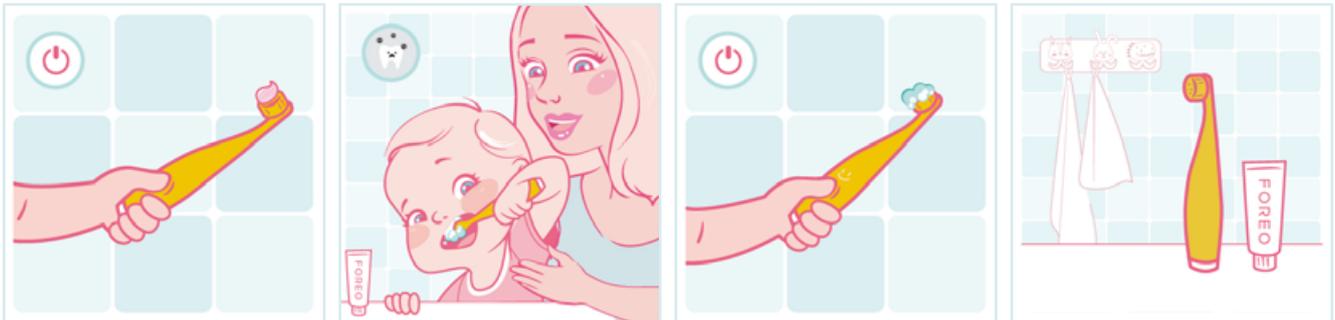

1. Pulsa el botón central una vez para comenzar el modo cepillado o dos veces para comenzar el modo masaje. Según la edad de tu hijo, usa la cantidad recomendada por dentistas de gel o pasta de dientes.
2. Anima tu hijo a usar ISSA™ baby como si estuviera usando un cepillo de dientes manual, cepillando los dientes y las encías con movimientos circulares durante 2 minutos. En cuanto finalicen los 2 minutos, la carita sonriente "Glee" se iluminará para premiar a tu hijo por haber hecho un gran trabajo.
3. Pulsa el botón central de nuevo para apagar el cepillo de dientes ISSA™ baby.
4. Aclara ISSA™ baby con agua templada y deja que se seque.

PRECAUCIÓN: Si tu hijo sufre alguna molestia al usar ISSA™ baby, detén su uso inmediatamente y consulta a un médico. Si encuentras restos de sangre en la superficie del cepillo, limpia el dispositivo con agua y jabón.

LIMPIEZA DE TU CEPILLO DE DIENTES ISSA™ baby

Limpia tu dispositivo ISSA™ baby después de cada uso con agua templada pasando tus dedos sobre los filamentos. A continuación, deja que el dispositivo se seque.

Puedes colocar tu dispositivo ISSA™ baby en un esterilizador UV, pero esto podría afectar al color de la silicona. También puedes limpiar tu ISSA™ baby en el lavavajillas usando una máxima temperatura de 80°, 1 hora de lavado, un ciclo de aclarado y un ciclo de secado de 30 minutos. También puedes usar un esterilizador de botellas de bebé a una temperatura máxima de 100° C durante menos de 20 minutos.

NOTA: Nunca limpies el dispositivo con productos que contengan alcohol, petróleo o acetona. Evita usar pastas de diente con lejía.

CÓMO CARGAR TU CEPILLO DE DIENTES ISSA™ baby

Si la potencia de las pulsaciones disminuye o la luz indicadora comienza a parpadear, es el momento de cargar tu ISSA™ baby. Conecta el cable USB en cualquier cargador durante 1 hora. Cuando la luz indicadora deje de parpadear, tu cepillo de dientes ISSA™ baby estará completamente cargado.

PRECAUCIÓN: Antes de cargar el dispositivo, comprueba que el puerto de carga y el cable USB estén completamente secos y sin restos de pasta de dientes. NO USES tu cepillo de dientes ISSA™ baby cuando esté cargándose, y no lo cargues durante más de 24 horas. Usa únicamente el cable USB incluido con el dispositivo FOREO.

IMPORTANTE PARA UNA SEGURIDAD ÓPTIMA:

- Es necesaria una estrecha supervisión cuando el dispositivo sea utilizado por niños, o cerca de ellos. Supervisa apropiadamente y da las instrucciones necesarias para un uso seguro a los niños y a las personas con capacidades físicas o mentales reducidas.
- ISSA™ baby ha sido diseñado para limpiar los dientes y masajear las encías. NO debe usarse como un juguete para masticar. En caso de que tu hijo muerda la cobertura de silicona, detén su uso y desecha el producto de forma responsable según las instrucciones de este manual.
- Consulta a un médico antes de usar ISSA™ baby, o en caso de que tu hijo tenga problemas médicos.
- Si tu hijo está sufriendo algún tratamiento para una enfermedad bucal, consulta a un dentista antes de su uso.
- Si tu hijo sufre alguna molestia al usar ISSA™ baby, detén su uso inmediatamente y consulta a un médico.
- Evita que el dispositivo entre en contacto directo con la luz solar y nunca lo expongas a calor extremo o agua hirviendo.
- Detén su uso en caso de que este producto parezca estar dañado de alguna manera (el cabezal, el mango o el cargador). Este producto no tiene piezas reparables.
- Para evitar el riesgo de choque eléctrico, este dispositivo sólo debe conectarse a enchufes con toma de tierra.
- Nunca uses ISSA™ baby o el cargador si están dañados, y usa únicamente el cable de carga oficial de FOREO para cargar ISSA™ baby.

DETECCIÓN DE PROBLEMAS

Precauciones que debes tomar en caso de cambios en el rendimiento del cepillo de dientes ISSA™ baby.

ISSA™ baby no se activa al pulsar el botón central:

- La batería está agotada. Carga el dispositivo con el cable USB durante 1,5 horas o hasta que se cargue por completo, y mantén presionado el botón central del cepillo de dientes ISSA™ baby para reiniciarlo.

Si ISSA™ baby no se puede encender o apagar y la interfaz no responde.

- El microprocesador no está funcionando correctamente. Conecta el dispositivo con el cable USB y/o mantén presionado el botón central para reiniciar el dispositivo.

Si ISSA™ baby no parpadea cuando el cable USB está conectado:

- La batería está completamente cargada, lista para 480 usos.
- La batería está agotada y necesitará varios minutos para reconocer el cable de carga.
- El cable de carga no está correctamente conectado. Revisa la conexión eléctrica entre el dispositivo, el cable USB y el puerto de carga.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

REGISTRO DE LA GARANTÍA

Para activar tu garantía limitada de 2 años, visita foreo.com/product-registration para obtener más información.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

FOREO garantiza este dispositivo por un período de DOS (2) AÑOS a partir de la fecha original de compra contra defectos de fabricación o derivados del uso normal del dispositivo. La garantía cubre las piezas que afecten al funcionamiento del dispositivo. NO cubre el deterioro estético debido al desgaste por uso o daños causados por accidentes, uso incorrecto o negligencia. Cualquier intento de abrir o desmontar el dispositivo (o sus accesorios) anulará la garantía.

Si descubres un defecto y lo notificas a FOREO durante el período de garantía, FOREO, a su discreción, reemplazará el dispositivo de forma gratuita. Las reclamaciones bajo garantía deben estar respaldadas por evidencia razonable de que la fecha de la reclamación está dentro del período de garantía. Para validar la garantía, conserva el recibo original de compra junto con estas condiciones durante el período de garantía.

Para reclamar tu garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en www.foreo.com y realizar un reclamo de garantía. Los gastos de envío no son reembolsables. Este compromiso es adicional a tus derechos legales como consumidor, y no afecta esos derechos de ninguna manera.

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Eliminación de equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y en otros países europeos con sistemas independientes de recolección de residuos).



El símbolo de un contenedor tachado indica que este dispositivo no debe tratarse como basura doméstica, por lo que debe ser llevado a un punto de recolección de equipamientos eléctricos y electrónicos. Al asegurarte de eliminar correctamente este dispositivo, ayudarás a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse por un desecho inadecuado del producto. El reciclaje de materiales también ayuda a conservar los recursos naturales.

Para obtener más información sobre el reciclaje de este dispositivo, comunícate con el servicio local de eliminación de residuos domésticos o con tu lugar de compra.

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

NOTA: Este proceso no es reversible. Abrir el dispositivo anulará la garantía. Esta acción sólo debe realizarse cuando el dispositivo vaya a ser desechado.

La batería de iones de litio debe ser retirada antes de desechar el dispositivo, y no debe eliminarse junto con los residuos domésticos. Para retirar la batería, extrae el cabezal de cepillado, corta el recubrimiento de silicona, abre la cápsula de plástico, retira la batería, y deséchala de acuerdo a las regulaciones locales ambientales. Por seguridad, usa guantes durante todo el proceso. A continuación, te mostramos instrucciones visuales detalladas.



ESPECIFICACIONES

MATERIALES:	Medical-Grade Silicone, PC + ABS	CONDICIONES AMBIENTALES DE USO:	
COLOR:	Strawberry Rose Lion, Pearl Pink Bunny, Sunflower Yellow Squirrel, Kiwi Green Panda, Bubble Blue Dino	TEMPERATURA:	De 5° a 40° Celsius
TAMAÑO:	148 × 31 × 25 mm	HUMEDAD:	De 40% a 80%
PESO:	54 gr.	PRESIÓN ATMOSFÉRICA:	Entre 800 a 1,060 hPa
BATERÍA:	Li-Ion 420mAh 3.7V	CONDICIONES AMBIENTALES DE ALMACENAMIENTO Y ENVÍO	
USO:	Hasta 480 usos	TEMPERATURA:	Entre -10° y 50° Celsius
MODO ESPERA:	180 días	HUMEDAD:	Entre 30% y 80%
FRECUENCIA:	166 Hz	PRESIÓN ATMOSFÉRICA:	Entre 500 y 1,060 hPa
INTERFAZ:	1 botón		
PULSACIONES:	Hasta 6000		

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los usuarios de este dispositivo lo hacen bajo su propio riesgo. Ni FOREO ni sus minoristas asumen ninguna responsabilidad u obligación por lesiones o daños, físicos o de otro tipo, que surjan directa o indirectamente por el uso de este dispositivo. Además, FOREO se reserva el derecho de revisar esta publicación y realizar cambios ocasionales en el contenido de la misma sin obligación de notificar a persona alguna dicha revisión o cambios.

El modelo puede ser modificado para recibir mejoras sin previo aviso.

PREGUNTAS FRECUENTES

CONCEPTOS BÁSICOS

1. ¿CÓMO ENCIENDO Y APAGO ISSA™ baby?

Para encender o apagar el cepillo de dientes ISSA™ baby, pulsa el botón central.

2. ¿QUÉ INCLUYE ISSA™ baby?

1 cepillo de dientes ISSA™ baby, 1 cable de carga USB, 1 manual

3. ¿A PARTIR DE QUÉ EDAD PUEDES USAR ISSA™ baby?

ISSA™ baby puede ser usado por bebés y niños entre 0 y 4 años. Para niños de más de 5 años de edad, recomendamos usar ISSA™ kids.

EL DISPOSITIVO

4. ¿CADA CUÁNTO TIEMPO SE PUEDE USAR ISSA™ baby?

Te recomendamos usar el cepillo de dientes ISSA™ baby dos veces al día (por la mañana y por la noche) durante 2 minutos. Las caritas ayudantes del cepillo de dientes te ayudarán a recordarlo. Una carita sonriente ("Glee") se iluminará si te has cepillado durante 2 minutos, y una carita triste ("Glum") se iluminará si no has cepillado los dientes durante más de 12 horas.

5. ¿ISSA™ baby ES SEGURO DE USAR PARA NIÑOS PEQUEÑOS?

Sí, ISSA™ baby ha sido especialmente diseñado para que su uso sea seguro en bebés y niños de 0 años o más. Fabricado con silicona de grado médico y PBT, sin ftalatos ni BPA y con pulsaciones sónicas que se sienten suaves y agradables en las encías y los dientes. ISSA™ baby previene el daño en el esmalte dental y la irritación en las encías al mantener toda la boca limpia.

6. ¿LOS NIÑOS PUEDEN USAR ISSA™ baby SIN AYUDA?

Sí, ISSA™ baby ha sido diseñado para que los niños puedan sostener el cepillo de dientes por sí mismos. Sin embargo, para alcanzar los mejores resultados recomendamos que un adulto esté presente para supervisar al niño durante el uso del cepillo, hasta que se haya familiarizado con la rutina.

7. ¿MI HIJO PUEDE MASTICAR ISSA™ baby CON LOS DIENTES PARA CALMAR EL DOLOR DE ENCÍAS?

ISSA™ baby está diseñado para cepillar los dientes y masajear las encías. NO puede ser usado como un juguete de masticar. Si el dispositivo se mastica fuertemente, podrían aparecer daños en el cabezal de silicona y sus filamentos.

8. ¿PUEDEN USAR ISSA™ baby NIÑOS QUE SUFRAN ALGÚN TIPO DE ENFERMEDAD BUCAL?

El cepillo de dientes ISSA™ baby ha sido desarrollado para limpiar eficazmente las encías y dientes de los niños, y es ideal para los más pequeños de la casa o para los que tienen encías y dientes sensibles. Sin embargo, recomendamos consultar tu dentista antes de usar ISSA™ baby si tu hijo tiene alguna enfermedad médica.

9. ¿QUÉ TIPO DE PASTA DE DIENTES PUEDO USAR CON ISSA™ baby?

Los cepillos de dientes ISSA™ baby pueden usarse con cualquier gel o pasta de dientes formulada específicamente para la edad de tus hijos. Evita usar pastas dentales con lejía.

10. ¿SE PUEDE AJUSTAR LA INTENSIDAD DE LAS PULSACIONES T-SONIC?

ISSA™ baby dispone de dos modos para las primeras necesidades de cuidado bucal; modo masaje de encías y modo de cepillado. La intensidad de las pulsaciones sónicas está ya configurada en los dos modos de uso para un uso agradable con los mejores resultados, y por lo tanto no puede ajustarse.

11. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE ISSA™ kids E ISSA™ baby?

La principal diferencia entre ISSA™ kids e ISSA™ baby es que ISSA™ baby ha sido diseñado específicamente para bebés y niños entre 0 y 4 años, no tiene partes desmontables y está fabricado íntegramente con silicona de grado médico que es extremadamente suave con las encías y el delicado esmalte dental de los bebés. Por otro lado, ISSA™ kids ha sido diseñado específicamente para niños entre 5 y 12 años, y su cabezal de cepillado híbrido combina filamentos de silicona y polímero PBT que son duros contra la placa y suaves con las encías.

12. ¿POR QUÉ ISSA™ baby ES DIFERENTE A OTROS CEPILLOS DE DIENTES ELÉCTRICOS PARA NIÑOS?

ISSA™ baby es diferente a otros cepillos de dientes eléctricos para niños por tres factores. Primero, está fabricado íntegramente con silicona de grado médico, así que no tienes que preocuparte de que tu bebé dañe los primeros dientes de leche o el tejido de las encías. Segundo, a diferencia de otros cepillos de dientes con cabezales de remplazo, el cepillo de dientes ISSA™ baby no requiere partes de remplazo, y no tiene ninguna parte desmontable, así que es totalmente seguro. Además, se puede usar 480 veces con una sola carga.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO

13. ¿QUÉ SIGNIFICA QUE LA LUZ DE ISSA™ baby ESTÉ PARPADEANDO CONSTANTEMENTE?

Si la luz de ISSA™ baby parpadea constantemente, eso significa que debes cargar tu dispositivo?

14. ¿CÓMO PUEDO RECARGAR ISSA™ baby?

ISSA™ baby es recargable por USB, y 1 hora de carga alcanza para 480 usos. La luz indicadora de intensidad de la parte inferior de tu dispositivo parpadea cuando tu dispositivo esté cargándose para indicar cuánta batería tiene. Cuando la luz indicadora deje de parpadear, tu cepillo de dientes ISSA™ baby estará completamente cargado.

15. ¿CÓMO LIMPIO MI ISSA™ baby?

Comprueba que tu cepillo de dientes ISSA™ baby esté apagado. A continuación, limpia tu cepillo de dientes con agua templada pasando tus dedos sobre los filamentos. Te recomendamos limpiar tu cepillo de esta forma después de cada uso. Una vez limpio, espera a que el dispositivo se seque por sí solo. No recomendamos limpiar tu ISSA™ baby en un esterilizador UV, ya que podría dañar la silicona del dispositivo. Puedes limpiar ISSA™ baby en tu lavavajillas a una temperatura máxima de 80° en un lavado de 1 hora, un ciclo de aclarado y un ciclo de secado de 30 minutos. También puedes usar un esterilizador para botellas de bebés a una temperatura máxima de 100° C durante menos de 20 minutos.

©2020 FOREO AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

DIRECCIÓN UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 ESTOCOLMO, SUECIA.

DIRECCIÓN EEUU: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, EEUU.

DIRECCIÓN AUSTRALIA: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

FABRICADO POR: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

DISEÑADO Y DESARROLLADO POR FOREO SWEDEN.

FABRICADO PARA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM