


FOREO



UFO™ mini
智臻面膜仪

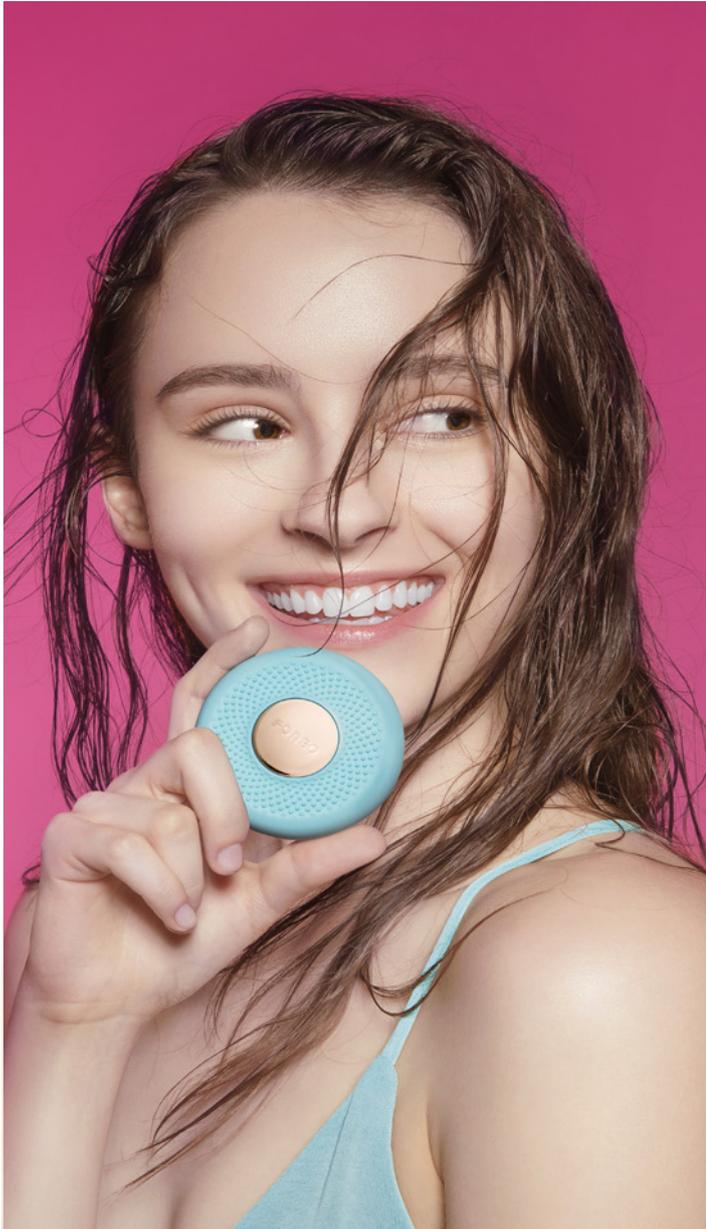

完整版使用说明

开始使用

恭喜您购买到UFO™ mini智臻面膜仪，成功迈出拥有美肌的第一步。当您在舒适的家中准备享受强效面膜科技所带来的好处之前，请先仔细阅读本使用说明书。

使用前请阅读所有指南并仅按照本说明书中的指定用途使用本产品。

⚠ 警告：请勿对产品进行任何改装。

UFO™ mini概述

无论在家中还是外出，UFO™ mini均可为您带来全面护理。LED彩光和热能导入科技搭配T-SONIC™垂直透肤声波脉动帮助面膜精华深入肌肤，90秒内即可打造精致肤色。


了解UFO™ mini



面膜
搭配面膜，令肌肤焕发光彩。



连接FOREO APP
自动将预设面膜模式同步至设备。

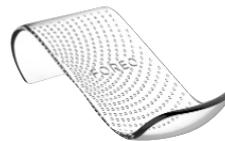

支架
安置并保护您的UFO™ mini，帮助设备快速干燥。



USB充电线
随时随地为您的设备充电。

使用指南

- 1 下载FOREO APP。
- 2 按下通用电源按钮开启UFO™ mini。
- 3 选择相应面膜开始专属护理程序。



取下UFO™ mini上的塑料圆环。



取出面膜。




将印有FOREO 标志的塑料圆环朝上并夹在面膜上以固定面膜。



享受您的智能面膜护理。

添加新的面膜护理

“日间保湿锁水面膜”和“夜间密集滋养面膜”已被预先写入设备中，任何其他面膜护理模式都必须在第一次使用时通过APP激活。然后，面膜护理模式可以通过APP或使用通用电源按钮进行访问。

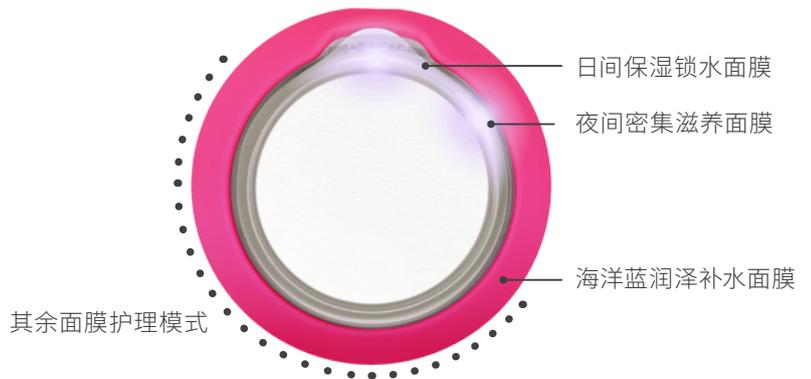

*并非所有UFO™强效活力面膜都可以搭配UFO™ mini使用

单独使用UFO™ mini

- 1 按下通用电源按钮开启UFO™ mini。
- 2 按下通用电源按钮可打开并激活日间保湿锁水面膜护理。再按一次可激活夜间密集滋养面膜护理，依此类推。例如，如果APP中设置了海洋蓝润泽补水面膜护理，按下3次通用电源按钮即可激活海洋蓝润泽补水面膜护理。
- 3 护理将会在粉灯闪烁10秒后开始。

想要更多?

如果您觉得一次护理不够，可在第一次护理结束后的30秒之内再次按下通用电源按钮以重新开始相同的护理!

使用手法

- 1 使用前, 请确保您的肌肤洁净、干燥。我们推荐您使用露娜系列洁面仪清洁肌肤, 以获得最佳效果。
- 2 使用UFO™ mini以画圈的模式将面膜成分按摩导入至您的肌肤。以顺时针方向在脸上滑动设备, 从下巴开始, 然后向上移动到右脸颊和前额。继续向下滑动至左脸颊, 再到下巴和脖子。重复这个动作直到护理模式结束。
- 3 将脸上剩余精华液轻轻拍打至吸收, 或使用化妆棉擦去多余的精华液。
- 4 可以继续使用任何其他护肤产品。



*使用眼膜时, 请使用UFO™ mini轻柔地沿着整个眼部轮廓滑动并在左右眼之间来回交替, 直到护理模式结束。

清洁UFO™ mini

用肥皂清洗设备和塑料环, 然后用温水冲洗。用无绒的布或毛巾擦干。我们建议喷洒FOREO硅胶清洁液于设备上, 并用温水冲洗, 以获得最佳清洁效果。然后将设备放在支架上晾干。

注意: 切勿使用含有酒精, 汽油或丙酮的清洁产品, 因为它们可能会刺激皮肤并损坏硅胶。

重要信息

为了最佳安全性:

- UFO™ mini建议搭配随附面膜一起使用。无论何时, 请勿在通电状态下直接将面膜用于肌肤。
- 如果您有任何肌肤问题, 请在使用前咨询皮肤科医生。
- 使用UFO™ mini的过程应该是舒适的, 如果您有任何不适, 请立即停止使用并咨询医生。
- 在眼下区域周围使用UFO™ mini时, 请勿使设备直接与眼睑或眼睛接触。
- 出于卫生考量, 我们不建议您与其他人共享UFO™ mini。
- 请勿将UFO™ mini放在阳光直射的地方, 或将其暴露于高温或沸水中。
- 当在儿童或身体机能衰退及精神病患者身边使用设备时, 须密切监视。
- 如果本产品出现任何形式的损坏, 请停止使用。本产品包含不可维修的部件。

常见问题

UFO™ mini的性能发生变化时应采取的预防措施:

如果按下通用电源按钮无法激活UFO™ mini:

- 电池没电了。通过USB充电线为UFO™ mini充电, 直到指示灯稳定发光为止。2.5小时充满一次电, 可以使用高达40次护理程序。

如果UFO™ mini无法关闭/通用电源按钮无响应:

- 微处理器暂时出现故障。按住通用电源按钮以重新启动设备。

如果UFO™ mini无法与FOREO APP同步:

- 关闭蓝牙, 然后再次打开以尝试重新连接。
- 关闭FOREO APP, 然后重新打开以启动该过程。

如果您在故障排除部分没有找到特定问题的答案, 或者您对设备的操作有任何其他问题, 请访问www.foreo.com/support。

质保条款与条件

注册质保

通过 FOREO APP注册并激活2年质保, 或者通过登录foreo.com, 查看产品注册以获得更多信息。

两年质保

FOREO产品的质保时间为自购买之日起2年, 任何正常使用时因产品制造或材料缺陷引起的质量问题均属于质保范围。质保范围包括影响产品功能的零部件质量问题, 但不包括由于长期使用造成的外观磨损或由于意外, 错误操作或疏忽造成的磨损或损坏。任何尝试打开或分解产品 (或其附属配件) 造成的损坏也不在质保范围。

如果您有任何此类质量问题并在质保期内通知FOREO, FOREO经过售后服务中心确认和/或检测确认后, 将免费为您更换产品。质保索赔需要提供产品尚在质保期内的合理凭证。为了让您的产品质保有效, 请在质保期内妥善保存原始购买发票和质保信息。

若需申请质保, 请先登陆您在www.foreo.com网站上的账户, 然后选择质量索赔。您需自行承担运费。此举是对消费者法律权利的补充, 并不影响消费者任何权益。

废弃处理方法

废旧电子设备的废弃处理方法 (在欧盟或其他具有垃圾分类处理系统的欧洲国家适用)



2011 / 65 / EU

该设备不可作为生活垃圾进行处理, 而应被带到专门回收电器和电子设备的收集点。通过确保正确地处理该设备, 可有助于防止由于采用不恰当的废弃处理方式而对环境和人类健康的潜在危害。材料回收也有助于保护自然资源。


更多产品回收信息, 请联系当地的生活垃圾处理服务站或产品购买地。

电池拆卸

警告: 此过程不可逆。打开设备将使保修失效。仅在您准备好处置设备时才可以执行此操作。

由于此设备包含锂离子电池, 因此必须在处理前取出电池, 不得丢弃进生活垃圾中。要取出电池, 请拆开硅胶外层后打开塑料内壳, 取出电池并根据您所处地区的环保法规对其进行处理。在此过程中请戴上手套以确保您的安全。

详细图文说明如下:

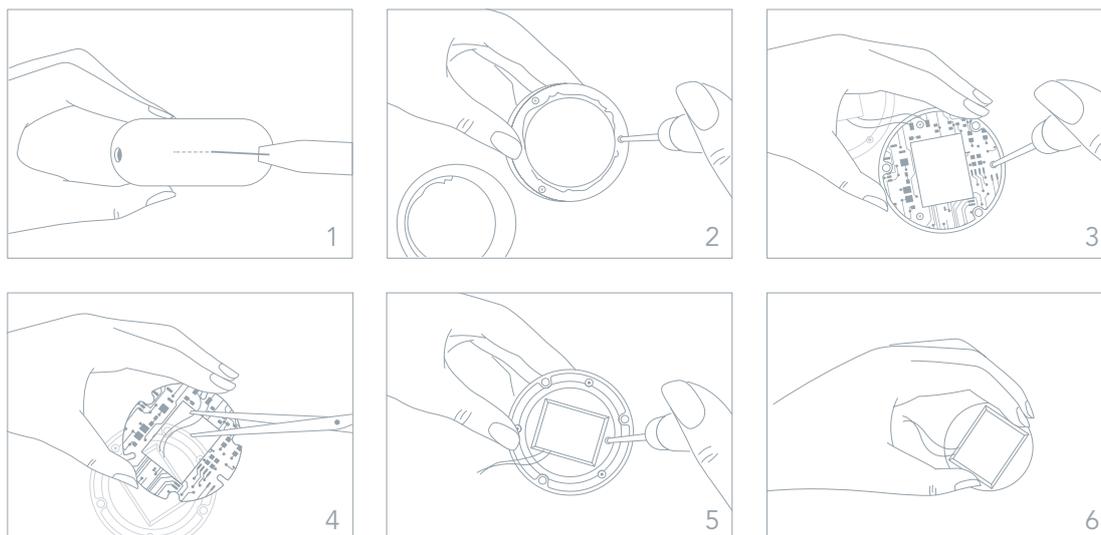

产品规格

材质:	亲肤安全硅胶, PC, ABS塑料, 铝合金
颜色:	粉红色/薄荷蓝/樱桃红
尺寸:	72.5 毫米x 31.4 毫米
重量:	100克
电池:	锂离子电池 1050毫安时 3.7伏
使用次数:	充满一次电可使用高达40次
待机时长:	180 天
频率:	180赫兹
噪音水平:	低于50分贝
操作界面:	一键式

免责声明:

产品使用者自担风险。FOREO和零售商对因使用产品直接或间接造成的任何身体或非身体的伤害或损害不承担任何责任和义务。此外, FOREO保留修改本说明并随时更改内容的权利, 且没有义务将这些修改或改变通知任何个人。

射频暴露声明: 该设备经评估满足一般射频暴露要求。该设备可随身携带且不受暴露环境限制。

注意:本设备已经过测试, 符合FCC规则第15条对B类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护, 防止设备在居住地区使用造成有害干扰。该设备产生、使用并可以辐射能量, 如果不按照说明安装和使用, 可能会对无线电通信造成有害干扰且无法保证在特定环境中不会发生干扰。如果此设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰(可通过关闭和打开设备来确定), 建议用户尝试通过以下一种或多种措施修正:

- 重新调整或摆放接收天线。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到不同于接收器所连接的电路上的插座。
- 咨询经销商或者有经验的无线电/电视技术人员以寻求帮助。

产品模型可能会因改进而有变化, 恕不另行通知。

©2021 FOREO AB 版权所有。

欧洲进口商和经销商:FOREO AB, KARLÄVAGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

美国进口商和经销商:FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

澳洲进口商和经销商:6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

为FOREO AB生产, 由FOREO 瑞典设计研发。

制造商名称:上海焱智电子科技有限公司 地址:中国上海市金山区亭林镇林盛路58号

WWW.FOREO.COM