


FOREO



LUNA™ 2 professional

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА И
УКРЕПЛЯЮЩИЙ МАССАЖ
ДЛЯ ЛИЦА

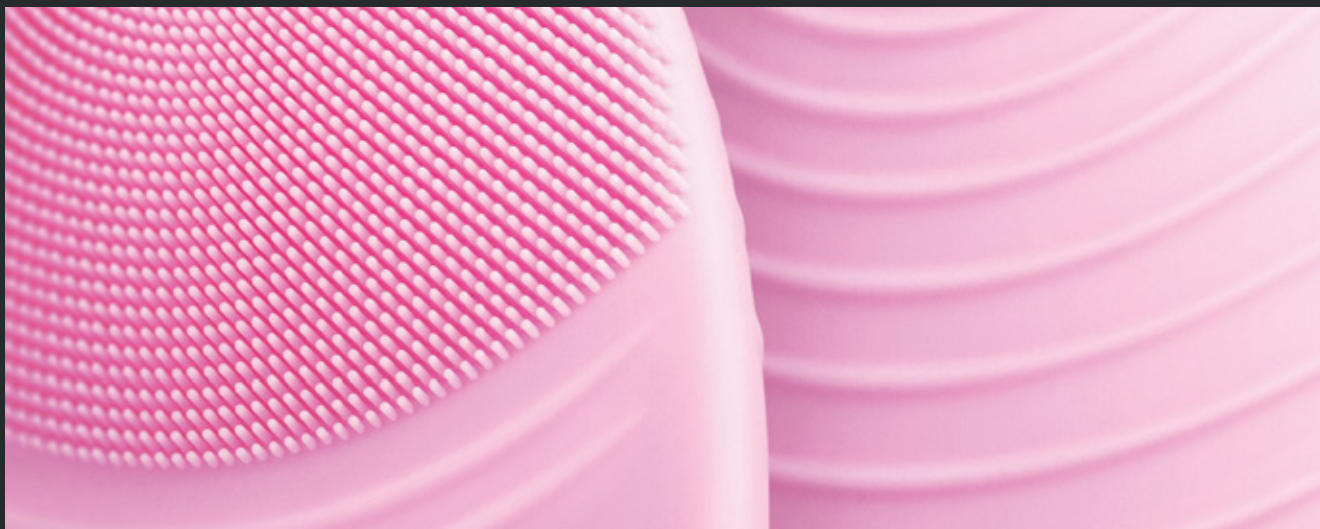

ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

GETTING STARTED

LUNA™ 2 обеспечивает пользователям непревзойденный уход за кожей, сопоставимый с посещением SPA, в домашних условиях благодаря усовершенствованной технологии и оптимизированному исполнению, которые придают коже сияние, свежесть и красоту.

Пожалуйста, прочитайте ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ и используйте этот продукт только по назначению, как описано в этой инструкции.


⚠ ВНИМАНИЕ: НИКАКИЕ МОДИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

ОБЗОР

LUNA™ 2 professional объединяет наиболее совершенную и мощную систему очищения кожи всех гаджетов FOREO с технологией Dual T-Sonic™ (попеременных 2-точечных трансдермальных пульсаций). Двойная мощность благодаря двум приводам, каждый из которых генерирует до 8.000 импульсов в минуту, для еще более глубокого очищения кожи, удаляющей 99,5% загрязнений и кожного жира*, а также остатки макияжа. Кожа также очищается от омертвевших клеток, что сокращает видимость пор и улучшает впитывание ваших любимых уходовых средств.


Кроме того, LUNA™ 2 professional включает в себя уникальную функцию укрепляющего массажа, которая направляет массирующие пульсации с более низкой частотой в области, подверженные морщинам, уменьшая появление мелких линий и морщин и делая кожу более упругой и эластичной.

Очищающая поверхность

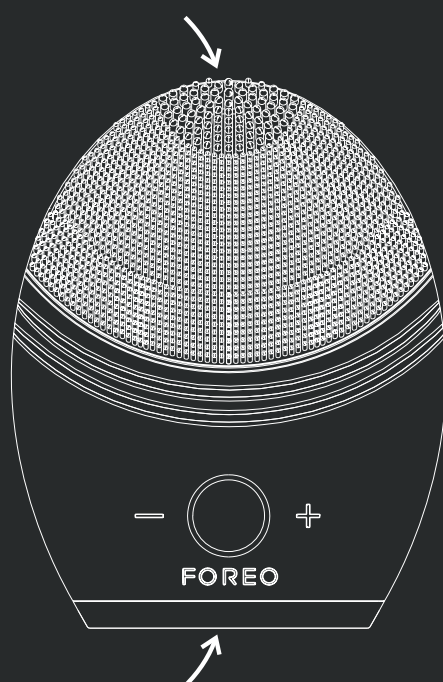

3-кнопочное управление

Массирующая поверхность

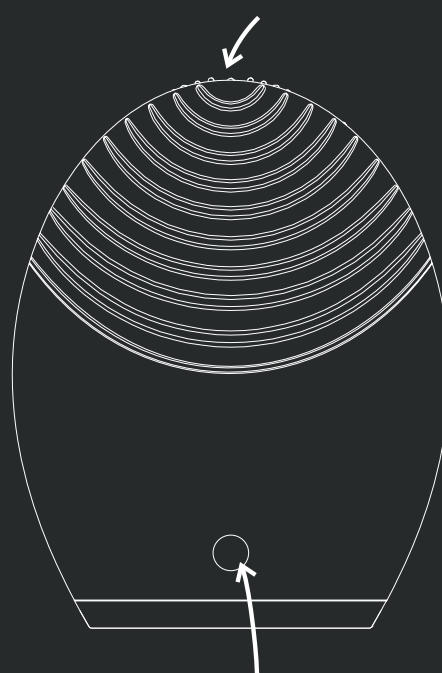


Водонепроницаемый
разъем для зарядки

* На основании результатов клинических исследований, имеются соответствующие записи результатов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ LUNA™ 2 PROFESSIONAL

Чтобы обеспечить вам индивидуализированный уход за кожей, FOREO разработала совершенно новую очищающую поверхность для непревзойденного очищения, которая адаптируется к индивидуальным особенностям женщин. Уникальная градация очищающих кисточек от более тонких к более плотным очищает все типы кожи, а также все области лица.

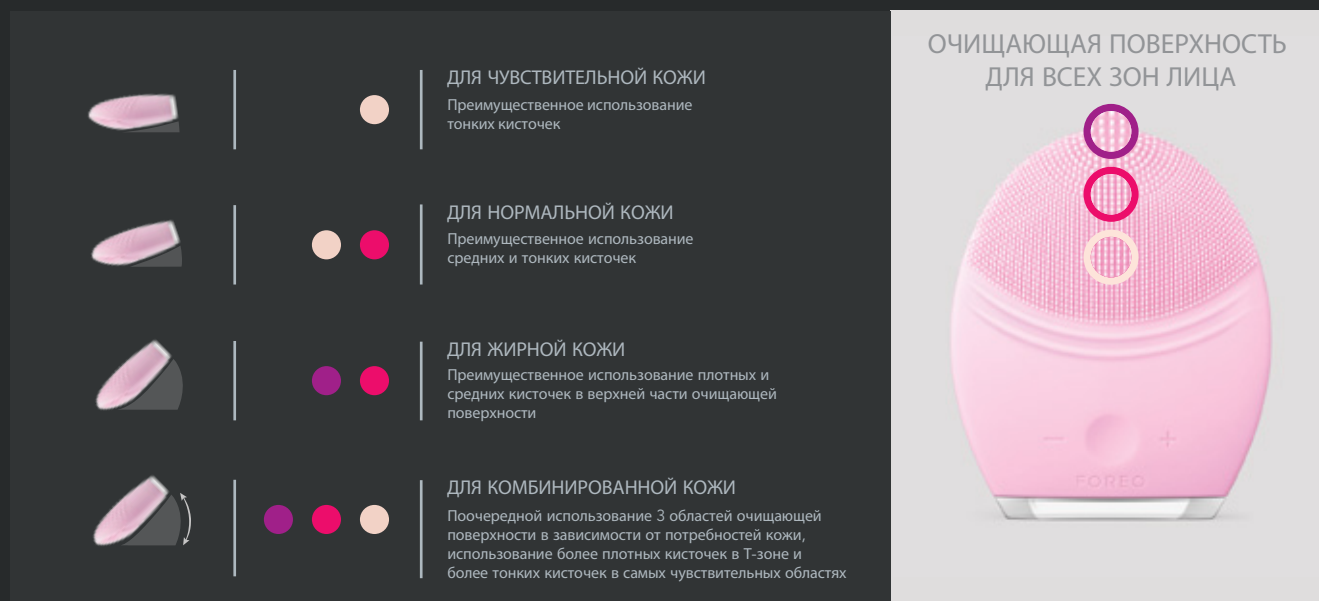

Благодаря 12 уровням интенсивности пульсаций и своей непревзойденной очищающей поверхности LUNA™ 2 professional предназначена для всех типов кожи и обеспечивает индивидуализированное очищение разных зон лица. Изменение угла наклона позволяет мягко очистить чувствительную/нормальную кожу и большие области, например, щеки, более тонкими кисточками, и обеспечить жирной коже, Т-зоне и труднодоступным областям глубокое очищение при помощи более плотных кисточек. Таким образом, гаджет предлагает индивидуализированный уход за кожей.

ВЫБОР РЕЖИМА


1. Чтобы включить LUNA™ 2 professional, нажмите кнопку в центре один раз.
При активации гаджет работает в Режиме Очищения.
2. Еще раз нажмите расположенную в центре кнопку, чтобы перевести прибор в Режим Ожидания (в Режиме Ожидания индикатор будет излучать ровный свет, а пульсации прекратятся, давая Вам возможность умыться лицом).
3. Нажмите центральную кнопку в третий раз, чтобы активировать Режим Укрепляющего Массажа.
4. Чтобы выключить LUNA™ 2 professional, нажмите кнопку в центре еще раз.

Интенсивность Режимов Очищающего и Укрепляющих Массажа LUNA™ 2 professional для удовлетворения комфорта и эффективности каждого пользователя регулируется в 12 интенсивностях с помощью кнопок +/-, а функция памяти запомнит ваши предпочтения для следующего использования устройства.

Ниже описаны отдельные этапы процедур очистки и антивозрастного массажа FOREO. После каждого этапа Вы почувствуете, как двойные T-Sonic™ пульсации приостанавливаются, и увидите мигание светового индикатора, сообщающее о том, что следует перейти к следующей области лица.

РЕЖИМ ОЧИЩЕНИЯ

Режим Очищения LUNA™ 2 professional удаляет 99,5% загрязнений и кожного жира*, а также остатки макияжа и омертвевшие клетки кожи.

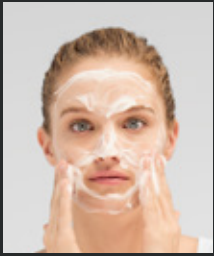


1. НАНЕСИТЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Полностью удалите макияж, намочите LUNA™ 2 professional водой, затем ополосните лицо водой и нанесите свое обычное очищающее средство. Включите LUNA™ 2 professional однократным нажатием на кнопку в центре. При включении активируется Режим Очищения.

2. ОЧИСТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ЗОНЫ:

Через каждые 15 секунд пульсации будут приостанавливаться, сообщая о том, что следует начать очищение следующей зоны.


- Массируйте подбородок и щеки с помощью круговых движений, а затем повторите на другой стороне.
- Начиная с центра, массируйте лоб мягкими круговыми движениями, направленными наружу.
- Массируйте нос, скользя вверх и вниз по одной стороне, а затем по другой. Деликатно массируйте область под глазами с помощью направленных наружу поглаживаний, мы предлагаем уменьшить интенсивность пульсаций.

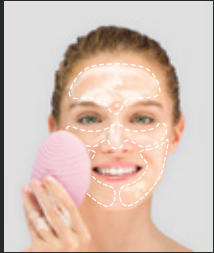

Через 1 минуту пульсации приостановятся трижды, сообщая об окончании процедуры. Нажмите кнопку в центре еще раз, чтобы перевести LUNA™ 2 professional в Режим Ожидания.

3. ОПОЛОСНИТЕ ЛИЦО ВОДОЙ


Ополосните и вытрите лицо, чтобы закончить процедуру по очищению лица общей продолжительностью 1 минута. Затем при желании нанесите свои любимые продукты по уходу за кожей.

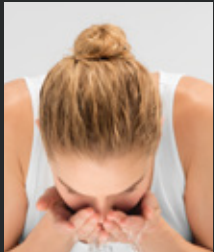

РЕЖИМ УКРЕПЛЯЮЩЕГО МАССАЖА

Режим Укрепляющего Массаж LUNA™ 2 professional уменьшает появление тонких линий и морщин и делает кожу упругой и эластичной.

В режиме ожидания нажмите центральную кнопку, чтобы активировать Режим Укрепляющего Массаж. Постарайтесь уделять каждому этапу процедуры около 12 секунд; после этого интервала импульсы LUNA™ 2 professional ненадолго приостановятся. Дайте лицу расслабиться, переместите и прижмите поверхность LUNA™ 2 professional к следующей области, склонной к образованию морщин, где напряжение мышц лица может вызвать образование мимических морщин – «вороньих лапок», следов волнения или, наоборот, смеха:

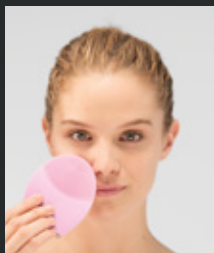

1. Область между бровей
2. Правый висок
3. Правая носогубная складка
4. Левая носогубная складка
5. Левый висок

Через 1 минуту Вы почувствуете, как пульсации приостановятся три раза подряд, сообщая Вам об окончании процедуры Anti-Aging.

Обратите внимание, что для предотвращения чрезмерного использования LUNA™ 2 professional автоматически отключится, если ее оставить на 3 минуты в режиме Очистки или Укрепляющего массажа.

ВНИМАНИЕ: Если Вы почувствуете дискомфорт при использовании прибора FOREO, незамедлительно прекратите его использование и проконсультируйтесь с врачом.

* На основании результатов клинических исследований, имеются соответствующие записи результатов.

ОЧИСТКА ВАШЕГО УСТРОЙСТВА

Всегда тщательно очищайте ваше устройство после использования. Вымойте поверхность щетки водой с мылом, затем смойте теплой водой. Избегайте использования очищающих средств, отшелушивающих средств или скрабов на глиняной, силиконовой или зернистой основе, поскольку они могут повредить мягкий силикон кисточек. Вытрите насухо безворсовой тканью или полотенцем. После использования мы рекомендуем опрыскивать устройство силиконовым чистящим спреем FOREO и ополаскивать теплой водой для достижения оптимальных результатов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте моющие средства, содержащие алкоголь, бензин или ацетон, поскольку они могут раздражать кожу и повредить силикон.

ЗАРЯДКА

Ваш бьюти-гаджет FOREO заряжается при помощи зарядного устройства, поставляемого в комплекте. Одного часа зарядки хватает на более, чем 7 месяцев работы прибора.

- Вставьте кабель питания в разъем питания LUNA™ 2 professional.
- Вставьте сетевой штепсель в розетку. Светодиодный индикатор LUNA™ 2 professional будет мигать, сообщая о процессе зарядки аккумулятора. Когда аккумулятор будет полностью заряжен (приблизительно через 1 час), индикатор загорится ровным светом.
- При низком уровне зарядки аккумулятора светодиодный индикатор на вашей LUNA™ 2 professional будет мигать белым светом.

ВНИМАНИЕ: Перед зарядкой убедитесь, что на разъеме и кабеле для зарядки нет воды и остатков очищающего средства. Не заряжайте LUNA™ 2 professional в местах, где зарядный кабель может попасть в воду. НЕ используйте прибор FOREO в процессе зарядки и НЕ заряжайте его дольше, чем 24 часа. Используйте только поставляемый FOREO кабель.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Избегайте очищающих средств на базе глины, силикона, либо зернистых очищающих средств, пилингов и скрабов, поскольку они могут повредить мягкие силиконовые кисточки LUNA™ 2 professional.
- При наличии какого-либо заболевания кожи или медицинских проблем просим Вас перед использованием проконсультироваться с дерматологом.
- Очищение лица с LUNA™ 2 professional должно быть комфортным – в случае дискомфорта незамедлительно прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом.
- Будьте особенно внимательны при использовании прибора в области под глазами и не допускайте контакта прибора с веками и глазами.
- По гигиеническим соображениям не рекомендуется совместное использование LUNA™ 2 professional с другими людьми.
- Не оставляйте LUNA™ 2 professional под воздействием прямых солнечных лучей и никогда не подвергайте ее воздействию чрезмерно высоких температур или кипятка.
- Дети, а также лица с ограниченными физическими или умственными способностями должны пользоваться прибором под присмотром взрослых лиц.
- Не используйте бьюти-гаджет или зарядный кабель, если они повреждены, и пользуйтесь только кабелем, поставляемым FOREO в комплекте с устройством.
- Если на продукте имеются какие-либо признаки повреждения, прекратите его использование. Данный продукт не содержит восстанавливаемых деталей.
- Во избежание поражения электрическим током данное оборудование следует подключать только к питающей сети с заземлением.

- Учитывая эффективность процедур очищения и укрепляющего массажа FOREO, мы рекомендуем не использовать LUNA™ 2 professional в режиме Очистки или Антивозрастного массажа более 3 минут за раз.
- Используйте устройство исключительно по назначению, как описано в этой инструкции.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Светодиодный индикатор не мигает при подключении кабеля зарядки?

- Аккумулятор полностью заряжен и готов к использованию вплоть до 450 полных процедур очищения и Anti-Aging.
- Аккумулятор полностью разряжен, и ему потребуется несколько минут для распознавания кабеля зарядки.
- Кабель зарядки плохо подключен. Проверьте розетку и разъем питания.

LUNA™ 2 professional не активируется при нажатии расположенной в центре кнопки?

- Аккумулятор разряжен. Зарядите LUNA™ 2 professional.
- Управление прибором заблокировано. Разблокируйте его, удерживая одновременно кнопки + и -.

LUNA™ 2 professional не выключается, и/или кнопки интерфейса не отвечают?

- Произошло зависание микропроцессора. Для восстановления нормальной работы подключите кабель зарядки.

LUNA поверхности LUNA™ 2 professional стали липкими или вздулись?

- Прекратите использование. Силикон отличается долговечностью, но может утратить свои свойства при определенных условиях - для предотвращения этого изучите разделы "Очищение" и "Безопасность" этой инструкции.

Если Вы не нашли ответ на свой вопрос в разделе о поиске и устранении неполадок или если у Вас есть другие вопросы о работе прибора, просим Вас открыть раздел службы по работе с клиентами на сайте www.foreo.com.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА: СРОКИ И УСЛОВИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИИ

Для активации Вашего права на 2-летнее Гарантийное Обслуживание найдите уникальный идентификационный номер Вашего прибора на карте подлинности FOREO (Authenticity Card) и зарегистрируйте его на сайте

www.foreo.com в разделе Поддержка Клиентов - Гарантия и Возврат.

2-ЛЕТНЕЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

FOREO предоставляет гарантийное обслуживание для данного прибора на срок ДВА (2) ГОДА с даты приобретения для устранения дефектов, возникших в результате недостатков сборки или материалов. При выявлении дефекта и уведомлении о нем FOREO в течение срока гарантийного обслуживания FOREO произведет бесплатную замену прибора по своему усмотрению.

Гарантийное обслуживание распространяется на рабочие детали, влияющие на работу прибора. Оно НЕ распространяется на косметические изъяны, вызванные легким износом, и на разрыв материала, а также на повреждения, возникшие в результате инцидентов, неправильного или небрежного использования. При попытке вскрыть или разобрать прибор (или поставляемые в комплекте части) гарантийное обслуживание прекращает свое действие.

Для того, чтобы воспользоваться гарантийным обслуживанием, необходимо предоставить доказательство того, что заявка на гарантийное обслуживание сделана в течение гарантийного срока. По этой причине просим Вас сохранять товарный чек в продолжение гарантийного срока.

Для того, чтобы подать заявку на гарантийное обслуживание, Вам необходимо создать учетную запись на www.foreo.com и войти на сайт под своим именем, затем выбрать опцию отправления заявки на гарантийное обслуживание. Вам будет отправлен номер Решения на возврат товара (RMA), который следует сдать в ближайший офис FOREO вместе с прибором FOREO. Стоимость пересылки не возвращается. Данные действия являются дополнительными по отношению к Вашим законным правам в качестве покупателя, и данное обстоятельство не является нарушением соответствующих прав.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация электронного оборудования (согласно законодательству стран ЕС и других европейских стран) должна осуществляться с использованием специальных систем сбора мусора.



Значок с изображением перечеркнутого мусорного бака означает, что данный прибор не считается бытовыми отходами. Он должен быть передан в специальный пункт сбора электрических и электронных отходов для последующей переработки. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать потенциальных негативных последствий для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильного обращения с выбрасываемым продуктом. Переработка материалов также способствует экономии природных ресурсов. Для получения более подробной информации о переработке прибора свяжитесь со своей местной компанией, осуществляющей вывоз мусора, по месту приобретения.

ПАРАМЕТРЫ

МАТЕРИАЛЫ:	Безопасный силикон и АБС-пластик
ЦВЕТА:	Розовый, фуксия, аквамарины
РАЗМЕР:	Размер (длина x ширина x высота): 102 x 80,5 x 35 мм
МАССА:	160 г
АККУМУЛЯТОР:	II-iON 530mAh 3,7 В
ЗАРЯДКА:	60 мин.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАРЯДА:	до 450 использований от одной полной зарядки
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ:	90 дней
ЧАСТОТА:	94 Гц
МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА:	<50 дБ
УПРАВЛЕНИЕ:	3-кнопочное

ДИСКЛАМАЦИЯ: FOREO сохраняет за собой право пересматривать и периодически вносить изменения в содержание настоящего издания без предварительного уведомления каких-либо лиц о данном пересмотре и изменениях. Для получения полных, актуальных правил, условий и предупреждений, пожалуйста, ознакомьтесь с полной версией руководства по использованию на сайте www.foreo.com.

Модель может быть изменена с целью улучшения без предварительного уведомления.

©2016 FOREO AB. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

ДИСТРИБЬЮТОР В ЕС: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

ДИСТРИБЬЮТОР В США: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

ДИСТРИБЬЮТОР В АВСТРАЛИИ: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА FOREO SWEDEN.

ИЗГОТОВЛЕНО ДЛЯ FOREO AB.

WWW.FOREO.COM