


FOREO



LUNA™ 2

ОЧИСТКА ЛИЦА И
УКРЕПЛЯЮЩИЙ МАССАЖ В 1
УСТРОЙСТВЕ

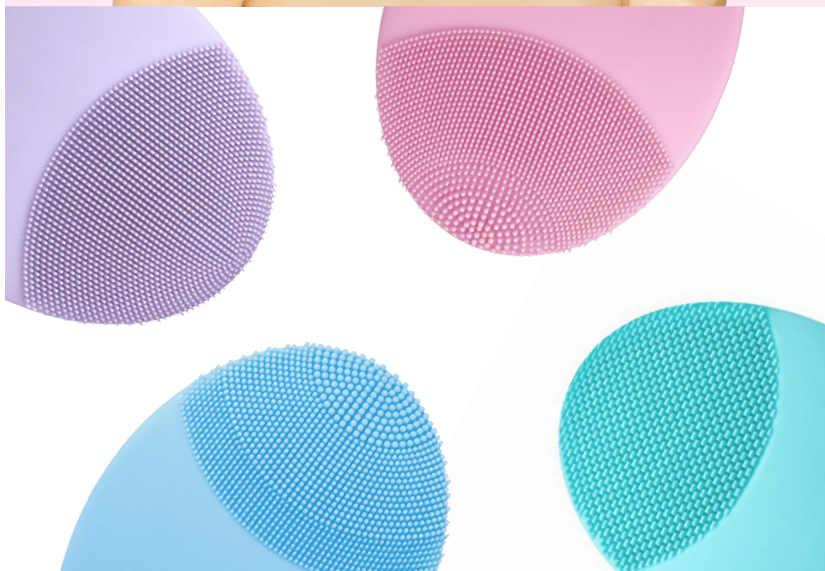

ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем вас с первым шагом на пути к безупречно красивой коже - приобретением очищающего и антивозрастного массажера для лица LUNA™ 2 T-Sonic™. Перед тем как Вы начнете наслаждаться всеми преимуществами домашнего использования этой передовой технологии по уходу за кожей, просим Вас внимательно изучить инструкции, содержащиеся в данном руководстве.

Пожалуйста, прочитайте ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ и используйте этот прибор только по назначению, как описано в данном руководстве.


⚠ ВНИМАНИЕ: ЛЮБЫЕ МОДИФИКАЦИИ ДАННОГО ПРИБОРА ЗАПРЕЩЕНЫ

ЗНАКОМСТВО С LUNA™ 2

Наш инновационный прибор для ухода за кожей придает коже более свежий и сияющий вид, помогая поддерживать ее естественную красоту и молодость.


При ежедневном использовании в Режиме Очищения LUNA™ 2 T-Sonic™ (трансдермальные ультразвуковые) пульсации позволяют очистить кожу намного глубже, по сравнению со обычным умыванием при помощи рук, усиливая действие ваших любимых уходовых продуктов. В Режиме Укрепляющего Массажа LUNA™ 2 мягко массирует пульсациями с более низкой частотой зоны, подверженные морщинам, чтобы уменьшить видимые признаки старения. Регулярное применение прибора не только придает Вашей коже свежесть и сияние с самого первого использования, но и закладывает фундамент пульсации молодости и здоровья Вашей кожи.

Очищающая поверхность

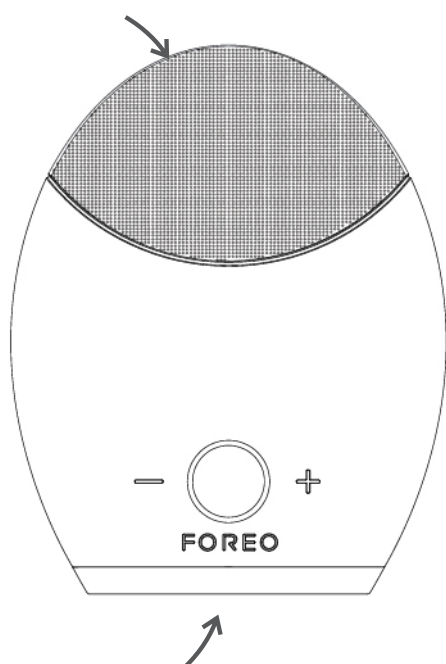

3-кнопочное управление

Массирующая поверхность

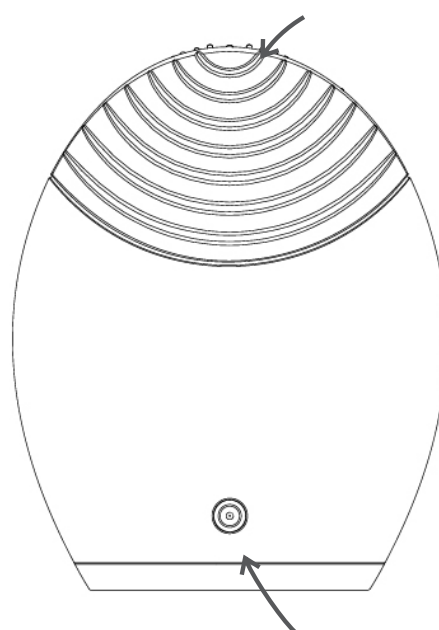

Водонепроницаемый разъем для зарядки

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ LUNA™ 2

Прибор LUNA™ 2 доступен в 4 разных моделях для более персонализированного ухода за кожей лица. Очищающая поверхность каждой из представленных моделей предназначена для нормальной, комбинированной, чувствительной и жирной кожи соответственно, причем силиконовые кисточки варьируются от более тонких до более плотных для мягкого или интенсивного очищения кожи в зависимости от ее потребностей. Для достижения наилучших результатов от ухода за лицом при помощи LUNA™ 2, рекомендуем использовать прибор в течение 2х минут утром и вечером.

ВЫБОР РЕЖИМА

1. Нажмите один раз расположенную в центре кнопку для того, чтобы включить LUNA™ 2. При активации устройство будет работать в Режиме Очищения.
2. Еще раз нажмите расположенную в центре кнопку, чтобы перевести прибор в Режим Ожидания (в Режиме Ожидания индикатор будет излучать ровный свет, а пульсации прекратятся, давая Вам возможность умыться лицом).
3. Нажмите центральную кнопку в третий раз, чтобы активировать Режим Укрепляющего Массажа.
4. Нажмите кнопку в центре еще раз, чтобы выключить свой прибор LUNA™ 2.


Интенсивность Режимов Очищающего и Укрепляющих Массажа LUNA™ 2 настраивается для комфорта с помощью кнопок +/-, а функция памяти запомнит ваши предпочтения для следующего использования устройства.

Отдельные этапы процедуры очищения и омоложения кожи FOREO описаны ниже. После каждого этапа Вы почувствуете, как T-Sonic™ пульсации приостанавливаются, и увидите мигание светового индикатора, означающее, что следует перейти к следующей области лица.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед первым использованием LUNA™ 2 убедитесь, что прибор не заблокирован. Для того, чтобы разблокировать устройство, нажмите и удерживайте одновременно кнопки + и -. Загорание светового индикатора сообщит о разблокировке девайса. Если Вы захотите заблокировать прибор во избежание случайного включения в поездке, повторите описанную процедуру.

РЕЖИМ ОЧИЩЕНИЯ

В Режиме Очищения LUNA™ 2 устраняет 99,5% загрязнений и кожного жира*, а также остатки макияжа и омертвевшие клетки кожи.

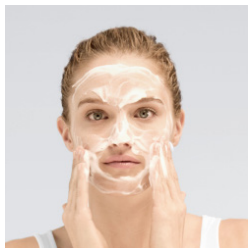


1. НАНЕСЕНИЕ ОЧИЩАЮЩЕГО СРЕДСТВА

Полностью снимите макияж, намочите LUNA™ 2, затем ополосните лицо водой и нанесите свое обычное средство для очищения кожи. Включите LUNA™ 2 однократным нажатием на кнопку в центре для активации Режима Очищения.

2. ОЧИЩЕНИЕ

Через каждые 15 секунд пульсации будут приостанавливаться, сообщая о том, что следует начать очищение следующей зоны.

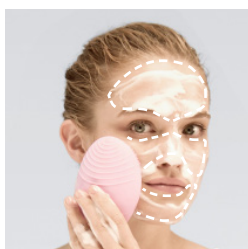

- Массируйте подбородок и щеки с помощью круговых движений, а затем повторите на другой стороне.
- Начиная с центра, массируйте лоб мягкими круговыми движениями, направленными наружу.
- Массируйте нос, скользя вверх и вниз по одной стороне, а затем по другой. Деликатно массируйте область под глазами с помощью направленных наружу поглаживаний, мы предлагаем уменьшить интенсивность пульсаций.

Через 1 минуту пульсации трижды приостановятся, сообщая об окончании процедуры. Еще раз нажмите кнопку в центре, чтобы перевести LUNA™ 2 в Режим Ожидания.




3. УМЫВАНИЕ

Ополосните и вытрите лицо, чтобы завершить процедуру очищения общей продолжительностью 1 минута. Затем при желании нанесите свои любимые продукты по уходу за кожей.

РЕЖИМ ANTI-AGING

Режим Anti-Aging LUNA™ 2 сокращает количество мимических и возрастных морщин, оставляя кожу более упругой и эластичной.

Из Режима Ожидания переведите прибор в Режим Омоложения нажатием на кнопку в центре. Попробуйте массировать в течение около 12 секунд на каждом этапе процедуры; после этого интервала пульсации LUNA™ 2 на мгновение прекратятся. Расслабьте лицо и прикладывайте прибор поверхностью Anti-aging к указанным ниже зонам лица, которые наиболее подвержены образованию морщин вследствие напряжения мимических мышц:

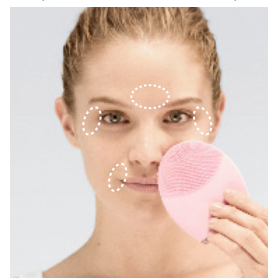

1. Область между бровей
2. Правый висок
3. Правая носогубная складка
4. Левая носогубная складка
5. Левый висок

Через 1 минуту вы почувствуете, что пульсации приостанавливаются 3 раза подряд в быстрой последовательности, указывая на завершение укрепляющего массажа. Обратите внимание, что для предотвращения чрезмерного использования LUNA™ 2 автоматически отключится, если ее оставить на 3 минуты в режиме Очистки или Укрепляющего массажа.

ВНИМАНИЕ: Если Вы почувствуете дискомфорт при использовании прибора FOREO, незамедлительно прекратите его использование и проконсультируйтесь с врачом.

*На основании клинических исследований, имеются соответствующие записи результатов.

ОЧИСТКА ВАШЕГО УСТРОЙСТВА

Всегда тщательно очищайте ваше устройство после использования. Вымойте поверхность щетки водой с мылом, затем смойте теплой водой. Избегайте использования очищающих средств, отшелушивающих средств или скрабов на глиняной, силиконовой или зернистой основе, поскольку они могут повредить мягкий силикон кисточек. Вытрите насухо безворсовой тканью или полотенцем. После использования мы рекомендуем опрыскивать устройство силиконовым чистящим спреем FOREO и ополаскивать теплой водой для достижения оптимальных результатов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте моющие средства, содержащие алкоголь, бензин или ацетон, поскольку они могут раздражать кожу и повредить силикон.

ЗАРЯДКА ПРИБОРА

Зарядка Вашего прибора FOREO осуществляется через USB- кабель, который входит в комплект LUNA™ 2. Одного часа зарядки хватает на более, чем 7 месяцев работы прибора.

- Вставьте кабель для зарядки в разъем питания LUNA™ 2.
- При подсоединении устройства к USB - порту светодиодный индикатор начнет мигать, сообщая, что прибор заряжается. Когда аккумулятор будет полностью заряжен (приблизительно через 1 час), индикатор загорится ровным светом.
- При разрядении аккумулятора индикатор начнет мигать во время использования прибора.

ВНИМАНИЕ: Перед зарядкой убедитесь, что разъем и кабель для зарядки сухие и чистые. Не допускайте зарядки LUNA™ 2 в местах, где зарядный кабель может попасть в воду. НЕ используйте прибор FOREO в процессе зарядки и НЕ заряжайте его дольше, чем 24 часа. Используйте только оригинальный кабель для зарядки от FOREO.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Избегайте использования средств для очищения кожи на основе глины, силикона, либо с зернистой текстурой а также отшелушивающих средств и скрабов, поскольку они могут повредить мягкие силиконовые кисточки LUNA™ 2.
- При наличии какого-либо заболевания кожи или медицинских проблем просим Вас перед использованием проконсультироваться с дерматологом.
- Очищение кожи с LUNA™ 2 должно быть комфортным - если Вы испытываете дискомфорт, незамедлительно прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом.
- Будьте особенно внимательны при использовании прибора в области под глазами и не допускайте контакта прибора с веками и глазами.
- Мы не рекомендуем делить использование LUNA™ 2 с другими лицами по гигиеническим соображениям.
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей на LUNA™ 2, а также воздействия чрезвычайно высоких температур или кипятка.
- Дети, а также лица с ограниченными физическими или умственными способностями должны пользоваться прибором под присмотром взрослых лиц.
- Не используйте бьюти-гаджет или зарядный кабель, если они повреждены, и повреждены. Используйте только оригинальный кабель для зарядки, поставляемый FOREO в комплекте с устройством.
- Если на устройстве имеются какие-либо признаки повреждения, прекратите его использование. Данный прибор не содержит восстанавливаемых деталей.
- Во избежание поражения электрическим током данный прибор следует подключать только к источнику питания с заземлением.
- Учитывая эффективность процедур очищения и укрепляющего массажа FOREO, мы рекомендуем не использовать Режимы Очистки или Массажа LUNA™ 2 более 3 минут за раз.
- Используйте устройство исключительно по назначению, как описано в данной инструкции.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Светодиодный индикатор не мигает при подключении кабеля зарядки?

- Аккумулятор полностью заряжен и готов к 450 полным процедурам очищения и омоложения кожи.
- Аккумулятор полностью разряжен, и ему потребуется несколько минут для распознавания кабеля зарядки.
- Кабель зарядки неправильно подсоединен. Проверьте USB - порт и разъем питания.

LUNA™ 2 не активируется при нажатии расположенной в центре кнопки?

- Аккумулятор разряжен. Зарядите LUNA™ 2.
- Прибор заблокирован. Разблокируйте его, удерживая одновременно кнопки + и -.

LUNA™ 2 не выключается, и/или прибор не реагирует на нажатие кнопок?

- Произошел сбой в работе микропроцессора. Для восстановления нормальной работы подключите кабель зарядки.

Силиконовые поверхности LUNA™ 2 стали липкими или вздулись?

- Прекратите использование. Силикон отличается долговечностью, но может утратить свои свойства при определенных условиях - для предотвращения этого изучите разделы "УХОД ЗА ВАШЕЙ LUNA™ 2" и "БЕЗОПАСНОСТЬ" инструкции.

Если Вы не нашли ответ на свой вопрос в разделе о поиске и устранении неисправностей или если у Вас есть другие вопросы о работе прибора, просим Вас посетить раздел поддержки клиентов на сайте www.foreo.com.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА: СРОКИ И УСЛОВИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИИ

Для активации Вашего права на 2-летнее Гарантийное Обслуживание найдите уникальный идентификационный номер Вашего прибора на карте подлинности FOREO (Authenticity Card) и зарегистрируйте его на сайте www.foreo.com в разделе Поддержка Клиентов - Гарантия и Возврат.

2-ЛЕТНЕЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

FOREO предоставляет гарантию на данный прибор на срок 2(ДВА) года с даты приобретения. Гарантия распространяется на производственные неисправности и брак материалов, возникшие при использовании прибора по назначению. Если Вы обнаружили дефект и сообщили об этом FOREO до окончания гарантийного срока, FOREO, со своей стороны, обязуется обменять неисправный прибор на новый без дополнительной платы.

Гарантийное обслуживание распространяется на детали, работа которых влияет на работу всего устройства. Гарантия НЕ распространяется на косметические повреждения, вызванные износом устройства, а также разрывы или повреждения, возникшие в результате случайного происшествия, неправильного использования или неправильного хранения и ухода. Любые попытки открыть прибор или разобрать его на части, приведут к аннулированию гарантии.

Каждый гарантийный запрос должен быть подтвержден обоснованными доказательствами того, что он подается до истечения срока гарантийного обслуживания. По этой причине, пожалуйста, сохраняйте оригинал чека о покупке.

Для того, чтобы подать заявку на гарантийное обслуживание, Вам необходимо создать учетную запись на www.foreo.com и зайти в свой аккаунт, затем выбрать опцию заявки на гарантийное обслуживание. Вам будет отправлен Регистрационный Номер Разрешения на возврат товара (RMA), (RMA), который следует отправить в ближайший офис FOREO вместе с прибором FOREO. Стоимость пересылки не возвращается. Данное обязательство является дополнением к законным правам потребителя и никоим образом не нарушает их.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация электронного оборудования (согласно законодательству стран ЕС и других европейских стран) должна осуществляться с использованием специальных систем сбора мусора.



Значок с изображением перечеркнутого мусорного бака означает, что данный прибор не может быть утилизирован как обычный бытовой отход, а должен быть сдан в пункт приема использованного электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать потенциальных негативных последствий для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильного обращения с выбрасываемым устройством. Переработка материалов также способствует сохранению природных ресурсов.

Для получения более подробной информации об утилизации прибора свяжитесь с местной компанией, осуществляющей переработку отходов, или организацией по месту приобретения прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ:	Безопасный силикон и АБС-пластик
ЦВЕТ:	Лаванда (чувствительная кожа)/Розовый (нормальная кожа)/Синий (комбинированная кожа)/Бирюзовый (жирная кожа)
РАЗМЕР:	102,3 x 82,3 x 35,7 мм
МАССА:	135 г
АККУМУЛЯТОР:	Li-Ion 530мАч 3,7 В
ЗАРЯДКА:	60 мин
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАРЯДА:	до 450 использований
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ:	180 дней
ЧАСТОТА:	100 Гц
МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА:	50 дБ
УПРАВЛЕНИЕ:	3-кнопочное

ДИСКЛАМАЦИЯ: Потребители, использующие данный прибор, делают это под собственную ответственность. Ни компания FOREO, ни ее ритейлеры не несут ответственности за физические и любые другие травмы и повреждения, полученные в результате прямого или косвенного использования данного прибора. FOREO оставляет за собой право пересматривать и периодически вносить изменения в содержание данного издания без предварительного уведомления об этих изменениях. Для получения полных, актуальных правил, условий и предупреждений, пожалуйста, ознакомьтесь с полной версией руководства по использованию на сайте www.foreo.com.

Модель может быть изменена с целью улучшения без предварительного уведомления.

©2016 FOREO AB. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

ДИСТРИБЬЮТОР В ЕС: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

ДИСТРИБЬЮТОР В США: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

ДИСТРИБЬЮТОР В АВСТРАЛИИ: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА FOREO SWEDEN.

ИЗГОТОВЛЕНО ДЛЯ FOREO AB.

WWW.FOREO.COM