

FOREO
SWEDEN



IRIS™ 2

MASSEUR RAJEUNISSANT POUR LES YEUX

MANUEL EN LIGNE

MANUEL D'UTILISATION COMPLET

POUR COMMENCER

Félicitations pour avoir fait le premier pas vers un regard plus frais et plus jeune en faisant l'acquisition d'IRIS™ 2. Avant de commencer à profiter de tous les avantages d'un appareil de beauty-tech sophistiqué depuis chez vous, veuillez prendre quelques instants pour parcourir ce manuel.

Veuillez **LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION** et n'utilisez ce produit que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.



DESCRIPTION IRIS™ 2

IRIS™ 2 est un appareil de massage pour le contour des yeux rapide, efficace et ultra-hygiénique inspiré des anciennes techniques de drainage lymphatique par tapotement pratiquées en Asie, et révolutionné grâce au massage breveté T-Sonic™ de FOREO.

Le mouvement d'acupression des doigts augmente le flux des fluides lymphatiques, ce qui permet de réduire les cernes, de rafraîchir et de réveiller les yeux fatigués. Il permet également de relâcher la tension des muscles du visage, causée par la fatigue oculaire. Les pulsations T-Sonic™ offrent un massage doux de la zone des yeux, contribuant à augmenter l'éclat du contour des yeux et à réduire l'apparence des pattes d'oie et des ridules, pour une peau plus ferme. IRIS™ 2 améliore également l'absorption des ingrédients actifs des produits cosmétiques, les faisant pénétrer en profondeur, là où ils sont le plus efficace.

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE IRIS™ 2

REMARQUE : IRIS™ 2 peut être verrouillé lorsqu'il est débarrassé pour la première fois. Déverrouillez-le en appuyant simultanément sur les boutons + et -. Le voyant lumineux clignotera alors pour indiquer que votre appareil est déverrouillé.

CARACTÉRISTIQUES

ACUPRESSURE

Augmente le drainage lymphatique, aide à réduire les cernes, et rafraîchit les yeux fatigués.

MASSAGE T-SONIC™

Des oscillations subtiles massent en douceur pour augmenter l'éclat et réduire l'apparence des ridules.

BOUTONS PLUS ET MOINS

Réglez l'intensité de l'acupression et du massage T-Sonic™ selon vos préférences.

BOUTON UNIVERSEL

Allume et éteint l'appareil, et désactive le massage T-Sonic™.



SILICONE ULTRA-HYGIÉNIQUE

Doux comme du velours, sans BPA ni phtalates, et résistant aux bactéries pour une hygiène optimale.

MANCHE ANTI-DÉRAPANT

Manipulation ultra-confortable pour une expérience de rajeunissement des yeux sans effort.

PORT DE CHARGE USB

Scellé et 100% étanche, avec une charge unique pouvant durer jusqu'à 150 utilisations.

VOYANT LUMINEUX

Le rouge indique que la batterie est faible, le blanc clignotant indique que la batterie est en charge, le blanc fixe indique que la batterie est complètement chargée.



AMÉLIORATION DE L'ABSORPTION

À utiliser avec tous les produits cosmétiques pour les yeux afin d'améliorer l'absorption des ingrédients.



MINUTERIE INTÉGRÉE

S'arrête au bout de 30 secondes pour vous indiquer quand vous devez passer à l'autre œil.



CÂBLE DE CHARGEMENT USB

Chargez à tout moment et en tout lieu grâce au câble de charge USB.



ÉTUI DE VOYAGE

Permet de ranger l'appareil pour les soins à la maison, au travail ou en déplacement.

CONSEILS D'UTILISATION IRIS™ 2:



ÉTAPE 1

Commencez par un visage propre et sec. Appliquez ensuite des points de votre crème ou sérum pour les yeux autour de vos yeux, si vous le souhaitez*.




ÉTAPE 2

Appuyez sur le bouton universel d' IRIS™ 2 pendant 3 secondes pour l'allumer. Vous pouvez régler l'intensité avec les boutons + et -. Pour désactiver le massage T-Sonic™, appuyez une nouvelle fois sur le bouton universel.



ÉTAPE 3

Appuyez délicatement sur IRIS™ 2 dans le coin interne de l'œil et faites-le glisser sous et autour du contour de l'œil pendant 30 secondes, jusqu'à ce que la minuterie intégrée s'arrête. Répétez ensuite sur l'œil opposé**

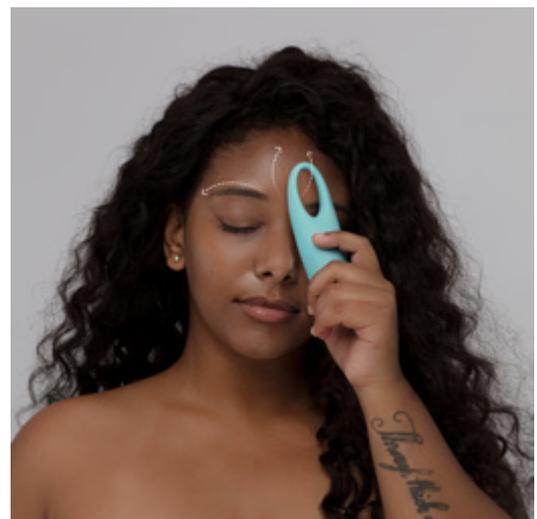

Conseil de pro

Vous pouvez également utiliser IRIS™ 2 sur le front pour détendre les points de tension des muscles du visage.

GUIDE UNIVERSEL DES BOUTONS :

- 1er clic : ON
- 2ème clic : Massage T-Sonic™ désactivé
- 3ème clic : OFF

* Ceci n'est pas obligatoire - vous pouvez aussi utiliser IRIS™ 2 seul, sans aucun produit cosmétique pour les yeux.

** L'avant de IRIS™ 2, avec les boutons, doit être tourné vers votre visage. IRIS™ 2 s'éteint automatiquement après 3 minutes.

NETTOYER VOTRE IRIS™ 2

Nettoyez toujours soigneusement votre appareil après utilisation. Lavez l'appareil avec du savon et de l'eau chaude. Séchez-le en le tapotant avec un chiffon ou une serviette non pelucheux, ou laissez-le sécher à l'air libre. Après utilisation, nous vous recommandons de vaporiser le dispositif avec le spray nettoyant pour silicone FOREO et de le rincer à l'eau chaude pour un résultat optimal.

REMARQUE : n'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone, car ils peuvent irriter la peau et endommager le silicone.

IMPORTANT

POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE :

- Si vous souffrez d'une affection oculaire grave ou d'un problème de peau, veuillez consulter un médecin avant de l'utiliser.
- L'utilisation d' IRIS™ 2 doit être confortable - si vous ressentez une gêne, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.
- IRIS™ 2 ne doit être appliqué que sur la zone sous-oculaire et l'arcade sourcilière, et jamais sur la paupière ou le globe oculaire.
- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas partager votre IRIS™ 2 avec quelqu'un d'autre.
- Évitez de laisser votre IRIS™ 2 à la lumière directe du soleil et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême ou à de l'eau bouillante.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou près d'enfants, ainsi que par des personnes aux capacités physiques et mentales réduites.
- Cessez d'utiliser ce produit s'il semble endommagé de quelque façon que ce soit. Ce produit ne contient aucune pièce réparable.
- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question spécifique ou si vous avez d'autres questions concernant le fonctionnement de l'appareil, veuillez consulter le site www.foreo.com.

DÉPANNAGE

Précautions à prendre en cas de modification des performances d'IRIS™ 2.

Si IRIS™ 2 ne s'allume pas lorsqu'on appuie sur le bouton universel :

- La batterie est vide. Rechargez-la à l'aide du câble de charge USB pendant 2 heures jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée, puis redémarrez votre IRIS™ 2 en maintenant le bouton universel enfoncé.
- L'interface est verrouillée. Déverrouillez-la en maintenant les boutons + et - enfoncés simultanément.

Si IRIS™ 2 ne peut pas être éteint et/ou si les boutons de l'interface ne répondent pas :

- Le microprocesseur présente un dysfonctionnement temporaire. Branchez le câble de charge USB et/ou maintenez enfoncé le bouton universel pour redémarrer l'appareil.

Si le témoin lumineux d'IRIS™ 2 ne clignote pas lorsque le câble de charge USB est connecté :

- La batterie est entièrement chargée, prête pour jusqu'à 150 utilisations.
- La batterie est déchargée et il faudra plusieurs minutes pour accuser réception du câble de charge USB.
- Le câble de charge USB n'est pas correctement connecté. Vérifiez la prise électrique / la prise USB et le port de charge.

Si IRIS™ 2 est tombé dans l'eau et que le port de charge est mouillé :

- Séchez-le et continuez à l'utiliser. IRIS™ 2 est complètement étanche et le port de charge est entièrement scellé.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

ENREGISTRER LA GARANTIE

Pour activer votre garantie limitée de 2 ans, rendez-vous sur foreo.com/product-registration pour plus d'informations.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

FOREO garantit cet appareil pour une période de DEUX (2) ANS après la date d'achat d'origine contre les défauts dus à un défaut de fabrication ou de matériaux résultant d'une utilisation normale de l'appareil. La garantie couvre les pièces de travail qui affectent le fonctionnement de l'appareil. Elle ne couvre PAS la détérioration esthétique causée par l'usure normale ou les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation ou une négligence. Toute tentative d'ouverture ou de démontage de l'appareil (ou de ses accessoires) annulera la garantie.

Si vous découvrez un défaut et informez FOREO pendant la période de garantie, FOREO remplacera gratuitement l'appareil, à sa discrétion. Les réclamations sous garantie doivent être étayées par des preuves raisonnables que la date de la réclamation se situe dans la période de garantie. Pour valider votre garantie, veuillez conserver votre reçu d'achat original avec ces conditions de garantie pendant toute la durée de la période de garantie.

Pour réclamer votre garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur www.foreo.com, puis sélectionner l'option de réclamation de garantie. Les frais d'expédition ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute à vos droits statutaires en tant que consommateur et n'affecte en rien ces droits.

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE

Élimination des anciens équipements électroniques (applicable dans l'UE et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte des déchets séparés).




Le symbole de la poubelle barrée indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager, mais plutôt être apporté au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine qui pourraient être causées par une manipulation inappropriée des déchets du produit. Le recyclage des matériaux contribuera également à préserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre service local d'élimination des déchets ménagers ou votre lieu d'achat.

RETRAIT DE LA BATTERIE

REMARQUE : Ce processus n'est pas réversible. L'ouverture de l'appareil annulera sa garantie. Cette action ne doit être entreprise que lorsque l'appareil est prêt à être éliminé.

Étant donné que cet appareil contient une batterie lithium-ion, la batterie doit être retirée avant d'être mise au rebut et ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères. Pour retirer la batterie, retirez la base, retirez le couvercle en silicone, ouvrez la coque en plastique et retirez la batterie pour la jeter conformément à la réglementation environnementale locale. Portez des gants pendant ce processus pour votre sécurité. Des instructions visuelles détaillées sont fournies ci-dessous :

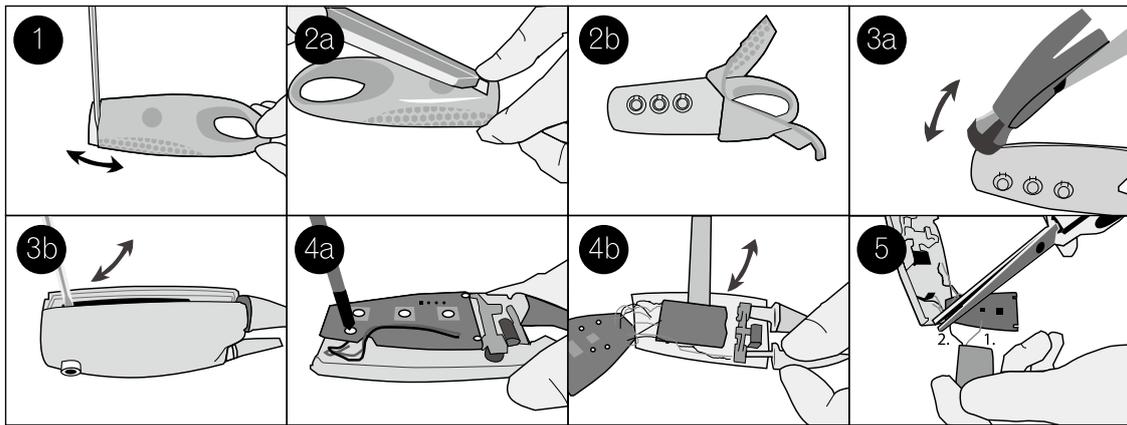

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX :	Silicone Alimentaire, Polymère PBT, PC + ABS
COULEUR :	Menthe, Fuschia, Rose Perle
TAILLE :	120×39×32mm
POIDS :	71g
BATTERIE :	Li-Ion 200 mAh 3,7V
ÉVALUÉ :	5V DC, 1 W
TEMPS UTILISATEUR :	Jusqu'à 150 utilisations
VEILLE : FRÉQUENCE:	90 jours
INTERFACE :	183Hz
PULSATIONS/MIN :	3 boutons Jusqu'à 11 000

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'UTILISATION

TEMPÉRATURE :	5° à 40° Celsius
HUMIDITÉ :	40% à 80%
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE :	800 à 1060 hPa

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES POUR LE STOCKAGE ET L'EXPÉDITION

TEMPÉRATURE :	- 10° à 50° Celsius
HUMIDITÉ :	30% à 80%
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE :	500 à 1 060 hPa

AVERTISSEMENT

Les utilisateurs de cet appareil le font à leurs risques et périls. Ni FOREO ni ses détaillants n'assument aucune responsabilité pour toute blessure ou dommage, physique ou autre, résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de cet appareil. En outre, FOREO se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter de temps à autre des modifications à son contenu sans obligation d'informer quiconque de ces révisions ou modifications.

Le modèle peut être modifié pour des améliorations sans préavis.

©2022 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.

EU DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

US DISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207
AUSTRALIA.

DESIGNED AND DEVELOPED BY FOREO SWEDEN.

MANUFACTURED FOR FOREO AB. WWW.FOREO.COM

WWW.FOREO.COM