

FOREO
SWEDEN


UFO™ 2

İSVEÇ GÜZELLİK TEKNOLOJİSİ
POWER MASKE TERAPİ CİHAZI



ONLINE KILAVUZ

KULLANIM KILAVUZU

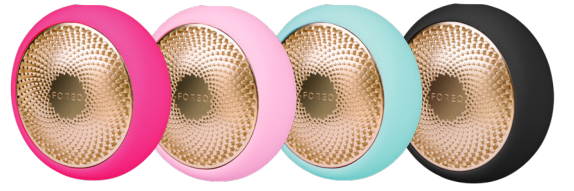

BAŞLANGIÇ

UFO™ 2'yi satın alarak olağanüstü bir cilt bakımı keşfetme yolunda ilk adımı attığınız için tebrikler. Evinizin rahatlığında geliştirilmiş power maske teknolojisinin tüm avantajlarından yararlanmaya başlamadan önce lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okumak için birkaç dakikanızı ayırın.

Lütfen KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN ve bu ürünü sadece bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın.

UYARI: BU CİHAZ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞE İZİN VERİLMEMEKTEDİR.

UFO™ 2 GENEL BAKIŞ

Ultra hızlı ısınma ve daha da geniş bir LED ışık spektrumu ile yeniden tasarlanan UFO™ 2, saniyeler içinde size harika bir cilt sunan devrim niteliğinde bir maske cihazıdır. Gelişmiş Hyper-Infusion Teknolojisine sahip UFO™ 2, maskenizin etkisini arttırmak için Termo-Terapi ve Kriyo-Terapi'yi T-Sonic™ titreşimlerle birleştirir. 8 farklı LED ışıkla daha da geliştirilmiş olan UFO™ 2, sadece 90 saniyede arınmış, ısıltılı bir cildi ortaya çıkarır!

UFO™ 2 İLE TANIŞIN

EVRENSEL GÜÇ DÜĞMESİ

Cihazı açar, kapatır ve cihazı Bluetooth moduna geçirir ve bakım rutinini seçer.

ULTRA-HİJYENİK SİLİKON

Bakterilere dayanıklı ve süper yumuşak.

T-SONIC™ TİTREŞİML

Cildin parlaklığını arttırmak için yatıştırıcı bir yüz masajı sunar.

ŞARJ NOKTASI

2.5 saat şarj başına 40 kullanıma kadar.

FULL-SPECTRUM LED IŞIK

Arınmış bir cilt için gözle görülür şekilde cildinizin gençleşmesine yardımcı olur.

TERMO-TERAPİ

Maske bileşenlerinin emilimini arttırmak için cildin yumuşamasını sağlar.

GÖSTERGE IŞIKLARI

Cihazınızın hangi maske terapisine ayarlandığını belirtmek için farklı renkte ışıklar yanar.

ŞEFFAF HALKA

UFO™ Power Aktif Maske'yi sabitler.


KRİYO-TERAPİ

Gözeneklerin görünümünü küçültür ve daha sıkı görünen bir cilt sunar.




UFO™ POWER AKTİF MASKE

UFO™ ile kullanım için özel olarak formüle edilmiş yumuşak hidrosel maskeler.

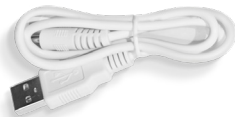


USB ŞARJ KABLOSU

USB kablo ile dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde şarj edin.

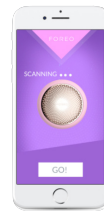

İTERAKTİF UYGULAMA

Önceden programlanmış power maske rutinlerini cihazla senkronize eder.

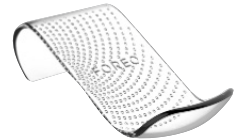

ŞIK TASARIMLI STAND

UFO™ 2'yi korur ve hızlı kurumasına yardımcı olur.

CİHAZINIZIN KİLİDİNİ AÇIN

İlk kullanımdan önce, cihazınızın kilidini açmak ve kaydetmek için FOREO For You mobil uygulamasını indirin. Şu basit adımları uygulayın;

1. FOREO For You uygulamasını cep telefonunuza indirin
2. Hesabınıza giriş yapın veya yeni bir hesap için kaydolun
3. Cihaz ekleyin (ekranınızın üstünde)
4. Cihaz serisini seçin
5. Cihazınızı mobil uygulamaya bağlamak için Güç düğmesini basılı tutun
6. Satın alma bilgilerini doldurun

Cihazınız artık kullanıma hazırdır!

www.foreo.com/app



NASIL KULLANILIR UFO™ POWER AKTİF MASKELER



Şeffaf halkayı UFO™ 2'den ayırın.



UFO™ Power Aktif Maske'yi paketinden çıkarın.



Şeffaf halka yardımıyla maskeyi FOREO logosu yukarı bakacak şekilde yerleştirin.



Power maske terapisinin tadını çıkarın!

Temiz ve kuru bir cilt ile başlayın. En iyi sonuçlar için cildinizi önce LUNA™ ile temizlemenizi öneririz.

1. Cihaza sabitlenmiş maske yardımıyla maske özünü eşit bir şekilde dağıtarak UFO™ 2'yi cilt üzerinde nazikçe gezdirin.
2. UFO™ 2 cihazı ile maske formülünü cildinize masaj yaparak uygulayın. Cihazı çeneden başlayarak ve ardından sağ yanak yönünde ve daha sonra alın bölgesine doğru hareket ettirerek saat yönünde bir daire çizin. Sol yanak ardından çene ve boyun bölgesine doğru devam edin. Bu hareketi terapi bitine kadar tekrar edin.
3. Kalan maske özünü cildinize masaj yapın veya fazla özünü pamuk yardımı ile alın. Dilerseniz sevdiğiniz bir nemlendirici uygulayarak terapinizi tamamlayın.

* Göz maskesi için cihazı sağ ve sol göz etrafında geçiş yaparak tüm göz çevresinde terapi bitine kadar nazikçe gezdirin.




FOREO KAĞIT MASKELER

1. FOREO kağıt maskenizi nazikçe açın, göz ve ağız çevresini ayarlayarak yüzünüze yerleştirin.
2. UFO™ 2 cihazını kullanarak maske formülünü cildinize dairesel hareketlerle masaj yaparak dağıtın. Cihazı çene bölgenizden başlayarak daha sonra sağ yanağa ve alına doğru hareket ettirerek yüz çevrenizde saat yönünde bir daire çizin. Sol yanaktan çeneye doğru devam edin. Terapi bitene kadar bu hareketi tekrarlayın.
3. Kağıt maskeyi dilerseniz 10 dakika cilt üzerinde bekletin veya atın. Kalan maske özünü nazikçe cildinize sürün ya da fazla esansı bir pamuk yardımı ile alın. İsterseniz rutininizi sevdiğiniz bir nemlendirici ile tamamlayın.


Geliştirilmiş Sıcaklık Kontrolü sayesinde artık UFO™ 2' yi çoğu kağıt maske ile kullanabilirsiniz! *

* NOT: Sıcak ve soğuk, farklı cilt bakım ürünlerini farklı şekilde etkiler ve formül içeriğinde tehlikeye neden olabilir. İdeal güvenlik için UFO™ 2 ile kullanmadan önce sıcaklığın FOREO'ya ait olmayan herhangi bir maske üzerindeki etkilerini araştırmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

FOREO FOR YOU MOBİL UYGULAMASI

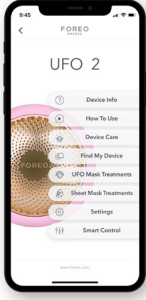


FOREO For You mobil uygulaması; UFO™ 2 cihazınızın nasıl kullanılacağı ve bakımının nasıl yapılacağı, ayarların nasıl kontrol edileceği, rehberli rutinlere nasıl erişileceği ve cihazınızın yerini kaybetmeniz durumunda nasıl bulunacağıyla alakalı talimatlar sunar.

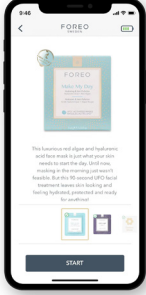

BAKIMLAR

Her UFO maskesine karşılık gelen 14 önceden programlanmış güç maskesi bakımı arasından seçim yapın. Bakımlar, seçtiğiniz maskeye bağlı olarak 90 saniye veya 2 dakika sürer. Uygulama, her teknolojinin faydalarını açıklayan bakım boyunca size rehberlik ederken tek yapmanız gereken rahatlamak ve keyfini çıkarmaktır.

Bir UFO™ 2 bakımı yeterli olmadıysa rutinin tamamlanmasından 30 saniye sonra evrensel güç düğmesine tekrar basarak aynı tedaviyi yeniden başlatabilirsiniz!

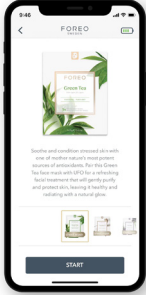

KAĞIT MASKE

Bakımlar sekmesine benzer şekilde, her bir kağıt maskeye karşılık gelen önceden programlanmış 5 bakım arasından seçim yapın.




AYARLAR

Çevrimdışı kullanım için UFO™ 2 cihazınızda 8 maske bakımına kadar tasarruf edin!

- Make My Day ve Call It a Night, ilk iki göstergesi ışığına önceden programlanmıştır
- Üçüncü ışık, özelleştirilmiş bakımınız için ayrılmıştır
- Artı düğmesine tıklayarak başka bir maske bakımı ekleyin


Güç düğmesine basılarak rutinlere çevrimdışı erişilebilir. Örneğin, 5. yuvaya kaydettiğiniz rutine erişmek istiyorsanız, güç düğmesine 5 kez basın (5 göstergesi ışığının tümü yanacaktır) ve önceden programlanmış bakım hemen başlayacaktır.

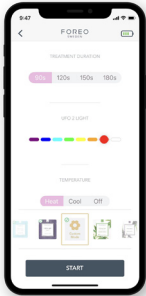

ÖZEL MOD

Tercihlerinize göre tek tek teknolojileri seçerek kendi güç maskesi rutininizi oluşturun ve çevrimdışı modda kullanın;

- Bakım süresi: 90-120-150-180 saniye
- 8 LED ışık: Mor, Mavi, Camgöbeği, Yeşil, Sarı, Turuncu, Kırmızı, Beyaz
- Sıcaklık: Isıtma, Soğutma veya KAPALI
- T-Sonik titreşimler: Düşük veya Yüksek

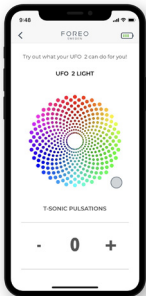

AKILLI KONTROL

Tüm UFO™ 2 özelliklerini deneyin: tam spektrumlu LED, T-sonic™ titreşim, soğutma veya ısıtma!


UFO™ 2' Yİ TEMİZLEME

UFO™ 2'yi her kullanımdan sonra iyice temizleyin. Hem cihazı ve hem de şeffaf halkayı sabun ile yıkayın ve ardından su ile durulayın. Tüy bırakmayan bir bez ya da havlu ile kurulayın. En iyi sonuçlar için kullanımdan sonra cihazı FOREO Silikon Temizleme Spreyi ile temizlemenizi, ardından ılık su ile durulamanızı ve cihazı kuruması için standa yerleştirmenizi öneririz.

NOT: Cildi tahriş edebileceği ve silikona zarar verebileceği için asla alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünleri kullanmayın.

FOREO MASKELERİ

Daily Duo COLLECTION

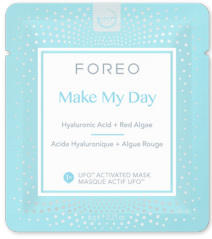

Make My Day

- Nemlendirici ve Kirlilik Önleyici
- Hyaluronik Asit + Kırmızı Yosun
- Kuruluk ve nem kaybı için ideal



Call It a Night

- Canlandırıcı ve Besleyici
- Ginseng + Zeytinyağı
- İnce çizgiler ve kuruluk için ideal

Advanced COLLECTION 2.0



H2Overdose

- Ultra hidratante
- Ácido hialurónico, seta de las nieves, ceramida, vitamina E y vitamina B5
- Ideal para piel seca y deshidratada




Matte Maniac

- Ekstra Arındırıcı
- Kömür + Cadı Fındığı + Centella Asiatica + Kar Lotusu + Krizantem
- Lekeler ve genişlemiş gözenekler için idealdir



Glow Addict

- Gelişmiş Parlatma
- İnci Özütü + Niasinamid + E Vitamini + C Vitamini + Jojoba Yağı
- Donukluk ve parlaklık kaybı için ideal

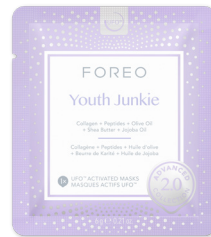

Youth Junkie

- Yoğun Yenileme
- Kolajen + Peptitler + Zeytinyağı + Shea Yağı + Jojoba Yağı
- Kırışıklıklar ve kuruluk için ideal



Shimmer Freak

- Aydınlatıcı Göz Mükemmelleştirici
- Kafein + Gül Suyu + Niasinamid + B5 Vitamini + Kızılçık Özütü
- Koyu halkalar ve şişlikler için ideal



Acai Berry

- Pürüzsüzleştirici
- Shea Yağı + Jojoba Tohumu Yağı + Yeşil Çay + Tripeptid + Gotu Kola
- Azalmış elastikiyet ve donuk ciltler için idealdir



Bulgarian Rose

- Nemlendirici
- Jojoba Tohumu Yağı + Hyaluronik Asit + E Vitamini + Zeytinyağı + İpek Amino Asitleri
- Nem kaybı ve donukluk için ideal



Manuka Honey

- Canlandırıcı
- Allantoin + Betain + 17 Amino Asit + Pantenol
- Kuru ve yaşlanan ciltler için idealdir



Green Tea

- Arındırıcı
- Ulmus Özü + Çuha Çiçeği Yağı + Çam İğnesi Özü + Kudzu Kökü
- Yağlılık ve lekeler için idealdir



Cannabis Seed Oil

- Rahatlatıcı
- Papatya + C Vitamini + E Vitamini + Allantoin
- Akne, kızarıklık ve hassas ciltler için idealdir



Coconut Oil

- Besleyici
- Baobab Tohumu Yağı + Jojoba Tohumu Yağı + Tatlı Badem Yağı + Zeytinyağı + Shea Yağı + Squalane + Seramidler + Kuşburnu Yağı
- Kuruluk ve nem kaybı için ideal

ÖNEMLİ İDEAL GÜVENLİK İÇİN:

- Bir cilt rahatsızlığınız veya herhangi bir tıbbi endişeniz varsa kullanmadan önce lütfen bir cilt uzmanına danışın.
- UFO™ 2 ile bakımınız konforlu olmalıdır – herhangi bir rahatsızlık yaşarsanız derhal kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.
- Göz altı bölgesinde kullanırken özen gösterin ve göz ya da göz kapağınız ile temasından kaçının.
- Cihaz açık durumdayken asla doğrudan cilde/ yüze yerleştirilmemelidir.
- Hijyen nedeniyle, UFO™ 2'nizi başka biriyle paylaşmamanızı öneririz.
- UFO™ 2 cihazını doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya veya aşırı sıcak suyu maruz bırakmayın.
- UFO™ 2 ısıtılmış bir yüzeye sahiptir. Isıya duyarlı kişiler bu cihazı kullanırken dikkatli ve özenli olmalıdır.
- FOREO, UFO™ 2 cihazlarının güvenliğini ve etkinliğini FOREO'ya ait olmayan kağıt maske ve/ veya cilt bakım ürünleriyle değerlendirmemiş ve test etmemiştir. Bu cihazın, FOREO'ya ait olmayan maske ve cilt bakım ürünleri ile kullanımdan doğacak riskleri size aittir.
- Bu cihaz, çocuklar veya fiziksel ve zihinsel yetenekleri sınırlı kişiler tarafından ya da yakınında kullanıldığında yakın denetim gerektirir.
- Bu ürün herhangi bir şekilde hasar görmüş ise kullanmayı bırakın. Üründe servis bakımı gerektirecek bir parça yoktur.
- Bu cihazı sadece bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanım amacına uygun olarak kullanın. Sorunuza cevap bulamazsanız veya cihazın çalışmasıyla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen foreo.com/support adresini ziyaret edin.

SORUN GİDERME

UFO™ 2' nin performansındaki değişikliklerde alınabilecek önlemler.

Evrensel güç düğmesine basıldığında UFO™ 2 etkinleştirilmezse:

- Cihaz bataryası bitmiştir. Işık sabit olarak yanana kadar UFO™ 2'nizi USB şarj kablosuyla şarj edin. 2.5 saatlik şarj ile 40 terapiye kadar kullanım sağlar.

UFO™ 2'niz kapanmazsa ve / veya arayüz düğmeleri yanıt vermezse:

- Mikroişlemci geçici olarak arızalıdır. Cihazı yeniden başlatmak için güç düğmesine basılı tutun.

UFO™ 2'niz FOREO For You uygulaması ile senkronize olmazsa:

- Cihazınızın tamamen şarj olduğundan ve Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
- Yeniden bağlanmayı denemek için Bluetooth'unuzu kapatıp tekrar açın.
- FOREO uygulamasını kapatın ve ardından işlemi yeniden başlatmak için yeniden açın.
- Uygulamayı kaldırıp yeniden yükleyin - uygulamanın sadece güncellenmesi gerekiyor olabilir.
- Uygulamayı silip yeniden yükledikten sonra telefonunuzu yeniden başlatın.
- Telefonunuzdaki çerezleri ve önbelleği temizleyin.
- Cep telefonunuzun işletim sisteminin en son sürümüne güncellendiğinden emin olun.

GARANTİ ŞARTLARI VE KOŞULLARI

KAYIT GARANTİSİ

2-Yıl Sınırlı Garantinizi etkinleştirmek için FOREO For You uygulamasını indirerek ve talimatları takip ederek kaydolun.

2-YIL SINIRLI GARANTİ

FOREO bu cihazı, orijinal satın alma tarihinden itibaren İKİ (2) YIL süreyle (ulusal hukukun daha uzun asgari garanti gerektirdiği ülkeler hariç), cihazın normal Kullanımından kaynaklanan işçilik veya malzeme kusurlarından kaynaklanan kusurlara karşı garanti eder. Garanti, cihazın işlevini etkileyen çalışma parçalarını kapsar. Adil aşınma ve yıpranma nedeniyle meydana gelen kozmetik bozulmaları veya yanlış kullanım, kaza ya da ihmal kaynaklı hasarları KAPSAMAZ. Cihazı (veya aksesuarlarını) açma veya parçalara ayırma girişimleri garantiyi geçersiz kılar.

Garanti süresi içinde bir kusur tespit edip FOREO'ya bildirirseniz, FOREO incelemelere bağlı olarak cihazı ücretsiz değiştirir. Garanti kapsamındaki talepler, talep tarihinin garanti süresi içinde olduğuna dair kanıtlarla desteklenmelidir. Garantinizi doğrulamak için lütfen orijinal satın alma makbuzunuzu garanti süresi boyunca bu garanti koşullarıyla birlikte saklayın.

Garantinizi talep etmek için www.foreo.com adresinden hesabınıza giriş yapmalı ve ardından garanti talebi sekmesinden talebinizi gerçekleştirmelisiniz. Teslimat masrafları iade edilmez. Bu taahhüt, tüketici olarak yasal haklarınıza ek olarak sunulur ve tüketici haklarınızı hiçbir şekilde etkilemez.

GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ


Eski elektronik aletlerin imhası (AB ve farklı atık toplama sistemi olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir).



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kovası sembolü, bu cihazın evsel atık olarak işlem görmemesi gerektiğini, bunun yerine elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına getirilmesi gerektiğini belirtir. Bu cihazın doğru şekilde imha edildiğinden emin olarak, ürünün uygun olmayan imhadan kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçlarının önlenmesine yardımcı olacaksınız. Materyallerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır.

Cihazınızın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki evsel atık imha hizmetlerine veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

CİHAZ PİLİNİN ÇIKARILMASI

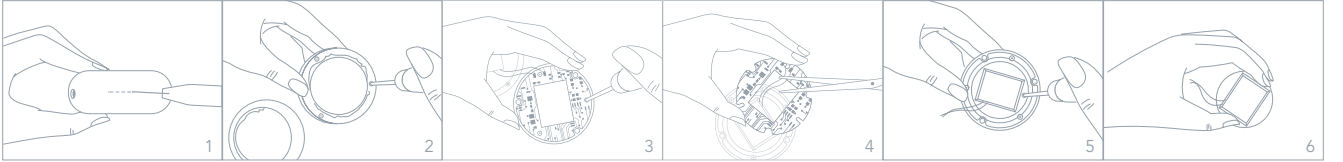

TEKNİK ÖZELLİKLER

MALZEMELER:	Vücut için güvenli silikon ve PC + ABS, Alüminyum Alaşım	SICAKLIK:	5 - 45 Derece Santigrat
RENK:	Pearl Pink/Mint/Fuchsia/Black	KULLANIM:	Şarj başına 40 kullanı ma kadar
BOYUT:	72,5 mm x 31,4 mm	BEKLEME:	180 gün
AĞIRLIK:	146,2g	FREKANS:	180 Hz
PİL:	Li-Ion 1200mAh 3.7V	MAKS. SES DÜZEYİ:	<50 dB
		ARAYÜZ:	1-düğme

Yasal Uyarı: Bu cihazın riskleri kullanıcının sorumluluğundadır. FOREO ya da perakendecileri doğrudan veya dolaylı olarak bu cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkan fiziksel veya diğer türlü yaralanma ve hasar için hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmez. Ayrıca FOREO, herhangi bir kişiyi değişikliklerden haberdar etme zorunluluğu olmaksızın bu yayını yenileme ve içeriğinde zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

DİKKAT: Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan bu bölümdeki değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

NOT: Bu ekipman test edilmiştir ve FCC kurallarının 15. bölümüne uygun olarak B sınıfı dijital cihaz sınırlamalarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar bir konut alanında zararlı radyo parazitlerine karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, ayrıca talimatlara uygun kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı radyo parazitine neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağına dair bir garanti yoktur. Eğer bu ekipman, radyo ve televizyon ile alıcı iletişimde zararlı radyo paraziti nedeniyle olursa, bu durum ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilir, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını alarak radyo parazitini gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının takılı olduğundan farklı devredeki bir prize takın.
- Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Model, geliştirmeler için haber verilmeksizin değiştirilebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

UFO™ 2 BAŞLANGIÇ

1. UFO™ 2 CİHAZIMI ALDIKTAN SONRA NE YAPMALIYIM?

Daha akıllı bir cilt bakımını keşfettiğiniz için tebrikler! İlk olarak, cihazınızın kilidini açmak ve kaydetmek için FOREO For You uygulamasını ücretsiz olarak indirin, (Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki 'UYGULAMA' bölümüne bakınız)

2. İLK TERAPİYE NASIL BAŞLARIM?

Öncelikle yüz ve boyun bölgenizi dikkatlice temizleyin ve kurulayın - en iyi sonuçlar için cildinizi önce LUNA™ ile temizlemenizi öneririz. Ardından UFO™ Power Aktif Maske'yi UFO™ 2 cihazınıza sabitleyin veya yüzünüze bir kağıt maske yerleştirin. Son olarak UFO™ 2 maske rutininizi uygulama aracılığıyla etkinleştirin ve talimatları adım adım takip edin. Daha fazla bilgi için yukarıda bulunan Nasıl Kullanılır kılavuzuna bakınız.

3. UFO™ 2 CİHAZIMI NASIL AÇAR / KAPATIRIM?

Cihazı açmak için evrensel güç düğmesine basın, kapatmak içinse evrensel güç düğmesine 3 saniye basılı tutun. Önceden programlanmış bir maske rutini tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

4. UFO™ 2 CİHAZ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

1 adet UFO™ 2 Cihazı, 1 adet USB Şarj Kablosu, 1 adet Make My Day Maske, 1 adet Kullanım Kılavuzu, 1 adet Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve 1 adet Stand.

UFO™ 2 CİHAZI

5. UFO™ 2 CİHAZIMI NE SIKLIKLA KULLANABİLİRİM?

UFO™ 2 power maske terapileri sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez kullanım için geliştirilmiştir. Bununla birlikte cildinizin ihtiyaçlarına ve kişisel tercihlerinize göre daha az ya da daha çok kullanabilirsiniz.

6. HER BİR TERAPİ NE KADAR SÜRER?

Bakımlar, seçtiğiniz maskeye bağlı olarak 90 saniye veya 2 dakika sürer.

7. HER UFO™ 2 TERAPİSİ AYNI MI?

Hayır, en etkili sonuçlar için her bir FOREO maskesi benzersiz bir terapi rutini sunar.

8. UFO™ 2 CİHAZI HASSAS CİLTLER İÇİN GÜVENLİ Mİ?

UFO™ 2 cihazlarının kullanımı güvenlidir ve tüm cilt tipleri için uygundur. Ayrıca, cildinizin özel ihtiyaçlarına göre farklı FOREO Maskeler'den birini seçebilirsiniz ve cildinizin ihtiyaçlarına hitap eden kendi özelleştirilmiş terapi rutininizi oluşturabilirsiniz.

9. UFO™ 2 CİHAZI GÖZ BÖLGESİ İÇİN KULLANILIR MI?

Evet, UFO™ 2 cihazının göz çevresinde kullanımı güvenlidir. Minimum basınç uygulayarak göz çevresinde nazikçe gezdirmenizi öneririz.

10. UFO™ 2 CİHAZI PLASTİK CERRAHİ, BOTOKS VEYA MİNERAL DOLGULARDAN SONRA KULLANIR MI?

UFO™ 2 cihazları tüm cilt tiplerine uygun, nazik bir yüz bakımı sunar. Bununla birlikte, yakın zamanda herhangi bir tıbbi prosedür geçirdiyseniz kullanmadan önce doktorunuza danışın.

11. FOREO LUNA™ CİHAZIMI UFO™ 2 İLE KULLANABİLİR MİYİM?

Evet! UFO™ ve LUNA™ birlikte daha etkilidir - LUNA™ yüz temizleme fırçası, ölü deriyi nazikçe temizler, gözenekleri açar, kir ve yağlı %99.5 oranında temizleyerek UFO™ 2 maske terapisi için mükemmel bir cildi ortaya çıkarır.

12. UFO™ 2 VE UFO™ mini 2 ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Hem UFO™ 2 hem de UFO™ mini 2, 90 saniyede harika bir maske terapisi sunar. UFO™ 2, ayrıca gözeneklerin görünümünü küçültmek ve daha sıkı görünen bir cilt sağlamak için anında soğutan Kriyo-Terapi'ye sahiptir.

13. UFO™ CİHAZLARI VE UFO™ 2 CİHAZLARI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

UFO™ cihazlarından farklı olarak, UFO™ 2 cihazları her zamankinden daha etkili bir maske deneyimi sunan ultra hızlı Termo-Terapi ve Kriyo-Terapi ile yeniden tasarlandı. Ayrıca, UFO™ 2, Termo ve Kriyo -Terapi özelliğinin sıcaklığını kişisel tercihlerinize göre ayarlamanıza olanak tanıyan geliştirilmiş sıcaklık kontrolüne sahiptir. Sonuç olarak, artık UFO™ 2' yi birçok farklı kağıt maske ile kullanabilirsiniz.*

UYGULAMA

14. UFO™ 2 CİHAZIMI KULLANMADAN ÖNCE NEDEN FOREO UYGULAMASINI İNDİRMEM GEREKİYOR?

Uygulama ile etkinleştirilen tüm FOREO ürünleri, ilk kullanımda FOREO For You uygulaması aracılığıyla etkinleştirilmeli ve kilidi açılmalıdır. Böylece sahte / kopyalanmış FOREO ürünlerine karşı koruma sağlanmaktadır. Ayrıca uygulama ile cihazların garanti kaydı ve korunması kolaylaşır.

15. UFO™ 2 CİHAZIMI FOREO UYGULAMASI İLE NASIL EŞLEŞTİRİRİM?

FOREO For You uygulamasını akıllı telefonunuza ya da tabletinize indirin ve Bluetooth'u açın. Cihazı açmak için evrensel güç düğmesine bir kez basın. Yanıp sönen beyaz ışık, cihazın eşleştirme modunda olduğunu gösterir. UFO™ 2 cihazınızı kaydetmek ve eşleştirmek için uygulama içeriğindeki talimatları takip edin.

16. UFO™ 2 CİHAZIM UYGULAMA OLMADAN ÇALIŞIR MI?

Evet, cihazınıza kaydettiğiniz 8 rutine manuel olarak erişebilirsiniz. Make My Day bakım rutini açıp etkinleştirmek için evrensel güç düğmesine basın. Tekrar bastığınızda Call It a Night bakımı etkinleşir ve diğer maskeler için de aynı şekilde devam eder. Güçlü maske bakımınız başlamak üzere!

17. POWER MASKE TERAPİMİ KİŞİSELLEŞTİREBİLİR MİYİM?

Evet. Her bir UFO™ Power Aktif Maske ve FOREO Kağıt Maskeler önceden programlanmış bir terapi rutini ile gelse de FOREO For You uygulamasını kullanarak kendi terapi rutininizi oluşturabilir ve Power Maske deneyiminizi kişiselleştirebilirsiniz. Uygulamayı kullanırken tercih ettiğiniz LED ışığı ve T-Sonic™ titreşim seviyesini seçebilir, Termo-Terapi ve Kriyo-Terapi'yi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

SORUN GİDERME VE BAKIM

18. Cihazın etrafında yanıp sönen ışık, UFO™ 2'nin Bluetooth eşleştirme modunda olduğunu veya cihazın şarj edilmesi gerektiğini gösterir. Cihazını senkronize etmek için uygulamadaki talimatları takip edin.

19. UFO™ 2 CİHAZIMI NASIL ŞARJ EDERİM?

UFO™ 2 cihazları USB ile şarj edilebilir ve iki buçuk saatlik şarj ile 40 kullanıma kadar terapi sunar.

20. UFO™ 2 CİHAZIMI NASIL TEMİZLERİM?

Hem cihazı ve hem de şeffaf halkayı sabun ile yıkayın, ardından ılık su ile durulayın. Tüy bırakmayan, aşındırma yapmayan bir bez ya da havlu ile kurulayın. En iyi sonuçlar için kullanımdan sonra cihazı FOREO Silikon Temizleme Spreyi ile temizlemenizi, ardından ılık su ile durulamanızı ve cihazı kuruması için standı yerleştirmenizi öneririz. Cildi tahriş edebileceği ve silikona zarar verebileceği için asla alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünleri kullanmayın.

FOREO MASKELER

21. FOREO MASKELER YENİDEN KULLANILIR MI?

Her bir UFO™ Power Aktif Maske ve FOREO Kağıt Maske yalnızca tek kullanımlıktır. Bununla birlikte, bir UFO™ 2 terapisi yeterli gelmezse aynı terapiyi yeniden başlatmak için rutin bittikten sonra 30 saniye içinde evrensel güç düğmesine tekrar basın!

22. UFO™ 2 CİHAZIMI KULLANDIKTAN SONRA MASKE ÖZÜNÜ YIKAMAM GEREKİR Mİ?

Hayır, Hyper-Infusion Teknolojisi maske özünün cilde daha fazla ve daha hızlı emilmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Terapiden sonra kalan maske özü ile cildinize masaj yapın veya fazla kalan özü pamuk yardımıyla alın.

*NOT: Sıcak ve soğuk, farklı cilt bakım ürünlerini farklı şekilde etkiler ve formül içeriğinde tehlikeye neden olabilir. (İdeal güvenlik için UFO™ 2 ile kullanmadan önce ısının FOREO'ya ait olmayan herhangi bir maske üzerindeki etkilerini araştırmanızı şiddetle tavsiye ederiz.)

©2021 FOREO AB. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

AB DAĞITICI: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, İSVEÇ

ABD DAĞITICI: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, ABD

AU DAĞITICI: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AVUSTRALYA

FOREO İSVEÇ TARAFINDAN TASARLANMIŞ VE GELİŞTİRİLMİŞTİR.

FOREO LTD. ŞTİ. İÇİN ÜRETİLMİŞTİR.

WWW.FOREO.COM