


FAQ™

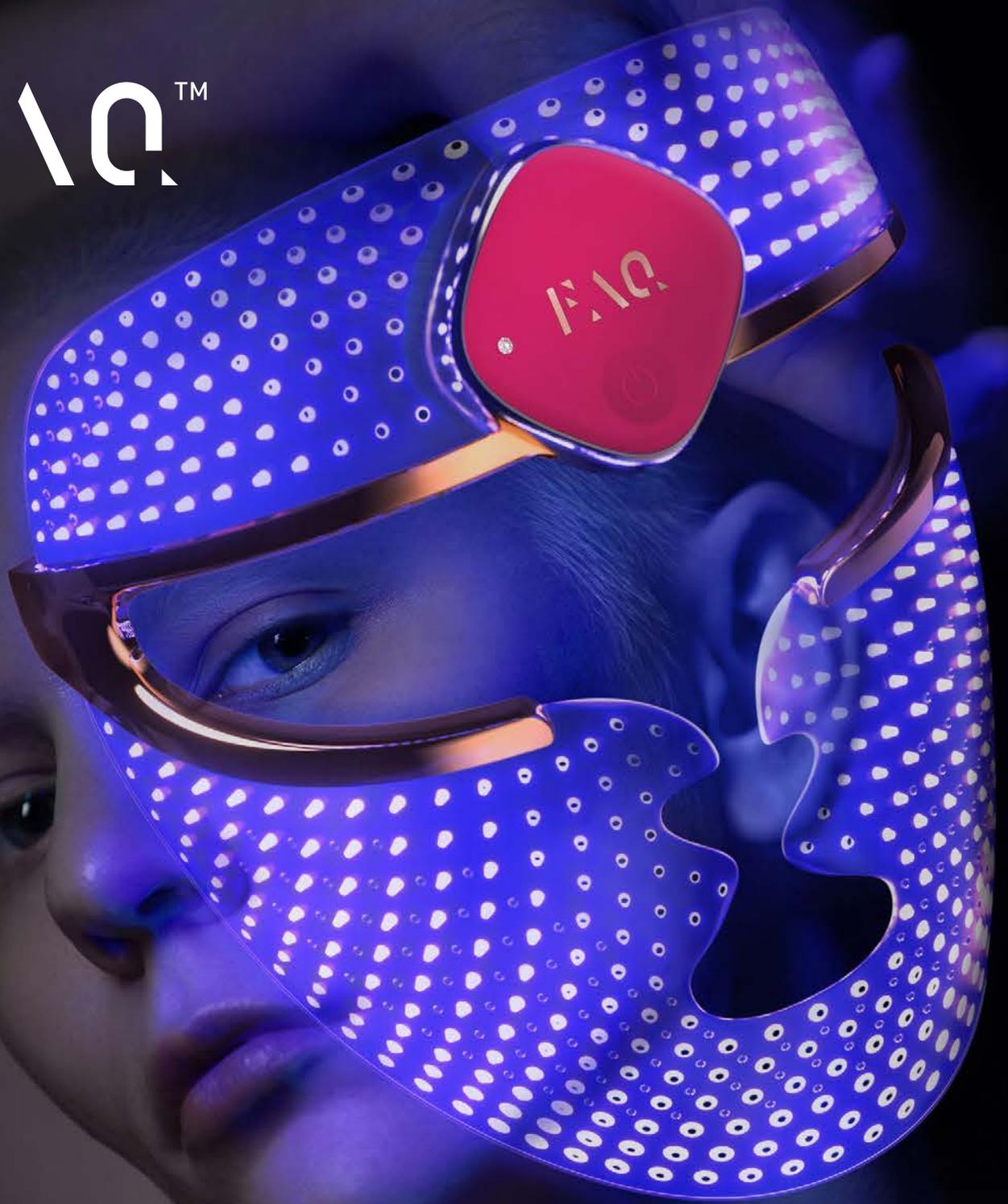

FAQ™ 201
MÁSCARA LED DE SILICONE

MANUAL ONLINE

MANUAL DE UTILIZADOR COMPLETO

INÍCIO

Parabéns por teres tomado o primeiro passo numa nova era de antienvhecimento ao adquirires o FAQ™ 201. Antes de começares a desfrutar de todos os benefícios da tecnologia de cuidados de pele profissional no conforto da tua casa, dispões de alguns momentos para leres atentamente as instruções neste manual.

LÊ TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO e utiliza este produto apenas para a sua utilização pretendida conforme descrito neste manual.

UTILIZAÇÃO PRETENDIDA: O FAQ™ 201 é um dispositivo de venda livre que emite energia nas regiões vermelhas, verdes e azuis do espectro, e destina-se a tratar rugas e/ou manchas no rosto.

AVISO: NÃO É PERMITIDA NENHUMA MODIFICAÇÃO NESTE EQUIPAMENTO.

VISÃO GERAL DO FAQ™ 201

Esta máscara ultra leve e sem fios, que apresenta LED vermelha, verde e azul, ajuda a revitalizar a tez em minutos. Feita com silicone flexi-fit, molda os teus contornos faciais para garantir uma cobertura super leve. Move-te livremente enquanto desfrutas de um tratamento facial LED - a qualquer momento, em qualquer lugar.

CONHECE O FAQ™ 201

BOTÃO DE ENERGIA UNIVERSAL

Pressiona uma vez para ligares. Pressiona novamente para alterares as cores LED. Pressiona durante 3 segundos para desligares.

DESIGN DE OLHOS ABERTOS

Protege os olhos dos comprimentos de onda LED potentes e permite um movimento fácil, já que consegues ver claramente mesmo enquanto utilizas a máscara.

SILICONE FLEXI-FIT

Ultra-higiênico e fácil de limpar. Molda-se ao teu rosto como uma segunda pele transparente para um movimento fácil.



ENTRADA DE CARREGAMENTO

Até 2 horas de utilização por carregamento USB.

ALÇA SEM DESLIZAMENTO

Feita de silicone para o máximo conforto e não puxa o cabelo. Mantém a máscara segura ao teu rosto para que possas movimentar livremente.

600 PONTOS DE LUZ

Pulsam 1000x por segundo e otimizados para garantir que os comprimentos de onda LED penetram uniformemente em todas as áreas do rosto.



Spray de Limpeza de Silicone FAQ™ 60 ml

Utiliza para limpar o teu dispositivo para a máxima higiene



Expositor

Armazena a tua máscara fora da caixa ou exibe-a com orgulho ao apoiá-la no suporte de disposição.



Cabo de Carregamento USB

Carrega a qualquer momento, em qualquer lugar. Inclui uma bolsa acessória.

AVISOS

PARA A MÁXIMA SEGURANÇA:

- As máscaras LED FAQ™ devem ser confortáveis – caso sintas desconforto ou vermelhidão contínua na pele, descontinua a utilização imediatamente e consulta um médico.
- Não utilizes em ulcerações, lesões ou feridas de pós-operatório.
- Não utilizes caso tenhas sensibilidade à luz ou tenhas queimaduras solares ou a pele inflamada.
- Não olhes diretamente para as luzes LED.
- Este produto não deve ser utilizado por crianças. É necessária uma supervisão rigorosa ao utilizar este dispositivo perto de crianças ou de pessoas com algum grau de deficiência física ou mental.
- Por questões de higiene, não recomendamos que partilhes o teu FAQ™ 201 com ninguém.
- Evita deixar o teu FAQ™ 201 exposto à luz solar direta, ao calor extremo ou a água a ferver.
- Descontinua a utilização caso este produto pareça de algum modo danificado.
- O produto não contém partes sujeitas a manutenção.
- Não modifiques nem tentes desmontar o produto, já que esta ação poderá causar-lhe danos.
- Não utilizes ao conduzir nem a utilizar maquinaria pesada.
- Não insiras nenhum objeto em nenhuma abertura do dispositivo.
- Não utilizes o dispositivo se este sobreaquecer ou se desconfiar que tem uma avaria.
- Este dispositivo deve ser utilizado apenas com um adaptador SELV.
- Recomendamos que os sejam utilizados fornecedores de energia padrão IEC60950 para carregar o dispositivo.
- Antes de carregares, certifica-te de que a ficha e a tomada estão completamente secas. Caso não o faças, poderá ocorrer choque elétrico, curto-circuito ou incêndio.
- Não utilizes o dispositivo enquanto estiver à carga. Interrompe a utilização caso o dispositivo ou o carregador não funcionem adequadamente ou aparentem estar de algum modo danificados. Utiliza apenas o cabo de alimentação fornecido com o teu dispositivo.
- A bateria deve ser removida do dispositivo antes de ser descartada. O dispositivo deve ser desligado da rede elétrica ao remover a bateria, e a bateria deve ser descartada de forma segura.
- Dada a eficiência das máscaras LED FAQ™, recomendamos que não utilizes o FAQ™ 201 durante mais de 15 minutos de cada vez.
- Utiliza esta máscara LED apenas para a utilização pretendida, conforme descrita neste manual. Caso não encontres a resposta para a tua dúvida em particular, ou caso tenhas outras questões relativamente à utilização do dispositivo, consulta faqswiss.com/support

COMO UTILIZAR O FAQ™ 201

REGISTA O TEU DISPOSITIVO

Antes da primeira utilização, descarrega a aplicação móvel FAQ™ Swiss para registares o teu dispositivo e ativares a garantia ao seguires os seguintes simples passos:

1. Descarrega a aplicação FAQ™ Swiss no teu telemóvel ao digitalizares o código QR.
2. Inicia sessão na tua conta ou cria uma.
3. Adiciona o dispositivo (na parte superior do teu ecrã).
4. Escolhe a gama do dispositivo.
5. Pressiona e mantém pressionado o botão de energia para conectares o teu dispositivo à aplicação.
6. Preenche as informações de compra

O teu dispositivo está pronto a ser utilizado!



COMO UTILIZAR

1. Começa com o rosto lavado e seco e aplica o teu primer FAQ™ se o desejares. De seguida, coloca a tua máscara facial LED de silicone do FAQ™ 201 no rosto e fixa-a com a alça.
2. Pressiona o botão de energia universal para ligares a tua máscara. Podes alterar as cores LED ao pressionares rapidamente o botão de novo.
3. Desfruta do teu tratamento facial LED durante até 15 minutos, enquanto prossegues com o teu dia - multitasking no seu melhor. Quando terminares, pressiona o botão de energia universal durante 3 segundos para desligares a tua máscara.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA: 5-15 minutos, 3-5 vezes por semana.

CUIDADO: Não apertes demasiado a alça. Caso contrário, podes danificar a máscara de silicone.



LIMPEZA DO TEU FAQ™ 201

Limpa sempre a tua máscara LED FAQ™ cuidadosamente após cada utilização. Para resultados ideais, recomendamos que borrifes a máscara com o spray de limpeza de silicone FAQ™. De seguida, molha um pano sem fios ou uma toalha com água morna e retira quaisquer resíduos cuidadosamente.

OBSERVAÇÃO: Este produto não é 100% à prova d'água, portanto não o lave em água corrente. Nunca utilizes produtos de limpeza com álcool, petróleo ou acetona, já que podem irritar a pele e danificar o silicone.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

DEVES TOMAR PRECAUÇÕES NO CASO DE OCORREREM ALTERAÇÕES NO DESEMPENHO DO FAQ™:

Se o FAQ™ 201 não estiver ativado ao pressionares o botão universal:

- A bateria está descarregada. Carrega-a, utilizando o cabo de carregamento USB durante até 2 horas até estar totalmente carregada, e, de seguida, reinicia o teu dispositivo ao pressionares o botão universal.

Se não for possível desligar e/ou o botão universal do FAQ™ 201 não responder:

- O microprocessador tem uma falha temporária. Pressiona o botão universal e mantém-no pressionado para reiniciares o dispositivo.

TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA

REGISTO DA GARANTIA

Para ativares a tua Garantia Limitada de 2 anos, regista-a através da aplicação FAQ™ Swiss ou visita [faqswiss.com/product-registration](https://www.faqswiss.com/product-registration) para mais informações.

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS

A FAQ™ Swiss garante este dispositivo durante um período de DOIS (2) ANOS após a data original de aquisição contra defeitos relacionados com fabrico ou materiais com defeito derivados da utilização normal do dispositivo. A garantia cobre peças de funcionamento que afetam o desempenho do dispositivo. NÃO cobre deterioração cosmética causada por desgaste normal ou danos causados por acidentes, utilização indevida ou negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar o dispositivo (ou os respetivos acessórios) anulará a garantia.

Caso detetes um defeito e notifiques a FAQ™ Swiss durante o período de garantia, a FAQ™ Swiss irá, à sua discricção, substituir o dispositivo gratuitamente. As reclamações ao abrigo da garantia devem ser suportadas por provas razoáveis de que a data da reclamação se encontra no período de garantia.

Para reivindicares a tua garantia, deves iniciar sessão na tua conta em www.faqswiss.com e seleccionares a opção para efetuar uma reclamação da garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. Esta ação acresce aos teus direitos previstos pela lei enquanto consumidor e não afeta de nenhum modo tais direitos.

INFORMAÇÕES SOBRE DESCARTE

Descarte de equipamentos eletrónicos antigos (aplicável na UE e noutros países europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos).



PACKAGING IS MADE
OF RECYCLABLE
MATERIAL



GARBAGE WASTE
ELECTRICAL & ELECTRONIC
EQUIPMENT DIRECTIVE



EUROPEAN
CONFORMITY


Este dispositivo não deve ser tratado como resíduo doméstico, mas deve ser encaminhado para o ponto de recolha adequado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. Ao garantir que este dispositivo é descartado corretamente, ajudas a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e saúde humana, que poderão ser causadas por gestão desadequada de resíduos do dispositivo. A reciclagem dos materiais também ajudará a conservar recursos naturais.

Para obteres mais informações sobre a reciclagem do teu dispositivo, contacta o teu serviço de descarte de resíduos domésticos local ou o teu local de compra.

REMOÇÃO DA BATERIA

Observação: Este processo não é reversível. Abrir o dispositivo anulará a sua garantia. Esta ação pode ser desempenhada apenas quando o dispositivo está pronto para ser descartado.

Como este dispositivo contém uma bateria de íão lítio, a bateria deve ser removida antes do descarte e não deve ser colocado juntamente com os resíduos domésticos. Para remover a bateria, corta e remove o a camada exterior do silicone da peça com forma de diamante na testa da máscara. De seguida, corta a cobertura de plástico ao longo da abertura e abre a cobertura. Depois, cota o cabo da bateria, remove a bateria e descarta-a conforme os teus regulamentos ambientais locais. Utiliza luvas durante este processo para a tua segurança. Encontram-se abaixo instruções visuais detalhados:

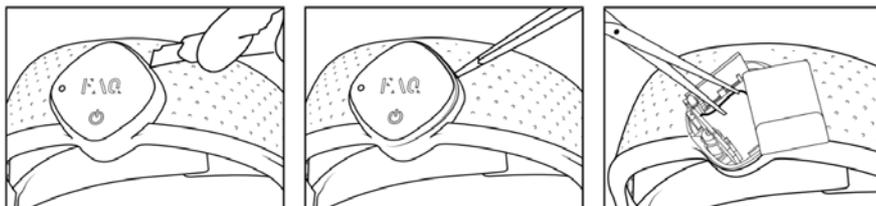

ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|--|
| MATERIAIS: | PC + ABS, Silicone seguro para o corpo | BATERIA: | Bateria de lítio 3.7V com 680mAh |
| COR: | Gold / Pink Ruby | UTILIZAÇÃO: | Até 2 horas de utilização por carregamento |
| DIMENSÃO: | 162 x 100 x 182 mm | MODO DE ESPERA: | 90 dias |
| PESO: | 169 g | NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO: | <50 dB |

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Os utilizadores deste dispositivo utilizam-no por seu próprio risco. Ne a FAQ™ Swiss nem os seus vendedores assumem qualquer responsabilidade ou obrigações por quaisquer lesões ou danos, físicos ou de outro tipo, resultado, direta ou indiretamente, da utilização deste dispositivo. Além disso, a FAQ™ Swiss reserva o direito de rever esta publicação e efetuar alterações periodicamente nos conteúdos expressos neste documento sem obrigação de notificar qualquer pessoa de tal revisão ou alterações.

ATENÇÃO: Alterações ou modificações neste dispositivo não aprovadas expressamente pela parte responsável por conformidade poderão anular a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento.

O modelo poderá ser alterado para melhorias sem aviso prévio.

PERGUNTAS FREQUENTES

ELEMENTOS BÁSICOS

1. O QUE ESTÁ INCLUÍDO NA MÁSCARA LED FAQ™ 200?

1x máscara facial LED FAQ™ 200, 1x spray de limpeza de silicone FAQ™ 60ml, 1x cabo de carregamento USB, 1x manual do utilizador, 1x guia de início rápido.

2. COMO LIGO A MINHA MÁSCARA LED FAQ™ 200?

Pressiona o botão universal na tua máscara LED para a ligares.

3. COMO DESLIGO A MINHA MÁSCARA LED FAQ™ 200?

Pressiona e mantém pressionado o botão de energia universal na tua máscara LED durante 3 segundos para o desligar. O teu dispositivo desligar-se-á automaticamente após 15 minutos.

TRATAMENTO

4. COMO INICIO O MEU PRIMEIRO TRATAMENTO?

Primeiro, lava e seca o rosto e pescoço cuidadosamente e aplica o teu primer FAQ™ se o desejares. De seguida, coloca a tua máscara facial LED FAQ™ 200 no rosto e fixa-a com a alça. Pressiona o botão de energia universal para ligares a tua máscara. Podes alterar as cores LED ao pressionares rapidamente o botão de novo. Desfruta do teu tratamento facial LED durante até 15 minutos enquanto prossegues com o teu dia - para um multitasking no seu melhor. Quando terminares, pressiona o botão de energia universal durante 3 segundos para desligares a tua máscara.

5. POSSO UTILIZAR OS MEUS CUIDADOS DE PELE COM A MÁSCARA LED FAQ™ 200?

Recomendamos que utilizes o primer FAQ™ com a máscara LED FAQ™ 200 devido às suas propriedades antienvhecimento potentes. No entanto, se o desejares, podes utilizar os teus próprios cuidados de pele. Ainda assim, certifica-te de que os produtos de cuidados de pele que utilizas não contêm quaisquer silicones ou ácidos, ou ingredientes fotossensíveis, como Vitamina A, Retinol, AHAs, Peróxido de Benzoílo e Vitamina C.

6. COM QUE FREQUÊNCIA POSSO UTILIZAR A MINHA MÁSCARA LED FAQ™ 200?

Recomendamos que utilizes a tua máscara LED FAQ™ durante 5 a 15 minutos, 3 a 5 vezes por semana para resultados ideais.

7. O QUE É TERAPIA LED?

A terapia LED, ou díodo emissor de luz, é um tratamento de cuidado de pele que utiliza diversos comprimentos de onda de luz. A NASA desenvolveu-a originalmente para experiências com crescimento de plantas em missões espaciais e descobriu posteriormente que era promissora para o tratamento de feridas. Atualmente, a terapia de luz LED é utilizada por esteticistas para ajudar a regenerar a pele do envelhecimento.

8. A TERAPIA LED É SEGURA?

Ao contrário de outras terapias de luz, o LEDs não contêm raios ultravioletas. Portanto, são seguros para utilização frequente. A terapia de luz LED também não causa queimaduras como outros tratamentos antienvhecimento, como peelings químicos, dermoabrasão e terapia de laser.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO

9. O QUE SIGNIFICA A MINHA MÁSCARA LED FAQ™ PISCAR VERMELHO 3 VEZES?

A tua máscara piscará a vermelho 3 vezes para indicar bateria baixa. Carrega a tua máscara utilizando o cabo de carregamento USB fornecido durante até 2 horas ou até estar totalmente carregada.

10. COMO LIMPO O MEU DISPOSITIVO FAQ™?

Limpa sempre a tua máscara LED FAQ™ cuidadosamente após cada utilização. Para resultados ideais, recomendamos que borrifes a máscara com o spray de limpeza de silicone FAQ™. De seguida, molha um pano sem fios ou uma toalha com água morna e retira quaisquer resíduos cuidadosamente.

(OBSERVAÇÃO: Nunca utilizes produtos de limpeza com álcool, petróleo ou acetona, já que podem irritar a pele e danificar o silicone).

©2023 FAQ GmbH. ALL RIGHTS RESERVED / TOUS DROITS RÉSERVÉS / TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. MANUFACTURED FOR / FABRIQUÉ POUR / FABRICADO PARA FAQ GmbH. EU DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN. US DISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA. AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA. MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR / FABRICADO POR : VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINA. DESIGNED AND DEVELOPED BY / CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR / CRIADO E DESENVOLVIDO POR FAQ GmbH.