

FOREO
SWEDEN



ESPADA™ 2

MAVİ LED IŞIKLI SİVİLCE BAKIMI



ÇEVİRİMİÇİ KILAVUZ

TAM KULLANICI KILAVUZU

BAŞLANGIÇ

ESPADA™ 2 ile daha akıllıca bir cilt bakımına ilk adımınızı attığınız için tebrik ederiz. Gelişmiş akne bakımının tüm avantajlarından evinizin rahatlığında yararlanmaya başlamadan önce, lütfen birkaç dakikanızı ayırarak bu kılavuzu inceleyin.

Lütfen KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN ve bu ürünü yalnızca bu kılavuzda açıklanan kullanım amacı doğrultusunda kullanın.

⚠ UYARI: BU EKİPMANDA HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İZİN VERİLMEZ.

ESPADA™ 2 GENEL ÖZETİ

ESPADA™ 2, mavi LED ışığı ve T-Sonic™ titreşimlerin ikili gücünü kullanarak, mevcut sivilceleri, lekeleri ve iltihapları hızlı ve etkili bir şekilde temizler. Aynı zamanda sebum üretimini düzenleyerek ileride oluşabilecek sivilceleri önler ve cildinizi temiz, sağlıklı ve pürüzsüz bir görünüme kavuşturur.

ESPADA™ 2'Yİ TANIYIN

ÖZELLİKLER

MAVİ LED IŞIK

415 nm dalgaboyu, epidermise nüfuz ederek, sivilce oluşumuna neden olan bakterileri kaynağında öldürür.

AKILLI CİLT SENSÖRÜ

Mavi LED'in yalnızca uygulama penceresi ciltle tam temas halindeyken etkinleştirilmesini sağlar.

EVRENSEL DÜĞME

Cihazı açıp kapatır.

T-SONIC™ TİTREŞİMLER

Cilde masaj yapar, dolaşımı uyarır ve cilt yenilenmesini hızlandırmaya yardımcı olur.

DAHİLİ ZAMANLAYICI

Lekelere bakım yapıldığını göstermek için titreşim yayar, böylece bir sonraki sivilceye geçebilirsiniz.

HEDEFLEME IŞIĞI

Sorunlu bölgeye odaklanmayı sağlar ve mavi LED'i son derece hassas bir şekilde o bölgeye yöneltir.

ANTİBAKTERİYEL SİLİKON

Bakterilerin, cildin bir bölgesinden diğerine yayılmasını azaltmak için ultra hijyeniktir.

ŞARJ GİRİŞİ

Bir tam USB şarjla 150 defaya kadar kullanım. 100% su geçirmez kapak.

GÖSTERGE IŞIĞI

Beyaz ışık cihazın açık olduğunu gösterir. Kırmızı ışık bataryanın düşük olduğunu gösterir.

ESPADA™ 2 NASIL KULLANILIR

GARANTİNİZİ KAYDEDİN

İlk kullanımdan önce, cihazınızı kaydetmek ve garantiyi etkinleştirmek için aşağıdaki basit adımları izleyerek FOREO For You uygulamasını indirin:

1. QR kodunu okutarak FOREO uygulamasını cep telefonunuza indirin.
2. Var olan hesabınıza giriş yapın veya yeni bir hesap oluşturun.
3. Cihazı ekleyin (ekranınızın üstünde).
4. Cihaz serisini seçin.
5. Uygulamadaki talimatları izleyin ve satın alma bilgilerini doldurun.

Cihazınız artık kullanıma hazırdır!

www.foreo.com/app



NASIL KULLANILIR



TEMİZLEYİN

Yüzünüzü ve boynunuzu temizleyip kurulayın. En iyi sonuçlar için bir FOREO LUNA™ Yüz Temizleme Masaj Aleti kullanmanızı öneririz.



UYGULAYIN

Gerekirse, bakım yapmak istediğiniz her sivilceye FOREO ESPADA™ BHA+PHA Blemish Solution uygulayın.



BAKIM YAPIN

ESPADA™ 2'yi etkinleştirmek için evrensel güç düğmesine basın. Uygulama yapmak istediğiniz bölgenin hassas hedefleme ışığının merkezinde olmasını sağlayın ve 30 saniye boyunca cilt üzerinde tutun. Tek uygulamada aynı noktaya 4 sefer bakım yapılabilir.

ESPADA™ 2 TEMİZLİĞİ

ESPADA™ 2'yi her kullanımdan sonra daima temizleyin. Cihazı sabunla yıkayın, ılık suyla durulayın ve yumuşak, tüy bırakmayan bir kumaşla kurulayın. En iyi sonuç için kullanımdan sonra FOREO'nun Silikon Temizleme Spreyi'ni cihaza püskürtüp ılık suyla durulamanızı öneririz.

NOT: Cildi tahriş edip silikona zarar verebileceğinden asla alkol, petrol veya aseton içeren temizlik ürünleri kullanmayın.

ÖNEMLİ

YÜKSEK GÜVENLİK İÇİN:

- Ciddi bir cilt sorununuz veya herhangi bir tıbbi endişeniz varsa, lütfen kullanmadan önce bir dermatoloğa danışın.
- ESPADA™ 2'yi kullanmak rahat olmalıdır; rahatsızlık hissederseniz hemen kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.
- ESPADA™ 2'yi göz çevresinde kullanırken özellikle dikkat edin. Cihazı göz kapakları veya gözlerle temas ettirmeyin.
- Hijyen nedeniyle, ESPADA™ 2'nizi başkalarıyla paylaşmanızı önermiyoruz.
- ESPADA™ 2 ürününüzü doğrudan güneş ışığı altında bırakmaktan kaçının ve kesinlikle aşırı sıcaklara veya kaynayan suya maruz bırakmayın.
- Cihaz, çocuklar ya da fiziksel veya zihinsel yetenekleri kısıtlı kişiler tarafından veya onların üzerinde ya da yakınında kullanılırken yakın gözetim gerekir.
- Bu ürün herhangi bir şekilde hasarlı görünüyorsa kullanmayı bırakın. Bu ürün servis verilebilir parçalar içermez.
- Bu cihazı sadece bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın. Spesifik sorunuzun yanıtını bulamazsanız veya cihazın çalışmasıyla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen www.foreo.com adresini ziyaret edin.

SORUN GİDERME

ESPADA™ 2'nin performansında değişiklikler olduğunda önlemler alınması gerekmektedir.

Evrensel düğmeye basıldığında ESPADA™ 2 çalışmazsa:

- Pili boştur. ESPADA™ 2'nizi size sağlanan USB şarj kablosuyla tamamen şarj olana kadar 1.5 saat boyunca şarj edin. Tam bir şarj, 150 adet 30 saniyelik bakıma kadar kullanım sağlar.

ESPADA™ 2 kapanmazsa ve/veya arayüz düğmeleri yanıt vermezse:

- Mikroişlemci geçici olarak arızalanmıştır. Cihazı yeniden başlatmak için evrensel düğmesini basılı tutun. USB şarj kablosu takılıyken ESPADA™ 2'nin gösterge ışığı yanıp sönmüyorsa:
- Pil tamamen şarj olmuştur ve en fazla 150 bakım için hazırdır.
- Pil tamamen boşalmıştır ve USB şarj kablosuna tepki vermesi için birkaç dakika beklenmesi gerekir.
- USB şarj kablosu doğru bağlanmamış olabilir. Elektrik prizini/USB soketini ve şarj girişini kontrol edin.

GARANTİ HÜKÜM VE KOŞULLARI

GARANTİSİNİ KAYDETTİRİN

2 Yıllık Sınırlı Garantinizi etkinleştirmek için FOREO For You uygulaması aracılığıyla kaydolun veya daha fazla bilgi için foreo.com/product-registration adresini ziyaret edin.

2 YILLIK SINIRLI GARANTİ

FOREO bu cihazı, orijinal satın alma tarihinden itibaren iki (2) yıl süreyle (ulusal yasaların daha uzun bir minimum garanti süresini zorunlu tuttuğu ülkeler hariç olmak üzere) cihazın Normal Kullanımından kaynaklanan, hatalı işçilik veya malzemelere bağlı kusurlara karşı garanti eder. Garanti, cihazın işlevini etkileyen çalışan parçaları kapsar. Makul aşınma ve yıpranmanın neden olduğu kozmetik bozulmaları veya kaza, yanlış kullanım veya ihmalden kaynaklanan hasarları KAPSAMAZ. Cihazı (veya aksesuarlarını) açmaya veya parçalarına ayırmaya yönelik her türlü girişim garantiyi geçersiz kılar.

Garanti süresi içinde bir kusur bulup FOREO'yu bilgilendirirseniz FOREO, kendi takdirine bağlı olarak cihazı ücretsiz olarak değiştirecektir. Garanti kapsamındaki talepler, talep tarihinin garanti süresi içinde olduğuna dair makul kanıtlarla desteklenmelidir. Garantinizi doğrulamak için lütfen orijinal satın alma fişinizi bu garanti koşullarıyla birlikte garanti süresi boyunca saklayın.

Garantinizi talep etmek için, www.foreo.com adresinden hesabınıza giriş yapıp ardından garanti talebinde bulunma seçeneğini işaretlemelisiniz. Nakliye masrafları iade edilmez. Bu taahhüt, tüketici olarak yasal haklarınıza ektir ve bu hakları hiçbir şekilde etkilemez.

İMHA BİLGİLERİ

Eski elektronik ekipmanın atılması (AB'de ve ayrı atık toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir).




Üzerinde çarpı işareti olan çöp kutusu simgesi, bu cihazın evsel atık olarak değerlendirilmemesi, bunun yerine elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için uygun toplama noktasına getirilmesi gerektiğini belirtir. Bu cihazın doğru şekilde atılmasını sağlayarak, ürünün uygun olmayan atık olarak işlenmesinin çevre ve insan sağlığı açısından neden olabileceği olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına da yardımcı olacaktır.

Cihazınızın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel evsel atık imha servisiyle veya satın aldığınız yerle iletişime geçin.

PİLİN ÇIKARILMASI

NOT: Bu işlem geri alınamaz. Cihazın içinin açılması garantisini geçersiz kılar. Bu işlem yalnızca cihaz elden çıkarılmaya hazır olduğunda yapılmalıdır.

Bu cihazda lityum-iyon pil bulunduğundan, bertaraf edilmeden önce pil çıkarılmalıdır ve evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Pili çıkarmak için, silikon dış katmanı çıkardıktan sonra iç plastik gövdeyi açın, pili çıkarın ve yerel çevre mevzuatınıza uygun olarak bertaraf edin. Güvenliğiniz için bu işlem sırasında eldiven takın. Ayrıntılı görsel talimatlar aşağıda verilmiştir:

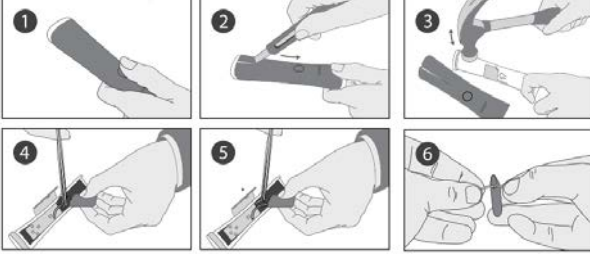

TEKNİK ÖZELLİKLER

MATERYALLER:	Vücut için güvenli silikon, PC + ABS	KULLANIM:	Şarj başına 150'ye kadar kullanım
RENK:	Cobalt Blue / Fuchsia / Pearl Pink	BEKLEME:	180 gün
BOYUT:	Y140 x G36 x D31 mm	FREKANS:	103 Hz
AĞIRLIK:	87 g	MAKSİMUM GÜRÜLTÜ SEVİYESİ:	<50 dB
PİL:	420 mAh	ARAYÜZ:	Tek tuş
SICAKLIK:	5 - 45 santigrat derece		

Feragat: Kullanıcılar bu cihazı kullanırken olası riskleri düşünmek zorundadırlar. FOREO veya bayileri, bu cihazın kullanımından doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan fiziksel veya başka türlü herhangi bir yaralanma veya zarar konusunda herhangi bir sorumluluk veya mükellefiyet kabul etmez. Ayrıca, FOREO bu yayını revize etme ve zaman zaman içeriğinde değişiklik yapma hakkını, bu değişiklikleri veya düzeltmeleri herhangi bir kişiye bildirme yükümlülüğü olmaksızın saklı tutar.

DİKKAT: Bu üniteye uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan bir değişiklik veya modifikasyon yapılması, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Model, iyileştirmeler için bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

©2023 FOREO AB. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. AB DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, İSVEÇ. ABD DISTR.: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, ABD. AUS DISTR.: FOREO AUS, 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AVUSTRALYA. FOREO SWEDEN TARAFINDAN TASARLANMIŞ VE GELİŞTİRİLMİŞTİR. FOREO AB İÇİN ÜRETİLMİŞTİR.