

FOREO
SWEDEN



PEACH™ 2



KULLANICI EL KILAVUZU

PEACH™ 2'yi satın alarak akıllı epilasyonu keşfetme yolunda ilk adımı attığınız için tebrikler. Cihazın gelişmiş teknolojisinin tüm avantajlarından evinizin rahatlığında yararlanmaya başlamadan önce, lütfen birkaç dakikanızı ayırarak bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okuyun.

Lütfen **KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN** ve bu cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklanan kullanım amacı doğrultusunda kullanın.

KULLANIM AMACI: PEACH™ 2, istenmeyen vücut tüylerinin ve/veya yüz tüylerinin alınması için tasarlanmış reçetesiz satılan bir cihazdır.

VÜCUT BÖLGELERİ: PEACH™ 2, vücut tüylerinde ve kadınlarda yüz tüylerinde kullanılmaya uygundur.

CİLT TONU: PEACH™ 2, açık renk, orta ve koyu cilt tonlarında kullanıma uygundur.



TÜY RENGİ: PEACH™ 2, doğal siyah veya kahverengi tüylerde kullanıma uygundur. Beyaz, gri, sarı veya kırmızı tüylerde o kadar etkili olmayabilir.



⚠ UYARILAR: BU EKİPMANDA HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İZİN VERİLMEZ.

PEACH™ 2'Yİ TANIYALIM

ÖZELLİKLER

CİLT SOĞUTMA KANALLARI

Uygulama sırasında ideal konfor için cildi nazikçe havayla ile soğutur.

9 cm² UYGULAMA PENCERESİ


Tüyleri hızlı ve etkili şekilde almak ve tekrar uzamasını önlemek için 7,3 J/cm²'lik muazzam bir IPL enerjisi sağlar.

KORUYUCU KALKAN

Yenilikçi silikon kalkan, gözleri yoğun ışık atımlarından korur.

KENDİ KENDİNİ AYARLAYAN BAŞLIK

Vücudun ulaşılması zor kıvrımlarına ve köşelerine kolaylıkla eşit ve rahat uygulama yapacak şekilde ayarlanabilir.

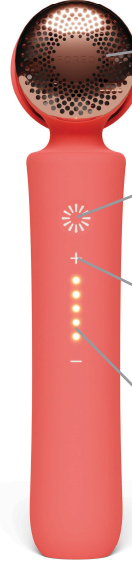

CİHAZ SOĞUTMA KANALI

İdeal uygulama için cihazın soğuk tutulmasını sağlar.

İŞIK DÜĞMESİ

IPL ışığını etkinleştirir. Tekli atış modu için bir kez veya kaydırma modu için sürekli basın.

ARTI ve EKSİ DÜĞMELERİ

IPL uygulamasının yoğunluğunu, vücudunuzun her bölgesindeki cildin ihtiyaçlarına mükemmel derecede uyacak şekilde ayarlayın.

GÖSTERGE IŞIKLARI

IPL yoğunluk seviyesini gösterir.



UYGULAMA BAĞLANTILI

Daha fazla ayara, uygulama kılavuzuna ve hatırlatıcıya erişin.



4 DİŞLİ ADAPTÖR

Yurt içi veya yurt dışında kullanım için güç kablosu kolayca takılıp çıkarılabilir.



TEMİZLEME BEZİ

Cihazınızı temiz ve kuru tutar.

PEACH™ 2 NASIL ÇALIŞIR?

PEACH™ 2, tüylerin uzama döngüsünü kırmaya yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Işık enerjisi cilt yüzeyinden aktarılır ve kıl gövdesinde bulunan melanin tarafından emilir. Emilen ışık enerjisi, ısı enerjisine (cilt yüzeyinin altında) dönüşerek kıl folikülünü devre dışı bırakır. Uygulama yapılan tüyler, birkaç gün ila 1-2 hafta arasında kendiliğinden dökülür. Kıl uzaması döngüseldir ve 3 farklı ve ardışık aşamayı içerir. IPL uygulaması, yalnızca kıllar belirli bir aşamadayken (Anajen - uzama aşaması) etkilidir. Tüm kıllar hiçbir zaman aynı aşamada olmaz. Bu nedenle, 12 hafta boyunca haftada bir uygulamadan oluşan önerilen uygulama rejimine uymanız gerekir.

NE BEKLENMELİ

Uygulamadan hemen sonra, bu uygulamayla ilişkili önemli bir yan etki yaşamamalısınız (Yan etkiler hakkında daha fazla bilgi için 'Yan Etkiler' başlıklı bölüme bakın).

İlk uygulamalardan sonraki ilk birkaç hafta içinde hâlâ bazı tüylerin uzadığını göreceksiniz. Bunlar muhtemelen uygulama sırasında atlanan tüylerdir, yani uygulama sırasında IPL'nin en etkili olduğu dönem olan uzama evresinde (Anajen) değil de uykuda olan tüylerdir.

12 haftalık uygulama programının yaklaşık 6. haftasında tüylerin uzamasında azalma görmemiz gerekir. Bununla birlikte, birçok kıla hâlâ uzama evresinde uygulama yapılmamış olabilir. Her hafta uygulamalara devam edilmesi önemlidir. 12 haftalık programdan sonra, uygulama yapılan bölgedeki tüylerde önemli bir azalma görmemiz gerekir. Kalan tüyler daha ince ve/veya daha açık renklidir. Devam eden aylık uygulamalar veya gerektiğinde yapılan uygulamalar, istenmeyen tüylerin azalmasını sağlamalıdır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

KONTRENDİKASYONLAR

Cihazı aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- Cildiniz, yukarıdaki cilt tonu tablosunda gösterilen cilt tonu 5'ten daha koyuysa. Koyu renk cilt daha fazla ışık enerjisi emdiğinden, çok koyu renkli tene uygulama yapılması, rahatsızlık hissine/acıya ve yan etkilere (örn. yanıklar, kabarcıklar, renk değişikliği veya yara izi) neden olabilir ve cildinize zarar verebilir.
- Hamileyseniz, emziriyorsanız veya 18 yaşından küçükseniz; çünkü cihaz bu kişiler üzerinde test edilmemiştir.
- Cilt kanseri veya kanser öncesi lezyon geçmiştiniz varsa (örn. nevüs veya çok sayıda ben).
- Cildiniz yakın zamanda yapay veya doğal yolla bronzlaşmış veya güneşe aşırı maruziyetten dolayı yanmışsa. Cildiniz güneşe maruz kaldıktan sonra hassaslaşabilir ve özellikle IPL uygulamasının yan etkileri (örn. yanma, su toplaması, renk değişikliği veya yara izi) riskine açık olabilir. Cihazı kullanmadan önce güneş yanığı veya bronzluk kaybolana kadar 1 hafta bekleyin.
- Doğrudan meme uçlarında, üreme organlarında veya anüs çevresinde. Bu bölgelerde ten rengi daha koyu ve/veya kıl yoğunluğu daha fazla olabilir. Cihazı bu bölgelerde kullanmak rahatsızlık hissine/acıya neden olabilir veya cildinize zarar verebilir (yanık, renk değişikliği veya yara izi).
- Uygulama yapmak istediğiniz bölgedeki kabarcıklar, yaralar, doğum lekeleri, benler veya siğiller gibi koyu kahverengi veya siyah noktalar üzerinde. Yoksa cihaz cildinize zarar verebilir veya mevcut durumu daha da kötüleştirebilir ve IPL uygulamasının yan etkilerine (örn. yanma, su toplanması, renk değişikliği veya yara izi) karşı özellikle hassas olabilirsiniz.
- Uygulama yapılacak bölgede sedef hastalığı, vitiligo, egzama, akne, herpes simplex veya aktif enfeksiyonlar veya yaralar dahil herhangi bir cilt rahatsızlığınız varsa.

Uygulama yapılan bölgeleri güneşe maruz **BIRAKMAYIN**. Uygulama sonrasında, uygulama yapılan cildi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmadan önce en az 7 gün bekleyin. Cildiniz bir IPL uygulamasından sonra ekstra hassas olabilir ve özellikle güneş yanığı riskine açık olabilir. Uygulama yapılan bölgeye güneş kremi (SPF 15 veya üzeri) uygulayın veya uygulama yapılan bölgeyi örtecek uygun giysiler giyin.

Bu cihazın sizin için güvenli olup olmadığından emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya dermatoloğunuza danışın.

Herhangi bir ilacı düzenli olarak ve uzun süredir kullanıyorsanız, cildin ışığa karşı hassasiyeti üzerinde olası etkiler için lütfen doktorunuza danışın.

UYARILAR



GÖZ GÜVENLİĞİ

PEACH™ 2 yoğun atımlı ışık flaşları yayar. Doğrudan maruziyet, gözlerinize zarar verme potansiyeline sahiptir. Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uymaya özen gösterin.

UYARI: Talimatlara uyulmaması halinde olası göz yaralanması (potansiyel olarak görme kaybına yol açar) veya cilt yaralanması. Talimatları okuyup uygulayın.

Cihaz yalnızca ciltle tam temas halindeyse etkinleştirilebilir (ışık atımı yapılabilir).

Bununla birlikte,

Şunları YAPMAYIN:

- Elektrik gücü varken ve cihaz açıkken doğrudan uygulama penceresine bakmayın.
- Cihazı göze doğru etkinleştirmeye (ışık atımı) çalışmayın.
- Göz çevresindeki bölgeye (kaşlar veya kirpikler) uygulama yapmayın. Yanlış kullanım gözlerde hasara neden olabilir.
- Cihazı göz kapaklarının üzerinde veya göze yakın bölgelerde kullanmayın. Cihazı YALNIZCA uygulama penceresi uygulama yapmak istediğiniz alanla tam temas halindeyken etkinleştirmeyi (ışık atımı) deneyin.

Cildinize ışık atışı yaparken cihazdan başka yöne bakmanızı **ÖNERİRİZ**.

ELEKTRİK VE GÜVENLİK

Her elektrikli cihazda olduğu gibi, güvenliğiniz için bazı önlemler alınmalıdır

Şunları YAPMAYIN:

- Tehlikeli elektrikli parçalara maruz kalmanıza neden olabileceğinden cihazın içini açmaya çalışmayın.
- PEACH™ 2 hasarlıysa kullanmayın; örneğin kırık cihaz, kablo hasarı (iç kısımdaki tellerin görünmesi), cihazda çatlak veya kırık cam vb. Bunlar, yaralanmaya neden olabilir.
- Küvet, duş, lavabo veya su içeren diğer kapların yakınında kullanmayın. Islanırsa cihaz kullanılmamalıdır.
- Dokunulamayacak kadar ısınırsa cihazı kullanmayın. Bu durum, ünitenin hasar aldığını gösterebilir.
- PEACH™ 2 ile kullanım için sağlananların dışında bir güç kaynağı veya başka bir parça kullanmayın. Bu, cihaza zarar verebilir ve çalışmamasına neden olabilir.
- Cihazı cilt dışında herhangi bir yüzeyde etkinleştirmeyi (ışık atımı) denemeyin.
- Cihazı, güç kaynağıyla bağlantısının kesilmesi zor olacak şekilde konumlandırmayın.

GENEL GÜVENLİK

Şunları YAPMAYIN:

- Uygulama yapmak istediğiniz bölgede cilt soyma işlemi yaptırdıysanız cihazı kullanmayın. Lütfen cihazla uygulama yapmak için cilt soyma işleminden sonra 30 gün bekleyin. Bronzlaşmış cilde Yoğun Atımlı Işık (IPL) ile uygulama yapılması, uygulama yapılan ciltte kalıcı hiperpigmentasyona (kararma) veya hipopigmentasyona (renk açılması) neden olabilir.
- Dövme veya kalıcı makyaj yaptırdığınız bölgelerde cihazı kullanmayın.
- Cihazı herhangi bir dolgu veya botoks üzerinde kullanmayın.
- Güneş ışığına karşı bilinen bir duyarlılığınız (fotosensitivite) varsa veya cildi daha hassas hale getiren ve fotosensitiviteye neden olan ilaçlar, örneğin Retin A, Accutane ve/veya başka topikal retinoidler alıyorsanız cihazı kullanmayın. Fotosensitivitenin bir yan etki olarak listelenip listelenmediğini görmek için her zaman tıbbi ürününüzle birlikte verilen kullanma talimatına bakın. Cihazın ışığa duyarlı cilt üzerinde kullanılması, şişlik veya kabarcık gibi cilt hasarlarına neden olabilir. Cihaz kullanımı cilde zarar verebileceğinden, cihazı kullanmadan önce doktor tavsiyesi alın. Bu cihaz tıbbi rahatsızlıkların tedavisi için tasarlanmamıştır. Örneğin benler, deri döküntüsü, kaşıntılı cilt, cilt mantarı veya enfeksiyonu, ciltte şişlikler veya et benleri gibi durumları ele almak için doktor tavsiyesi alınmalıdır.
- Kullanım sırasında veya kullanımdan hemen sonra uygulama penceresine dokunmayın. Uygulama penceresini hasar bakımından düzenli olarak inceleyin.
- Kullanım sırasında veya kullanımdan hemen sonra cihaz soğutma kanalına (metal kısım) dokunmayın.
- Uygulama penceresi çatlak veya eksikse cihazı kullanmayın.
- Uygulama penceresinin temiz olduğundan ve kalıntı içermediğinden emin olun. İşlem sırasında uygulama penceresinin üzerinde veya çevresinde bulunan herhangi bir kalıntı, kızarıklık veya şişlik gibi geçici cilt değişikliklerine neden olabilir.
- Cihaz, 18 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır. Çocuklar cihazı kullanmamalı, cihazla oynamamalı, bakımını veya temizliğini yapmamalıdır. Yanıklara veya göz hasarına neden olabilen ışık çıkışına maruziyet, elektrik çarpması ve kablolar nedeniyle boğulma gibi bir takım potansiyel riskler söz konusudur.
- Cihaz, cihaza zarar verebilecek evcil hayvanlardan ve haşerelerden uzak tutulmalıdır. Fonksiyon azalması ve elektrik çarpması potansiyel riskler arasındadır.
- Cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bu kişilere, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın güvenli ve doğru kullanımına ilişkin gözetim veya talimat sağlanmadıkça cihaz kullanılmamalıdır.
- Cihazdaki uygulama penceresi, kullanım sırasında ısınacak kritik bir parçadır.

UYARI:

- Uygulama sırasında belirtilen kullanımı AŞMAYIN.
- Bir bölgeye uzun süreli veya tekrarlı yapılan uygulamalardan sonra ciltte hasar meydana gelebilir. Aşırı geçişler, ışık atımlarının üst üste aynı noktaya gelmesi ve/veya artan kullanım sıklığı gibi aşırı kullanımdan kaçının.
- Cihaza özgü güvenlik mekanizmalarını geçersiz kılmayın.

ÖNLEMLER

- Lazerler veya yoğun atımlı ışık kaynakları ile epilasyon, bazı kişilerde tüylerin uzamasında artışa neden olabilir. Şu anda mevcut verilere dayanarak, bu yanıt için en yüksek risk grupları, yüz ve boyuna uygulama yapılan Akdeniz, Orta Doğu ve Güney Asya kökenli kadınlardır.
- Cihazı tüylerin tekrar çıkmasını isteyebileceğiniz herhangi bir alanda KULLANMAYIN.
- Saç derisinde, kaşlarda veya gözlerin yakınında veya çevresinde KULLANMAYIN. Bu alanlarda kullanım gözlerinize kalıcı hasar verebilir.
- Cihazı erkeklerin yüzünde, çenesinde veya boyun bölgesinde KULLANMAYIN. Erkeklerin sakal bölgesindeki kıllar çok yoğundur ve bu bölgelerde IPL cihazının kullanılması ciltte yaralanmaya neden olabilir.
- Bu cihazın kızıl, gri, beyaz veya sarı tüylerde kullanılması önerilmez. Bu renklerdeki tüylerde etkili değildir.

POTANSİYEL RİSKLER, YAN ETKİLER VE CİLT REAKSİYONLARI

YAN ETKİLER	DEĞERLENDİRME VE ALINACAK AKSİYON
Uygulama yapılan bölgede hafif acı/rahatsızlık hissi	Bu, beklenen bir durumdur ve tüm IPL uygulamaları için normaldir. Cihazı talimatlara uygun şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz ve sürekli kullanımla acı hissi azalacaktır.
Uygulama sırasında tipik olarak birkaç saniye ila bir dakika sonra kaybolan ve sürekli kullanımla azalan sıcaklık hissi veya karıncalanma hissi.	Bu, beklenen bir durumdur ve tüm IPL uygulamaları için normaldir. Cihazı talimatlara uygun şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.
Uygulama yapılan alanda kaşıntı.	IPL uygulamalarında bu oldukça yaygındır ve kısa bir süre sonra geçmesi gerekir. Cihazı talimatlara uygun şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Uygulama yapılan alanı kaşımayın.
Uygulama sırasında veya sonrasında dakikalar içinde geçen cilt kızarıklığı.	Bu, beklenen bir durumdur ve tüm IPL uygulamaları için normaldir. Ciltteki kızarıklık geçtikten sonra cihazı talimatlara uygun şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.
Dakikalar içinde geçmeyen ve 24-48 saat süren cilt kızarıklığı.	Cihazı kullanmayı hemen bırakın ve tekrar kullanmadan önce doktorunuza danışın.
Uygulama sırasında yoğun olan veya uygulamadan sonra da devam eden acı veya rahatsızlık hissi	Cihazı kullanmayı hemen bırakın ve tekrar kullanmadan önce doktorunuza danışın.
ÇOK NADİR DURUMLARDA	DEĞERLENDİRME VE ALINACAK AKSİYON
İki ila üç gün içinde geçmeyen şişlik ve kızarıklık.	Cihazı kullanmayı hemen bırakın ve tekrar kullanmadan önce doktorunuza danışın.
Cilt renginde geçici değişiklikler (açılma veya kararma).	Cildinizin rengi değişirse, cihazı kullanmayı hemen bırakın ve doktorunuza danışın.
Ciltte kabarıklık, yara izi veya yanma.	Cihazı kullanmayı hemen bırakın ve tekrar kullanmadan önce doktorunuza danışın. Bölgeye soğuk uygulama yapın. Antiseptik veya yanık kremi ile tedavi edin.

NASIL KULLANILIR

UYARI: Bir sonraki adıma geçmeden önce her adımı tüm açılardan tamamlayarak uygulama sürecindeki tüm adımlara uyun.

CİHAZINIZIN KİLİDİNİ AÇIN

İlk kullanımdan önce PEACH™ 2'nizin kilidini açmak ve kaydetmek için FOREO uygulamasını indirin. Bunu, cihaz ambalajının arkasında veya cihazınızla birlikte verilen Hızlı Başlangıç Rehberinde bulunan QR kodunu taratarak yapabilirsiniz.

UYGULAMA YAPILACAK ALANI HAZIRLAYIN

Cihazı kullanmadan önce ciltteki görünür olan tüyleri alın. En iyi sonucu alabilmek için vücut tüylerini tıraş etmenizi ve yüz tüylerine dermaplaning yaptırmanızı öneririz. Hasara neden olabileceğinden, cilt yüzeyinin üzerinde hiç tüy kalmadığından emin olun. Bu şekilde kalıntıların cihazın ön tarafını kaplamasını da önlersiniz. Uygulama alanını temizleyip kurulaşın.

CİHAZI AÇIN

İlgili fiş adaptörünü güç kablosuna takın. Ardından, cihazı bir elektrik prizine bağlamak için güç kablosunu kullanın. Cihaz otomatik olarak açılacaktır. + ve - düğmelerini kullanarak tercih ettiğiniz yoğunluk seviyesini ayarlayabilirsiniz.

NOT: Cihazınızdaki 1 - 3. Seviyeler, hassas alanlar ve ilk kez kullananlar içindir. Azaltılmış ışık yoğunluğu, istenen etkilerin alınması için daha fazla uygulama yapılmasını gerektirebilir. Uygulama rahatsızlık hissi vermediği sürece, mevcut ayarı, cilt tipiniz için önerilen yoğunluk aralığında bir seviye artırın.

YAMA TESTİ

Her yeni vücut bölgesine yapılacak ilk uygulama öncesinde, o bölgedeki cildi cihaza vereceği tepki açısından test etmenizi ÖNERİRİZ. Yama testi alanı yaklaşık 3 cm x 3 cm boyutunda olmalıdır (PEACH™ 2'den gelen 1 ışık atımına eş değer). Yama testini aşağıda "Tekli Atış Modu" kapsamındaki "Uygulama Yöntemleri" bölümünde açıklanan şekilde gerçekleştirin. Cildinizin uygulama için uygun olduğundan ve ışık enerjisine herhangi bir olumsuz tepki vermeyeceğinden emin olmak için yama testinden sonra 24 saat bekleyin. 24 saat sonra herhangi bir reaksiyon olmazsa yama testinin çevresindeki alana uygulama yapabilirsiniz. "Yama testi yapılan alana" en az 1 hafta boyunca tekrar uygulama YAPILMAMALIDIR. Bir cilt reaksiyonu gelişirse, cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Uygulama yapılacak alan tüysüz, temiz ve kuru olmalıdır. Işık düğmesine basmadan önce, parlak ışıktan kaçınmak için cihazdan uzağa bakın. Nadir durumlarda, ışık size çok parlak gelebilir. Bununla ilgili herhangi bir güvenlik riski yoktur. Daha fazla konfor için, algılanan parlaklığı azaltmaya yardımcı olması amacıyla iyi aydınlatılmış bir odada uygulama yapmanızı öneririz. Ancak, ışığın hala çok parlak olduğunu düşünüyorsanız, ekstra göz koruması için güneş gözlüğü takmanızı öneririz. Cihazı yüzdeki tüyleri almak için kullanırken de ekstra göz koruması için güneş gözlüğü takmanızı öneririz.

KAYDIRMA MODU

Bacaklar, kollar, göğüs, sırt ve karın bölgesi gibi geniş alanlara hızlı ve etkili uygulama için

1. Uygulama penceresini cildinize iyice yerleştirin ve tercih ettiğiniz yoğunluk seviyesini seçin.
2. Işık düğmesini basılı tutun. Cihaz ışık atımına başlayacaktır.
3. Cihazı, uygulama alanının altından üstüne doğru yavaşça ve sürekli olarak kaydırın. Cihazın sürekli ışık atımı yapması için her zaman ciltle tam temasını sağladığınızdan emin olun.
4. Kaydırma hareketi tamamlandıktan sonra cihazı uygulama alanından kaldırın.
5. Uygulama yapmak istediğiniz tüm alanı tamamlayana kadar, bitişik alanlarda paralel bir kaydırma hareketi ile uygulamayı tekrarlayın.

TEKLİ ATIŞ MODU

Yüz, bikini bölgesi ve koltuk altı gibi küçük veya ulaşılması zor alanlara uygulama yapmak için

1. Uygulama penceresini cildinize iyice yerleştirin ve tercih ettiğiniz yoğunluk seviyesini seçin.
2. Işık düğmesine basıp hemen bırakın. Cihaz ışık yayacaktır.
3. Cihazı cildin üzerinden kaldırın ve uygulama yapılacak bir sonraki bitişik noktaya yerleştirin.
4. Uygulama yapmak istediğiniz tüm alanı tamamlayana kadar nokta nokta uygulama yapmaya devam edin.

NOT:


- PEACH™ 2'nizdeki uygulama penceresi cildinizle tam temas halinde olmalıdır, aksi takdirde ışık düğmesi çalışmayacaktır.
- PEACH™ 2'nin etkili bir şekilde çalışması için hiçbir noktayı atlamadan cihazı cildinizin her yerinde eşit olarak kullanmanız gerekir. Uygulama penceresini, uygulama yapılan alanlar arasında herhangi bir boşluk bırakmadan doğrudan daha önce uygulama yapılmış olan noktanın yanına yerleştirerek gözden kaçan alanlar olmamasını sağlayın. Ancak, aynı alana bir defadan fazla ışık uygulamadığınızdan emin olun. Bu, uygulamanın etkinliğini artırmaz, aksine cilt reaksiyonları riskini artırabilir.
- Şiddetli acı hissederseniz, uygulamayı hemen durdurun ve cihazı tekrar kullanmadan önce doktorunuza danışın.

PEACH™ 2 UYGULAMA PROGRAMINIZ

En iyi sonuçlar için, tüm kıl köklerine uygulama yapıldığından emin olmak amacıyla cihaz 12 hafta boyunca haftada bir kullanılmalıdır.

İlk uygulama aşamasından sonra (12 hafta boyunca haftada bir), sonuçları korumak için cihazı ayda bir veya gerektiğinde kullanmanızı öneririz.

AYNI BÖLGEYE TEKRAR UYGULAMA YAPMADAN ÖNCE DAİMA 7 GÜN BEKLEYİN

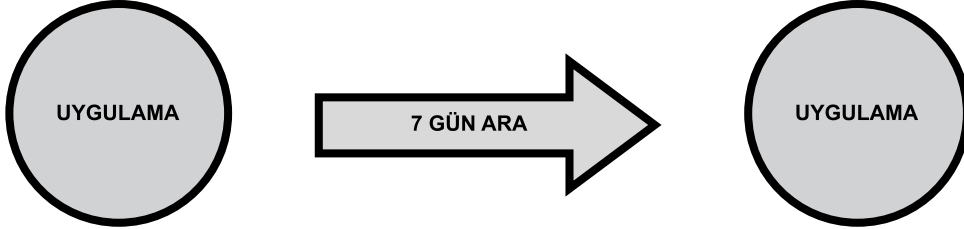

Planlanan uygulama tarihinden sonraki 3 gün içinde kendinize uygulama yapın. Planlanan uygulama tarihinden sonraki 3 gün içinde uygulama yapmadıysanız, ilk aşamayı yeniden başlatın.

TEMİZLİK, BAKIM, SAKLAMA

Uygulama sonrasında, her zaman güç kaynağını cihazdan ve elektrik prizinden çıkararak cihazı kapatın.

Her kullanımdan sonra, uygulama penceresi hafif nemli, tüy bırakmayan bir bezle iyice silinmelidir. Maksimum performans sağlamak için cihazın ön tarafını ve reflektörü kir, tüy veya diğer kalıntılardan uzak tutmak özellikle önemlidir.

UYARI: Uygulama penceresi kullanım sırasında ısınabilir. Soğumasına izin vermek için kullanımdan sonra en az 5 dakika boyunca uygulama penceresine DOKUNMAYIN veya TEMİZLEMİYİN.

NOT:

- Cildi tahriş edip silikona zarar verebileceğinden asla alkol, petrol veya aseton içeren temizlik ürünleri kullanmayın.
- Cilt soğutma kanalları da dahil olmak üzere cihazdaki herhangi bir açıklığa su girmemesine dikkat edin.

ARIZA GİDERME

SORUN	ÇÖZÜM
Cihaz açılmıyor.	- Güç kaynağının prize takılı olduğundan emin olun. - Cihazınız kilitli. Kilidini açmak için FOREO uygulaması üzerinden cihazınızı kaydettirin (yukarıdaki 'Nasıl Kullanılır' bölümündeki talimatlar)
Işık düğmesi yanıt vermiyor.	- Uygulama penceresinin cildinizle tam temas halinde olduğundan emin olun. - Cihazı prizden çıkarın. Ardından tekrar prize takın.
Cihaz, FOREO uygulamasıyla senkronize olmuyor.	- Yeniden bağlanmayı denemek için Bluetooth'unuzu kapatıp tekrar açın. - FOREO uygulamasını kapatın ve işlemi yeniden başlatmak için tekrar açın. - Mobil cihazınızın uygulama mağazasında uygulamanın güncellenmesinin gerekip gerekmediğini kontrol edin
Cihaz, uygulama penceresi, güç kaynağı veya kablosu hasar görmüş, kırılmış, çatlamış veya kusurlu görünüyor.	CİHAZI KULLANMAYIN. Cihazın güvenliğiyle ilgili şüpheleriniz varsa veya herhangi bir şekilde zarar gördüğünden şüpheleniyorsanız cihaz kesinlikle kullanılmamalıdır. Web sitesine bakmalısınız.

Spesifik sorunuzun yanıtını bulamazsanız veya cihazın çalışmasıyla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen foreo.com/support adresini ziyaret edin.

GARANTİ HÜKÜM VE KOŞULLARI

GARANTİSİNİ KAYDETTİRİN

2 Yıllık Sınırlı Garantinizi etkinleştirmek için FOREO For You uygulaması aracılığıyla kaydolun veya daha fazla bilgi için foreo.com/product-registration adresini ziyaret edin.

2 YILLIK SINIRLI GARANTİ

FOREO bu cihazı, orjinal satın alma tarihinden itibaren İKİ (2) YIL süreyle, cihazın Normal Kullanımından kaynaklanan hatalı işçilik veya malzemelere bağlı kusurlara karşı garanti eder. Garanti, cihazın işlevini etkileyen çalışan parçaları kapsar. Makul aşınma ve yıpranmanın neden olduğu kozmetik bozulmaları veya kaza, yanlış kullanım veya ihmalden kaynaklanan hasarları KAPSAMAZ. Cihazı (veya aksesuarlarını) açmaya veya parçalarına ayırmaya yönelik her türlü girişim garantiyi geçersiz kılar.

Garanti süresi içinde bir kusur bulup FOREO'yu bilgilendirirseniz FOREO, kendi takdirine bağlı olarak cihazı ücretsiz olarak değiştirecektir. Garanti kapsamındaki talepler, talep tarihinin garanti süresi içinde olduğuna dair makul kanıtlarla desteklenmelidir. Garantinizi doğrulamak için lütfen orjinal satın alma fişinizi bu garanti koşullarıyla birlikte garanti süresi boyunca saklayın.

Garantinizi talep etmek için, www.foreo.com adresinden hesabınıza giriş yapıp ardından garanti talebinde bulunma seçeneğini işaretlemelisiniz. Nakliye masrafları iade edilmez. Bu taahhüt, tüketici olarak yasal haklarınıza ektir ve bu hakları hiçbir şekilde etkilemez.

İMHA BİLGİLERİ


Eski elektronik ekipmanın atılması (AB'de ve ayrı atık toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir).



AVRUPA UYGUNLUĞU



BK UYGUNLUK BEYANI

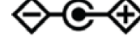

DC GÜÇ KONNEKTÖRÜ
POLARİTESİ



FEDERAL İLETİŞİM
KOMİSYONU
UYUMLULUĞU



BF TİPİ UYGULANAN
PARÇA



SINIF II EKİPMAN



AMBALAJ GERİ
DÖNÜŞÜMLÜ
MATERYALDEN
YAPILMIŞTIR



ÇÖP ATIKLARI
ELEKTRİKİ &
ELEKTRONİK EKİPMAN
DİREKTİFİ



KULLANIM
TALİMATLARINA
BAŞVURUN

Bu cihaz evsel atık olarak değerlendirilmemeli, bunun yerine elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için uygun toplama noktasına getirilmelidir. Bu cihazın doğru şekilde atılmasını sağlayarak, cihazın uygun olmayan atık olarak işlenmesinin çevre ve insan sağlığı açısından neden olabileceği olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına da yardımcı olacaktır.

Cihazınızın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel evsel atık imha servisiyle veya satın aldığınız yerle iletişime geçin.

FCC BEYANI:

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihaz sınırlamalarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlamalar, kurulumdaki zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağını garanti etmez. Bu ekipman, radyo veya televizyon yayını alımında, ekipmanı açıp kapatarak belirlenebilen zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
- Yardım almak için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

PEACH™ 2, aşağıdaki teknik özelliklere sahip, filtrelenmiş bir geniş bant Yoğun Atımlı Işık sistemidir:

Tekrarlama Hızı	0.5 -1s
Atım Uzunluğu	Serbest deşarj 3ms
Maksimum Optik Çıkış	7.3 J/cm ²
Dalgaboyu	550 – 1100nm
Güç Hattı Girişi	100 – 240V, 50/60Hz 3A
Çalışma Sıcaklığı	5 °C ila +40 °C
Çalışma Nem Koşulu	%40 ila %80
Çalışma Basınçları	800 ila 1060 hPa
Uygulama alanı (nokta boyutu)	4.5cm ²

NAKLİYE KOŞULLARI:

Sıcaklık	-10 °C ila +50 °C
Nem	%30 ila %80
Basınçlar	500hPa to 1,060hPa

Cihaz belirtilen çalışma aralığının dışındaki sıcaklıklarda saklandıysa, cihazın iklime uyum sağlaması için kullanmadan önce lütfen en az 30 dakika bekleyin.

PEACH™ 2, 500.000 ışık atımına sahiptir ve tek bir kullanıcı için tasarlanmıştır. Önerilen rejime uyulduğunda beklenen minimum hizmet ömrü 10 yıldır.

CE işareti, bu cihazın aşağıdaki AB Direktiflerine uygun olduğunu doğrular:

- 2014/35/EU sayılı Düşük Voltaj Direktifi
- 2014/30/EU sayılı Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi
- 2009/125/EC sayılı Enerji ile ilgili Ürün Direktifi.

Bu cihaz, Ev ve Tıbbi Cihazlar için geçerli olan en son EMC Standartları ve Değişikliklerine uygundur. Bunlar: EN 55014- 1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3- 3:2013/ A1:2019/ A2:2021, IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020

Bu cihaz, Ev ve Tıbbi Cihazlar için geçerli olan en son Güvenlik Standartları ve Değişikliklerine uygundur. Bunlar: IEC 60335-1:2010 + Ams, IEC 60335-2-113:2016, EN 62233:2008, IEC 60601-1:2005+A1:2012 +A2:2020, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + Ams, IEC 62366-1:2015, IEC 60601-1-11: 2015+ Ams, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams

©2023 FOREO AB. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

AB'DEKİ İTHALATÇI VE DİSTRİBÜTÖR: FOREO AB, KARLÄVAGEN 41, 114 31
STOCKHOLM, İSVEÇ

ABD'DEKİ İTHALATÇI VE DİSTRİBÜTÖR: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS,
NV 89119, ABD.

FOREO AB İÇİN ÜRETİLMİŞTİR. TASARLAYAN VE GELİŞTİREN: FOREO SWEDEN.

AVUSTRALYA'DAKİ İTHALATÇI VE

DİSTRİBÜTÖR: FOREO AUS, 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207
AVUSTRALYA.

ÜRETİCİ: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN
TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, ÇİN.