

FOREO
SWEDEN



UFO™

LED LIGHTHOUSE PANEL *Palm-size*

UFO™ 凝时皙颜光能仪 (掌上版)



在线手册

完整版使用说明

开始使用

恭喜您通过购买UFO™ 凝时皙颜光能仪(掌上版)，成功迈出拥有美肌的第一步。我们顶尖的美肤科技将为您带来全新护理体验。请您开始在家中享受护理之旅之前，抽出几分钟仔细阅读本说明书。

使用前请阅读所有指南并仅按照本说明书中的指定用途使用本产品。

预期用途：UFO™ 凝时皙颜光能仪(掌上版) 作为一款非处方级专业美容仪，专为忙碌人群与光疗新手提供便携且高效的日常光疗护理。

警告：请勿对产品进行任何改装。

UFO™ 凝时皙颜光能仪(掌上版) 概述

掌间聚能焕肤 随行自由光护

UFO™凝时皙颜光能仪(掌上版) 专为忙碌人群与光疗新手设计，将专业级光子嫩肤能量融入日常碎片时光。搭载7种彩光，以每秒30,000次的超频脉冲层层激活皮肤潜能，高效改善细纹、暗沉、出油、痘痘等肌肤初老迹象。专业级灯珠承载能量密度高达 120 mw/cm² 高强光能，层层深入直达肌肤深层。专利光塔远距聚能系统，如灯塔般精准聚焦光能，聚光率高达99.9%，给予高效护理体验。光源色纯度高达99.9%，实现精准靶向光吸收，高效焕肤。机身轻巧，可单手持握；无线设计，无需插电，即开即用，真正打破时间与空间限制，将专业光疗无缝融入日常碎片时光，让你随时随地畅享专业光护。

开始了解UFO™ 凝时皙颜光能仪(掌上版)

特点

7种彩光

红光、蓝光、绿光、橙光、紫光、青光、琥珀光，共7种专业光源高效嫩白抗衰。

专利光塔远距聚能系统

光线精准聚焦，能量持久稳定。

智能瑞典设计

超卫生硅胶机身，圆形时尚外观。

通用电源按钮

按下通用电源开机，并将设备置于蓝牙配对模式以连接到APP，再次短按切换彩光，长按3秒可关闭设备。

USB充电孔

单次充满30分钟，可使用长达45分钟。



USB 充电线

随时随地为您的设备充电。



快速操作指南

帮助您快速了解设备，上手使用。



基本操作手册

帮助您深入了解设备，解决使用过程中遇到的困难。

解锁设备

首次使用前，请下载FOREO APP 以激活和注册您的设备。请按照以下步骤操作：

1. 下载FOREO APP
2. 登录您的账户或注册一个新账户
3. 添加设备
4. 选择产品系列
5. 按下通用电源按钮将您的设备连接到APP
6. 填写购买信息完成注册

您可以开始使用了！

www.foreo.com/app



个性化APP



FOREO APP 提供有关设备信息、如何使用、基本设置以及设备保养等多种功能。



基本设置

设置您光疗护理的偏好，设备会保存设置以供离线使用。

彩光类型：在7种彩光之间任意选择

光能强度：低-中-高

护理时长：可在5-30分钟内任意选择护理时长，保存后设备同步。



智能护理

多光组合高效、精准解决常见肌肤问题。更多护理模式会陆续在APP中推出！

护理模式	彩光组合
即刻焕肤 (5分钟)	红光 + 蓝光 + 琥珀光
抚纹淡皱 (15分钟)	红光 + 琥珀光 + 蓝光
抗痘净肤 (10分钟)	蓝光 + 琥珀光
美白提亮 (10分钟)	红光 + 琥珀光

使用方法

首次使用前，请下载 FOREO APP 来解锁和注册您的设备。

1. 开启设备

将光能仪对准护理部位，然后，按下通用电源开启设备。

2. 选择模式

再次短按通用电源按钮即可切换彩光颜色。通过FOREO APP选择更多预设护理模式。

3. 开始护理

放松享受光疗护理。15分钟护理结束后，设备可自动关机或长按通用电源按钮3秒关闭设备。

使用建议：每次15分钟，每周3-5次，肌肤耐受后可每天使用，单次使用时长建议不超过30分钟。

清洁 UFO™ 凝时皙颜光能仪 (掌上版)

每次使用结束后请及时清洁设备。为获得最佳清洁效果，我们建议喷洒FOREO™ 硅胶清洁液于设备上，并用湿布擦洗干净，清洗完毕后在通风处晾干即可。

注意：该产品不防水。

注意事项

为了最佳安全性：

- 使用UFO™ 凝时皙颜光能仪进行嫩肤护理是很舒适的——如果您在使用过程中感到有任何不适或刺激，请立即停止使用并咨询医生。
- 请勿用于伤口溃烂、外伤及手术后伤口。
- 如果您的皮肤具有光敏性、晒伤或炎症请勿使用。
- 如果您有皮肤问题或任何医疗问题，请在使用前咨询医生。
- 请勿直视 LED光。
- 请不要给儿童或在儿童附近使用设备，身体机能衰退及精神病患者不应该使用或靠近本设备。当在儿童或身体机能衰退及精神病患者身边使用、清洁或存放设备时，须密切监视。
- 请避免将UFO™ 凝时皙颜光能仪置于阳光直射下，切勿将其暴露在极热的水或沸水中。
- 如果本产品出现任何损坏，请停止使用。
- 本产品不含可维修部件。
- 请勿篡改或试图拆卸产品，因为这可能会损坏设备。
- 请勿将任何物体插入设备的任何开口。
- 如果设备过热或者怀疑设备出现故障，请勿使用。
- 该设备必须仅由安全特低压供电。
- 建议仅使用随设备提供的电源为设备供电。
- 接电前，请确保插头和插座完全干燥。否则可能导致触电，短路或火灾。
- 如果该设备或充电器不能正常工作或出现任何损坏，请停止使用。只使用设备自带的电源。
- 鉴于UFO™ 凝时皙颜光能仪的美肤功效，我们建议您单次使用的时间不要超过30分钟。
- 在使用UFO™ 凝时皙颜光能仪前及使用过程中注意补水，应避免使用含有光敏成分的护肤品。比如：光甘草定、维A类如A醇(视黄醇)、对苯二酚(氢醌)及对苯二酚衍生物；高浓度熊果苷VC和VC衍生物(抗坏血酸棕榈酸酯等)，壬二酸，白芷，A酸，曲酸，果酸，水杨酸，柑橘类精油，佛手柑，柠檬精油，檀香油，香芹精油，马鞭草，含香豆素，维生素类的A、C等。
- 以下人群，请勿使用该设备。否则容易引起事故或导致皮肤、乃至身体问题。
孕妇与未成年人；大面积皮肤病患者以及光过敏人群；严重的心、肝或血液系统、神经系统、恶性肿瘤、面部神经疼痛、血友病、热性病以及对光源点亮反应有癫痫的患者如有服用可能导致光过敏的药品用户，请遵照医嘱谨慎使用本设备；其他经医生或者专业人员判断为不能进行蓝光、黄光、红光、红外线光照射的人员。
- 请仅将本设备用于本手册中所述的预期用途。如果您有其他特定问题没有找到相应答案，请访问foreo.com/support。

故障排除

UFO™ 光能仪性能发生变化时应采取的预防措施：

当按下通用电源按钮时，如果未能激活UFO™ 光能仪：

- 电池没电了。使用USB充电线充电最多30分钟，直至充满电，然后按住通用电源按钮重新启动设备。

如果UFO™ 光能仪无法关闭/通用电源按钮无响应：

- 微处理器暂时出现故障。按住通用电源按钮以重新启动设备。

如果UFO™ 光能仪无法与FOREO APP 同步：

- 确保您的设备已充满电并且您的蓝牙已打开。
- 关闭蓝牙，然后重新打开以尝试重新连接。
- 关闭 FOREO APP，然后重新打开。
- 删除并重新安装应用程序 - 也许APP只需更新即可。
- 删除并重新安装应用程序后，请确保重新启动手机。
- 删除手机的 cookie和缓存。
- 确保您的手机操作系统已更新至最新版本。

废弃处理方法

废旧电子设备的废弃处理方法（在欧盟或其他具有垃圾分类处理系统的欧洲国家适用）。



该设备不可作为生活垃圾进行处理，而应被带到专门回收电器和电子设备的收集点。通过确保正确地处理该设备，可有助于防止由于采用不恰当的废弃处理方式而造成的对环境和人类健康的潜在危害。材料回收也有助于保护自然资源。


更多产品回收信息，请联系当地的生活垃圾处理服务站或产品购买地。

电池拆卸

警告：这个过程是不可逆的。只有在设备准备好处理时才能执行此操作。由于此设备包含锂离子电池，因此必须在处理前取出电池，不得丢弃进生活垃圾中。要取出电池，请拆开硅胶外层后打开塑料内壳，取出电池并根据您所处地区的环保法规对其进行处理。在此过程中请戴上手套以确保您的安全。

详细过程可参照下图：

操作时须确保设备已断开电源，切勿在充电状态下进行。首先，沿线条割开，移除硅胶外套。接着，沿线条撬开，卸下螺丝，去除塑料壳。最后，移除电池，电池与PCBA使用热熔胶固定，拆除时不可暴力弯曲或刺破电池，以免电池起火。

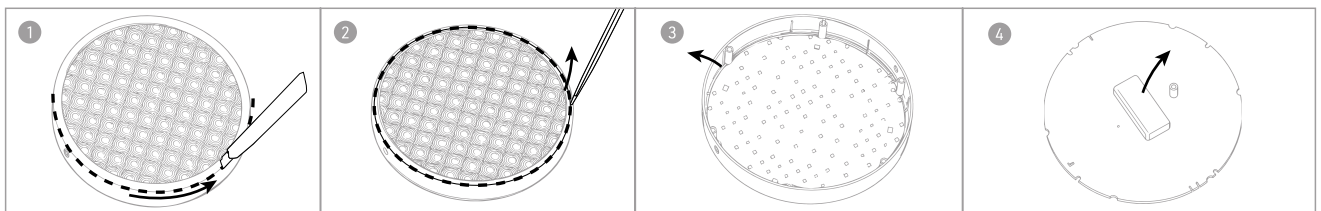

产品规格

材质: 硅胶, ABS+PC塑料

颜色: 活力桃红、薰衣草紫

尺寸: 90 x 90 x 26 毫米

产品重量: 100 克

产品加包装重量: 135 克

电池: 锂离子电池520毫安时 3.7伏

使用时间: 单次充满电可使用长达45分钟

待机时长: 90 天

频率: 100赫兹

最大噪音水平: 小于50分贝

操作界面: 一键式

使用环境

温度: 5°C~40°C

湿度: 40%~80%

大气压力: 800~1060 hPa

存储及运输环境:

温度: -10°C~50°C

湿度: 30%~80%

大气压力: 500~1060 hPa

免责声明: 产品使用者自担风险。FOREO和零售商对因使用产品直接或间接造成的任何身体或非身体的伤害或损害不承担任何责任和义务。此外, FOREO保留修改本说明并随时更改内容的权利, 且没有义务将这些修改或改变通知任何个人。

任何未经合规责任方明确批准的更改或修改都可能导致用户操作设备的权限失效。本设备符合 FCC 规则的第 15 部分。操作需满足以下两个条件: (1) 本设备不会造成有害干扰, 以及 (2) 本设备必须接受接收到的任何干扰, 包括可能导致意外操作的干扰。

射频暴露声明: 本设备符合针对不受控环境的 FCC 辐射暴露限制。本设备经评估满足一般射频暴露要求。本设备可随身携带且不受暴露环境限制。本设备包含符合加拿大创新、科学和经济发展部RSS的免许可发射器/接收器。操作受如下两条限制: (1) 此设备可能不会造成电子干扰。(2) 此设备必须接受所有电子干扰, 包括可能改变设备操作的电子干扰。

产品模型可能会因改进而有变化, 恕不另行通知。

常见问题

基本信息

1. UFO™ 光能仪包装内包含什么?

1个光能仪、1个USB充电线、1份快速操作指南、1份基本操作手册。

2. 拿到UFO™ 光能仪后应该怎么做?

您需要通过下载FOREO APP 解锁并注册您的设备, 然后按照APP中的说明进行操作。(更多相关信息, 请参阅下“关于APP”的内容)。

3. 我应如何开启UFO™ 光能仪?

注册解锁后, 按下通用电源即可开启设备。

4. 我应如何关闭 UFO™ 光能仪？

设备将在开启15分钟之后自动关闭。您也可以长按通用电源按钮3秒钟关闭设备。

美肤护理

5. 应如何开始首次护理？

首先，清洁并擦干肌肤。然后，通过调整光能仪支架使其正对需要护理部位。接着，按下通用电源按钮开启设备，再次短按可以切换彩光，您还可以通过FOREO APP选择更多预设护理模式。开始享受护理，15分钟后设备将自动关闭。使用前或使用过程中请勿使用含光敏成分护肤品。使用后，请注意日常保湿防晒。

6. 使用UFO™ 光能仪前有什么注意事项？

在使用前及使用过程中注意补水，应避免使用含有光敏成分的护肤品，比如：光甘草定、维A类如A醇（视黄醇）、对苯二酚（氢醌）及对苯二酚衍生物；高浓度熊果苷VC和VC衍生物（抗坏血酸棕榈酸酯等），壬二酸，白芷，A酸，曲酸，果酸，水杨酸，柑橘类精油，佛手柑，柠檬精油，檀香油，香芹精油，马鞭草，含香豆素，维生素类的A、C等。

7. 应多久使用一次UFO™ 光能仪？

我们建议您每周使用3-5次，肌肤耐受后也可每日使用增强功效，单次使用UFO™ 光能仪的时间不超过30分钟。

8. UFO™ 光能仪可以和面膜一起使用吗？

可以。但是请选择膜布透明的面膜以便光线穿透，且面膜精华需不含光感成分。

9. 哪些人群不适用UFO™ 光能仪？

孕妇与未成年人；大面积皮肤病患者以及光过敏人群；严重的心、肝或血液系统、神经系统、恶性肿瘤、面部神经疼痛、血友病、热性病以及对光源点亮反应有癫痫的患者如有服用可能导致光过敏的药品用户，请遵照医嘱谨慎使用本设备；其他经医生或者专业人员判断为不能进行蓝光、黄光、红光、红外线光照射的人员。

10. 我可以调整光照的强度吗？

是的，您可以通过FOREO APP来选择合适的光能强度（低-中-高，3档）。

11. 完成一次预设的皮肤焕发护理模式需要多长时间？

针对不同的护理模式，时间一般在5-30分钟之间。

12. 使用UFO™ 光能仪后有什么注意事项？

使用后如皮肤出现轻微发热、干燥为正常现象，请注意保湿补水，避免使用刺激性护肤品。请严格注意防晒，24小时内避免强烈日照。

13. 什么是光疗护理？

光生物调节作用，由低能量的可见光照射细胞后，来刺激细胞的能量工厂线粒体(ATP)产生更多的能量，进而刺激生物细胞并诱发或强化一些生理反应，减少自由基的损害，活化细胞并对损伤之细胞予修复及产生保护膜，达到治疗和抗衰老的目的。

14. 光子嫩肤是否安全？

与其他类型的光疗不同，LED 不含紫外线。因此，它们可以安全地正常使用。LED 光疗也不会像化学换肤、磨皮和激光疗法等其他抗衰老护理那样引起灼伤。

关于APP

15. 应如何将UFO™ 光能仪和 FOREO APP配对？

首先，将FOREO APP 下载自平板或手机并开启蓝牙。然后，将设备接通电源开启设备。按照APP 上的提示完成配对即可。

16. UFO™ 光能仪是否可以不连接 APP使用？

是的，您可以不通过FOREO APP离线使用光能仪。但是您需要在首次使用设备时通过FOREO APP注册激活设备。

17. 使用FOREO APP有什么好处?

FOREO APP 中可设置不同彩光类型 (7种彩光), 不同光能强度 (低-中-高, 3档) 以及单次护理时长 (长达30分钟) 以便离线使用。此外, 您可以通过APP了解使用说明。

关于设备

18. 当按下通用电源按钮时, 如果未能激活UFO™ 光能仪?

电池没电了。使用USB充电线充电最多30分钟, 直至充满电, 然后按住通用电源按钮重新启动设备。

19. 如果UFO™ 光能仪无法关闭/通用电源按钮无响应?

微处理器暂时出现故障。按住通用电源按钮以重新启动设备。

20. 如果UFO™ 光能仪无法与FOREO APP同步?

确保您的设备已充满电并且您的蓝牙已打开。

关闭蓝牙, 然后重新打开以尝试重新连接。

关闭FOREO APP然后重新打开。

删除并重新安装应用程序 - 也许APP只需更新即可。

删除并重新安装应用程序后, 请确保重新启动手机。

删除手机的 cookie和缓存。

确保您的手机操作系统已更新至最新版本。

21. 应如何清洁UFO™ 光能仪?

每次使用结束后请及时清洁设备。为获得最佳清洁效果, 我们建议喷洒FOREO™硅胶清洁液于设备上, 并用湿布擦洗干净, 清洗完毕后在通风处晾干即可。

注意: 该产品不防水。

©2026 FOREO. 版权所有

欧洲进口商和经销商:FAQ EUROPE D.O.O., 地址:RADNICKA CESTA 202, 10000 ZAGREB, CROATIA.

美国进口商和经销商:FOREO INC., 地址:1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

澳洲进口商和经销商:FOREO AUS., 地址:6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

英国进口商和经销商:FOREO LTD., 地址:LAWFORD HOUSE, ALBERT PLACE, N3 1QA LONDON.

为FOREO生产由FOREO瑞典设计研发